

Wagi serii 4Y

Wagi Precyzyjne PM 4Y

INSTRUKCJA OBSŁUGI

IMMU-24-06-02-22-PL



www.radwag.com

Dziękujemy Państwu za wybór i zakup wagi firmy RADWAG.
Waga została zaprojektowana i wyprodukowana tak, aby służyć Wam przez wiele lat.
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Instrukcją w celu zapewnienia jej niezawodnej pracy.

LUTY 2022

Spis treści

1. INFORMACJE PODSTAWOWE	8
1.1. Wymiary gabarytowe wag	8
1.2. Opis złącz	9
1.3. Przeznaczenie.....	10
1.4. Środki ostrożności.....	10
1.5. Warunki gwarancji	10
1.6. Nadzorowanie parametrów metrologicznych wagi	11
1.7. Informacje zawarte w instrukcji obsługi.....	11
1.8. Szkolenie obsługi	11
1.9. Synchronizacja czasu w wadze.....	11
2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE	12
2.1. Sprawdzenie dostawy	12
2.2. Opakowanie	12
3. ROZPAKOWANIE I MONTAŻ	12
3.1. Miejsce instalacji, miejsce użytkowania	12
3.2. Rozpakowanie	12
3.3. Lista standardowych elementów dostawy	12
3.4. Czyszczenie wagi	13
3.5. Podłączenie do sieci.....	15
3.6. Czas stabilizacji temperaturowej wagi.....	15
3.7. Podłączenie wyposażenia dodatkowego	16
3.8. Wagi z bezprzewodowym połączeniem głowicy z modułem wagowym	16
3.8.1. Uruchomienie wagi	17
3.8.2. Opis ikon dla wykonania bezprzewodowego	17
3.8.3. Ustawienia wagi	17
4. URUCHOMIENIE WAGI.....	18
5. KŁAWIATURA WAGI - FUNKCJE PRZYCISKÓW	18
6. STRUKTURA PROGRAMU	19
7. OKNO WAGOWE PROGRAMU	20
8. LOGOWANIE.....	21
9. PORUSZANIE SIĘ W MENU WAGI.....	21
9.1. Klawiatura wagi	21
9.2. Powrót do funkcji ważenia	22
10. KALIBRACJA	22
10.1. Kalibracja wewnętrzna	22
10.2. Kalibracja zewnętrzna.....	23
10.3. Kalibracja użytkownika	23
10.4. Test kalibracji.....	23
10.5. Kalibracja automatyczna	23
10.6. Czas kalibracji automatycznej	24
10.7. Wydruk raportu	24
10.8. Projekt GLP.....	24
10.9. Historia kalibracji	24
11. UŻYTKOWNICY.....	25

12. PANEL ADMINISTRATORA.....	26
12.1. Ustawienia hasła	26
12.2. Ustawienie kont użytkownika	27
12.3. Zarządzanie uprawnieniami	28
13. PROFILE	31
13.1. Tworzenie profilu	31
13.2. Konstrukcja Profilu	32
13.2.1. Ustawienia	32
13.2.2. Mody pracy.....	33
13.2.3. Odczyt	33
13.2.4. Jednostki	34
14. MODY PRACY – informacje ogólne	36
14.1. Wybór modu pracy	37
14.2. Parametry związane z modelem pracy	37
14.3. Przyciski szybkiego dostępu, czujniki zbliżeniowe.....	38
14.3.1. Czujniki zbliżeniowe	38
14.4. Informacje	39
14.5. Wydruki.....	39
14.6. Profile	40
15. WAŻENIE	40
15.1. Wybór jednostki ważenia	40
15.2. Zasady poprawnego ważenia	41
15.3. Wypoziomowanie wagi.....	42
15.4. Zerowanie wagi	42
15.5. Tarowanie wagi	42
15.6. Wykorzystanie współczynnika kompensacji wyporności powietrza	43
15.7. Dodatkowe parametry związane z ważeniem.....	46
15.8. Minimalna naważka	48
15.9. Współpraca z TITRATORAMI	50
16. LICZENIE SZTUK	51
16.1. Ustawienia dodatkowe związane z liczeniem detali	51
16.2. Ustawienie masy wzorca przez wpisanie znanej masy detalu	52
16.3. Ustawienie masy wzorca przez wyznaczenie masy detalu.....	52
16.4. Pobranie masy detalu z bazy danych.....	53
16.5. Aktualizacja masy detalu w bazie danych	53
16.6. Procedura liczenia detali	54
16.7. Doważanie funkcji liczenia detali	54
16.8. Dozowanie w funkcji liczenia detali	55
17. DOWAŻANIE	56
17.1. Wykorzystanie progów doważania	56
17.2. Ustawienia dodatkowe związane z doważaniem	57
18. DOZOWANIE	57
18.1. Wykorzystanie bazy towarów w dozowaniu	57
18.2. Ustawienia dodatkowe związane z dozowaniem	58
19. ODCHYLENKI WZGLĘDEM MASY WZORCA.....	58
19.1. Porównywanie próbki z masą wzorca	59
19.2. Doważanie, dozowanie w funkcji odchyłek procentowych	59

19.3. Interpretacja funkcji poprzez bargraf	60
19.4. Ustawienia dodatkowe związane z odchyłkami.....	61
20. GĘSTOŚĆ	61
20.1. Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy	61
20.2. Wyznaczanie gęstości ciała stałego	61
20.3. Wyznaczanie gęstości cieczy	62
20.4. Gęstość powietrza	63
20.5. Wyznaczanie gęstości substancji z wykorzystaniem piknometru	64
20.6. Ustawienia dodatkowe związane z funkcją gęstości	66
20.7. Wydruki.....	66
20.8. Raport ze zrealizowanych procesów wyznaczania gęstości.....	67
21. WAŻENIE ZWIERZĄT	68
21.1. Ustawienia dla Ważenia zwierząt	68
21.2. Ustawienia dodatkowe dla Ważenia zwierząt	69
22. RECEPTURY	69
22.1. Ustawienia dodatkowe związane z recepturami.....	69
22.2. Wprowadzanie receptury do Bazy Receptur.....	71
22.3. Wykorzystanie receptur w ważeniu	71
22.4. Wydruki.....	74
23. STATYSTYKA.....	75
23.1. Ustawienia przycisków i informacji dla Statystyki.....	75
23.2. Ustawienia dodatkowe dla Statystyki	76
23.3. Parametry związane z serią pomiarów.....	76
24. WAŻENIE RÓŻNICOWE.....	78
24.1. Ustawienia dodatkowe związane z ważeniem różnicowym	78
24.2. Ważenie różnicowe – przyciski szybkiego dostępu	79
24.3. Wprowadzanie serii do Bazy Serii	80
24.4. Przykład realizacji procesu ważenia różnicowego	80
24.5. Kopiowanie tary	85
24.6. Użycie opcji WYBÓR PRÓBKII.....	86
24.7. Usuwanie wartości	86
24.8. Wydruki.....	87
25. STATYSTYCZNA KONTROLA JAKOŚCI - SQC.....	88
25.1. Procedura uruchomienia modu pracy	88
25.2. Ustawienia dodatkowe związane z SQC	90
25.3. Przeprowadzanie kontroli	90
25.4. Raport z kontroli towaru	92
26. ZATRZASK MAKSYMALNEGO WYNIKU.....	92
26.1. Ustawienia dodatkowe związane z modem Zatrzask Max	92
26.2. Sposób działania	92
27. KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH	93
27.1. Procedura uruchomienia modu pracy	94
27.2. Okno ustawień kontroli	94
27.3. Ustawienia lokalne modu pracy KTP.....	95
27.4. Edycja towaru dla kontroli.....	95
27.5. Procedura rozpoczęcia kontroli.....	97
27.6. Procedura przerywania kontroli.....	98


27.7. Procedura przywracania przerwanej kontroli w chwili zaniku zasilania wagi..	98
27.8. Przeprowadzanie kontroli Nieniszczącej w trybie ze średnią tarą	99
27.9. Przeprowadzanie kontroli Nieniszczącej w trybie puste-pełne.....	103
27.10. Przeprowadzanie kontroli Niszczącej w trybie puste-pełne, pełne-puste	104
27.11. Przeprowadzanie kontroli według kryteriów wewnętrznych.....	104
27.12. Raporty	106
28. KONTROLA MASY	107
28.1. Ustawienia globalne dla kontroli masy.....	107
28.2. Ustawienia globalne dla kontroli masy.....	107
28.3. Przebieg procesu kontroli masy	107
28.4. Wydruki.....	108
28.5. Raport ze zrealizowanych procesów kontroli.....	110
29. BAZY DANYCH	111
29.1. Operacje możliwe do wykonania w bazach danych	112
29.2. Towary	113
29.3. Wążeń	115
29.4. Klienci	115
29.5. Receptury	116
29.6. Raporty receptur.....	116
29.7. Raporty gęstości	116
29.8. Raporty kontroli.....	117
29.9. Statystyka SQC	120
29.10. Średnie tary	121
29.11. Serie.....	122
29.12. Minimalne naważki.....	122
29.13. Kontrole masy	124
29.14. Warunki środowiskowe	125
29.15. Opakowania	126
29.16. Magazyny	126
29.17. Wydruki	126
29.18. Zmienne uniwersalne	128
29.19. Zarządzanie bazami danych	129
29.19.1. Eksportuj bazę wżeń do pliku	129
29.19.2. Usuń bazy danych	131
29.19.3. Usuń wżenia i raporty	131
30. KOMUNIKACJA.....	132
30.1. Ustawienia portów RS 232.....	132
30.2. Ustawienia portu ETHERNET	132
30.3. Ustawienia portu Wi-Fi.....	133
30.4. Ustawienia protokołu TCP.....	134
31. URZĄDZENIA	134
31.1. Komputer	134
31.2. Drukarka	135
31.3. Czytnik kodów kreskowych.....	137
31.3.1. Port czytnika kodów kreskowych.....	137
31.3.2. Prefiks / Sufiks	137
31.3.3. Wybór pola	138
31.3.4. Test.....	139

31.4. Czytnik kart transponderowych	139
31.5. Wyświetlacz dodatkowy	140
31.6. Moduł środowiskowy.....	141
31.7. Dozownik tabletek.....	141
32. WEJŚCIA/WYJŚCIA.....	141
33. INNE PARAMETRY	142
33.1. Wybór języka interfejsu	142
33.2. Ustawienie daty i czasu.....	143
33.3. Moduł rozszerzeń	144
33.4. Dźwięk	144
33.5. Usypianie wyświetlacza	145
33.6. Jasność wyświetlacza	145
33.7. Kalibracja ekranu dotykowego	145
33.8. Detekcja drgań	145
33.9. Kontrola poziomu.....	146
33.10. Separator dziesiętny	146
33.11. Czułość czujników	147
33.12. Opóźnienie czujników zbliżeniowych	147
33.13. Autotest	147
33.14. Logo startowe	151
33.15. Eksport zdarzeń systemu	151
34. ZAPLANOWANE ZADANIA	152
34.1. Kalibracja wagi	152
34.1. Komunikat	154
35. AKTUALIZACJA.....	156
36. INFORMACJE O SYSTEMIE	157
37. FILMY.....	158
38. PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY.....	159
38.1. Zestaw rozkazów	159
38.1. Format odpowiedzi na pytanie z komputera	161
38.2. Wydruk ręczny/wydruk automatyczny.....	177
39. PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH.....	178
40. KOMUNIKATY O BŁĘDACH	178
41. WYPOSAŻENIE DODATKOWE	179
42. DODATEK A - Zmienne dla wydruków.....	180
42.1. Wykaz zmiennych	180
42.2. Formatowanie zmiennych.....	189
43. DODATEK B – Lista przycisków programowalnych.....	190
44. DODATEK D - Ustawienie drukarki ZEBRA	192
45. DODATEK E - Ustawienie czytnika kodów kreskowych.....	192
46. DODATEK F – Struktura menu	194


1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Wymiary gabarytowe wag


PM xx.4Y, d=0.01g

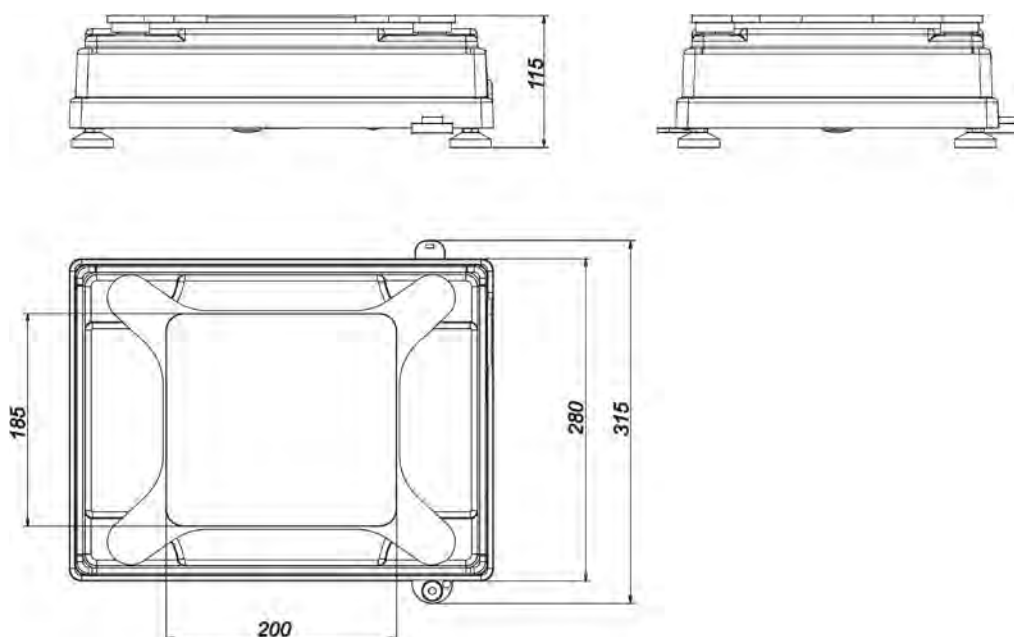


PM xx.4Y, d=0.1g

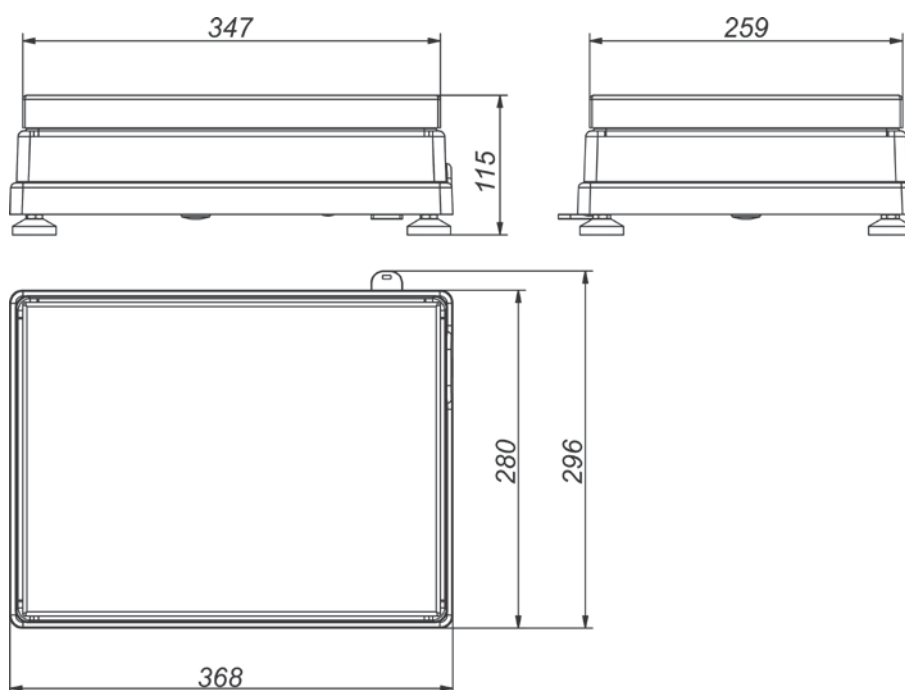


PM xx.4Y, d=0.5g, d=1g

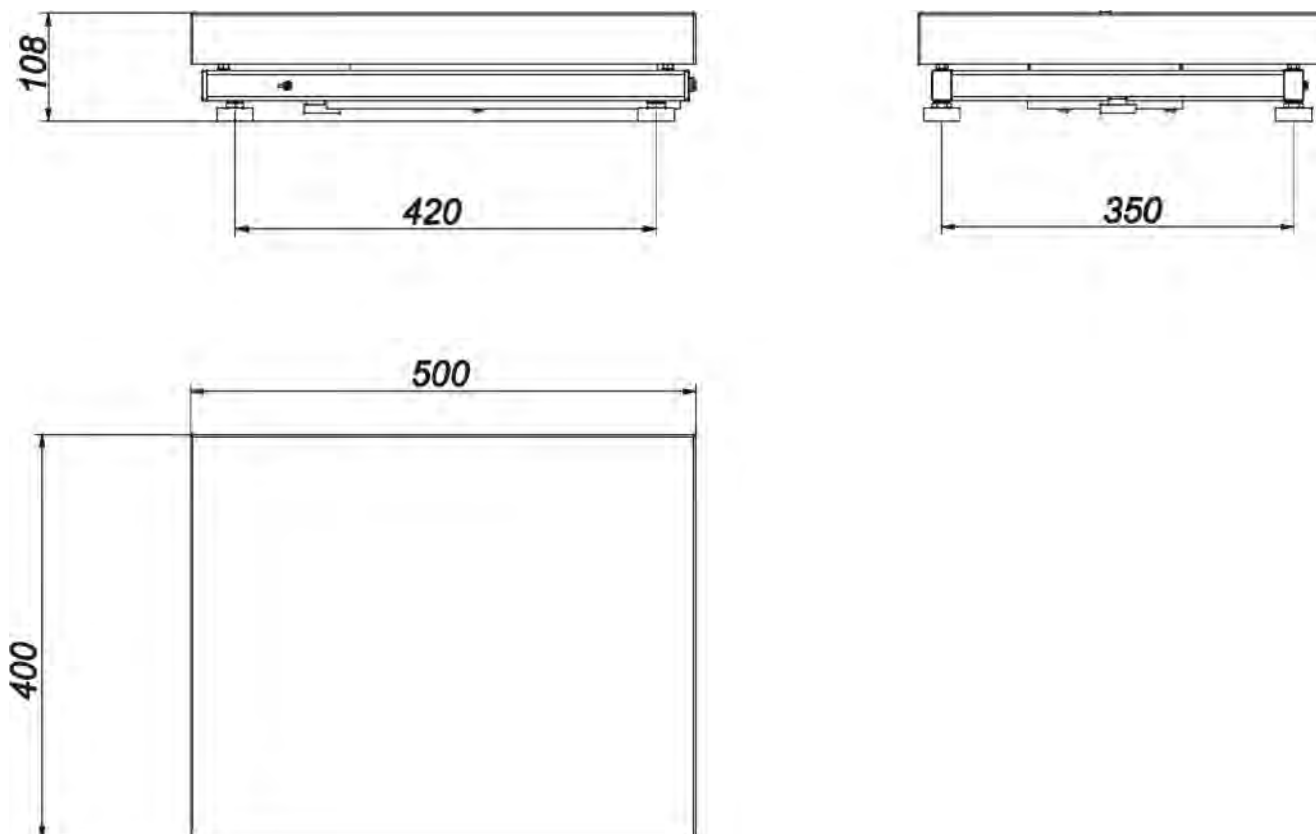


Głowica odczytowa

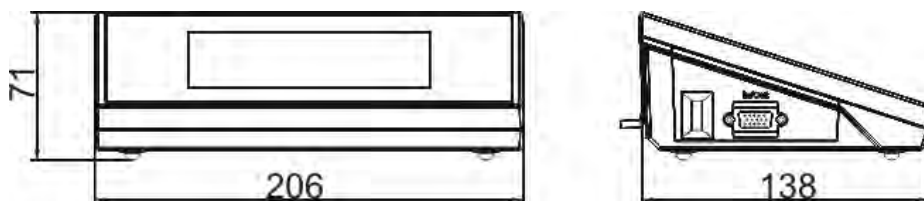

1.2. Opis złącz

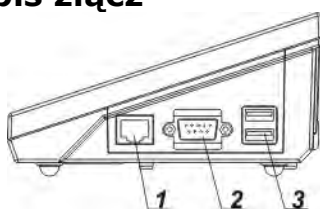


- 1 – złącze Ethernetu RJ45
- 2 – złącze RS232 (COM1)
- 3 – złącze USB

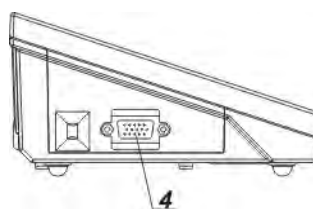


- 4 – złącze WE/WY, RS232 (COM2)

Uwaga:


Przewód „waga – Ethernet” jest standardowym kablem sieciowym, zakończonym obustronnie złączem RJ45.

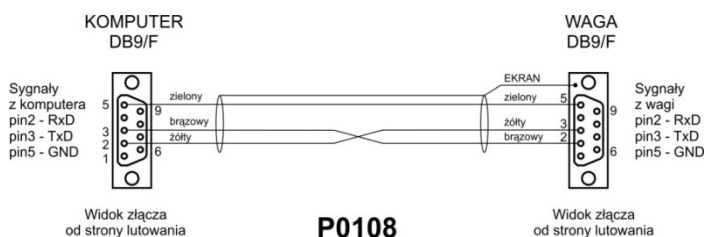

Przewód
waga – komputer
(RS232)

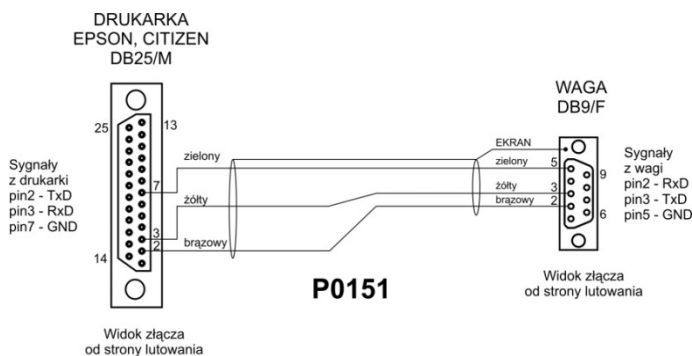

*Przewód
waga – drukarka
(EPSON)*

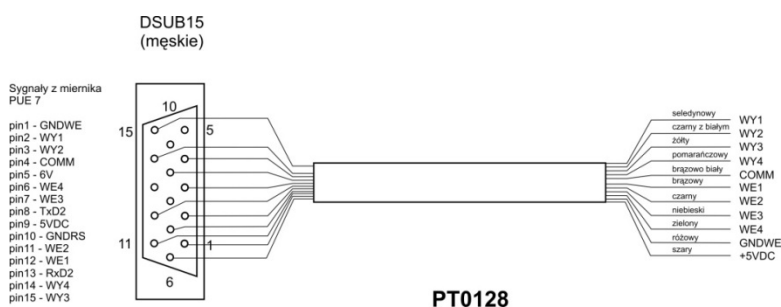

Przewód WE/WY

1.3. Przeznaczenie

Wagi są przeznaczone do dokładnych pomiarów masy ważonych ładunków, realizowanych w warunkach laboratoryjnych.

1.4. Środki ostrożności

- Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Obsługi i używanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Do obsługi panelu dotykowego nie używać ostrych narzędzi (np. nóż, wkrętak itp.).
- Ważone ładunki należy starać się umieszczać w centralnej części szalki wagi.
- Szalkę należy obciążać towarami o masie brutto mniejszej niż maksymalny udźwig wagi.
- Nie należy na dłuższy czas pozostawiać dużych obciążeń na szalce.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć zasilanie wagi.
- Urządzenie przewidziane do wycofania z eksploatacji zutylizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
- Nie używać wagi w środowisku zagrożonym wybuchem. Waga nie jest przeznaczona do pracy w strefach zagrożonych.

1.5. Warunki gwarancji

- A. RADWAG zobowiązuje się naprawić lub wymienić te elementy, które okażą się wadliwe produkcyjnie lub konstrukcyjnie.
- B. Określenie wad niejasnego pochodzenia i ustalenie sposobów ich wyeliminowania może być dokonane tylko z udziałem przedstawicieli producenta i użytkownika.
- C. RADWAG nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności związanej z uszkodzeniami lub stratami pochodzącymi z nieupoważnionego lub nieprawidłowego wykonywania procesów produkcyjnych lub serwisowych.
- D. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwą eksploatacją wagi oraz uszkodzeń termicznych, chemicznych, uszkodzeń spowodowanych

wyładowaniem atmosferycznym, przepięciem w sieci energetycznej lub innym zdarzeniem losowym,

- uszkodzeń wagi, gdy używana była niezgodnie z przeznaczeniem,
- uszkodzeń wagi, gdy serwis stwierdzi naruszenie lub uszkodzenie znaku zabezpieczającego konstrukcję wagi przed otwarciem,
- uszkodzeń spowodowanych przez pływy oraz naturalne zużycie,
- uszkodzeń wagi z powodu nieodpowiedniego przystosowania lub wady instalacji elektrycznej,
- uszkodzeń będących wynikiem przeciążenia mechanizmu pomiarowego,
- czynności konserwacyjnych (czyszczenie wagi).

E. Utrata gwarancji następuje wówczas, gdy:

- naprawa zostanie dokonana poza autoryzowanym punktem serwisowym,
- serwis stwierdzi ingerencję osób nieupoważnionych w konstrukcję mechaniczną lub elektroniczną wagi,
- zostanie zainstalowana inna wersja systemu operacyjnego,
- waga nie posiada firmowych znaków zabezpieczających.

F. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie serwisowej.

1.6. Nadzorowanie parametrów metrologicznych wagi

Właściwości metrologiczne wagi powinny być sprawdzane przez użytkownika w określonych, ustalonych odstępach czasowych. Częstotliwość sprawdzania uwarunkowana jest czynnikami środowiska, w jakim pracuje waga, rodzajami prowadzonych procesów ważenia oraz przyjętego systemu nadzoru nad jakością.

1.7. Informacje zawarte w instrukcji obsługi

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed włączeniem i uruchomieniem wagi, nawet gdy użytkownik ma doświadczenie w pracy z wagami tego typu. Instrukcja zawiera wszelkie niezbędne do właściwego użytkowania urządzenia informacje; przestrzeganie zawartych w niej wytycznych stanowi gwarancję prawidłowej i niezawodnej pracy wagi.

1.8. Szkolenie obsługi

Waga powinna być obsługiwana i nadzorowana tylko przez osoby przeszkolone do jej obsługi i posiadające praktykę w użytkowaniu tego typu urządzeń.

1.9. Synchronizacja czasu w wadze

W przypadku wag używających systemu operacyjnego Linux (Raspbian Stretch oparty na Debian Stretch Linux) synchronizacja czasu odbywa się na poziomie systemu operacyjnego.

System łączy się z serwerem NTPS (Network Time Protocol Server), który w rzeczywistości jest klasterem serwerów dostępnych publicznie (Free Public Internet Time Servers) służących do synchronizacji czasu, używając protokołu NTP (Network Time Protocol) i jednocześnie zarządza doбором optymalnego serwera do otrzymanego zapytania pod względem aktualnej dostępności oraz lokalizacji względem miejsca zapytania, tak aby minimalizować opóźnienia i jak najlepiej wyznaczyć korektę czasu. Synchronizację czasu z wzorcem zewnętrznym można włączyć/wyłączyć w parametrach wagi (patrz punkt 33.2 instrukcji użytkownika).

Aby uzyskać więcej informacji skorzystaj z: <https://www.ntppool.org/en/>

2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

2.1. Sprawdzenie dostawy

Należy sprawdzić dostarczone opakowanie oraz urządzenie bezpośrednio po dostawie i ocenić, czy nie ma zewnętrznych śladów uszkodzenia. W takim przypadku należy skontaktować się z przedstawicielem producenta.

2.2. Opakowanie

Należy zachować wszystkie elementy opakowania w celu użycia ich do ewentualnego transportu wagi w przyszłości. Tylko oryginalne opakowanie wagi może być zastosowane do przesyłania wagi. Przed zapakowaniem należy odłączyć przewody oraz wyjąć ruchome części (szalkę, osłony, wkładki). Elementy wagi należy umieścić w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczając przed uszkodzeniem w czasie transportu.

3. ROZPAKOWANIE I MONTAŻ

3.1. Miejsce instalacji, miejsce użytkowania

- wagę należy przechowywać i użytkować w pomieszczeniach wolnych od drgań i wstrząsów, pozbawionych przeciągów i niezapyłonych,
- temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić: $+10\text{ }^{\circ}\text{C} \div +40\text{ }^{\circ}\text{C}$,
- wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%,
- w czasie użytkowania wagi ewentualne zmiany temperatury pomieszczenia powinny następować stopniowo i bardzo powoli,
- waga musi być ustawiona na konsoli ściennej lub stabilnym stole, niepodlegającym drganiom, daleko od źródeł ciepła,
- należy szczególną uwagę zwrócić na ważenie materiałów magnetycznych, ponieważ częścią wagi jest silny magnes.


3.2. Rozpakowanie

Rozciąć taśmę zabezpieczającą. Wyjąć wagę z opakowania fabrycznego. Z pudełka na akcesoria wyjąć wszystkie elementy urządzenia.

3.3. Lista standardowych elementów dostawy

- Waga
- Szalka
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi na płycie CD

Wagi serii wag PM 4Y

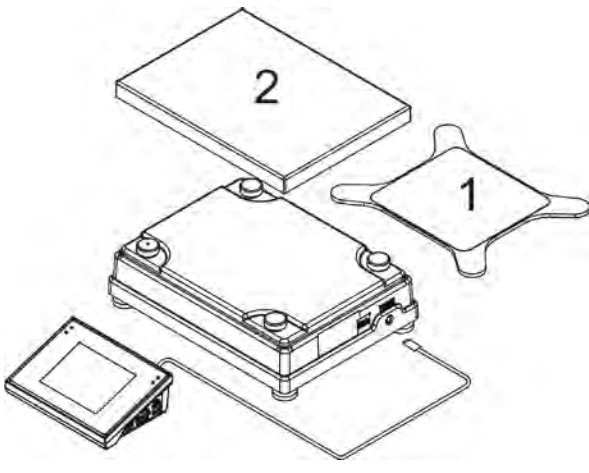	Założyć szalkę 1 dla wag PM 4Y z $d=0.01g$ lub szalkę 2 dla pozostałych wag PM 4Y. Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie szalki na amortyzatorach: szalka nie może dotykać obudowy wagi i powinna być umieszczona stabilnie. Podłączyć głowicę odczytową do gniazda znajdującego się z tyłu obudowy wagi, następnie podłączyć wszystkie urządzenia dodatkowe. Włączyć wagę do sieci (gniazdo zasilania znajduje się z boku głowicy pomiarowej).
	UWAGA: Prawidłowym ułożeniem wtyczki typu PS2, przy podłączaniu głowicy pomiarowej do wagi, jest ułożenie spłaszczeniem do góry, tak aby były widoczne strzałki na obudowie wtyczki, zgodnie z rysunkiem obok.

3.4. Czyszczenie wagi

Uwaga: Czyszczenie szalki w momencie, gdy jest założona, może spowodować uszkodzenie wagi.

W celu bezpiecznego czyszczenia wagi należy w opisanej kolejności:

1. Zdemontować szalkę i inne ruchome elementy wagi; w zależności od typu wagi (patrz: opis w punkcie: **ROZPAKOWANIE I MONTAŻ**). Czynności należy wykonywać bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić mechanizmu wagi.

Czyszczenie elementów szklanych:

W zależności od rodzaju zabrudzenia powinien być wybrany odpowiedni rozpuszczalnik. Nigdy nie należy namaczać szkła w silnych roztworach alkalicznych, gdyż szkło może być uszkodzone przez te roztwory. Nie wolno stosować preparatów zawierających substancje ściernie.

W przypadku pozostałości organicznych używamy acetonu, dopiero w kolejnym kroku używamy wody i detergentu. W przypadku pozostałości nieorganicznych używamy rozcieńczonych roztworów kwasów (rozpuszczalne sole kwasu solnego lub azotowego) lub zasad (przeważnie sodowej, amonowej).

KWASY usuwamy rozpuszczalnikami zasadowymi (węglan sodu), ZASADY usuwamy rozpuszczalnikami kwasowymi (kwas mineralne o różnym stężeniu).

W przypadku ciężkich zabrudzeń należy użyć szczotki oraz detergentu. Powinniśmy unikać używania takich detergentów, których rozmiary drobin są duże i twarde, przez co mogą rysować szkło.

Na koniec procesu mycia należy przepłukać starannie szkło wodą destylowaną.

Zawsze należy używać miękkich szczotek z drewnianym lub plastikowym uchwytem, aby uniknąć zarysowań. Nie stosować szczotek drucianych ani szczotek z rdzeniem z drutu.

Etap płukania jest konieczny, aby wszystkie resztki mydła, detergentów i innych płynów czyszczących były usunięte z wyrobów szklanych przed ich powtórным zamontowaniem w wadze.

Po wstępnym oczyszczeniu, elementy szklane płucze się pod bieżącą wodą, a na koniec wodą destylowaną.

Nie zaleca się suszenia szkła ręcznikiem papierowym lub pod strumieniem wymuszonego obiegu powietrza, ponieważ może to wprowadzić do elementów szklanych, włókna lub inne zanieczyszczenia, co może spowodować błędy podczas ważenia.

Do szkła miarowego nie powinno się używać suszarek elektrycznych.

Zazwyczaj po umyciu, elementy szklane umieszcza się na półce do swobodnego wyschnięcia.

Czyszczenie elementów malowanych proszkowo:

Pierwszym etapem powinno być wstępne czyszczenie bieżącą wodą lub gąbką o dużych porach z dużą ilością wody, celem usunięcia luźniejszych i większych zabrudzeń.

Nie stosować preparatów zawierających substancje ściernie.

Następnie, przy pomocy odpowiedniej ściereczki oraz roztworu wody i środka czyszczącego (mydło, płyn do mycia naczyń) należy czyścić powierzchnię zachowując normalny docisk ściereczki do powierzchni elementów.

Nigdy nie powinno się czyścić samym detergentem na sucho, gdyż może to spowodować uszkodzenie powłoki – należy użyć dużej ilości wody bądź roztworu wody ze środkiem czyszczącym.

Czyszczenie elementów aluminiowych

Do czyszczenia aluminium należy używać produktów mających naturalne kwasy. Doskonałymi środkami będą zatem: ocet spirytusowy, cytryna. Nie wolno stosować preparatów zawierających substancje ściernie. Należy unikać stosowania do czyszczenia szorstkich szczotek które mogą łatwo porysować powierzchnię aluminium. Miękką szmatką z mikrofibry będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem.

Powierzchnie polerowane czyścimy za pomocą okrężnych ruchów. Po usunięciu zabrudzeń z powierzchni należy wypolerować powierzchnię suchą szmatką, aby osuszyć powierzchnię i nadać jej połysk.

Czyszczenie elementów z tworzywa ABS:

Czyszczenie suchych powierzchni odbywa się za pomocą czystych ściereczek z celulozy lub bawełny, nie pozostawiających smug i nie barwiących, można użyć także roztworu wody i środka czyszczącego (mydło, płyn do mycia naczyń, płynu do mycia szyb) należy czyścić powierzchnię zachowując normalny docisk ściereczki do podłoża, czyszczoną

powierzchnię należy przetrzeć, a następnie osuszyć. Czyszczenie można powtórzyć w razie konieczności.

W przypadku wystąpienia trudno usuwalnych zabrudzeń takich jak: resztki kleju, gumy, smoły, pianki poliuretanowej itp. można użyć specjalnych środków czyszczących na bazie mieszanki węglowodorów alifatycznych nie rozpuszczających tworzywa. Przed zastosowaniem środka czyszczącego przy wszystkich powierzchniach zalecamy wykonanie prób przydatności. Nie stosować preparatów zawierających substancje ściernie.

Czyszczenie elementów ze stali nierdzewnej:

W trakcie czyszczenia elementów ze stali nierdzewnej, należy stosować się do zapisów poniższej tabeli, w której umieszczone są rodzaje zanieczyszczeń i sposoby ich usuwania.

Odciski palców	Umyć spirytusem lub rozcieńczalnikiem. Spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.
Oleje, tłuszcze, smary	Umyć rozpuszczalnikami organicznymi, a następnie umyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła lub delikatnego detergentu. Spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.
Plamy i naloty temperaturowe	Umyć delikatnym detergentem szorującym, czyszcząc lekko zgodnie z kierunkiem struktury powierzchniowej. Spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.
Silne przebarwienia	Czyścić lekko zgodnie z kierunkiem struktury powierzchniowej. Spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.
Ślady rdzy	Zwilżyć roztworem kwasu szczawowego i pozostawić na około 15-20 minut, a następnie umyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła lub delikatnego detergentu. Spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.
Farby	Umyć rozpuszczalnikiem do farb, a następnie umyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła lub delikatnego detergentu. Spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.
Rysy na powierzchni	Delikatnie wyszlifować włókniną (nie zawierającą żelaza) zgodnie z kierunkiem struktury powierzchniowej, a następnie umyć łagodnym detergentem szorującym. Spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.

3.5. Podłączenie do sieci

Waga może być podłączona do sieci tylko przy użyciu oryginalnego zasilacza, znajdującego się w jej wyposażeniu. Wtyk zasilacza należy podłączyć do gniazda znajdującego się z tyłu obudowy wagi.

3.6. Czas stabilizacji temperaturowej wagi.

Przed przystąpieniem do pomiarów należy odczekać, aż waga osiągnie stabilizację cieplną.

W przypadku wag, które przed załączeniem do sieci były przechowywane w znacznie niższej temperaturze (np. porą zimową), czas aklimatyzacji i nagrzewania wynosi: około 8 godzin dla wag typu PM. W czasie stabilizacji cieplnej wagi wskazania wyświetlacza mogą ulegać zmianie. Zaleca się, aby w miejscu użytkowania wagi ewentualne zmiany temperatury otoczenia były niewielkie i następowały bardzo powoli.

3.7. Podłączenie wyposażenia dodatkowego

Tylko zalecane przez producenta wagi wyposażenie dodatkowe może być do niej podłączone. Przed podłączeniem dodatkowego wyposażenia lub jego zmianą (drukarka, komputer PC, klawiatura komputerowa typu USB lub dodatkowy wyświetlacz) należy odłączyć wagę od zasilania. Po podłączeniu urządzeń ponownie włączyć wagę do zasilania.

3.8. Wagi z bezprzewodowym połączeniem głowicy z modułem wagowym

(wykonanie opcjonalne)



Głowica pomiarowa jest wyposażona w akumulatory i współpracuje z modułem wagowym, wykorzystując wewnętrzny moduł bezprzewodowy (brak przewodu łączącego głowicę z modułem jak przy wersji standardowej). Dla tego typu wagi w jej oznaczeniu występuje dodatkowo litera , np. **PM 10.4Y.B**.

Cechy:

Maksymalny zasięg: 10 m.

Maksymalny czas pracy głowicy bez konieczności ładowania akumulatorów: 8 h.

Zalety:

1. Eliminacja dodatkowych źródeł wibracji

Umieszczenie terminala poza stołem wagowym eliminuje drgania i wibracje wynikające z jego obsługi. Pozwala to na stabilną pracę wag o najwyższych rozdzielczościach, ograniczając konieczność stosowania specjalistycznych stanowisk wagowych.

2. Wygoda i komfort ważenia w dygestoriach i komorach laminarnych

Dzięki bezprzewodowej komunikacji terminala z modułem ważącym używanie wagi laboratoryjnej w dygestorium zapewnia wygodniejszą pracę i zwiększa bezpieczeństwo.

3. Bezpieczeństwo przy ważeniu substancji toksycznych

Bezprzewodowa komunikacja umożliwia umieszczenie modułu wagowego w szafkach przeciwpodmuchowych lub jego całkowitą izolację od operatora. Dzięki temu możliwe jest ważenie substancji skażonych lub toksycznych bez narażania zdrowia i życia użytkownika.


4. Zwiększona ergonomia pipetowania

Proces kalibracji pipet wymaga od operatora zarówno precyzji pomiarów, jak również szybkości obsługi. Bezprzewodowa komunikacja terminala z wagą zapewnia wyjątkowy komfort obsługi urządzenia, gwarantując jednocześnie wysoką dokładność pomiarów.

Ta wersja wagi wyposażona jest w zasilacze sieciowe. Jeden wykorzystywany jest do zasilania modułu wagowego, a drugi – do ładowania akumulatorów głowicy pomiarowej.

3.8.1. Uruchomienie wagi

Po wyjęciu wagi z opakowania i ustawieniu jej w miejscu użytkowania należy podłączyć zasilanie modułu wagowego i zasilanie głowicy pomiarowej do sieci. Następnie postępować tak, jak przy uruchamianiu standardowej wagi (patrz: opisy w dalszej części instrukcji). Poniżej znajduje się wygląd okna głównego wagi w wersji bezprzewodowej.

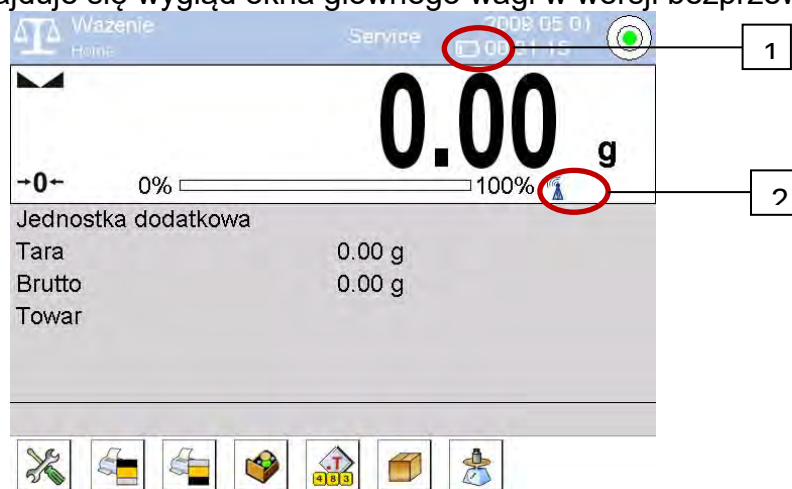

W stosunku do wykonania standardowego na wyświetlaczu pojawiają się dwie dodatkowe ikony:

1. Ikona stanu naładowania akumulatora.
2. Ikona połączenia bezprzewodowego.

Działanie i pozostałe funkcje wagowe są identyczne jak wag w wykonaniu standardowym.

3.8.2. Opis ikon dla wykonania bezprzewodowego

Ikona stanu naładowania akumulatora:

Lp.	Ikona	Opis
1		Ładowanie akumulatora.
2		Akumulator naładowany całkowicie, głowica podłączona do zasilania.
3		Akumulator naładowany, głowica niepodłączona do zasilania.
4		Stan naładowania akumulatora (około 50%), głowica niepodłączona do zasilania.
5		Minimalny stan naładowania głowicy, konieczność podłączenia głowicy do zasilania celem naładowania akumulatora.

Ikona połączenia bezprzewodowego:

Lp.	Ikona	Opis
1		Prawidłowe połączenie modułów bezprzewodowych w głowicy i części wagowej – współpraca poprawna.
2		Zerwane połączenie modułów bezprzewodowych w głowicy i części wagowej – brak połączenia.

3.8.3. Ustawienia wagi

W celu zapewnienia odpowiedniej długości pracy przy zasilaniu z akumulatorów należy pamiętać, aby ustawić odpowiednio parametry <Usypianie wyświetlacza> i <Jasność wyświetlacza> w grupie parametrów INNE. Opis ustawień znajduje się w dalszej części instrukcji (patrz: pkt. 34 *INNE PARAMETRY*).


4. URUCHOMIENIE WAGI

- Po podłączeniu zasilania do wagi podświetli się dioda ON/LOAD  na obudowie miernika wagowego.
- Należy nacisnąć przycisk , znajdujący się w prawej górnej części elewacji miernika wagowego, po chwili rozpocznie się procedura ładowania systemu operacyjnego wraz z programowaniem RADWAG, sygnalizowana miganiem czerwonej diody ON/LOAD.
- Po zakończonej procedurze startowej zostanie automatycznie uruchomione okno główne programu.
- Waga uruchamia się w stanie niezalogowanym (brak użytkownika), aby rozpocząć pracę, należy się zalogować (procedura logowania jest opisana w dalszej części instrukcji).

Uwaga:

Wagę należy uruchamiać bez obciążenia – z pustą szalką.

5. Klawiatura wagi - funkcje przycisków

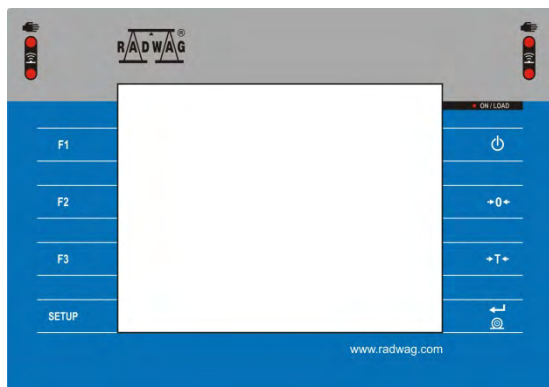


Przycisk	Opis
	Włączenie lub wyłączenie zasilania wagi
	Zerowanie wagi
	Tarowanie wagi
	Wysyłanie wyniku do drukarki lub komputera
SETUP	Przycisk funkcyjny, wejście do menu wagi
F1	Wybór modu pracy, przycisk programowalny
F2	Wybór profilu, przycisk programowalny
F3	Kalibracja wewnętrzna, przycisk programowalny

6. STRUKTURA PROGRAMU


Struktura menu głównego programu została podzielona na grupy funkcyjne. W każdej grupie znajdują się parametry pogrupowane tematycznie. Opis każdej z grup znajduje się w dalszej części instrukcji.

Wykaz grup menu – Parametry

Dostęp do menu głównego uzyskuje się po naciśnięciu przycisku SETUP lub przycisku w dolnym pasku wyświetlacza – . W menu znajdują się parametry związane z ustawieniami wagi oraz funkcjami i profilami.

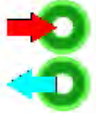
			
KALIBRACJA	UŻYTKOWNICY	PROFILE	BAZY DANYCH
			
KOMUNIKACJA	URZĄDZENIA	WEJŚCIA/WYJŚCIA	PANEL ADMINISTRATORA
			
INNE	ŚRODOWISKO	ZAPLANOWANE ZADANIA	FILMY
			
AKTUALIZACJE	INFORMACJE O SYSTEMIE		

7. OKNO WAGOWE PROGRAMU

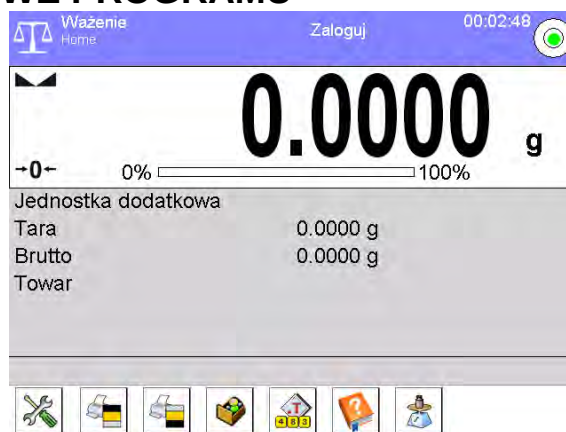


Główne okno aplikacji można podzielić na 4 obszary:

- W górnej części ekranu wyświetlacz znajduje się informacja o aktualnie używanym modzie pracy, zalogowanym użytkowniku, dacie, czasie, aktywnym połączeniu z komputerem oraz stanie wypoziomowania wagi.

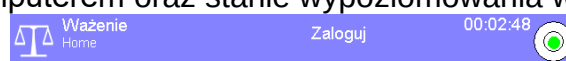

- Poniżej znajduje się okno pokazujące wynik ważenia.

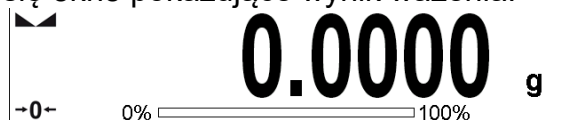

- Szare pole zawiera dodatkowe informacje, związane z aktualnie wykonywanymi czynnościami.

Jednostka dodatkowa	
Tara	0.0000 g
Brutto	0.0000 g
Towar	

Uwaga:

Informacje zawarte w tym obszarze są dowolnie programowalne. Sposób definiowania jest opisany w pkt. 14.4 instrukcji.

- Poniżej znajdują się ekranowe przyciski funkcyjne:



Uwaga:

Użytkownik wagi ma możliwość definiowania ekranowych przycisków funkcyjnych. Sposób definiowania jest opisany w pkt. 14.3 instrukcji.

8. LOGOWANIE

Uwaga!

Wagi w momencie sprzedaży są udostępniane klientom z hasłem administratora „1111”. Osoba odpowiedzialna za wagę pełniącą rolę administratora powinna zmienić to hasło przed wejściem wagi do użytkowania oraz podjąć wszelkie środki zabezpieczające przed udostępnieniem hasła innym osobom. Wszystkie osoby pełniące role operatorów z niższymi uprawnieniami od administratora powinny zostać poinstruowane o nieudostępnianiu swoich haseł innym osobom.

W celu pełnego dostępu do parametrów użytkownika oraz edycji baz danych, osoba obsługująca wagę, po każdorazowym jej włączeniu powinna dokonać procedury logowania z uprawnieniami **<Administrator>**.

Procedura pierwszego logowania

- Znajdując się w oknie głównym aplikacji, należy nacisnąć napis **<Zaloguj>**, umieszczony na górnej belce ekranu, po czym zostanie otwarte okno bazy operatorów z pozycją  **Admin**.
- Po wejściu w pozycję  **Admin** zostanie uruchomiona klawiatura ekranowa z oknem edycyjnym hasła operatora.
- Należy wpisać hasło i potwierdzić przyciskiem .
- Program powróci do okna głównego, a na górnej belce ekranu, w miejscu napisu **<Zaloguj>**, pojawi się nazwa **<Admin>**.
- Po zalogowaniu należy w pierwszej kolejności wprowadzić użytkowników i nadać im odpowiednie poziomy uprawnienia (*procedury opisano w dalszej części instrukcji, patrz: pkt. 11 i 12*).

Podczas kolejnego logowania należy wybrać użytkownika z listy i po wpisaniu hasła program rozpocznie pracę z uprawnieniami dla wybranego użytkownika.

Procedura wylogowania:

- Znajdując się w oknie głównym aplikacji, wcisnąć nazwę zalogowanego operatora na górnej belce ekranu, po czym zostanie otwarte okno bazy operatorów.
- Wcisnąć opcję **<Wyloguj>** (znajdującą się na pierwszej pozycji listy operatorów).
- Program powróci do okna głównego, a na górnej belce ekranu, w miejscu nazwy zalogowanego operatora, pojawi się napis **<Zaloguj>**.

9. PORUSZANIE SIĘ W MENU WAGI

Poruszanie się w menu programu wagowego jest intuicyjne i łatwe. Dzięki wyświetlaczowi z panelem dotykowym obsługa programu jest bardzo prosta. Naciśnięcie przycisku ekranowego lub pola na wyświetlaczu powoduje uruchomienie przypisanej do niego operacji lub funkcji.

9.1. Klawiatura wagi



Wejście do menu głównego






Przewinięcie menu do góry



Przewinięcie menu do dołu



Szybkie przewijanie menu góra – dół

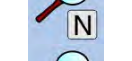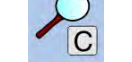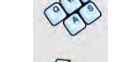	Zatwierdzenie zmiany
	Opuszczenie funkcji bez zmian
	Dodanie pozycji w bazie danych
	Wyszukiwanie pozycji w bazie ważeń po dacie
	Wyszukiwanie pozycji w bazie danych po nazwie
	Wyszukiwanie pozycji w bazie danych po kodzie
	Wydruk pozycji z bazy danych
	Czyszczenie pola edycyjnego
	Włączenie/wyłączenie klawiatury ekranowej
	Odczytanie wzorca wydruku z pliku w formacie *.lb (przycisk aktywny po podłączeniu urządzenia pamięci masowej pendrive)
	Wybór zmiennych dla wzoru wydruku z listy
	Powrót do poprzedniego poziomu menu

9.2. Powrót do funkcji ważenia

Wprowadzone w pamięci wagi zmiany są zapisane automatycznie w menu po powrocie do ważenia.

Procedura:

- Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , aż waga wróci do wyświetlania okna głównego.
- Nacisnąć pole  w pasku górnym, nastąpi natychmiastowy powrót do wyświetlania okna głównego.

10. KALIBRACJA

Wagi wyposażone są w system automatycznej kalibracji (adjustacji), dzięki czemu gwarantowana jest odpowiednia dokładność pomiarowa. Dostęp do funkcji sterujących pracą kalibracji zawiera menu <KALIBRACJA>.

10.1. Kalibracja wewnętrzna

Kalibracja wewnętrzna wykorzystuje masę zabudowaną wewnątrz wagi. Przycisk <Kalibracja wewnętrzna> powoduje automatyczne uruchomienie procesu kalibracji. Po jego zakończeniu na ekranie wagi zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu procesu i jego statusie.

Uwaga:

Kalibracja wagi wymaga stabilnych warunków (bez podmuchów powietrza, drgań podłoża), proces kalibracji powinien być wykonany przy pustej szalce).

10.2. Kalibracja zewnętrzna

Kalibracja zewnętrzna wykonywana jest za pomocą wzorca zewnętrznego o odpowiedniej dokładności i masie zależnej od typu i udźwigu wagi. Proces przebiega półautomatycznie, a kolejne etapy są sygnalizowane komunikatami na wyświetlaczu.

Uwaga:

Kalibracja zewnętrzna jest możliwa jedynie w przypadku wag, które nie podlegają ocenie zgodności (legalizacji).

Przebieg procesu:

- Należy wejść do podmenu <Kalibracja>, a następnie nacisnąć przycisk:  Kalibracja zewnętrzna>.
- Na wyświetlaczu wagi pojawi się odpowiedni komunikat, należy zdjąć obciążenie z szalki i nacisnąć przycisk . Podczas wyznaczania masy startowej zostanie wyświetlony komunikat: **Wyznaczanie masy startowej**.
- Po zakończonej procedurze wyznaczania masy startowej na wyświetlaczu wagi pojawi się następny komunikat; zgodnie z nim należy umieścić na szalce żadaną masę, po czym nacisnąć przycisk .
- Po zakończonej procedurze należy zdjąć wzorzec z szalki i po potwierdzeniu czynności przyciskiem  waga wróci do ważenia.

10.3. Kalibracja użytkownika

Kalibracja użytkownika może być wykonana dowolnym wzorcem o masie z zakresu: powyżej 0,15 maksymalnego udźwigu a wielkością maksymalnego udźwigu wagi. Procedura kalibracji jest podobna jak w przypadku kalibracji zewnętrznej, jednak przed rozpoczęciem procedury pojawia się okno do zadeklarowania wartości masy wzorca, który będzie użyty.

Uwaga:

Kalibracja użytkownika jest możliwa jedynie w przypadku wag, które nie podlegają ocenie zgodności (legalizacji).

Aby uruchomić procedurę, należy wejść do podmenu <Kalibracja>, a następnie nacisnąć przycisk  Kalibracja użytkownika>, a dalej należy postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie wagi.

10.4. Test kalibracji

Funkcja <Test kalibracji> stanowi porównanie wyników kalibracji wewnętrznej z wartością wpisaną w parametrach fabrycznych. Takie porównanie pozwala na określenie dryftów czułości wagi w czasie.

10.5. Kalibracja automatyczna

W tym menu należy zadeklarować czynnik, który decyduje o momencie rozpoczęcia kalibracji automatycznej. Dostępne opcje to:

- Brak – kalibracja automatyczna nieaktywna.
- Czas – kalibracja odbywa się w odstępach czasu, jaki został zadeklarowany w menu <Czas kalibracji automatycznej> (10.6).
- Temperatura – kalibracja odbywa się tylko przy zmianie temperatury.
- Obie – zmiana temperatury i czas decydują o momencie rozpoczęcia kalibracji automatycznej.

Uwaga:

Zmiana ustawień parametru jest możliwa jedynie w przypadku wag, które nie podlegają ocenie zgodności (legalizacji).

10.6. Czas kalibracji automatycznej

 Czas kalibracji automatycznej> jest to parametr określający, w jakich odstępach czasowych ma być wykonywana automatycznie kalibracja wewnętrzna wagi. Czas ten definiowany jest w godzinach w zakresie między 1 a 12 godzin.

Aby ustawić czas kalibracji automatycznej, należy:

- Nacisnąć przycisk <Czas kalibracji automatycznej>.
- Z wyświetlonego menu wybrać czas (podawany w godzinach), jaki ma upłynąć od ostatniej kalibracji do wykonania kolejnego procesu kalibracji wewnętrznej.

Uwaga:

Zmiana ustawień parametru jest możliwa jedynie w przypadku wag, które nie podlegają ocenie zgodności (legalizacji).

10.7. Wydruk raportu

Parametr  Wydruk raportu> określa, czy raport z kalibracji ma być drukowany automatycznie po jej zakończeniu.

Aby nastąpił automatyczny wydruk raportu, należy ustawić parametr  Wydruk raportu> na wartość <TAK>.

10.8. Projekt GLP

GLP jest jednym ze sposobów dokumentowania pracy zgodnie z przyjętym systemem jakości. Informacje wybrane do wydruku będą drukowane z każdym raportem z kalibracji wagi. Użytkownik może wykorzystać poniższe informacje oraz znaki:

▪ kalibracja (rodzaj kalibracji) ▪ mod pracy (nazwa trybu pracy) ▪ data, czas ▪ użytkownik ▪ typ wagi ▪ ID wagi ▪ wypoziomowanie ▪ masa nominalna ▪ masa aktualna	▪ różnica ▪ temperatura ▪ pusta linia ▪ kreski ▪ podpis ▪ wydruk niestandardowy
---	--

10.9. Historia kalibracji

Zawiera wszystkie wykonane kalibracje wagi. Zapis dokonywany jest automatycznie. Każda zapisana kalibracja zawiera podstawowe dane dotyczące przeprowadzonego procesu. Z poziomu tego menu można wyświetlić listę zapisanych kalibracji. Każdy raport może zostać wydrukowany.

Aby wydrukować raport z kalibracji, należy wejść do podmenu <Kalibracja>, a następnie w: <Historia kalibracji>, wybrać kalibrację, którą należy wydrukować i po wyświetleniu szczegółów, wcisnąć ikonę drukarki  na górnym pasku.

Uwaga:

Jeżeli pamięć wagi ulegnie zapełnieniu, to najstarszy zapis na liście zostanie automatycznie skasowany.

Jeżeli procedury wewnętrzne wymagają kompletnej dokumentacji dla wszystkich przeprowadzonych kalibracji, to listę z ich zapisami należy okresowo drukować i archiwizować.

Wyszukiwanie zrealizowanej kalibracji

Można wyszukać informacje o wykonanej kalibracji: – po naciśnięciu przycisku  należy podać datę jej wykonania.

Eksport informacji o wykonanych kalibracjach

Aby wyeksportować informacje o wykonanych kalibracjach, należy włożyć pamięć masową USB do złącza wagi. Następnie nacisnąć przycisk <Eksport danych>, który znajduje się w prawym górnym rogu wyświetlacza. Proces przebiega automatycznie. Po zakończeniu procesu zostaje zapisany plik z rozszerzeniem **.tdb**, który można edytować np. w programie Excel lub w edytorze tekstowym.

11. UŻYTKOWNICY

Menu zawiera wykaz użytkowników, którzy mogą obsługiwać wagę. Dla każdego użytkownika można zdefiniować poniższe informacje:

- Nazwa
- Kod
- Hasło
- Uprawnienia
- Język
- Profil
- Numer karty

Tylko użytkownik o statusie Administratora może dodawać nowych użytkowników.

Aby dodać nowego użytkownika, należy:

- W menu <Użytkownicy> nacisnąć przycisk <Dodaj> .
- Zdefiniować potrzebne pola dla nowo utworzonego operatora.

Uwaga:

Bazę użytkowników można przeszukiwać, uwzględniając kod lub nazwę użytkownika.


Edycja informacji związanych z użytkownikiem:

- Nacisnąć pole z nazwą użytkownika.
- Wyświetlacz pokaże właściwości związane z użytkownikiem.
- Należy wybrać i zmodyfikować wymagane dane.

Tylko użytkownik o statusie Administratora może usuwać użytkowników.

Aby usunąć użytkownika, należy:

- Nacisnąć i przytrzymać nazwę użytkownika.
- Wyświetlacz pokaże menu związane z tym elementem.
- Wybrać opcję <Usuń>.

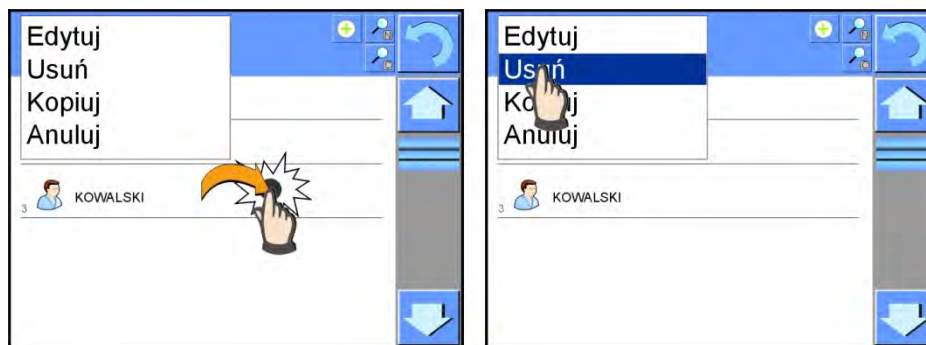

12. PANEL ADMINISTRATORA

W tej grupie menu  jest określany zakres czynności, jakie może wykonywać użytkownik o określonym stopniu uprawnień, stopień zabezpieczeń w hasłach i uprawnienia dla użytkownika niezalogowanego.

UWAGA: Tylko użytkownik o uprawnieniach <Administrator> może dokonać modyfikacji tego menu.



12.1. Ustawienia hasła

Grupa menu umożliwiającą określenie stopnia skomplikowania hasła dla użytkowników wagi.



Minimalna długość hasła	Określenie minimalnej ilości znaków w hasle użytkownika. Dla wartości „0” można ustawiać dowolną ilość znaków.
Wymagaj użycia małych i dużych liter	Określenie wymagań co do zawartości znaków w hasłach użytkowników.


Wymagaj użycia cyfr	
Wymagaj użycia znaków specjalnych	
Okres ważności hasła	Określenie odcinka czasu, w dniach, po upływie którego należy zmienić hasło. Dla wartości „0” zmiana hasła nie jest wymagana przez program wagi.

12.2. Ustawienie kont użytkownika



Uprawnienia użytkownika niezalogowanego

Administrator ma możliwość nadania poziomu uprawnień osobie obsługującej wagę, która nie dokonała procedury logowania (tzw. Użytkownik anonimowy).

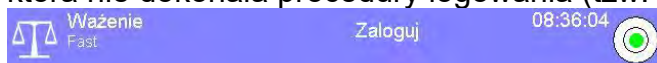

Procedura:

Należy wejść do grupy parametrów <👤 Uprawnienia>, wybrać opcję <👤 Użytkownik anonimowy>, a następnie ustawić odpowiednie uprawnienia. Dostępne uprawnienia operatora anonimowego to: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator.

Uwaga: Ustawienie <Gość> powoduje, że niezalogowany użytkownik nie ma żadnych uprawnień do zmian ustawień programu.

Automatyczne wylogowanie

Opcja umożliwiająca włączenie automatycznego wylogowywania użytkownika po upływie określonego czasu, podawanego w minutach, jeżeli waga jest nieużywana. Domyślnie waga ma wyłączoną tę opcję (ustawienie <Brak>).

Procedura:

Należy wejść do grupy parametrów <👤 Uprawnienia>, wybrać opcję <📄 Automatyczne wylogowywanie>, a następnie wybrać jedną z opcji: brak/3/5/15/30/60. Czas jest podawany w [min].

Ukryj masę gdy operator nie zalogowany

Opcja umożliwiająca wyłączenie wyświetlania masy, jeżeli użytkownik nie jest zalogowany.

Domyślnie waga ma wyłączoną tę opcję (ustawienie <Nie>).

Procedura:

Należy wejść w opcję < Ukryj masę gdy operator nie zalogowany, a następnie wybrać jedną z opcji: Tak/Nie.

12.3. Zarządzanie uprawnieniami

Zarządzanie uprawnieniami			
1	Bazy danych		
2	Data i czas	Administrator	
3	Wydruki	Administrator	
4	Wydruk nagłówka	Użytkownik	
5	Wydruk stopki	Użytkownik	
6	Przycisk wydruku / zatwierdzenia	Użytkownik	

Zarządzanie uprawnieniami			
2	Data i czas	Administrator	
3	Wydruki	Administrator	
4	Wydruk nagłówka	Użytkownik	
5	Wydruk stopki	Użytkownik	
6	Przycisk wydruku / zatwierdzenia	Użytkownik	
7	Filmy	Administrator	

Bazy Danych

Bazy danych			
1	Podgląd baz danych	Użytkownik	
2	Towary	Administrator	
3	Klienci	Administrator	
4	Receptury	Administrator	
5	Opakowania	Administrator	
6	Magazyny	Administrator	
7	Pipety	Administrator	
8	Serie	Użytkownik zaawansowany	
9	Wzorce kalibracyjne	Administrator	
10	Wydruki	Administrator	
11	Zmienne uniwersalne	Użytkownik	
12	Usuń ważenia i raporty	Użytkownik zaawansowany	



Domyślne ustawienia wagi pozwalają użytkownikowi zalogowanemu jako **Administrator** dokonywać zmiany ustawień poszczególnych baz danych. Oprogramowanie pozwala jednak na zmianę poziomu dostępu do zmian.

Procedura:

Należy wejść do grupy parametrów <🔧 Panel administratora>, wybrać opcję <Bazy danych>, a następnie ustawić odpowiednie uprawnienia dla poszczególnych baz. Dostępne uprawnienia do ustawiania daty i czasu to: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator.

Uwaga: Ustawienie <Gość> powoduje, że dostęp do ustawień jest otwarty (bez potrzeby logowania).

Użytkownik anonimowy

Domyślne ustawienia wagi pozwalają użytkownikowi anonimowemu (niezalogowanemu) Wykonywać czynności zarezerwowane dla uprawnień <Gość>.

Procedura:

Należy wejść do grupy parametrów <🔧 Uprawnienia>, wybrać opcję <Użytkownik anonimowy>, a następnie ustawić odpowiednie uprawnienia. Dostępne uprawnienia do ustawiania daty i czasu to: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator.

Data i czas

Domyślne ustawienia wagi pozwalają użytkownikowi zalogowanemu jako **Administrator** dokonywać zmiany ustawień daty i czasu. Oprogramowanie pozwala jednak na zmianę poziomu dostępu do opcji <📅 Data i czas>.

Procedura:

Należy wejść do grupy parametrów <🔧 Uprawnienia>, wybrać opcję <📅 Data i czas>, a następnie ustawić odpowiednie uprawnienia. Dostępne uprawnienia do ustawiania daty i czasu to: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator.

Uwaga: Ustawienie <Gość> powoduje, że dostęp do ustawień jest otwarty (bez potrzeby logowania).

Wydruki

Domyślne ustawienia wagi pozwalają użytkownikowi zalogowanemu jako **Administrator** dokonywać edycji wzorców wydruków. Oprogramowanie pozwala jednak na zmianę poziomu dostępu do opcji <🖨️ Wydruki>.

Procedura:

Należy wejść do grupy parametrów < Uprawnienia>, wybrać opcję < Wydruki>, a następnie wybrać jedną z opcji: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator.

Uwaga: Ustawienie <**Gość**> powoduje, że dostęp do ustawień jest otwarty (bez potrzeby logowania).

Wydruk nagłówka

Domyślne ustawienia wagi pozwalają użytkownikowi zalogowanemu jako **Użytkownik** dokonywać edycji wzorca wydruku nagłówka. Oprogramowanie pozwala jednak na zmianę poziomu dostępu do tej opcji

Procedura:

Należy wejść do grupy parametrów < Uprawnienia>, wybrać opcję <Wydruk nagłówka>, a następnie wybrać jedną z opcji: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator.

Uwaga: Ustawienie <**Gość**> powoduje, że dostęp do ustawień jest otwarty (bez potrzeby logowania).

Wydruk stopki

Domyślne ustawienia wagi pozwalają użytkownikowi zalogowanemu jako **Użytkownik** dokonywać edycji wzorca wydruku stopki. Oprogramowanie pozwala jednak na zmianę poziomu dostępu do tej opcji

Procedura:

Należy wejść do grupy parametrów < Uprawnienia>, wybrać opcję <Wydruk stopki>, a następnie wybrać jedną z opcji: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator.

Uwaga: Ustawienie <**Gość**> powoduje, że dostęp do ustawień jest otwarty (bez potrzeby logowania).

Przycisk wydruku/zatwierdzenia

Domyślne ustawienia wagi pozwalają użytkownikowi zalogowanemu jako **Użytkownik** dokonywać edycji wzorców wydruków. Oprogramowanie pozwala jednak na zmianę poziomu dostępu do opcji < 1,247 Zatwierdzenie wyniku>.

Procedura:

Należy wejść do grupy parametrów < Uprawnienia>, wybrać opcję < 1,247 Zatwierdzenie wyniku >, a następnie wybrać jedną z opcji: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator.

Uwaga: Ustawienie <**Gość**> powoduje, że dostęp do ustawień wydruki jest otwarty (bez potrzeby logowania).

Filmy

Domyślne ustawienia wagi pozwalają użytkownikowi zalogowanemu jako **Administrator** dokonywać zmian (dodawania lub usuwania) w menu <Filmy>.

Oprogramowanie pozwala jednak na zmianę poziomu dostępu do opcji < Filmy> dla operatora o uprawnieniach Administrator.

Procedura:

Należy wejść do grupy parametrów < Uprawnienia>, wybrać opcję



<Filmy>, a następnie wybrać jedną z opcji: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator.

Uwaga: Ustawienie <Gość> powoduje, że dostęp do zmian jest otwarty (bez potrzeby logowania).

Zmiana modu pracy

Domyślne ustawienia wagi pozwalają użytkownikowi zalogowanemu jako **Użytkownik** dokonywać zmiany aktualnego modu pracy. Oprogramowanie pozwala jednak na zmianę poziomu dostępu do tej opcji

Procedura:

Należy wejść do grupy parametrów < Uprawnienia>, wybrać opcję <Zmiana modu pracy>, a następnie wybrać jedną z opcji: Gość, Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, Administrator.

Uwaga: Ustawienie <Gość> powoduje, że dostęp do ustawień jest otwarty (bez potrzeby logowania).

13. PROFILE

Profil jest to pakiet informacji, który opisuje:

- o jak ma działać funkcja, np. liczenia detali, odchyłek % itp.,
- o jakie informacje będą wyświetlane podczas pracy,
- o jakie przyciski będą aktywne,
- o które jednostki będą dostępne,
- o jakie kryteria są obowiązujące dla szybkości działania wagi i stabilizacji wyniku.

Program wagi umożliwia stworzenie wielu profili, co praktycznie oznacza, że:

- każdy użytkownik może stworzyć własne, indywidualne środowisko pracy,
- można zaprojektować sposób działania wagi poprzez udostępnienie tych przycisków i informacji, jakie są niezbędne (ergonomia pracy).

13.1. Tworzenie profilu

Domyślnym profilem każdej wagi jest profil o nazwie <Home>. Administrator wagi może stworzyć nowe profile poprzez:

- kopiowanie już istniejącego profilu, a następnie jego modyfikację,
- stworzenie nowego profilu.

Kopiowanie istniejącego profilu

Procedura:

- Należy wejść do menu głównego, naciskając przycisk **Setup**.
- Następnie wejść do podmenu <Profile>.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk z nazwą profilu, który ma zostać skopiowany.
- Zostanie wyświetlone menu, wybrać w nim opcję <Kopiuj>.
- Zostanie utworzony profil o nazwie <Kopia nazwa>, wszystkie ustawienia będą takie same jak profilu bazowego.
- Po skopiowaniu należy zmienić dane, które wymagają modyfikacji: (nazwa itp.).

Dodawanie nowego profilu

Procedura:

- Należy wejść do menu głównego, naciskając przycisk **Setup**.

- Następnie wejść do podmenu < Profile>.
- Nacisnąć przycisk , po czym zostanie wyświetlony komunikat: <Utworzyć nowy rekord?>.
- Potwierdzić komunikat przyciskiem , program automatycznie doda nową pozycję i przejdzie do jej edycji.

Usuwanie profilu

Procedura:

- Należy wejść do menu głównego, naciskając przycisk **Setup**.
- Następnie wejść do podmenu < Profile>.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk z nazwą profilu, który ma zostać usunięty.
- Wyświetlone zostanie menu, z listy wybrać opcję <Usuń>.
- Następnie zostanie wyświetlony komunikat: <Czy na pewno usunąć?>.
- Potwierdzić komunikat przyciskiem , profil zostanie usunięty.

Uwaga:


Operacje na profilach są możliwe po uprzednim zalogowaniu się jako Administrator.

13.2. Konstrukcja Profilu

W każdym profilu znajdują się następujące pozycje:

Ustawienia	Menu umożliwiające nadanie indywidualnej nazwy profilu (ciąg znaków alfanumerycznych) oraz zadeklarowanie, jaki mod ma być modem domyślnym (wybrany mod będzie zawsze włączany jako startowy po wybraniu profilu).
Mody pracy	Zawierają takie podmenu, jak: ▪ Ustawienia dodatkowe związane z modem ▪ Przyciski ▪ Informacje ▪ Wydruki
Odczyt	Zawiera takie podmenu, jak: ▪ Filtr ▪ Zatwierdzenie wyniku ▪ Autozero ▪ Autozero: Dozowanie ▪ Ostatnia cyfra
Jednostki	Menu umożliwiające zadeklarowanie jednostki startowej, dodatkowej, 2 jednostek definiowanych oraz wprowadzenie wartości przyspieszenia ziemskiego w miejscu użytkowania wagi.

13.2.1. Ustawienia

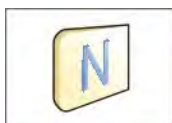

Nazwa

Po wejściu w tę opcję na wyświetlaczu pojawi się okno z klawiaturą. Należy wprowadzić nazwę profilu i zatwierdzić przyciskiem . Nadana nazwa będzie obowiązywać dla profilu.



Domyślny mod pracy

Po wejściu w tę opcję można wybrać konkretny mod pracy jako startowy dla profilu. Przy opcji <Brak> po wybraniu profilu waga pozostaje w ostatnio używanym modzie.

13.2.2. Mody pracy


Po wejściu do opcji zostanie otwarte okno, w którym znajdują się wszystkie dostępne mody pracy. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia dla każdego z nich swoich ustawień, które będą przywoływane po wybraniu danego profilu.

Dla każdego z modów pracy dostępne są następujące parametry:

- Ustawienia:
zawierają specyficzne ustawienia dotyczące modu pracy oraz ustawienia uniwersalne, takie jak np.: kontrola wyniku, tryb tary, automatyczny wydruk stopki, tryb wydruku, wydruk.
- Funkcje przycisków szybkiego dostępu:
deklarowanie przycisków, które będą widoczne w dolnej części wyświetlacza.
- Informacje:
wybór informacji, które będą wyświetlone w szarym polu informacyjnym.
- Wydruki:
wybór typu wydruku lub definiowanie wydruku niestandardowego.

13.2.3. Odczyt

Użytkownik może przystosować wagę do zewnętrznych warunków środowiskowych (stopień filtrów) lub własnych potrzeb. Menu <Odczyt> składa się z następujących elementów:

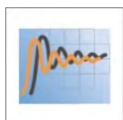

FILTR

Każdy sygnał pomiarowy przed jego wyświetleniem jest przetwarzany elektronicznie celem osiągnięcia poprawnych parametrów charakterystycznych dla sygnału stabilnego, czyli gotowego do odczytu.

W pewnym zakresie użytkownik może wpływać na zakres tego przetwarzania, wybierając odpowiedni FILTR. Zakres wyboru:

- o bardzo szybki, szybki, średni, wolny, bardzo wolny

Wybierając poziom filtrowania, należy uwzględnić rzeczywiste warunki pracy wagi. Dla warunków bardzo dobrych można ustawiać filtr średni lub szybki, a dla niekorzystnych warunków – filtr wolny lub bardzo wolny.

Uwaga:

- dla wag precyzyjnych zalecane są filtry z zakresu bardzo szybki ÷ średni,
- dla wag analitycznych i mikrowag zalecane są filtry z zakresu średni ÷ bardzo wolny.



Zatwierdzenie wyniku

Decyduje o momencie wyświetlenia znaku stabilności dla wyniku pomiaru.

Można ustawić jedną z 3 opcji zatwierdzenia wyniku:

- o szybko, szybko + dokładnie, dokładnie.

Uwaga:

Szybkość osiągania wyniku stabilnego jest zależna od rodzaju zastosowanego filtra oraz wybranego zatwierdzenia wyniku.



Funkcja autozero

Zadaniem tej funkcji jest automatyczna kontrola i korekta zerowego wskazania wagi.

Gdy funkcja jest aktywna, następuje porównywanie kolejnych wyników w stałych odstępach czasu. Jeżeli te wyniki będą różnić się o wartość mniejszą niż zadeklarowany zakres AUTOZERA, np. 1 działka, to waga automatycznie wyzeruje się oraz zostaną wyświetlone znaczniki wyniku stabilnego –  i wskazania zerowego – .

Gdy funkcja AUTOZERA jest włączona, wtedy każdy pomiar rozpoczyna się zawsze od dokładnego zera. Istnieją jednak szczególne przypadki, w których funkcja ta przeszkadza w pomiarach. Przykładem może być bardzo powolne umieszczanie ładunku na szalce wagi (np. wsypywanie ładunku); w takim przypadku układ korygowania wskazania zerowego może skorygować również wskazania rzeczywistej masy ładunku.

Dostępne wartości: **NIE** - funkcja autozera wyłączona.

TAK - funkcja autozera włączona.



Funkcja autozero: Dozowanie

Zadaniem tej funkcji jest domyślne ustawianie działania autozera w funkcji dozowania.

Dostępne wartości:

NIE - działanie autozera wyłączone automatycznie po wejściu w mod Dozowanie.

TAK - działanie autozera włączone automatycznie po wejściu w mod Dozowanie.

Ostatnia cyfra



Za pomocą tej funkcji można wyłączać widoczność ostatniego miejsca dziesiętnego w eksponowanym wyniku ważenia. Funkcja ma trzy ustawienia:

- **Zawsze:** widoczne są wszystkie cyfry.
- **Nigdy:** ostatnia cyfra wyniku zostaje wygaszona i nie jest pokazywana.
- **Kiedy stabilny:** Ostatnia cyfra zostaje wyświetlana tylko wtedy, gdy wynik jest stabilny.

Środowisko

Parametr ten odnosi się do otoczenia i warunków, w jakich pracuje waga. Jeżeli warunki środowiskowe są niestabilne, zalecana jest zmiana parametru na: Niestabilne. Fabrycznie parametr ten jest ustawiony na:



Stabilne.

Ustawienie stabilne powoduje, że waga dużo szybciej działa; tzn. czas ważenia jest dużo krótszy niż w ustawieniu parametru na: Niestabilne.

Dostępne ustawienia:

- **Niestabilne; Stabilne.**

13.2.4. Jednostki

Użytkownik ma możliwość zadeklarowania dla wybranego profilu jednostki startowej i dodatkowej oraz dwóch jednostek definiowanych.

Jednostki			
1	Jednostka startowa	Brak	
2	Jednostka dodatkowa	Brak	
3	Jednostka definiowana 1		
4	Jednostka definiowana 2		
5	Przyspieszenie ziemskie	9.80665 m/s ²	
6	Dostępne jednostki		

W tym miejscu również istnieje możliwość wprowadzenia wartości przyspieszenia ziemskiego w miejscu użytkowania wagi. Jest to niezbędne do korzystania ze wskazania masy w [N].

Jednostka definiowana posiada:

- o Wzór (*wzór przeliczania jednostki definiowanej*): Współczynnik * Masa lub Współczynnik / Masa.
- o Współczynnik (*deklarowanie współczynnika do przeliczania jednostki definiowanej wg. Wybranego wzoru*)
- o Nazwa (*indywidualna nazwa jednostki - 3 znaki*)

Jednostka definiowana 1			
1	$f(x)$ Wzór	Współczynnik * Masa	
2	Współczynnik	0	
3	Nazwa		

Jeżeli taka jednostka zostanie zaprojektowana, to jej nazwa będzie widoczna w zestawieniu dostępnych jednostek, tylko dla wag nielegalizowanych.

14. MODY PRACY – informacje ogólne

Wagi serii 4Y w wykonaniu standardowym posiadają następujące mody pracy:

 Ważenie Zasada działania: ciężar ładunku jest określany poprzez pomiar pośredni; tzn. mierzona jest siła, z jaką ładunek jest przyciągany przez Ziemię. Otrzymany wynik jest przetwarzany do postaci cyfrowej i pokazywany na wyświetlaczu wagi.	 Liczenie sztuk Zasada działania: na podstawie znanej masy jednostkowej detalu można zliczać kolejne detale, zakłada się przy tym, że masa jednostkowa detalu jest wyznaczona z wystarczającą dokładnością, a kolejne detale mają taką samą masę.
 Doważanie Zasada działania: kontrola masy próbki w zadanych progach; należy podać wartość progu dolnego <LO> oraz wartość progu górnego <HI>.	 Dozowanie Zasada działania: należy podać masę docelową, jaką ma osiągnąć próbka podczas nalewania, nasypywania.
 Odchyłki Zasada działania: kontrola procentowa masy próbki względem wzorca (odniesienia), której efektem jest informacja, na ile badana próbka różni się od przyjętego wzorca.	 Gęstość Zasada działania: na podstawie prawa Archimidesa wyznaczana jest gęstość ciał stałych i cieczy, funkcja wymaga dodatkowego zestawu (wyposażenie opcjonalne).
 Ważenie zwierząt Zasada działania: pomiar masy odbywa się przy wykorzystaniu specjalnych filtrów, tłumiących ruch zwierząt, co pozwala na uzyskanie poprawnego pomiaru.	 Receptury Zasada działania: wykorzystując kolejne składniki, można wykonać dowolną mieszaninę; recepturę należy zaprogramować, podając masy poszczególnych składników.
 Statystyka Zasada działania: z wykonanych pomiarów wyznaczane są wartości statystyczne, takie jak Min, Max, odchylenie itp.	 Ważenie różnicowe Zasada działania: analiza zmian masy próbek w czasie.
 Statystyczna Kontrola Jakości Mod pracy przydatny podczas różnego rodzaju procesów pakowania produktów w celu monitorowania i/lub kontroli procesu pakowania. Umożliwia wykrywanie nadmiarowych i niedomiarowych ilości produktu w opakowaniach.	 Zatrask Max Zasada działania: zatraskiwana jest na wyświetlaczu masa – maksymalne wskazanie wagi, które odzwierciedla największy nacisk na szalkę wagi.
 Funkcja, która umożliwia szybką kontrolę statystyczną próbek, zgodnie z wymaganiami systemów jakości i/lub wewnętrznymi normami (<i>funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym</i>).	 Kontrola Towarów Paczkowanych Realizuje kontrolę towarów paczkowanych zgodnie z Ustawą o towarach paczkowanych (<i>funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym</i>).

W ustawieniach poszczególnych modów pracy dostępne są funkcje specjalne. Dzięki nim można dostosować działanie wybranego modu pracy do indywidualnych potrzeb. Te ustawienia są przywoływane przez wybranie odpowiedniego profilu. Szczegółowy opis tych funkcji jest podany dla każdego modu pracy.

14.1. Wybór modu pracy

Aby zmienić mod pracy, należy:

- o Nacisnąć nazwę aktualnie wykorzystywanego modu, która jest widoczna w lewym górnym rogu wyświetlacza.





- o Na wyświetlaczu pojawi się lista modów.
- o Wybrać nazwę modu, jaki ma być używany.

14.2. Parametry związane z modem pracy

Z każdym modem pracy związane są programowalne parametry, decydujące, jak ma on działać. Procedura dostępu do tych parametrów:

1. Nacisnąć szare pole informacyjne.
2. Na wyświetlaczu pojawi się menu:
 - o <Ustawienia> - dodatkowe opcje związane z modem.
 - o <Przyciski> - definiowanie przycisków szybkiego dostępu.
 - o <Informacje> - wybór informacji, które będą pokazane w polu Info.
 - o <Wydruki> - wybór typu oraz zawartość wydruku.
 - o <Profil> - wybór profilu, które będzie wykorzystywany podczas pracy.

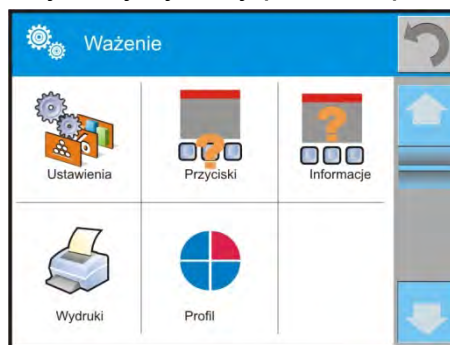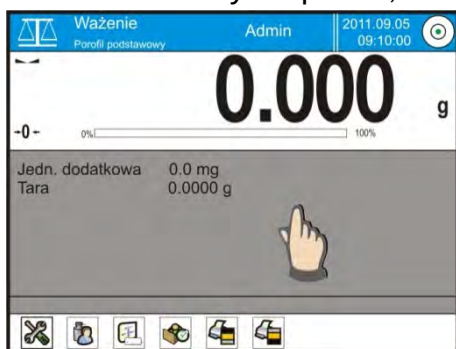

3. Nacisnąć odpowiednie menu i wybrać ten element, który ma podlegać modyfikacji.

Opis podstawowych parametrów, które znajdują się w menu <Ustawienia>, jest zawarty w punkcie 15.8 *Dodatkowe parametry związane z ważeniem*. Inne parametry, związane z konkretnymi modami, są opisane podczas omawiania tych modów.

14.3. Przyciski szybkiego dostępu, czujniki zbliżeniowe

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania 7 przycisków, które mogą być widoczne w dolnym pasku wyświetlacza.

Po przypisaniu funkcji do przycisku pojawia się odpowiednia ikona, która jest pokazana w dolnym pasku nawigacyjnym wyświetlacza głównego. Dostępność przycisków jest zależna od modu pracy. Wykaz przycisków znajduje się w DODATKU B instrukcji.



Jest to tzw. klawisz szybkiego dostępu do najczęściej wykonywanych operacji.

Uwaga:

Użytkownik może mieć dostęp do przeglądania instrukcji obsługi zapisanej w pamięci wagi. Aby korzystać z tej funkcji, należy ustawić w pasku przycisków przycisk pomocy



14.3.1. Czujniki zbliżeniowe

Waga jest wyposażona w dwa czujniki zbliżeniowe, które umożliwiają sterowanie pracą wagi bez konieczności naciskania przycisków na elewacji lub ekranie dotykowym.

Program rozpoznaje cztery stany ruchu w pobliżu czujników:

1. Zbliżenie dłoni do czujnika lewego <**Czujnik zbliżeniowy lewy**>.
2. Zbliżenie dłoni do czujnika prawego <**Czujnik zbliżeniowy prawy**>.
3. Ruch dłoni w lewo nad obydwooma czujnikami (przesunąć dłoń najpierw nad czujnikiem prawym następnie lewym) <**Czujnik zbliżeniowy: gest w lewo**>.
4. Ruch dłoni w prawo nad obydwooma czujnikami (przesunąć dłoń najpierw nad czujnikiem lewym następnie prawym) <**Czujnik zbliżeniowy: gest w prawo**>

Uwaga:

Przy korzystaniu z opcji GEST W LEWO lub GEST W PRAWO należy ustawić wartość parametru <Opóźnienie czujników zbliżeniowych> na wartość **500 ms**!


Do każdego z gestów można przypisać jedną z dostępnych czynności: Brak; Profil; Kalibracja; Zeruj; Taruj; Ustaw tarę; Wyłącz tarę; Przywróć tarę; Opakowanie; Drukuj; Wydruk nagłówka; Wydruk stopki; Jednostka; Zmienna uniwersalna 1; Zmienna uniwersalna 2; Zmienna uniwersalna 3; Zmienna uniwersalna 4; Zmienna uniwersalna 5; Zatwierdź; Przerwij; Użytkownik; Drzwiczki lewe; Drzwiczki prawe; Otwórz/zamknij Drzwiczki; Parametry; Towar; Magazyn; Klient.

Po wybraniu ustawienia i powrocie do ważenia program, po rozpoznaniu gestu, wykona przypisaną do gestu czynność. Dla zapewnienia prawidłowej pracy należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu czułości czujników i opóźnienia czujników zbliżeniowych (*patrz: opis w dalszej części instrukcji, pkt. 34*).

14.4. Informacje


Informacje związane z procesem ważenia pokazywane są w szarym polu informacyjnym. Można tam umieścić maksymalnie 6 informacji. Jeżeli wybrano więcej, pokazane będzie pierwszych 6. Dla każdej informacji są dostępne dwie opcje:

- TAK – informacja widoczna.
- NIE – informacja niewidoczna.

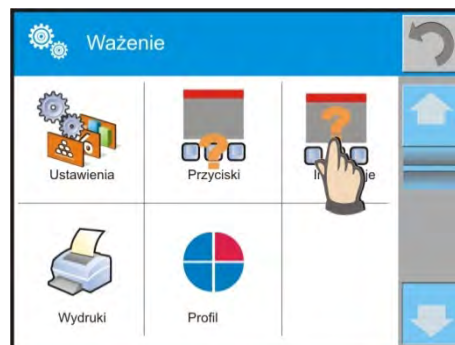

14.5. Wydruki

Menu Wydruki składa się z dwóch odrębnych bloków. Pierwszy z nich to wydruki standardowe, drugi – wydruki niestandardowe.

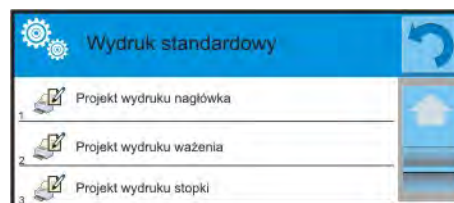

▪ Wydruk standardowy

Składa się z trzech wewnętrznych bloków, które zawierają różne zmienne. Dla każdej zmiennej należy ustawić opcję TAK – jeżeli ma być drukowana lub NIE – jeżeli ma nie występować na wydruku.

Procedura:

1. Nacisnąć pole z nazwą projektu do edycji (Nagłówek – Ważenie – Stopka) i wybrać zmienne, które mają być drukowane.
2. Jeżeli wybrany jest wydruk niestandardowy, to należy go utworzyć.

<u>NAGŁÓWEK</u>	<u>WAŻENIE</u>	<u>STOPKA</u>
– Kreski – Mod pracy – Data – Czas – Typ wagi – ID wagi – Użytkownik – Wypoziomowanie – Klient – Magazyn – Towar – Opakowanie – Zmienna uniwersalna 1...5 – Pusta linia – Raport GLP – Wydruk niestandardowy	– N (ilość pomiarów) – Data – Czas – Wypoziomowanie – Klient – Magazyn – Towar – Opakowanie – Zmienna uniwersalna 1...5 – Netto – Tara – Brutto – Aktualny wynik – Jednostka dodatkowa – Masa – Wydruk niestandardowy	– Mod pracy – Data – Czas – Typ wagi – ID wagi – Użytkownik – Wypoziomowanie – Klient – Magazyn – Towar – Opakowanie – Zmienna uniwersalna 1...5 – Kreski – Pusta linia – Raport GLP – Podpis – Wydruk niestandardowy

PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ WYDRUKAMI

1. Poprzez naciśnięcie przycisku PRINT na elewacji wagi można wydrukować zmienne, które są pokazane w polu WAŻENIE wydruku standardowego, jeżeli mają atrybut = TAK (patrz: wykaz zmiennych powyżej).
2. Zmienne z atrybutem TAK, pokazane w NAGŁÓWKU lub STOPCE, będą drukowane **TYLKO** po naciśnięciu ikony **Drukuj Nagłówek** lub **Drukuj Stopkę**. Ikony te należy

umieścić w dolnym pasku wyświetlacza jako przyciski szybkiego dostępu (procedura umieszczania ikony opisana jest w dalszej części instrukcji, patrz: pkt. 14.3).

	
Wydruk informacji zawartych w nagłówku	Wydruk informacji zawartych w stopce

Uwaga:

Jednostki dla wydruku wskazań masy:

- Netto – jednostka główna (kalibracyjna)
- Tara – jednostka główna (kalibracyjna)
- Brutto – jednostka główna (kalibracyjna)
- Aktualny wynik – jednostka aktualnie wyświetlana
- Jednostka dodatkowa – jednostka dodatkowa
- Masa – jednostka główna (kalibracyjna)

Wydruk niestandardowy

Wydruk może zawierać: TEKSTY oraz ZMIENNE (które są pobierane z programu w chwili wydruku). Każdy z wydruków jest osobnym projektem, ma swoją indywidualną nazwę, która go identyfikuje i jest zapisywany w bazie danych.

Procedura:

- Nacisnąć obszar <Wydruk niestandardowy>.
- Nacisnąć przycisk <Dodaj> .
- Zostanie otwarte kolejne okno z danymi Nazwa/Kod/Projekt.
- Nadać nazwę i kod dla wydruku.
- Nacisnąć przycisk <Projekt>.
- Wyświetlacz pokaże pole z klawiaturą, umożliwiające edycję wydruku.
- Wykorzystując klawiaturę, zaprojektować wydruk; w skład wydruku mogą wchodzić: teksty oraz zmienne.

Uwaga:

- *Użytkownik ma możliwość dodawania wydruków z pamięci zewnętrznej poprzez import już skonfigurowanych tekstów przy użyciu portu USB.*
- *Nazwa wydruku jest TYLKO NAZWĄ i nie stanowi jego zawartości.*
- *Sposób projektowania wydruku niestandardowego opisany jest w pkt. 30.19 <Wydruki>.*

14.6. Profile

Opis tej funkcji zawiera pkt. 13 *Profile*.

15. WAŻENIE

Na szalce wagi umieścić ważony ładunek. Gdy wyświetli się znacznik  z lewej strony wyświetlacza, można odczytać wynik ważenia.

Zapis/wydruk ważenia jest możliwy po naciśnięciu przycisku <PRINT>:

- w wagach legalizowanych – tylko stabilnego wyniku ważenia (znacznik )
 - w wagach nielegalizowanych – wynik stabilny lub niestabilny (brak wyświetlanego znaczka )
- jeśli wynik jest niestabilny, na wydruku przed wartością masy drukowany jest znak <?>.

15.1. Wybór jednostki ważenia

Zmiana jednostki ważenia jest możliwa poprzez bezpośrednie naciśnięcie jednostki widocznej w oknie wagowym, obok wyniku pomiaru. Po kliknięciu w jednostkę zostaje

wyświetlona lista dostępnych jednostek. Po wybraniu jednej z nich program automatycznie przelicza wskazanie do wartości wybranej jednostki.

Możliwości wyboru:

jednostka	oznaczenie	waga legalizowana	jednostka	oznaczenie	waga legalizowana
gram	[g]	tak	Taele Hongkong	[tlh]	nie
miligram	[mg]	tak*	Taele Singapur	[tls]	nie
kilogram	[kg]	tak*	Taele Tajwan	[tlt]	nie
karat	[ct]	tak*	Taele Chiny	[tlc]	nie
funt	[lb]	nie	Momme	[mom]	nie
uncja	[oz]	nie	Grain	[gr]	nie
uncja troy	[ozt]	nie	Newton	[N]	nie
pennyweight	[dwt]	nie	Tical	[ti]	nie




* - Jednostki dostępne w zależności od typu wagi.

W wagach nielegalizowanych wszystkie jednostki spoza układu SI są dostępne.

15.2. Zasady poprawnego ważenia

W celu zapewnienia długotrwałego okresu użytkowania i prawidłowych pomiarów mas ważonych ładunków, należy:

- Uruchamiać wagę bez obciążenia szalki wagi (dopuszczalna wartość obciążenia szalki przy uruchomieniu wynosi $\pm 10\%$ obciążenia maksymalnego).

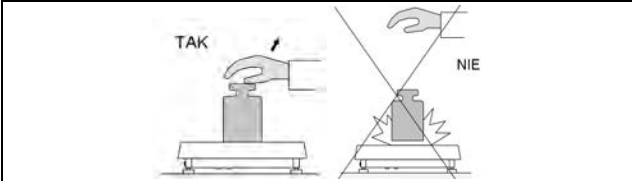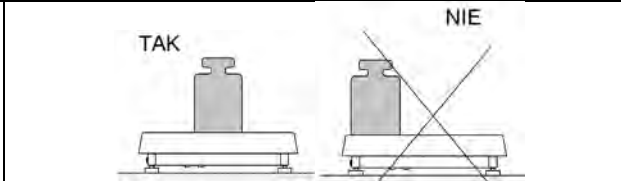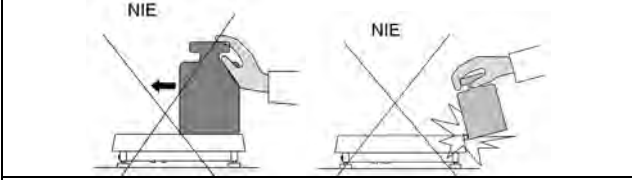	
Szalkę wagi obciążać spokojnie i bezударowo.	Ładunki na szalce rozmieszczać centralnie.
	
Unikać bocznych obciążeń szalki, w szczególności bocznych uderzeń.	

Przed przystąpieniem do pomiarów lub w przypadku istotnych zmian warunków zewnętrznych wagę należy wykalibrować.

- Przed rozpoczęciem pomiarów, zaleca się kilkakrotnie obciążyć szalkę ładunkiem o masie zbliżonej do obciążenia maksymalnego.
- Po zdjęciu ładunku sprawdzić, czy nieobciążona waga wskazuje dokładne zero - symbol ± 0 - oraz czy pomiar jest stabilny - symbol $\blacktriangleleft\blacktriangleright$; jeżeli nie, należy nacisnąć przycisk ± 0 .


W przerwach pomiędzy seriami pomiarów nie należy wyłączać wagi z sieci. Zaleca się wyłączenie wyświetlacza wagi przyciskiem **ON/OFF**. Po ponownym naciśnięciu przycisku **ON/OFF** waga jest gotowa do kolejnych ważen.

15.3. Wypoziomowanie wagi

Waga została wyposażona w AutoLEVEL System, który zapewnia monitorowanie poziomu wagi. Rozwiązanie to pozwala na ciągłe śledzenie poziomu wagi w trakcie jej pracy, co jest sygnalizowane w prawym górnym rogu wyświetlacza. System nadzoruje wypoziomowanie wagi. W przypadku zmiany poziomu system sygnalizuje to na wyświetlaczu: poprzez zmianę położenia wskaźnika poziomu i/lub poprzez uruchomienie alarmu oraz przejście do ekranu ustawienia poziomu wagi.

Procedura poziomowania wagi

- Nacisnąć ikonę stanu poziomowania  w prawym górnym rogu wyświetlacza.
- Wyświetlacz wagi pokaże panel kontrolny funkcji poziomowania. Obok widoku poziomnicy wyświetlany jest widok wagi.

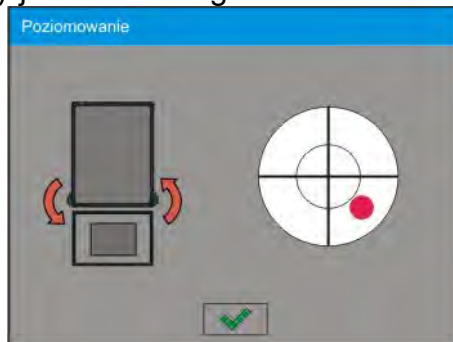

- Wypoziomować wagę, kręcąc jej nóżkami w sposób sugerowany na ekranie pulsującymi piktogramami  – punkt poziomu będzie przesuwiał się w kierunku środka okręgu.
- Gdy punkt znajdzie się w wewnętrznym okręgu „widoku poziomnicy”, to nastąpi zmiana jego koloru z czerwonego na zielony – waga jest prawidłowo wypoziomowana.

Uwaga:

Waga jest wyposażona w mechanizm Automatycznej Kontroli Poziomu. Opis działania znajduje się w punkcie 34.8 instrukcji.

15.4. Zerowanie wagi

W celu wyzerowania wskazania masy należy wcisnąć przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie masy równe zero oraz pojawią się symbole: ± 0 i . Wyzerowanie jest jednoznaczne z wyznaczeniem nowego punktu zerowego, traktowanego przez wagę jako dokładne zero. Zerowanie jest możliwe tylko przy stabilnych stanach wyświetlacza.

Uwaga:

Zerowanie stanu wyświetlacza możliwe jest tylko w zakresie do $\pm 2\%$ obciążenia maksymalnego wagi. Jeżeli wartość zerowana będzie większa niż $\pm 2\%$ obciążenia maksymalnego, wyświetlacz pokaże komunikat **Err2**.

15.5. Tarowanie wagi

W celu wyznaczenia masy netto należy położyć opakowanie ładunku i po ustabilizowaniu się wskazania - nacisnąć przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie masy równe zero oraz pojawią się symbole: **Net** i . Po zdjęciu ładunku i opakowania na

wyświetlaczu wyświetli się wskazanie równe sumie wytarowanych mas ze znakiem minus. Można również przypisać wartość tary do towaru w bazie danych, wówczas waga automatycznie, po wybraniu towaru, pobierze z bazy informacje o wartości tary.

Uwaga:

*Wytarowanie wartości ujemnej jest niedopuszczalne. Próba wytarowania wartości ujemnej spowoduje pojawienie się komunikatu o błędzie **Err3**. W takim przypadku należy wyzerować wagę i ponownie wykonać procedurę tarowania.*

Ręczne wprowadzanie tary

Procedura:

- Znajdując się w dowolnym trybie pracy, nacisnąć przycisk szybkiego dostępu .
- Zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna.
- Wprowadzić wartość tary i nacisnąć przycisk .
- Waga powróci do trybu ważenia, a na wyświetlaczu pojawi się wartość wprowadzonej tary ze znakiem „-”.

Kasowanie tary

Pokazaną na wyświetlaczu wartość tary można usunąć poprzez naciśnięcie przycisku ZERO na elewacji wagi lub wykorzystując przycisk programowalny <Wyłącz tarę>.

Procedura 1 - po zdjęciu ładunku wytarowanego z szalki:

- Nacisnąć przycisk ZERO.
- Zostanie usunięty znacznik NET, ustalono nowy punkt zerowy wagi.

Procedura 2 - gdy ładunek wytarowany znajduje się na szalce:

- Nacisnąć przycisk ZERO.
- Zostanie usunięty znacznik NET, ustalono nowy punkt zerowy wagi.
- Gdy wartość tary przekracza 2% obciążenia maksymalnego, wyświetlacz pokaże komunikat – Err – (operacja niemożliwa do wykonania).

Procedura 3 - gdy ładunek wytarowany znajduje się na szalce lub po zdjęciu ładunku wytarowanego z szalki:


- Nacisnąć przycisk programowalny <Wyłącz tarę> .
- Zostanie usunięty znacznik NET.
- Wyświetlacz pokaże wartość tary.
- Naciskając przycisk <Przywróć tarę> , można ponownie przywrócić wartość tary ostatnio używanej.

15.6. Wykorzystanie współczynnika kompensacji wyporności powietrza

Aplikacja umożliwia korekcję błędów pomiaru masy podczas:

1. Ważenia materiałów o gęstości znacznie różniącej się od gęstości wzorca, jakim waga była adjustowana. Standardowo waga jest adjustowana wzorcem stalowym o gęstości $\sim 8.0\text{g/cm}^3$ lub mosiężnym o gęstości $\sim 8.7\text{g/cm}^3$. Jeżeli ważone są inne materiały, należy uwzględnić zależność widoczną na wykresie.

Wartość błędu w zależności od gęstości ważonej próbki:

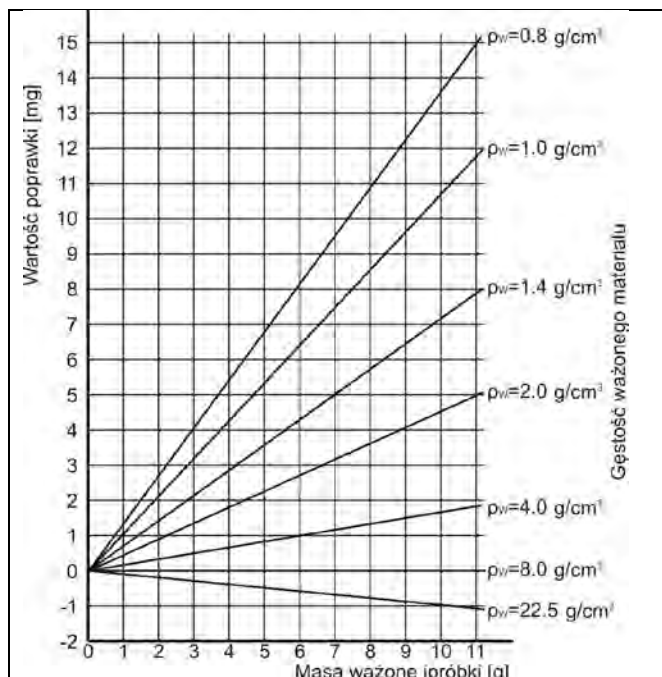

Schemat pokazuje wielkości poprawek dla masy w zależności od gęstości ważonego materiału, zakładając gęstość powietrza jako stałą wartość 1.2 kg/m^3 .

2. Badania zmian masy próbki w czasie kilku godzin wówczas, gdy: masa próbki jest w miarę stała (niewielkie zmiany). Zakłada się wówczas, że znaczący wpływ na wynik końcowy mają zmiany gęstości powietrza, na który szczególny wpływ mają: ciśnienie, temperatura i wilgotność.

Aby pomiary były wiarygodne, należy określić gęstość powietrza laboratorium oraz gęstość ważonego materiału (w zależności od warunków środowiskowych, metody pomiaru i właściwości badanego materiału).

DZIAŁANIE

Program umożliwia dwa sposoby wykorzystania procedury kompensacji wyporności:

1. Wpisanie do pamięci wagi znanej wartości gęstości powietrza i znanej gęstości ważonej próbki.

Po wpisaniu tych wartości program automatycznie wylicza współczynnik korekcyjny dla ważonej masy i spowoduje wyświetlenie skorygowanej masy próbki.

Dla uniknięcia pomyłek wartość masy skorygowanej jest oznaczona specjalnym symbolem, eksponowanym na wyświetlaczu i na wydruku: <!>.

2. Półautomatyczne wyznaczenie przez program wagi wartości gęstości powietrza i wpisanie znanej gęstości ważonej próbki.

Do wyznaczania gęstości powietrza stosowany jest specjalny zestaw dwóch wzorców masy. Jeden z nich jest wykonany ze stali nierdzewnej, drugi z aluminium. Na podstawie wskazań masy dla obydwu wzorców program automatycznie wylicza gęstość powietrza i po zaakceptowaniu przez użytkownika wyliczenia wartość zostaje zapisana w pamięci. Później należy wpisać gęstości ważonej próbki do pamięci.

Po wprowadzeniu tych wartości program automatycznie wylicza współczynnik korekcyjny dla ważonej masy i powoduje wyświetlenie skorygowanej masy próbki.

Tak jak poprzednio, wartość masy skorygowanej jest oznaczona specjalnym symbolem, eksponowanym na wyświetlaczu i na wydruku: <!>.

Procedura kompensacji wyporności jest wyłączana i włączana z poziomu menu użytkownika. Procedura działa tylko w modzie Ważenie.

URUCHOMIENIE DZIAŁANIA KOREKCJI WYPORU POWIETRZA

Procedura:

- Z pozycji okna głównego nacisnąć szare pole informacyjne.
- Wybrać opcję <Ustawienia>.
- Następnie należy wybrać parametr  Kompensacja wyporu powietrza>.
Dostępne ustawienia:
 - Kompensacja wyporności powietrza – TAK/NIE.
 - Gęstość próbki (miejsce do wpisania wartości gęstości ważonej próbki). Jeśli użytkownik używa towarów z bazy, to po wybraniu towaru w ważeniu automatycznie wartość jego gęstości jest pobierana z danych towaru i wpisywana w oknie.
 - Gęstość powietrza – w opcji tej wybiera się sposób wprowadzania gęstości powietrza do kompensacji wyporu.

Ustawienia:

WARTOŚĆ – po wybraniu opcji zostaje otwarte okno, w którym należy wpisać znaną wartość gęstości powietrza (np. wyznaczoną innymi metodami). Po wpisaniu wartości jest ona przyjmowana podczas kompensacji. Wartość ta jest przypisywana automatycznie po przeprowadzeniu procedury wyznaczania gęstości powietrza (po jej zakończeniu przyciskiem ).

ONLINE – po wybraniu opcji waga pobiera na bieżąco wartość gęstości powietrza z czujnika THB, jeśli jest podłączony do wagi lub z czujników wewnętrznych zamontowanych w wadze.

Jeśli waga jest wyposażona w oba typy czujników (THB i wewnętrzne), to nadrzędną wartością jest wartość z czujników THB, a parametry **Setup/Środowisko/Moduł środowiskowy** należy ustawić na wartość **ZAPIS lub ZAPIS i ALERTY**.

Jeżeli waga jest wyposażona tylko w jeden zestaw czujników temperatury, wilgotności i ciśnienia, wtedy dla poprawnej pracy ONLINE należy wprowadzić następujące ustawienia wagi:

- tylko czujniki wewnętrzne – **Setup/Środowisko/Moduł środowiskowy** na wartość BRAK,
- tylko zewnętrzny moduł THB – **Setup/Środowisko/Moduł środowiskowy** na wartość ZAPIS lub ZAPIS i ALERTY.

Dodatkowo, dla poprawnej współpracy modułu THB z wagą, należy ustawić parametry transmisji portu, do którego jest podłączony moduł, na wartości zgodne z parametrami modułu środowiskowego, które umieszczone są na tabliczce znamionowej modułu THB.

Po powrocie do ważenia na wyświetlaczu pojawi się dodatkowy symbol <!>, jak na rysunku poniżej. Od tej chwili wyświetlana masa będzie korygowana z uwzględnieniem wyporu powietrza i gęstości próbki.



Aby wynik był skorygowany o prawidłową wartość, należy do pamięci wagi wprowadzić prawidłowe wartości gęstości powietrza i gęstości ważonej próbki.

Uwaga:

Jeżeli po ustawieniu opcji <KOMPENSACJA WYPORU POWIETRZA> na wartość <ONLINE>, na wyświetlaczu nie pojawi się symbol <!>; oznacza to, że w parametrach **Setup/Środowisko/Moduł środowiskowy** ustawiono wartość ZAPIS lub ZAPIS i ALERTY, a fizycznie do wagi nie jest podłączony moduł środowiskowy THB lub parametry

współpracy dla tego modułu są niewłaściwie ustawione. Należy podłączyć moduł do portu COM 1 lub COM 2 i ustawić właściwie parametry współpracy, które znajdują się na tabliczce modułu.

15.7. Dodatkowe parametry związane z ważeniem

Poprzez zmianę ustawień funkcji związanych z ważeniem można zaprogramować określony sposób działania wagi.

Procedura:

1. Nacisnąć szare pole informacyjne.
2. Wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, Profil.
3. Nacisnąć odpowiednie menu i wybrać ten element, który ma podlegać modyfikacji.

Menu <Ustawienia> - dodatkowe opcje związane z ważeniem,

Menu <Przyciski> - definiowanie przycisków szybkiego dostępu,

Menu <Informacje> - wybór informacji, które zostaną pokazane w polu Info,

Menu <Wydruki> - wybór typu wydruku,

Menu <Profil> - wybór profilu, które będzie wykorzystywany podczas pracy,

Menu <USTAWIENIA> zawiera dodatkowe opcje związane z ważeniem, takie jak:

– Tryb tary

• POJEDYNCZA:

wartość pamiętana po pojedynczym naciśnięciu przycisku TARE, kolejne naciśnięcie przycisku ustala nową wartość tary. Wybór towaru lub opakowania, któremu jest przypisana wartość tary powoduje wykasowanie poprzedniej tary.

• SUMA AKTUALNYCH:

sumowanie aktualnie wprowadzonych wartości tar dla towaru i opakowania (wynikające z wyboru towaru i opakowania z bazy danych), z możliwością dodania do tej sumy wartości tary wpisanej w sposób ręczny. Po ponownym ustawieniu wartości tary dla towaru lub opakowania wartość tary wpisanej w sposób ręczny zostanie wyłączona.

• SUMA WSZYSTKICH:

sumowanie wszystkich, kolejno wprowadzanych wartości tar.

• AUTOTARA

Zasada działania:

Każdy pierwszy pomiar po osiągnięciu stanu stabilnego jest tarowany.

Wyświetlacz pokaże napis NET, po czym można określić masę netto. Po zdjęciu obciążenia i powrocie wagi w strefę autozera program automatycznie kasuje wartość tary.

– Automatyczny wydruk stopki

Dostępne opcje:

TRYB - Brak – wydruk ręczny stopki.

Suma pomiarów – warunkiem wydruku stopki będzie przekroczenie wartości masy wpisanej w parametrze <Próg>.

Liczba pomiarów – warunkiem wydruku stopki będzie wykonanie określonej ilości pomiarów (serii) w parametrze <Próg>.

PRÓG – określenie wartości progu warunkującego wydruk stopki.

Dla opcji <Suma pomiarów> wartość będzie definiowana w jednostce masy [g], a dla opcji <Liczba pomiarów> wartość będzie niemianowana, określająca ilość pomiarów.

– Tryb wydruku/zatwierdzenia

• PRZYCIISK WYDRUKU/ZATWIERDZENIA, (sterowanie ręczne):

Nigdy – wydruk nieaktywny.

Pierwszy stabilny – rejestrowany jest pierwszy pomiar stabilny.

- Każdy stabilny – akceptowane są wszystkie pomiary stabilne.
- Każdy – wydruk wszystkich pomiarów (stabilnych i niestabilnych), w wagach legalizowanych tylko wyniki stabilne (tak, jak dla ustawienia <Każdy stabilny>).
- TRYB AUTOMATYCZNY
 - Nigdy – wydruk nieaktywny.
 - Pierwszy stabilny – rejestrowany jest pierwszy pomiar stabilny po położeniu ładunku na szalce, rejestracja kolejnego stabilnego pomiaru nastąpi dopiero po zdjęciu z szalki obciążenia, „zejściu” wskazania poniżej wartości ustawionego progu i ponownym postawieniu kolejnego ładunku na szalce wagi.
 - Ostatni stabilny – rejestrowany jest ostatni stabilny pomiar, który nastąpił przed zdjęciem obciążenia. Zapis następuje po zdjęciu obciążenia z szalki i „zejściu” wskazania poniżej ustawionego progu.
 - Z interwałem – wybranie tej opcji uruchamia pracę automatycznego wydruku i zapisu w bazie WAŻEŃ wskazań wagi cyklicznie z określonym interwałem. Interwał ustawia się w [min] w parametrze <INTERWAŁ>. Zakres ustawienia interwału wynosi od 1 min do 9999 min.

UWAGA:

Drukowany i zapamiętywany jest każdy wynik (stabilny i niestabilny gdy waga jest nielegalizowana, oraz tylko stabilny gdy waga jest legalizowana).

Praca automatyczna z interwałem rozpoczyna się od chwili włączenia opcji. Jako pierwszy pomiar jest wydrukowany i zapamiętany pierwszy wynik stabilny, który jest większy od wartości PROGDU. Następne pomiary są drukowane z częstotliwością ustawionego INTERWAŁU. Aby zakończyć pracę automatyczną z interwałem należy wyłączyć opcję.

- PRÓG:
 - wartość masy dla działania wydruku automatycznego, ustawiany w gramach.
- INTERWAŁ
 - częstotliwość zapisu wskazania dla pracy automatycznej z interwałem
- **Wydruk**
 - Zawiera typ wydruku, jaki będzie związany z modelem pracy. Wydruk następuje po naciśnięciu przycisku PRINT na elewacji wagi.
 - Dostępne opcje:
 - WYDRUK STANDARDOWY:
 - Umożliwia zadeklarowanie zawartości wydruków: NAGŁÓWKA, WAŻENIA i STOPKI.
 - Elementy, dla których zaznaczono opcję <TAK> w menu, będą drukowane po naciśnięciu odpowiedniego przycisku.
 - WYDRUK NIESTANDARDOWY
 - Umożliwia wybranie wydruku niestandardowego, który znajduje się w bazie danych, w menu <WYDRUKI> lub zaprojektowanie nowego wydruku, który automatycznie zostanie dodany do bazy danych.

Uwaga:

Sposób projektowania wydruków opisany jest w pkt. 14.5.

- **Kompensacja wyporności powietrza**
 - Zawiera parametry, dzięki którym użytkownik ma możliwość włączenia kompensacji oraz wprowadzenia danych dotyczących gęstości ważonej próbki i gęstości powietrza.

Uwaga: funkcja działa tylko w modzie Ważenie.

Opis działania i ustawień znajduje się w poprzednim punkcie instrukcji.

15.8. Minimalna naważka

W ustawieniach modu ważenia znajduje się funkcja <Minimalna naważka>. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wprowadzeniu do Bazy danych <Minimalne naważki> danych dotyczących metod wyznaczania minimalnej naważki oraz wartości minimalnych naważek dla danej metody. W standardowej wersji urządzenia baza ta nie jest uzupełniona.

Czynności związane z wyznaczaniem minimalnych naważek i wprowadzaniem danych do <Bazy danych/Minimalne naważki> mogą być wykonane wyłącznie przez uprawnionego pracownika firmy RADWAG.

Jeżeli użytkownik będzie korzystał z tej funkcji, a nie są wprowadzone do w menu wagi dane dotyczące minimalnych naważek, należy zwrócić się o pomoc do najbliższego przedstawicielstwa firmy RADWAG.

Uprawniony pracownik ustala przy pomocy wzorców masy, w miejscu zainstalowania wagi, według wymogów wynikających ze stosowanego systemu zapewnienia jakości, obciążenia minimalne dla określonych wartości mas opakowań. Uzyskane wartości wprowadza do oprogramowania wagi <Bazy danych/Minimalne naważki>.

Dla danej metody wyznaczania minimalnej naważki możliwe jest zdefiniowanie kilku wartości tar wraz z przynależnymi im wartościami naważek minimalnych oraz terminu ważności dokonanych pomiarów i wprowadzonych danych. Nastawy te nie mogą być zmienione przez użytkownika.

Użycie funkcji <Minimalna naważka> gwarantuje, że wyniki ważenia mieszczą się w obrębie ustalonych tolerancji, zgodnie z wymogami zastosowanego systemu zapewnienia jakości w danej firmie.

UWAGA: Funkcja działa tylko w modzie Ważenie.

Dostępne opcje:

- **METODA**

Jest to oznaczenie stosowanego standardu zapewnienia jakości. Po naciśnięciu pola zostanie wyświetlone okno z listą wprowadzonych do pamięci wagi metod, według których były wyznaczone minimalne naważki. Wprowadzenie nowej metody jest możliwe tylko z poziomu menu <Bazy danych/Minimalne naważki>.

- **TRYB**

Blokuj – po wybraniu tej opcji w czasie ważenia będą wyświetlane odpowiednie ikony na wyświetlaczu, informujące użytkownika, czy ważona masa jest poniżej, czy powyżej minimalnej naważki. Program wagi uniemożliwi zatwierdzenie pomiaru, który znajdzie się poniżej wartości minimalnej naważki.

Ostrzegaj – po wybraniu tej opcji w czasie ważenia będą wyświetlane odpowiednie ikony na wyświetlaczu, informujące użytkownika, czy ważona masa jest poniżej, czy powyżej minimalnej naważki. Użytkownik może zatwierdzić pomiar, który jest poniżej wartości minimalnej naważki, ale na wydruku będzie on poprzedzony znakiem gwiazdki: (*).

Uwaga:

Sposób wprowadzania metod minimalnej naważki opisany jest w pkt. 29.14 instrukcji <Bazy danych/Minimalna naważka>. Uprawnienia do wprowadzania nowych wartości minimalnych naważek ma tylko uprawniony pracownik firmy RADWAG.

Ważenie z wykorzystaniem funkcji <MINIMALNA NAWAŻKA>

Jeżeli podczas ważenia użytkownik chce uzyskać informację, czy dany pomiar znajduje się powyżej minimalnej naważki dla danego przedziału ważenia, musi zostać włączona funkcja <Minimalna naważka> w ustawieniach modu Ważenie.

Procedura:

1. Nacisnąć szare pole informacyjne.
2. Wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, Profil.
3. Wybrać menu <Ustawienia> - dodatkowe opcje związane z ważeniem.
4. Wcisnąć pole <Minimalna naważka>.
5. Zostanie wyświetlone okno, w którym nacisnąć pole <Metoda>.



6. Zostanie wyświetlone okno z listą zapisanych w bazie danych wagi metod.
7. Należy wybrać jedną z nich.
8. Program wróci do poprzedniego okna menu.
9. Nacisnąć pole <Tryb>.
10. Zostanie wyświetlone okno z możliwościami wyboru ustawień, należy wybrać jedną z opcji:

Blokuj – po wybraniu tej opcji w czasie ważenia będą wyświetlane odpowiednie ikony na wyświetlaczu, informujące użytkownika, czy ważona masa jest poniżej, czy powyżej minimalnej naważki. Program wagi uniemożliwi zatwierdzenie pomiaru, który znajdzie się poniżej wartości minimalnej naważki.

Ostrzegaj – po wybraniu tej opcji w czasie ważenia będą wyświetlane odpowiednie ikony na wyświetlaczu, informujące użytkownika czy ważona masa jest poniżej, czy powyżej minimalnej naważki. Użytkownik może zatwierdzić pomiar, który znajdzie się poniżej wartości minimalnej naważki, ale na wydruku będzie on poprzedzony znakiem gwiazdki: (*).

11. Po wybraniu ustawień należy wyjść z menu.
12. W polu masy wyświetlacza głównego pojawi się dodatkowa ikona informacyjna. Ikona zmienia się podczas ważenia, obrazując położenie masy ważonej próbki w stosunku do wartości zadeklarowanej minimalnej naważki.

masa poniżej określonej masy minimalnej naważki dla danego zakresu tary	masa powyżej określonej masy minimalnej naważki dla danego zakresu tary

Znaczenie ikon dla funkcji minimalnej naważki:

	Masa poniżej wybranej wartości minimalnej naważki.
--	--

	Masa powyżej lub równa wybranej wartości minimalnej naważki.
	Masa poniżej wybranej wartości minimalnej naważki. Piktogram zegarka informuje o zbliżającym się wygaśnięciu terminu ważności minimalnej naważki (pojawia się na 2 tygodnie przed zadeklarowanym terminem).
	Masa powyżej wybranej wartości minimalnej naważki. Piktogram zegarka informuje o zbliżającym się wygaśnięciu terminu ważności minimalnej naważki (pojawia się na 2 tygodnie przed zadeklarowanym terminem).
	Termin ważności dla wybranej metody minimalnej naważki został przekroczony. Należy dokonać zmian w nastawach dla tej minimalnej naważki. Uprawnienia do dokonywania zmian mają tylko wyznaczeni pracownicy firmy RADWAG.

Uwaga:

Jeżeli zostały zaprogramowane więcej niż jedna wartość tary odniesienia (i przynależne im obciążenia minimalne), to wskazywana wartość przechodzi automatycznie do zakresu, który odpowiada ciężarowi tarowanego pojemnika. Jednocześnie zmienia się także wymagane obciążenie minimalne.

15.9. Współpraca z TITRATORAMI

Aby zapewnić prawidłową współpracę z TITRATORAMI, należy ustawić w zawartości wydruku standardowego opcję <Masa dla titratora> na wartość <Tak>, równocześnie wyłączając pozostałe zmienne w tym wydruku.


**Projekt wydruku
ważenia**

20	 MN-Metoda	Nie
21	 Tara referencyjna	Nie
22	 Minimalna naważka	Nie
23	 Status minimalnej naważki	Nie
24	 Masa dla titratora	Tak
25	 Wydruk niestandardowy	Brak

 Ważenie
Home

Service 01.05.09 04:09



0.0000 g

Po włączeniu opcji w górnym pasku okna głównego pojawi się ikona informująca użytkownika o specjalnym formacie wydruku masy, który będzie przyjmowany przez TITRATORY.

16. LICZENIE SZTUK

< **Liczenie sztuk**> jest modem pracy pozwalającym na liczenie drobnych przedmiotów o jednakowych masach. Liczenie odbywa się na podstawie znanej masy pojedynczej sztuki, którą podano na jeden ze sposobów:

- o wyznaczono z pewnej ilości sztuk wzorca,
- o pobrano z bazy towarów,
- o wpisano ręcznie jako wartość numeryczną.

Procedura uruchomienia modu pracy:

Znajdując się w głównym oknie programu, nacisnąć ikonę , umieszczoną na górnej belce okna, po czym zostanie otwarte podmenu <Mody pracy>, zawierające listę modów do wyboru. Należy wybrać mod < Liczenie sztuk>, program automatycznie powróci do okna głównego, wyświetlając na górnej belce okna ikonę .

Po wybraniu funkcji **Liczenia detali na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski oraz informacje wyświetlane w polu Info:**


	1. Setup – dostęp do menu wagi. 2. Drukuj nagłówek – wydruk informacji zadeklarowanej w nagłówku. 3. Drukuj stopkę – wydruk informacji zadeklarowanej w stopce. 4. Baza towarów – wybór towarów z bazy towarów. 5. Podaj masę 1 sztuki – pole do wpisania masy pojedynczego detalu. 6. Wyznacz masę 1 sztuki – wyznaczenie masy detalu z próbki o dowolnej liczności np. z 10 szt., 24 szt. itp.
--	--

16.1. Ustawienia dodatkowe związane z liczeniem detali

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do tych ustawień opisany jest poniżej.

Procedura:

1. Nacisnąć szare pole informacyjne, na wyświetlaczu zostanie pokazane menu.
2. Nacisnąć opcję <Ustawienia>, na wyświetlaczu zostaną wyświetlone funkcje związane z liczeniem detali:

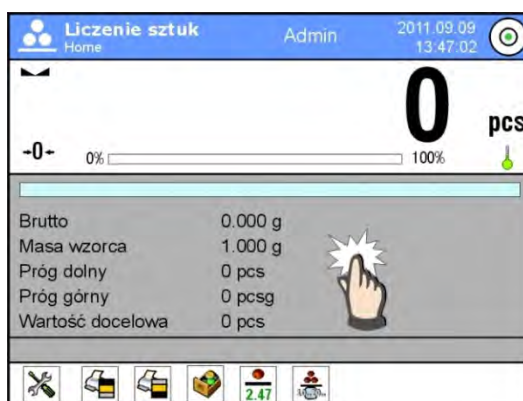

Z procesem zliczania detali związane są następujące funkcje:

- **ACAI** – Automatyczna Korekta Dokładności:
 - o TAK – masa detalu będzie aktualizowana.
 - o NIE – masa detalu nie będzie aktualizowana.

Zasady działania funkcji ACAI:

1. Ilość sztuk (po dołożeniu), znajdująca się na szalce, musi być większa niż była do tej pory.
 2. Ilość sztuk (po dołożeniu), znajdująca się na szalce, musi być mniejsza niż podwójna ilość, która była widoczna na wyświetlaczu przed dołożeniem.
 3. Aktualna ilość sztuk musi się mieścić w polu tolerancji $\pm 0,3$ od wartości całkowitej.
 4. Wynik musi być stabilny.
 - **Minimalna masa referencyjna:** 1dz, 2dz, 5dz, 10dz; jest to minimalna wartość masy, jaką powinien mieć pojedynczy detal. Gdy ten warunek nie będzie spełniony, proces liczenia nie rozpocznie się.
- **Kontrola wyniku:**
 - o TAK – drukowane i zapisywane będą tylko te pomiary, które zawarte są pomiędzy progami Lo i Hi.
 - o NIE – drukowane i zapisywane będą wszystkie pomiary.

Pozostałe funkcje w menu <ustawienia>:

- Tryb tary,
- Automatyczny wydruk stopki,
- Tryb wydruku/zatwierdzenia,
- Wydruki.

Zasadę ustawiania pozostałych funkcji menu opisuje pkt. 15.8 *Dodatkowe parametry związane z ważeniem*.

16.2. Ustawienie masy wzorca przez wpisanie znanej masy detalu

Procedura:

- Nacisnąć przycisk  Podaj masę sztuki>, zostanie wyświetlone okno edycyjne <Masa wzorca> z klawiaturą ekranową.
- Wprowadzić żadaną wartość i potwierdzić przyciskiem , co spowoduje przejście do modu pracy < Liczenie sztuk> z automatycznym ustawieniem masy pojedynczego detalu.

Uwaga:

W przypadku wpisania masy jednostkowej mniejszej niż 0,1 działki odczytowej program wagowy wyświetli komunikat: <Wartość zbyt mała>.

16.3. Ustawienie masy wzorca przez wyznaczenie masy detalu

Procedura:

- Postawić pojemnik na szalce i wytarować jego masę.
- Nacisnąć przycisk  Wyznacz masę sztuki>, zostanie wyświetlone okno edycyjne <Liczność wzorca> z klawiaturą ekranową.
- Wprowadzić żadaną wartość i potwierdzić przyciskiem , zostanie wyświetlony komunikat: <Postaw sztuk: xx> (gdzie xx – wcześniej wprowadzona wartość).

- Położyć zadeklarowaną ilość sztuk na szalce i gdy wynik będzie stabilny (wyświetlany jest symbol ) , zatwierdzić ich masę przyciskiem .
- Program wagi automatycznie obliczy masę pojedynczego detalu i przejdzie do trybu  Liczenie sztuk>, podając na wyświetlaczu ilość sztuk, które znajdują się na szalce (**pcs**).

Uwaga:

Należy pamiętać o tym, że:

- Masa całkowita wszystkich sztuk położonych na szalce nie może przekraczać maksymalnego zakresu ważenia wagi.
- Masa całkowita wszystkich sztuk położonych na szalce wagi nie może być mniejsza od wartości zadeklarowanej w parametrze **<Minimalna masa referencyjna>**. Jeżeli nie jest spełniony powyższy warunek, waga wyświetli komunikat: **<Za mała masa próbki>**.
- Masa pojedynczej sztuki nie może być mniejsza od **0,1** **działki odczytowej wagi**. Jeżeli nie jest spełniony powyższy warunek, waga wyświetli komunikat: **<Za mała masa sztuki>**.

16.4. Pobranie masy detalu z bazy danych

Każdy towar w bazie danych określany jest przez szereg informacji, które go identyfikują. Jedną z nich jest masa, którą wykorzystuje się podczas liczenia detali.

Procedura:

Znajdując się w modzie  Liczenie sztuk>, nacisnąć przycisk  Baza towarów>, a następnie wybrać żądany towar z listy.

Wprowadzanie masy wzorca do pamięci wagi

Masę wzorca dla pojedynczej sztuki należy wprowadzić do bazy towarów w następujący sposób:

- a) Nacisnąć przycisk <Setup>, a następnie przycisk <Bazy danych> i przejść do <Bazy Towarów>.
- b) W Bazie Towarów nacisnąć przycisk <Towary>.
- c) Nacisnąć nazwę towaru i wprowadzić modyfikację w polu [5] <Masa>.
- d) Wrócić do modu <Liczenie sztuk>.

Gdy w Bazie danych nie ma żadnych elementów:


- a) Nacisnąć przycisk <Setup>, a następnie przycisk <Bazy danych> i przejść do <Bazy Towarów>.
- b) W Bazie Towarów nacisnąć przycisk  Dodaj>.
- c) Uzupełnić pola związane z towarem, w tym pole nr [5] <Masa>.
- d) Wrócić do modu <Liczenie sztuk>.

16.5. Aktualizacja masy detalu w bazie danych

Wyznaczoną masę jednostkową detalu można przypisać do towaru w bazie danych. Taką operację stosuje się wówczas, gdy wykorzystywana jest funkcja ACAI (Automatyczna Korekta Dokładności), celem wyznaczenia masy jednostkowej z dużą dokładnością.

Procedura:

- a) Wyznaczyć masę jednostkową detalu.
- b) Nacisnąć przycisk  Baza towarów>.
- c) Przytrzymać palec na nazwie towaru, którego masę jednostkową trzeba aktualizować.
- d) Zostanie wyświetlone menu kontekstowe.
- e) Należy wybrać opcję <Przypisz wzorzec>, masa wzorca zostanie dla danego towaru zapisana pod pozycją <Masa>.

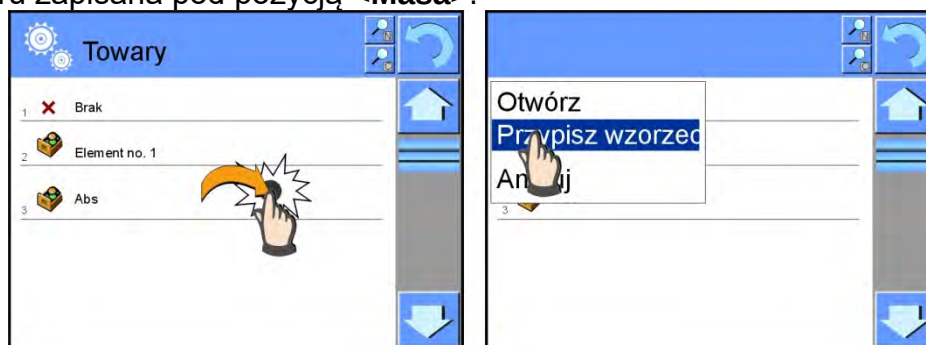

16.6. Procedura liczenia detali

Pierwszym etapem jest uzyskanie informacji o masie jednostkowej detalu. Należy wybrać jedną z opcji:

- Wpisać wartość dla masy jednostkowej detalu (pkt. 16.3), a następnie położyć detale na szalce, wyświetlacz pokaże ich ilość.
- Wyznaczyć masę detalu z wzorca o pewnej liczności (pkt. 16.4), waga dodatkowo wyświetli znacznik aktywnej funkcji ACAI  (jeżeli jest załączona). Położyć detale na szalce wagi, wyświetlacz pokaże ich ilość.
- Pobrać masę jednostkową detalu z bazy danych (pkt. 16.5), wybierając towar. Położyć detale na szalce wagi, wyświetlacz pokaże ich ilość.

Uwaga: Wszystkie elementy dodatkowe (opakowanie) powinny być wytarowane przed rozpoczęciem procesu liczenia.

16.7. Dowożenie funkcji liczenia detali

Proces liczenia detali może być wspomagany funkcją dowożenia – kontroli, czy wskazanie mieści się pomiędzy progami akceptacji.

Dowożenie wymaga podania dwóch wartości progowych, opisanych jako:

- Próg dolny [Min= ... szt.],
- Próg górny [Max= ... szt.].

oraz ustawienie opcji <TAK> dla Barografu, który pokazuje zależność: AKTUALNA ILOŚĆ SZTUK/PROGI DOWOŻANIA.

Definiowanie wartości progów Min/Max jest możliwe w Bazie Danych podczas edycji



Towaru lub poprzez przycisk szybkiego dostępu < Definiowanie progów>.

Procedura:

- Nacisnąć szare pole Info, a następnie pole <Informacje>.
- Ustawić dla Barografu opcję <TAK>, wrócić do funkcji liczenia detali.
- Nacisnąć szare pole Info, a następnie pole <Przyciski>.
- Przypisać do jednego z przycisków ekranowych opcję <Progi Dowożenia>.
- Wrócić do funkcji liczenia detali.

- Nacisnąć przycisk  Progi Doważania> i wpisać wartość dla Progu Dolnego i Progu Górnego, następnie wrócić do funkcji liczenia.
- Na wyświetlaczu pod wynikiem ważenia zostanie pokazany bargraf, który poprzez kolorystykę pokazuje aktualny stan ilości sztuk:
 - o kolor żółty: aktualna ilość sztuk mniejsza niż Próg Dolny,
 - o kolor zielony: aktualna ilość sztuk zawiera się pomiędzy wartościami Progowymi,
 - o kolor czerwony: aktualna ilość sztuk większa niż Próg Górny.



16.8. Dozowanie w funkcji liczenia detali

Proces liczenia detali może być wspomagany funkcją dozowania - kontroli, czy wskazanie wagi nie przekroczy wartości docelowej.

Dozowanie wymaga podania wartości, która ma zostać osiągnięta np. 100 szt. oraz tolerancji procentowej dla niej. Wartość docelowa jest pokazywana jako znacznik na bargrafie. Definiowanie wartości dla masy docelowej wykonuje się poprzez Przycisk

Szybkiego Dostępu < Wartość Docelowa>.

Procedura:

- Nacisnąć szare pole Info, a następnie nacisnąć pole <Informacje>.
- Ustawić dla bargrafu opcję <TAK>, wrócić do funkcji liczenia detali.
- Nacisnąć szare pole Info, a następnie nacisnąć pole <Przyciski>.
- Przypisać do jednego z przycisków ekranowych opcję <Wartość Docelowa>.
- Wrócić do funkcji liczenia detali.
- Nacisnąć przycisk < Wartość Docelowa> i podać, ile sztuk należy osiągnąć.
- Jeżeli wykorzystywana jest tolerancja, podać jej wartość (zakres 0 – 100%).
- Na wyświetlaczu pod wynikiem ważenia zostanie pokazany bargraf, na którym widnieje:
 - o aktualny stan ilości sztuk (sygnalizacja kolorami – patrz: pkt. 16.7),
 - o wartość Masy Docelowej (czarny znacznik).




Uwaga:

Funkcje doważania i dozowania mogą działać jednocześnie podczas liczenia sztuk, w takim przypadku rolę tolerancji dozowania przejmują progi Lo i Hi z doważania.

17. DOWAŻANIE

<  **Doważanie** > jest modelem pracy wykorzystującym dwa progi (Dolny oraz Górny) do kontroli masy próbek. Zazwyczaj przyjmuje się, że masa jest poprawna, gdy zawiera się pomiędzy wartościami progowymi.

Po wybraniu funkcji **Doważanie** na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski oraz informacje wyświetlane w polu Info:

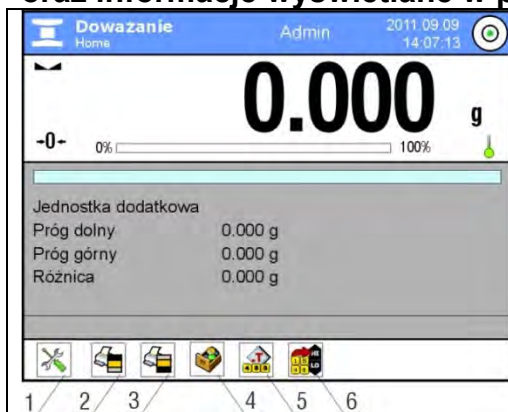

1. Setup – postęp do menu wagi.
2. Drukuj nagłówek – wydruk informacji zadeklarowanej w nagłówku.
3. Drukuj stopkę – wydruk informacji zadeklarowanej w stopce.
4. Baza towarów – wybór towarów z bazy towarów.
5. Ustaw Tarę – pole do wpisania tary numerycznej.
6. Progi doważania – deklarowanie wartości dla Progu Dolnego i Górnego.

17.1. Wykorzystanie progów doważania

Wykorzystanie progów doważania może się odbywać poprzez:

- Wybór Towaru <  >, dla którego zadeklarowano Próg Dolny i Próg Górny.
- Wpisanie wartości numerycznej dla progów <  >, w tym przypadku progi nie są związane z żadnym towarem.

Procedura 1 – wybór towaru z Bazy Towarów:

- Nacisnąć przycisk Baz Towarów <  >.
- Z listy Towarów wybrać ten, który ma być ważony.
- Automatycznie w polu Info zostaną pokazane wartości progów.
- Na wyświetlaczu pod wynikiem ważenia zostanie pokazany bargraf, który poprzez kolorystykę pokazuje aktualny stan masy:
 - o kolor żółty: masa mniejsza niż Próg Dolny,
 - o kolor zielony: masa zawiera się pomiędzy wartościami Progowymi,
 - o kolor czerwony: masa większa niż Próg Górny.

PROCEDURA 2 – ręczne wpisanie progów doważania:

- Nacisnąć przycisk Progi Doważania <  >.
- Nacisnąć przycisk <Próg Dolny> i wpisać jego wartość.
- Zatwierdzić wybór przyciskiem <  >.
- Nacisnąć przycisk <Próg Górny> i wpisać jego wartość.
- Zatwierdzić wybór przyciskiem <  >.

Uwaga: Wartość progów powinna być większa niż wartość progów dolnego.

17.2. Ustawienia dodatkowe związane z doważaniem

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do nich opisany jest w punkcie 15.8 *Dodatkowe parametry związane z ważeniem*.

18. DOZOWANIE

<  **Dozowanie** > jest modem pracy, w którym odbywa się proces naważania próbki, aż do momentu, gdy osiągnie ona określoną masę docelową.

Po wybraniu funkcji Dozowanie na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski oraz informacje wyświetlane w polu Info:


	1. Setup – postęp do menu wagi. 2. Drukuj nagłówek – wydruk informacji zadeklarowanej w nagłówku. 3. Drukuj stopkę – wydruk informacji zadeklarowanej w stopce. 4. Baza towarów – wybór towarów z bazy towarów. 5. Ustaw Tarę – pole do wpisania tary numerycznej. 6. Wartość docelowa – deklarowanie wartości Docelowej .
---	--

18.1. Wykorzystanie bazy towarów w dozowaniu


Podczas ważenia można wykorzystywać masy docelowe, przypisane do towaru i zapisane w Bazie Towarów lub definiować tymczasowe, własne masy docelowe. W Bazie Towarów masę docelową określa pole Masa.

Procedura 1 – wybór towaru z Bazy Towarów:

- Nacisnąć przycisk Baz Towarów <  >.
- Z listy Towarów wybrać ten, który ma być ważony.
- Automatycznie w polu Info zostanie pokazana wartość docelowa oraz tolerancja.
- Wyświetlacz pokaże wartość docelową ze znakiem minus.

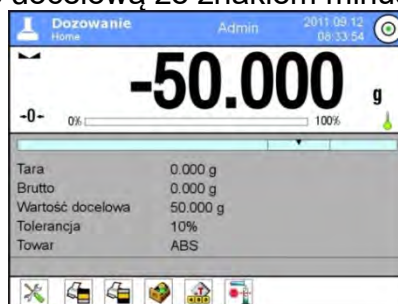


- Na wyświetlaczu pod wynikiem ważenia zostanie pokazany bargraf, który poprzez kolorystykę pokazuje aktualny stan masy:
 - o kolor żółty: masa mniejsza niż Wartość Docelowa – Tolerancja,
 - o kolor zielony: masa zawiera się w polu tolerancji Wartość Docelowa +/- Tolerancja,
 - o kolor czerwony: masa większa niż Wartość Docelowa + Tolerancja.

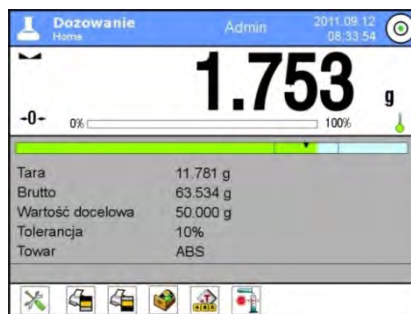

Procedura 2 – ręczne wpisanie progów dozowania:

- Nacisnąć przycisk <  Wartość Docelowa>.
- W widocznym oknie podać wartość docelową oraz tolerancję.
- Wrócić do ważenia.

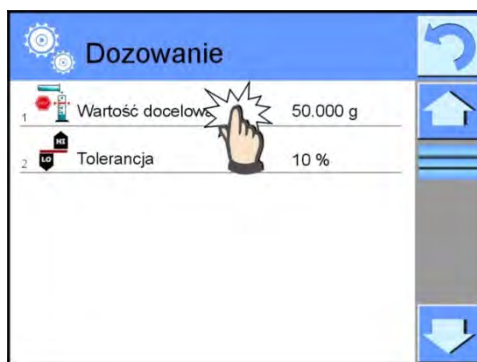

Uwaga:

Jeżeli wybrano wcześniej towar z Bazy Towarów, to pola Wartość Docelowa i Tolerancja będą zawierały wartości związane z towarem i można je zmienić.

18.2. Ustawienia dodatkowe związane z dozowaniem

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do nich opisany jest w punkcie 15.8 *Dodatkowe parametry związane z ważeniem*.

19. ODCHYLENIA WZGLĘDEM MASY WZORCA

Funkcja <  **Odchyłki**> jest procedurą, w wyniku której następuje porównanie ważonego ładunku z masą odniesienia. Wynik tej operacji jest wyrażony w [%]. Dodatkowo, wraz z odchyłkami, mogą być aktywne funkcje DOZOWANIA oraz DOWAŻANIA. Funkcje te oraz bargraf nie są automatycznie załączone.

Po wybraniu funkcji Odchyłki procentowe na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski oraz informacje wyświetlane w polu Info:



1. Setup – postępowanie do menu wagi.
2. Drukuj nagłówek – wydruk informacji zadeklarowanej w nagłówku.
3. Drukuj stopkę – wydruk informacji zadeklarowanej w stopce.
4. Baza towarów – wybór towarów z bazy towarów.
5. Odchyłki: podaj masę odniesienia.
6. Odchyłki: ustaw jako 100%.

19.1. Porównywanie próbek z masą wzorca

Porównywanie próbek z masą wzorca można realizować poprzez:

- Podanie masy wzorca: wykorzystanie przycisku  Podaj masę odniesienia>.
- Przyjęcie aktualnej masy, jaka znajduje się na szalce wagi jako wzorzec:
zastosowanie przycisku  Ustaw jako 100%>.
- Wybór towaru z bazy towarów, dla którego zdefiniowano parametr Masa:
zastosowanie przycisku  Baza Towarów>.

Procedura 1 – ręczne podanie masy odniesienia:

- Nacisnąć przycisk  Podaj Masę Odniesienia>.
- W widocznym oknie wpisać wartość i zatwierdzić ją przyciskiem .
- Wszystkie ważone towary będą porównywane z masą odniesienia, a wyświetlacz pokaże różnicę wyrażoną w [%].

Procedura 2 – przyjęcie aktualnej masy jako wzorca:

- Należy postawić próbkę na szalce wagi.
- Po ustabilizowaniu się wskazania nacisnąć przycisk  Ustaw jako 100%>.
- Wyświetlacz pokaże wskazanie 100.000%, masa przyjęta jako wzorzec została automatycznie wpisana do pola Masy Odniesienia.
- Zdjąć próbkę z szalki wagi.
- Wszystkie kolejno ważone próbki będą porównywane z masą odniesienia, a na wyświetlaczu będzie pokazywana różnica, wyrażona w [%], każdej z nich w stosunku do masy odniesienia.

Procedura 3 – wybór towaru z Bazy Towarów:

- Nacisnąć przycisk  Baza Towarów>, wybrać ten towar, który ma być ważony.
- Automatycznie w polu Info zostaną zmienione informacje dotyczące masy odniesienia.
- Związana z towarem masa odniesienia została automatycznie wpisana do pola Masy Odniesienia, które jest dostępna pod przyciskiem .
- Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 0.00 % (gdy szalka jest nieobciążona).
- Wszystkie kolejno ważone próbki będą porównywane z masą odniesienia, a na wyświetlaczu będzie pokazywana różnica, wyrażona w [%], każdej z nich w stosunku do masy odniesienia.


19.2. Doważanie, dozowanie w funkcji odchyłek procentowych

Wraz z funkcją Odchyłek mogą działać funkcje Doważania i Dozowania. Dostęp do nich uzyskuje się poprzez przypisanie odpowiedniej opcji do przycisku ekranowego. Wartości związane z tymi funkcjami należy podawać jako wartości procentowe.

Procedura:

1. Nacisnąć szare pole informacyjne.
2. Wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, Profil.

3. Nacisnąć menu <Przyciski>.
4. Na wyświetlaczu pojawi się lista przycisków ekranowych, funkcyjnych oraz czujników zbliżeniowych.
5. Nacisnąć wybrany element i przypisać do niego odpowiedni przycisk.

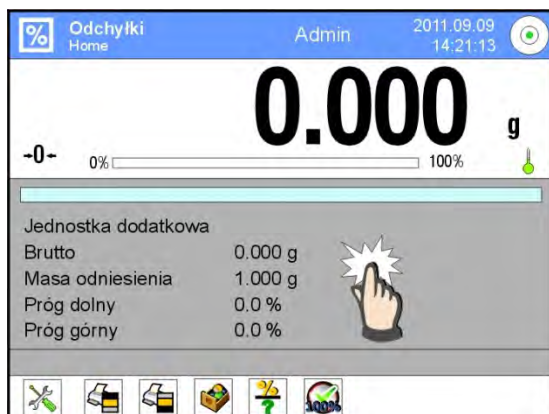

DOWAŻANIE

Wykorzystuje dwa progi wyrażone w [%] podczas kontroli masy próbki.

Procedura:

1. Nacisnąć przycisk Progi Doważania <>.
2. Nacisnąć przycisk Próg Dolny i wpisać jego wartość [%].
3. Zatwierdzić wybór przyciskiem <>.
4. Nacisnąć przycisk Próg Górny i wpisać jego wartość [%].
5. Zatwierdzić wybór przyciskiem <>.

Uwaga:

Wartość progu górnego powinna być większa niż wartość progu dolnego.

DOZOWANIE

Wykorzystuje Wartość Docelową, wyrażoną w [%], którą ma osiągnąć masa próbki podczas naważania (nasypywania, nalewania itp.). Z wartością docelową związana jest tolerancja [+/-], określająca obszar wokół niej uznawany za obszar akceptacji.

Procedura:

1. Nacisnąć przycisk <> Wartość Docelowa>.
2. Nacisnąć przycisk i podać wartość docelową [%].
3. Podać wartość Tolerancji, jeżeli ma być wykorzystana.
4. Zatwierdzić wybór przyciskiem <>.
5. Nacisnąć przycisk Górny Dolny i wpisać jego wartość [%].
6. Zatwierdzić wybór przyciskiem <>.

19.3. Interpretacja funkcji poprzez bargraf

Funkcje dozowania i doważania wspierane są poprzez wskaźnik graficzny, jakim jest bargraf. Poniżej przedstawiony jest przykład jednoczesnego działania tych funkcji:

- a) progi doważania <>ustawiono jako: próg dolny = 90%, próg górny = 110%,

b) wartość docelowa = 105%; tolerancja = 5% < 

c) masa odniesienia = 19.986 g < 



19.4. Ustawienia dodatkowe związane z odchyłkami


Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do nich opisany jest w punkcie 15.8. *Dodatkowe parametry związane z ważeniem.*

20. GĘSTOŚĆ



< **Gęstość** > jest funkcją, która zawiera cztery moduły. Pierwszy służy do wyznaczania gęstości ciał stałych, drugi do wyznaczania gęstości cieczy, trzeci do wyznaczania gęstości powietrza, czwarty do wyznaczania gęstości substancji z wykorzystaniem piknomietru. Moduł trzeci jest dostępny w wagach typu AS, XA. Stosowanie funkcji wymaga dodatkowego zestawu do wyznaczania gęstości (wyposażenie opcjonalne), odpowiedniego dla typu wagi.

Po wybraniu funkcji Gęstość na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski oraz informacje wyświetlane w polu Info:

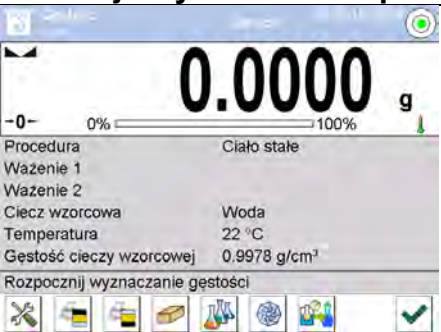	1. Setup – postępowanie do menu wagi. 2. Drukuj nagłówek – wydruk informacji zadeklarowanej w nagłówku. 3. Drukuj stopkę – wydruk informacji zadeklarowanej w stopce. 4. Gęstość ciała stałego. 5. Gęstość cieczy. 6. Gęstość powietrza. 7. Piknometr.
---	--

20.1. Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy

Dla wag serii PM nie jest oferowany zestaw do wyznaczania gęstości.

20.2. Wyznaczanie gęstości ciała stałego

Przed rozpoczęciem procedury należy ustalić parametry związane z procesem, takie jak:

- Rodzaj cieczy:
 - o Woda destylowana,
 - o Etanol,

- o Inna ciecz o znanej gęstości.
- Temperatura cieczy:
(należy ją podać, gdy wykorzystuje się wodę destylowaną lub Etanol).
- Gęstość cieczy:
Jest automatycznie ustawiana, gdy wykorzystuje się Wodę lub Etanol (po wpisaniu temperatury) lub należy ją wpisać ręcznie przy zastosowaniu cieczy <Inna>.

Gęstość ciał stałych wyliczana jest według poniższego wzoru:

$$\rho = \frac{A}{A-B} \rho_o$$

ρ - gęstość próbki
 A - masa próbki w powietrzu
 B - masa próbki w cieczy
 ρ_o - gęstość cieczy

Procedura:

1. Zamontować zestaw do wyznaczania gęstości.
2. Aby gęstość była zapisana w danych towaru, należy ustawić parametr w <Ustawieniach> <Przypisz gęstość do towaru> oraz wybrać towar jako aktywny, używając przycisku szybkiego dostępu <Towar>.
3. Nacisnąć przycisk < Gęstość ciała stałego>.
4. Wyświetlacz pokaże menu, należy ustawić żądane wartości dla pól: Ciecz wzorcowa, Temperatura, Gęstość cieczy wzorcowej.
5. Nacisnąć przycisk < START>.
6. Waga jest gotowa do realizacji procedury.
7. Położyć próbkę na GÓRNEJ szalce zestawu i po ustabilizowaniu się wskazania nacisnąć przycisk < >.
8. Położyć próbkę na DOLNEJ szalce zestawu, zanurzonej w cieczy i po ustabilizowaniu się wskazania nacisnąć przycisk < >.
9. Wyświetlacz pokaże wynik gęstości.
10. Nacisnąć przycisk < >, aby zakończyć procedurę.

Uwaga:

Naciśnięcie przycisku < > rozpoczyna ponowny pomiar z tymi samymi nastawami.

20.3. Wyznaczanie gęstości cieczy

Polega na wyznaczeniu masy nurnika w powietrzu, a następnie w badanej cieczy. Gęstość cieczy oblicza się według poniższego wzoru:

$$\rho = \frac{A-B}{V} + d$$

ρ - gęstość cieczy
 A - masa nurnika w powietrzu
 B - masa nurnika w wodzie
 V - objętość pływaka

d - gęstość powietrza (max 0,001 g/cm³)

Przed rozpoczęciem analizy należy zamontować zestaw do wyznaczania gęstości oraz wpisać do menu wagi objętość nurnika.

- Nacisnąć przycisk < Gęstość cieczy>.
- Wyświetlacz pokaże menu, nacisnąć przycisk < Objętość nurnika>, wpisać wartość podaną na haczyku nurnika.
- Waga jest gotowa do realizacji procedury.

Procedura:

1. Zamontować zestaw do wyznaczania gęstości.
2. Aby gęstość była zapisana w danych towaru, należy ustawić parametr w <Ustawieniach> <Przypisz gęstość do towaru> oraz wybrać towar jako aktywny, używając przycisku szybkiego dostępu <Towar>.
3. Nacisnąć przycisk < START>.
4. Postępować zgodnie z poleceniami pokazywanymi na wyświetlaczu.
5. Wykonać ważenie w powietrzu, po ustabilizowaniu się wskazania nacisnąć przycisk < >.
6. Wykonać ważenie w badanej cieczy, po ustabilizowaniu się wskazania nacisnąć przycisk < >.
7. Wyświetlacz pokaże wynik gęstości.
8. Nacisnąć przycisk < >, żeby zakończyć procedurę.

Uwaga:


Naciśnięcie przycisku < > rozpoczyna ponowny pomiar z tymi samymi nastawami.

20.4. Gęstość powietrza


Gęstość powietrza < > jest jedną z informacji potrzebnych do wyliczenia poprawki wyniku ważenia, związanej z WYPOREM powietrza. Drugą informacją, niezbędną do wyliczenia tej poprawki, jest gęstość ważonej próbki. Funkcja Gęstość powietrza jest aktywna tylko w wagach z działką elementarną mniejszą niż $d=1\text{mg}$. Aby wyznaczyć gęstość powietrza, wymagane jest zastosowanie specjalnego zestawu wzorców masy (wyposażenie opcjonalne), odpowiedniego dla typu wagi.

Procedura:

1. Nacisnąć przycisk szybkiego dostępu < Gęstość powietrza>.
2. Wyświetlacz pokaże opcje związane z tą funkcją.

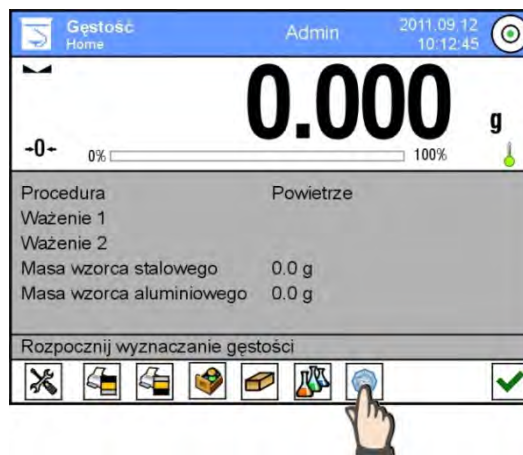

3. Nacisnąć pole z wartością wzorca stalowego i wprowadzić jego wartość ze świadectwa wzorcowania.
4. Nacisnąć pole z wartością wzorca aluminium i wprowadzić jego wartość ze świadectwa wzorcowania.
5. Nacisnąć pole z wartością gęstości wzorca stalowego i wprowadzić wartość jego gęstości.
6. Powtórzyć czynność dla gęstości wzorca aluminium.
7. Nacisnąć pole START - waga jest gotowa do pracy.

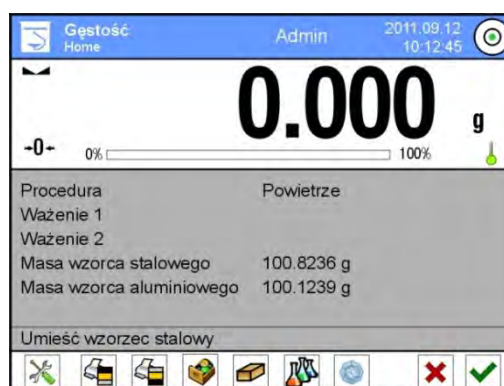

8. Położyć wzorzec stalowy, po ustabilizowaniu się wskazania zatwierdzić wynik, naciskając przycisk .
9. Położyć wzorzec aluminium, po ustabilizowaniu się wskazania zatwierdzić wynik, naciskając przycisk .
10. Gęstość powietrza zostanie automatycznie wyliczona i pokazana na wyświetlaczu.
11. Nacisnąć przycisk , żeby zakończyć procedurę.

Wartość wyznaczonej gęstości powietrza zostanie automatycznie przepisana do pozycji <Gęstość powietrza>, w menu <Ustawienia/ Kompensacja wyporności powietrza> dla modu ważenia.

20.5. Wyznaczanie gęstości substancji z wykorzystaniem piknometru

Przed rozpoczęciem procedury należy ustalić parametry związane z procesem, takie jak:

- Masę piknometru (jeżeli znana jest masa używanego piknometru, można ją podać, wtedy podczas badania będzie tylko jedno ważenie piknometru napełnionego substancją).

- Objętość piknometru.

Gęstość ciał stałych wyliczana jest według poniższego wzoru:

$$\rho = \frac{A}{A-B} \rho_o$$

- ρ - gęstość próbki
- A - masa próbki w powietrzu
- B - masa próbki w cieczy
- ρ_o - gęstość cieczy

Procedura 1 – jeżeli masa piknometru została wpisana:

1. Aby gęstość była zapisana w danych towaru, należy ustawić parametr w <Ustawieniach> <Przypisz gęstość do towaru> oraz wybrać towar jako aktywny, używając przycisku szybkiego dostępu <Towar>.
2. Nacisnąć przycisk < Piknometr>.
3. Wyświetlacz pokaże menu, ustawić żądane wartości dla pól: masa piknometru i objętość piknometru.
4. Nacisnąć przycisk < START>.
5. Waga jest gotowa do realizacji procedury.
6. Napełnić piknometr badaną substancją, zgodnie z wytycznymi dla piknometru.
7. Ustawić piknometr na szalce wagi i po ustabilizowaniu się wskazania nacisnąć przycisk < >.
8. Wyświetlacz pokaże wynik gęstości.
9. Nacisnąć przycisk < >, aby zakończyć procedurę.

Uwaga:

Naciśnięcie przycisku < > rozpoczyna ponowny pomiar z tymi samymi nastawami.

Procedura 2 – jeżeli masa piknometru nie została wpisana:

1. Aby gęstość była zapisana w danych towaru, należy ustawić parametr w <Ustawieniach>: <Przypisz gęstość do towaru> oraz wybrać towar jako aktywny, używając przycisku szybkiego dostępu <Towar>.
2. Nacisnąć przycisk < Piknometr>.
3. Wyświetlacz pokaże menu, ustawić żądane wartości dla pola: objętość piknometru.
4. Nacisnąć przycisk < START>.
5. Waga jest gotowa do realizacji procedury.
6. Ustawić na szalce wagi pusty piknometr i po ustabilizowaniu się wskazania nacisnąć przycisk < >.
7. Zdjąć piknometr z szalki i napełnić go badaną substancją, zgodnie z wytycznymi dla piknometru.
8. Ustawić napełniony piknometr na szalce wagi i po ustabilizowaniu się wskazania nacisnąć przycisk < >.
9. Wyświetlacz pokaże wynik gęstości.

10. Nacisnąć przycisk <

Uwaga:

Naciśnięcie przycisku <



20.6. Ustawienia dodatkowe związane z funkcją gęstości

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań:

- o **Pytaj o numer próbki:** dostępne są ustawienia:
 - NIE** – nie jest wymagana informacja o numerze próbki, zastosowanie do pomiaru.
 - TAK** – przed każdym pomiarem automatycznie zostanie pokazane okno, w którym należy podać numer próbki, zastosowanie do serii pomiarów.
- o **Jednostka:** do wyboru są następujące jednostki: $[g/cm^3]$, $[kg/m^3]$, $[g/l]$. Wybrana jednostka będzie obowiązywać dla wszystkich opcji oraz dla wydruków wyników końcowych.
- o **Przypisz gęstość do towaru:** TAK/NIE. Po wybraniu opcji <TAK> program automatycznie przypisze wartość wyznaczonej gęstości ciała stałego i cieczy w miejsce <Gęstość>, w danych dla wybranego towaru. Aby wykorzystać tę funkcję, należy przed rozpoczęciem wyznaczania gęstości wybrać towar z bazy towarów, dla którego będzie przeprowadzana procedura. Po zakończeniu procesu program wpisze wyznaczoną gęstość do danych o towarze (jeśli gęstość była już przypisana dla tego towaru, zostanie ona zastąpiona przez nową wartość).
 - o Tryb tary.
 - o Tryb wydruku/zatwierdzenia.
 - o Wydruk.



Zasady użytkowania funkcji tu nieopisanych zawiera pkt.15.8 *Dodatkowe parametry związane z ważeniem*.

20.7. Wydruki

Opcja Wydruki umożliwia ustawienie zawartości poszczególnych elementów wydruku standardowego, jak również zdefiniowanie wydruku niestandardowego.

G. Wydruk standardowy

Składa się z czterech wewnętrznych bloków, które zawierają różne zmienne. Dla każdej zmiennej należy ustawić opcję TAK – jeżeli ma być drukowana lub NIE – jeżeli ma nie występować na wydruku.

Ustawienia dla wydruków nagłówka, ważenia i stopki podane są w pkt. 14.5, poniżej pokazano ustawienia dla projektu wydruku gęstości.

Użytkownik może zaprojektować zawartości raportów dla każdej z procedur. Po kliknięciu w opcję <Projekt wydruku gęstości> zostaje wyświetlone kolejne okno, w którym można ustawić zawartość poszczególnych raportów.

Zawartość poszczególnych raportów:

<u>CIAŁO STAŁE</u>	<u>CIECZ</u>	<u>POWIETRZE</u>	<u>PIKNOMETR</u>
– Mod pracy – Procedura – Numer próbki – Użytkownik – Typ wagi – ID wagi – Data – Czas – Ciecz wzorcowa – Temperatura – Gęstość cieczy wzorcowej – Ważenie 1 – Ważenie 2 – Gęstość – Objętość – Towar – Magazyn – Klient – Pusta linia – Kreski – Podpis – Wydruk niestandardowy	– Mod pracy – Procedura – Numer próbki – Użytkownik – Typ wagi – ID wagi – Data – Czas – Objętość nurnika – Temperatura – Ważenie 1 – Ważenie 2 – Gęstość – Towar – Magazyn – Klient – Pusta linia – Kreski – Podpis – Wydruk niestandardowy	– Mod pracy – Procedura – Numer próbki – Użytkownik – Typ wagi – ID wagi – Data – Czas – Masa wzorca stalowego – Masa wzorca aluminiowego – Gęstość wzorca stalowego – Gęstość wzorca aluminiowego – Ważenie 1 – Ważenie 2 – Gęstość – Towar – Magazyn – Klient – Pusta linia – Kreski – Podpis – Wydruk niestandardowy	– <u>Mod pracy</u> – <u>Procedura</u> – <u>Numer próbki</u> – <u>Użytkownik</u> – <u>Typ wagi</u> – <u>ID wagi</u> – <u>Data</u> – <u>Czas</u> – <u>Masa piknometru</u> – <u>Objętość piknometry</u> – <u>Ważenie 1</u> – <u>Ważenie 2</u> – <u>Gęstość</u> – <u>Towar</u> – <u>Magazyn</u> – <u>Klient</u> – <u>Pusta linia</u> – <u>Kreski</u> – <u>Podpis</u> – <u>Wydruk niestandardowy</u>

20.8. Raport ze zrealizowanych procesów wyznaczania gęstości

Po wykonaniu każdego procesu wyznaczania gęstości ciała stałego, cieczy lub powietrza generowany jest raport. Jest on zapisywany w bazie danych <  **Raporty Gęstości** >. Nazwa pliku raportu ma postać daty i godziny wykonania procesu wyznaczania gęstości.

Przykład raportu z wyznaczania gęstości ciała stałego.

```

----- Gęstość -----
----- Ciało stałe -----
Użytkownik                               Admin
ID wagi                                  400015
Data                                     2011.10.07
Czas                                    10:08:09
Ciecz wzorcowa                           Woda
Temperatura                             22 °C
Gęstość cieczy wzorcowej                 0.9978 g/cm3
Ważenie 1                               10.526 g
Ważenie 2                               2.586 g
Gęstość                                 1.322776 g/cm3
-----
Podpis

```

Wykorzystanie informacji zawartych w nagłówku i stopce

Aby wykorzystać te informacje, należy:

- o Nacisnąć przycisk < Drukuj nagłówek> przed rozpoczęciem procedury wyznaczania gęstości.
- o Wykonać procedurę wyznaczania gęstości:
 - Raport zostanie wydrukowany automatycznie po przyjęciu drugiego pomiaru.
 - Przy wyświetlonym wyniku gęstości można wielokrotnie drukować raport, naciskając przycisk < **PRINT**>.
- o Nacisnąć przycisk < Drukuj stopkę> po zakończeniu procedury wyznaczania gęstości.


Uwaga:

Należy wybrać informacje, które mają być drukowane w nagłówku, stopce oraz w raporcie. Szczegółowe informacje zawiera rozdział „WYDRUKI”.

21. WAŻENIE ZWIERZĄT

< Ważenie zwierząt> jest modem pracy pozwalającym na poprawne ważenie obiektów, które poruszają się. Ten typ obiektu z zasady generuje niestabilny pomiar, co wymaga zastosowania innej metody filtrowania sygnału pomiarowego.

Po wybraniu funkcji Ważenia zwierząt na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski oraz informacje wyświetlane w polu Info:

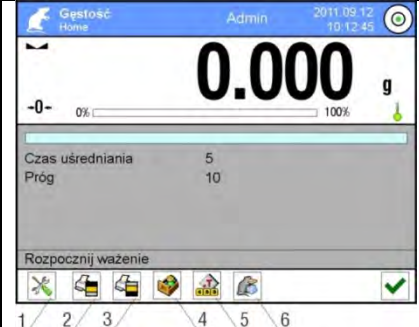	1. Setup – postęp do menu wagi. 2. Drukuj nagłówek – wydruk informacji zadeklarowanej w nagłówku. 3. Drukuj stopkę – wydruk informacji zadeklarowanej w stopce. 4. Baza towarów – wybór towarów z bazy towarów. 5. Ustaw tarę. 6. Ważenie zwierząt.
---	---

21.1. Ustawienia dla Ważenia zwierząt

Zależnie od tego, jak ma przebiegać analiza masy ważonego obiektu, należy ustawić parametry wewnętrzne funkcji.

Procedura:

1. Nacisnąć przycisk < Ważenie zwierząt>.
2. Wyświetlacz pokaże opcje związane z tą funkcją, takie jak:

Czas uśredniania

Jest to czas, w którym analizowane są pomiary. Z otrzymanych pomiarów wyliczany jest wynik pomiaru.

Praca automatyczna

Decyduje, czy pomiary odbywają się ręcznie (po naciśnięciu przycisku), czy automatycznie. Pomiar obiektu rozpoczyna się automatycznie w chwili przekroczenia przez wskazanie wartości ustawionego progu. Pomiar kolejnego obiektu może być rozpoczęty po zdjęciu obiektu (wskazanie musi „zejść” poniżej wartości progu) i po

umieszczeniu kolejnego obiektu na szalce w chwili przekroczenia przez wskazanie wartości ustawionego progu.

Próg

Jest wartością wyrażoną w jednostkach masy. Aby rozpocząć pomiar, wartość wskazania masy musi być większa od wartości progu.

3. Ustawić parametry działania funkcji i wrócić do ważenia.
4. Położyć obiekt na szalce wagi i nacisnąć przycisk <✓>.
5. Po zakończeniu pomiaru wyświetlacz pokaże „zamrożony” wynik ważenia obiektu.
6. Kolejny pomiar jest możliwy po naciśnięciu przycisku <✓> i rozpoczęciu procesu powtórnie:
 - praca nieautomatyczna – nacisnąć przycisk <✓> ,
 - praca automatyczna – zdjąć obiekt i umieścić kolejny obiekt na szalce.

21.2. Ustawienia dodatkowe dla Ważenia zwierząt

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do nich opisany jest w punkcie 15.8 *Dodatkowe parametry związane z ważeniem*.

22. RECEPTURY


<  **Receptury** > to mod pracy pozwalający na sporządzanie mieszanin z wielu składników. Cały proces przebiega automatycznie.

Użytkownik ma możliwość przy sporządzaniu mieszanin:

- **korzystania z bazy receptur**, gdzie są zapisane receptury i wtedy program pomaga przy odważaniu poszczególnych składników przez odpowiednie komunikaty pojawiające się w polu informacji,
- **sporządzania mieszanin bez korzystania z bazy receptur**, wtedy to sam użytkownik kontroluje naważane składniki, ich kolejność i ilość.

Jeśli użytkownik chce wykorzystać bazy receptur, musi w pierwszej kolejności stworzyć recepturę, a następnie przywołać ją do stosowania. Tworzenie receptur jest możliwe tylko z poziomu opcji Bazy Receptur. Procedura dla tej operacji jest opisana w dalszej części.

Po wybraniu funkcji Receptury na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski oraz informacje wyświetlane w polu Info:

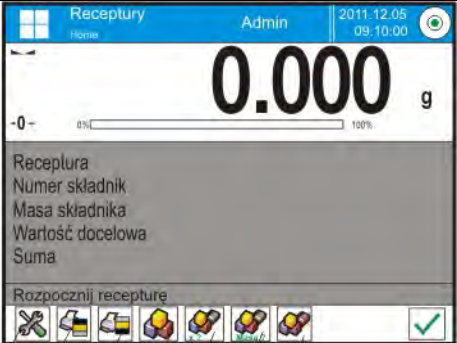	1. Setup – dostęp do menu wagi. 2. Drukuj nagłówek. 3. Drukuj stopkę. 4. Receptura – wybór receptury z bazy receptur. 5. Mnożnik receptury (start receptury, gdy opcja <Edycja mnożnika> ustawiona jest na wartość <NIE>). 6. Masa docelowa. 7. Receptura bez bazy.
---	---

22.1. Ustawienia dodatkowe związane z recepturami

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do tych ustawień opisany jest poniżej:

Procedura:

1. Nacisnąć szare pole informacyjne.
2. Wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, Profil.
3. Nacisnąć menu <Ustawienia>.
4. Wyświetlacz pokaże funkcje związane z recepturami.

Z procesem receptur związane są takie funkcje, jak:

– Automatyczne nazywanie składników:

- o TAK
- o NIE

– Stosuj tary z bazy danych:

- o TAK – każdemu użytemu składnikowi będzie przypisywana wartość tary, związana z danym towarem, zapisanym w bazie towarów.
- o NIE – tara nie będzie używana.

– Sposób weryfikacji składnika:

Opcja pozwalająca wybrać, jaka zależność będzie używana do określenia poprawności masy dla poszczególnych składników podczas sporządzania mieszaniny.

Dostępne opcje: **TOLERANCJA/PROGI**.

TOLERANCJA: program przyjmuje jako poprawną masę składnika, jeśli masa mieści się w założonej tolerancji procentowej masy całkowitej składnika ($\pm\%$) – (dane w bazie towarów).

PROGI: program przyjmuje jako poprawną masę składnika, jeśli masa mieści się pomiędzy ustawionymi progami (dane w bazie towarów).

Wybrana zależność obowiązuje dla wszystkich składników w procedurze sporządzania mieszanin.

Jeżeli podczas sporządzania mieszaniny któryś ze składników zostanie przeważony (masa składnika jest poza przedziałem tolerancji na plus w stosunku do masy docelowej), program, po zatwierdzeniu masy składnika, wyświetli komunikat z pytaniem <WARTOŚĆ SPOZA ZKRESU. PRZELICZYĆ RECEPTURĘ?>. Po zatwierdzeniu opcji program automatycznie przeliczy masy pozostałych składników, aby proporcje mieszaniny były zachowane.

Opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy dane dotyczące towarów (składników) w bazie towarów zgadzają się z wybraną opcją <SPOSÓB WERYFIKACJI SKŁADNIKA>; np. dla towaru wpisane są progi i w opcji <SPOSÓB WERYFIKACJI SKŁADNIKA> jest wybrana wartość <PROGI>. Jeżeli te dane nie będą spójne, wtedy automatyczne przeliczanie mas poszczególnych składników nie będzie aktywne; np. w sytuacji, gdy dla towaru wpisane są progi, a w opcji <SPOSÓB WERYFIKACJI SKŁADNIKA> jest wybrana wartość <TOLERANCJA>.

– Edycja mnożnika: opcja pozwala na sporządzenie wielokrotności mieszanin według wybranej receptury w jednym procesie ważenia:

- o **TAK** – po wybraniu receptury do naważania program zapyta o wartość mnożnika, przez który będzie przemnażana masa poszczególnych składników przy ich odważaniu. Wpisana wartość będzie obowiązywać dla wszystkich składników.
- o **NIE** – brak możliwości wprowadzenia mnożnika, domyślna wartość ustawiona na <1>.

– Wydruk: zasadę użytkowania zawiera punkt 15.8 *Dodatkowe parametry związane z ważeniem*.

22.2. Wprowadzanie receptury do Bazy Receptur

Baza receptur składa się z nazw receptur oraz nazw składników które je tworzą wraz z ich masami. Każdy towar użyty do receptury jest zapisany w bazie towarów. Podczas tworzenia receptury należy w pierwszej kolejności podać jej nazwę, a następnie do tej receptury dodawać składniki. Program działa intuicyjnie i prowadzi użytkownika poprzez wyświetlanie odpowiednich komunikatów. Ponieważ dla każdego składnika należy podać nazwę oraz jego masę – operator musi znać dokładnie skład całości mieszaniny. Dodania receptury do bazy można dokonać z poziomu menu Bazy Danych.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu  Bazy Danych>, nacisnąć pole <Receptury>.
- Nacisnąć przycisk  Dodaj>, jeżeli ma być dodana receptura.

Program automatycznie doda nową pozycję do bazy i przejdzie do jej edycji. Należy wprowadzić wszystkie dane dotyczące nowej receptury.

Wykaz informacji definiowanych dla receptur:

- Nazwa: po kliknięciu w pole nazwy zostanie otwarte nowe okno, w którym należy wprowadzić nazwę receptury.
- Kod: możliwość wprowadzenia kodu receptury.
- Składniki: po kliknięciu w to pole zostanie otwarte okno z listą składników użytych w recepturze (dla nowej receptury lista jest pusta), należy dodać składniki receptury:

- należy nacisnąć przycisk  Dodaj>,
- wybrać jedną z opcji:

<Nowy składnik> - dodanie towaru, który nie jest wpisany do bazy towarów. Po wybraniu tej opcji należy w pierwszej kolejności wprowadzić nazwę nowego towaru, następnie masę towaru, jaka ma zostać odważona dla receptury. Program automatycznie doda towar do bazy towarów.

Uwaga:

Po dodaniu towaru użytkownik może uzupełnić pozostałe dane, dotyczące towaru z poziomu bazy towarów.

<Nowy składnik z bazy> - po wybraniu tej opcji zostanie otwarte okno Bazy Towarów. Z listy należy wybrać towar, który ma zostać użyty w recepturze. Program jako masę, którą należy odważyć, przyjmie masę zapisaną w bazie towarów dla wybranego towaru.

Masę każdego z dodanych towarów można edytować. Zmieniona masa towaru z bazy nie będzie powodować zmiany masy towaru w bazie towarów.

- Liczba składników – opcja nieedytowalna, jest aktualizowana na bieżąco przez program po dodaniu każdego kolejnego składnika do receptury.
- Suma – masa docelowa receptury, suma mas wszystkich składników, opcja nieedytowalna, jest aktualizowana na bieżąco przez program po dodaniu każdego kolejnego składnika do receptury.

22.3. Wykorzystanie receptur w ważeniu

Po uruchomieniu funkcji RECEPTURY można przejść do sporządzania mieszaniny, w zależności od ustawień: po wybraniu receptury z bazy receptur lub naważać mieszaninę ręcznie.

Sporządzanie mieszanin może się odbywać poprzez:

- Realizację receptury, która nie jest zdefiniowana w Bazie receptur – ręcznie.
- Realizację receptury, która jest zapisana w Bazie receptur.
- Realizację wielokrotności receptury, która jest zapisana w Bazie receptur – mnożnik.
- Realizację receptury, która jest zapisana w bazie receptur, z określeniem masy docelowej całej sporządzanej mieszaniny.

Uwaga:

Aby korzystać z poszczególnych opcji należy aktywować odpowiednie przyciski w pasku przycisków szybkiego dostępu oraz ustawić odpowiednie opcje w ustawieniach modu Receptury.

Po wybraniu receptury należy odważać kolejne składniki i po ustabilizowaniu się

wskazania naciskać przycisk < >. Masa każdego składnika, po zatwierdzeniu

przyciskiem < >, jest tarowana, tzn. została przyjęta do masy końcowej mieszaniny.

Przycisk < > kasuje wszystkie operacje związane z tworzeniem mieszaniny. Po jego naciśnięciu można wybrać inną recepturę do sporządzania.

Procedura 1 – Realizacja receptury, która nie jest zdefiniowana w Bazie receptur – ręcznie.

Należy postępować zgodnie z podpowiedziami programu.

- Nacisnąć przycisk Receptura bez nazwy < > w pasku przycisków szybkiego dostępu.
- Nadać nazwę nowej recepturze.
- Program automatycznie przejdzie do opcji wyboru składników.
- Wybrać składnik (nowy lub z bazy towarów).
- Program przejdzie do okna głównego.
- Ustawić na szalce pojemnik, w którym będzie umieszczany składnik i po ustabilizowaniu się wskazania wytarować jego masę.
- Umieścić w pojemniku oczekiwaną ilość składnika.
- Zatwierdzić proces przyciskiem < >.
- Program przejdzie do okna wyboru kolejnego składnika.
- Postępując jak poprzednio, odważyć wszystkie składniki mieszaniny.
- Po odważeniu ostatniego składnika, wybrać jedną z opcji:
 <Zapisz i zakończ> - wykonany proces zostanie zapisany do bazy receptur jako nowa receptura i automatycznie zakończony z zapisaniem raportu do bazy raportów z receptur.
 <Zakończ> - proces zostanie zakończony bez zapisu do bazy receptur wykonanej receptury.
- Po potwierdzeniu opcji program zakończy proces naważania mieszaniny i powróci do wyświetlania okna głównego funkcji Receptury z komunikatem w dolnej linii <Zakończono>. Aby przejść do kolejnych operacji, należy nacisnąć przycisk < >.
- **Uwaga:** Proces naważania mieszaniny można w każdym momencie przerwać po wybraniu opcji <Przerwij  >.

Procedura 2 – Realizacja receptury, która jest zapisana w Bazie receptur.

Podstawowa opcja sporządzania receptur. W zależności od ustawień dla funkcji, można

łatwo przygotowywać wielokrotności mieszanin.

Należy postępować zgodnie z podpowiedziami programu.

- Nacisnąć przycisk Receptura <- Z listy Receptur wybrać tę, która ma być zrealizowana.
- Nacisnąć przycisk Receptura z mnożnikiem <Jeżeli w ustawieniach funkcji Receptury ustawiona jest opcja <Edycja mnożnika> na wartość <NIE> – program automatycznie rozpoczyna realizację procesu recepturowania, przyjmując mnożnik [1], a jeżeli ta opcja jest ustawiona na wartość <TAK> – program wyświetli okno z klawiaturą, w którym należy podać wartość mnożnika, przez który będą przemnażane masy wszystkich składników receptury (masa każdego składnika będzie iloczynem masy zapisanej w recepturze i wartości wpisanego mnożnika).
- Po zatwierdzeniu wpisanej wartości program automatycznie rozpocznie proces recepturowania, na wyświetlaczu, w polu informacji, pojawią się: nazwa wybranej receptury, nazwa pierwszego składnika, numer składnika, masa, jaką należy odważyć oraz masa docelowa.
- Ustawić na szalce pojemnik, w którym będzie umieszczany składnik i po ustabilizowaniu się wskazania wytarować jego masę.
- Umieścić w pojemniku oczekiwaną ilość składnika.
- Po zatwierdzeniu masy składnika program automatycznie dodaje ją do sumy mas mieszaniny i przechodzi do naważania kolejnego składnika.
- Po odważeniu wszystkich składników z receptury program automatycznie drukuje raport z wykonanej operacji oraz zapisuje go do bazy raportów (wzór raportu można przededefiniować w opcji <wydruk>), a w dolnej linii wyświetlany jest komunikat <Zakończono>. Aby przejść do kolejnych operacji, należy nacisnąć przycisk <

Procedura 3 – Realizacja receptury, która jest zapisana w bazie receptur, z określeniem masy docelowej mieszaniny. Opcja przydatna, gdy należy sporządzić określoną masę danej mieszaniny, która jest różna od masy wynikającej z zapisanej wcześniej sumy mas użytych składników.

W takim przypadku, bez żmudnego przeliczania mas poszczególnych składników przez użytkownika, program automatycznie dobiera je, w zależności od wpisanej masy końcowej mieszaniny.

Należy postępować zgodnie z podpowiedziami programu.

- Nacisnąć przycisk Receptura <- Z listy Receptur wybrać tę, która ma być zrealizowana.
- Nacisnąć przycisk Receptura z masą docelową <- Program wyświetli okno z klawiaturą, w którym należy podać wartość masy docelowej mieszaniny.
- Po zatwierdzeniu wpisanej wartości program automatycznie rozpocznie proces recepturowania, na wyświetlaczu, w polu informacji, pojawią się: nazwa wybranej receptury, nazwa pierwszego składnika, numer składnika, masa, jaką należy odważyć oraz masa docelowa.
Masy składników są automatycznie (proporcjonalnie) przeliczane, aby otrzymać wartość wpisanej masy docelowej jako masy całkowitej mieszaniny.

- Ustawić na szalce pojemnik, w którym będzie umieszczany składnik i po ustabilizowaniu się wskazania wytarować jego masę.
- Umieścić w pojemniku oczekiwaną ilość składnika.
- Po zatwierdzeniu masy składnika program automatycznie dodaje ją do sumy mas mieszaniny i automatycznie przechodzi do naważania kolejnego składnika.
- Po odważeniu wszystkich składników z receptury program automatycznie drukuje raport z wykonanej operacji oraz zapisuje go do bazy raportów (wzór raportu można przededefiniować w opcji <Wydruk>), a w dolnej linii wyświetlany jest komunikat <Zakończono>. Aby przejść do kolejnych operacji należy, nacisnąć przycisk .


Każdy raport z przeprowadzonych procesów można wydrukować z poziomu menu Bazy Danych – raporty z receptur.

22.4. Wydruki

Opcja Wydruki umożliwia ustawienie zawartości poszczególnych elementów dla wydruku standardowego, jak również wydruku niestandardowego.

H. Wydruk standardowy

Składa się z czterech wewnętrznych bloków, które zawierają różne zmienne. Dla każdej zmiennej należy ustawić opcję TAK – jeżeli ma być drukowana lub NIE – jeżeli ma nie występować na wydruku.

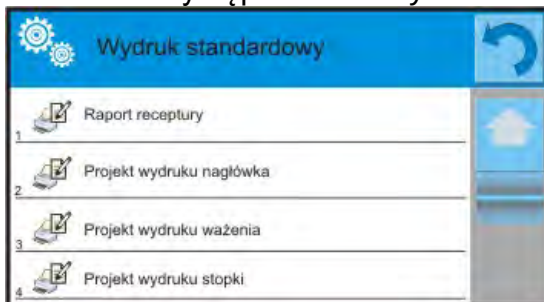

Ustawienia dla wydruków nagłówka, ważenia i stopki podane są w pkt. 14.5, poniżej pokazano ustawienia dla raportu receptury. Użytkownik może zaprojektować zawartości raportu.

Uwaga:

Zawartość danych dla każdego z pomiarów w raporcie należy ustawić w opcji <Projekt wydruku ważenia>. Za każdym razem, podczas drukowania raportu, w miejscu, gdzie znajdują się pomiary, będą drukowane dane ustawione na opcję <TAK> w <Projekcie wydruku ważenia>. Po wykonaniu każdego procesu recepturowania jest generowany

raport z procesu. Jest on zapisywany w bazie danych < Raporty Receptur>. Nazwa pliku raportu ma postać daty i godziny wykonania procesu.

Zawartość poszczególnych raportów:	Wygląd przykładowego raportu
– Mod pracy	----- Raport z Receptury -----
– Użytkownik	Użytkownik Nowak Jan
– Klient	Nazwa receptury Mieszanina 1
– Magazyn	 Data rozpoczęcia 2011.12.16 13:21:40
– Receptura	Data zakończenia 2011.12.16 13:22:28
– Kod receptury	 Ilość składników 5
– Data rozpoczęcia	Ilość wykonanych pomiarów 5
– Data zakończenia	 ----- Pomiar 1 -----
– Liczba składników	

– Liczba pomiarów	19.994 g
– Pomiary	----- Pomiar 2 -----
– Wartość docelowa	49.993 g
– Suma	----- Pomiar 3 -----
– Różnica receptury	9.999 g
– Status	----- Pomiar 4 -----
– Pusta linia	1.001 g
– Kreski	----- Pomiar 5 -----
– Podpis	19.995 g
– Wydruk niestandardowy	
	Masa całkowita 100.982
	Masa docelowa 101.000
	Różnica -0.018
	Status OK

	Podpis
	

23. STATYSTYKA

<  Statystyka> umożliwia zbieranie danych z serii ważeń i tworzenie z nich statystyki. Zakres wyświetlanych danych statystycznych jest zależny od ustawień wewnętrznych funkcji.

Procedura uruchomienia modu pracy:

Znajdując się w głównym oknie programu, nacisnąć ikonę , umieszczoną na górnej belce okna, po czym zostanie otwarte podmenu <Mody pracy>, zawierające listę modów pracy do wyboru. Należy wybrać mod < Statystyka>, program automatycznie powróci do okna głównego, wyświetlając na górnej belce okna ikonę .

Po wybraniu funkcji Statystyka na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski oraz informacje wyświetlane w polu Info:



1. Setup – postęp do menu wagi.
2. Drukuj nagłówek – wydruk informacji zadeklarowanej w nagłówku.
3. Drukuj stopkę – wydruk informacji zadeklarowanej w stopce.
4. Baza towarów – wybór towarów z bazy towarów.
5. Ustaw tarę.
6. Statystyka.
7. Dodaj do statystyki.

23.1. Ustawienia przycisków i informacji dla Statystyki

Podczas wykonywania serii pomiarów należy uwzględnić poniższe informacje dotyczące działania przycisków:

- Przycisk<  PRINT> powoduje wydruk oraz dodanie pomiaru do zestawienia statystycznego.

- Przycisk  <Dodaj do Statystyki> powoduje tylko dodanie pomiaru do zestawienia statystycznego bez wydruku.

Tak, jak w każdym modzie pracy, użytkownik może zdefiniować własny zestaw przycisków oraz informacji pokazywanej w polu Info.

23.2. Ustawienia dodatkowe dla Statystyki


Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do nich opisany jest w punkcie 15.8 *Dodatkowe parametry związane z ważeniem*.

23.3. Parametry związane z serią pomiarów

Dla każdej serii pomiarów możliwe są takie operacje, jak: przegląd wyników, wydruk raportu, usunięcie ostatniego pomiaru, skasowanie wszystkich wyników statystyki.

Procedura:

- Nacisnąć przycisk  <Statystyka>.

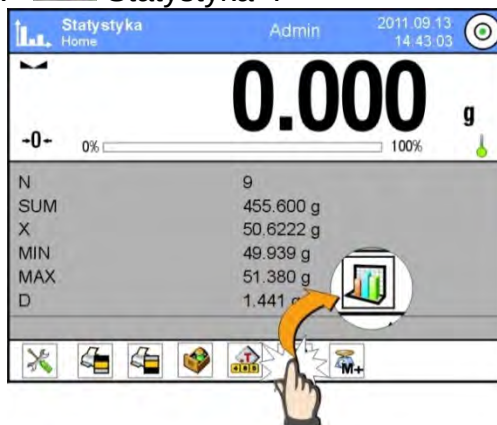


- Wyświetlacz pokaże opcje: Wynik, Drukuj, Wykasuj ostatni, Wykasuj, Wykres pomiarów, Wykres rozkładu prawdopodobieństwa.
- Wybrać opcję:
 - Wynik** – w celu obejrzenia zestawienia statystycznego,
 - Drukuj** – w celu wydrukowania raportu,

Przykład raportu


----- Statystyka -----	
N	9
SUM	455.600 g
X	50.6222 g
MIN	49.939 g
MAX	51.380 g
D	1.441 g
SDVP	0.39605 g
SDVS	0.38505 g
RDVP	0.78 %
RDVS	0.76 %

$SDVP = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}}$	$SDVS = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$
gdzie: SDVP - odchylenie standardowe populacji $\bar{X}$ - średnia pomiarów X_i - kolejny pomiar n - liczba pomiarów	gdzie: SDVS - odchylenie standardowe próby $\bar{X}$ - średnia pomiarów X_i - kolejny pomiar n - liczba pomiarów
$RDVP = \frac{SDVP}{\bar{X}} * 100\%$	$RDVS = \frac{SDVS}{\bar{X}} * 100\%$
gdzie: SDVP - odchylenie standardowe populacji $\bar{X}$ - średnia pomiarów	gdzie: SDVS - odchylenie standardowe próby $\bar{X}$ - średnia pomiarów

- **Wykasuj Ostatni** – w celu usunięcia ostatniego pomiaru w serii,
- **Wykasuj** – w celu usunięcia wszystkich informacji statystycznych,
- **Wykres pomiarów** – po wybraniu opcji program generuje i wyświetla wykres rozkładu pomiarów w układzie współrzędnych masa/pomiar dla wykonanej serii pomiarów; przykładowy wygląd wykresu poniżej:

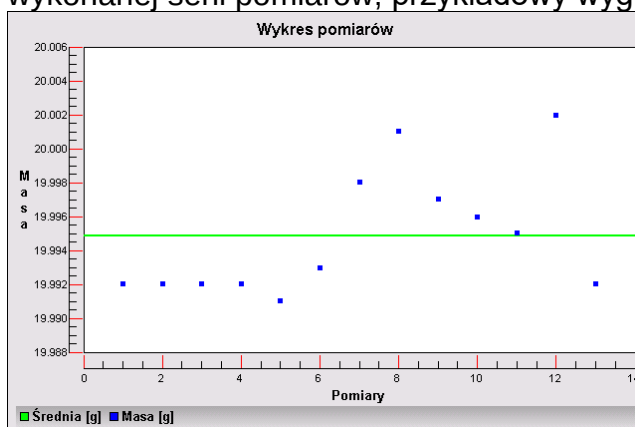

- **Wykres rozkładu prawdopodobieństwa** – po wybraniu opcji program generuje i wyświetla wykres rozkładu prawdopodobieństwa dla wykonanej serii pomiarów. Przykładowy wygląd wykresu znajduje się poniżej, wykres słupkowy przedstawia ilości takich samych pomiarów w serii:

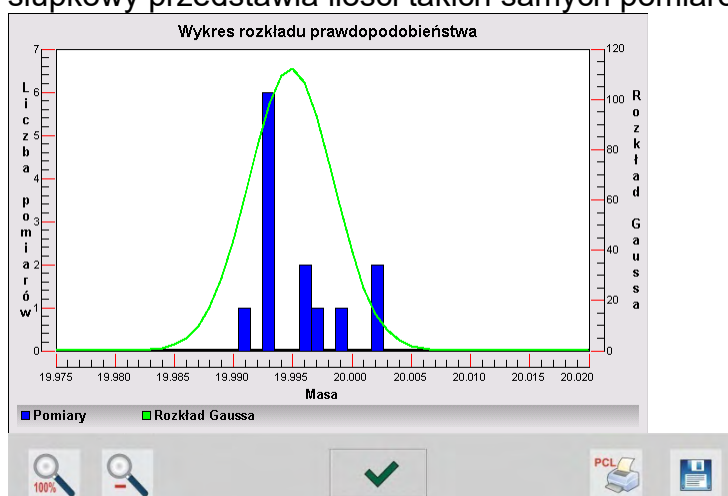

W dolnym pasku poniżej wykresu są dostępne opcje:

	Powrót do wyświetlania widoku całego wykresu.
	Zmniejszenie ekranu do poprzedniego widoku.

	Powrót do wyświetlania poprzedniego okna.
	Wydruk wykresu na podłączonej drukarce typu PCL.
	Zapis wykresu jako plik *.bmp na zewnętrznym nośniku danych, podpiętym do portu USB.

24. WAŻENIE RÓŻNICOWE

<  **Ważenie różnicowe** > umożliwia analizowanie zmian masy jednej lub większej liczby próbek.

Realizowane jest przez wyznaczenie masy początkowej próbki, następnie próbka jest poddawana różnym procesom, w wyniku których pewne składniki próbki są oddzielane lub dodawane do jej początkowego stanu.


Na koniec próbki są ponownie ważone (ważenie różnicowe). Po końcowym ważeniu waga wyznacza różnicę między tymi dwoma wartościami mas (początkowa i końcowa).

Użytkownik przy ważeniu różnicowym ma możliwość:

- Zdefiniowania **serii**, z których każda może zawierać wiele próbek.
- Przypisania nazwy do każdej serii, wydrukowania lub eksportowania do pamięci zewnętrznej danych dotyczących serii.
- Wyznaczenia tary i masy początkowej dla każdej z próbek oraz wykonania do pięciu kolejnych ważeń dla masy końcowej.

Jeśli użytkownik chce wykorzystać ważenie różnicowe, musi w pierwszej kolejności wprowadzić serię do bazy danych programu, następnie zdefiniować próbki w serii, a następnie przywołać daną serię do realizacji. Tworzenie serii jest możliwe z poziomu baz danych. Procedura dla tej operacji jest opisana w dalszej części.

Po wybraniu funkcji Wążenia różnicowego na wyświetlaczu są dostępne następujące przyciski oraz informacje wyświetlane w polu Info:

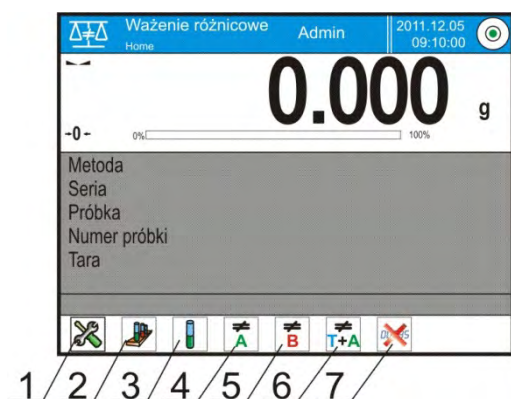

1. Setup – dostęp do menu wagi.
2. Seria.
3. Próbką.
4. Ważenie A.
5. Ważenie B.
6. Wążenia T+A.
7. Usuń wartość.

24.1. Ustawienia dodatkowe związane z ważeniem różnicowym

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do tych ustawień opisany jest poniżej:

Procedura:

1. Nacisnąć szare pole informacyjne.
2. Wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, serie, Profil.
3. Nacisnąć menu <Ustawienia>.

4. Wyświetlacz pokaże funkcje związane z ważeniem różnicowym.

Z procesem ważenia różnicowego związane są takie ustawienia, jak:

- **Próg:** wartość masy jako masy maksymalnej próbki np. filtra.
- **Środowisko:** opcja programu, w której użytkownik ustawia wymaganie podania wartości temperatury i wilgotności otoczenia przed ważeniami: <Ważenie A, Ważenie T+A, Tarowanie T>:
 - o NIE – nie będzie konieczności podawania.
 - o ONLINE – dane o warunkach środowiskowych będą pobierane na bieżąco z modułu środowiskowego, który współpracuje z wagą.
 - o WARTOŚĆ – wartości temperatury i wilgotności muszą być wpisane przez użytkownika, zgodnie ze wskazaniem innego urządzenia pomiarowego.
- **Maksymalna liczba ważeń:** deklaracja ilości powtórzeń dla ważenia końcowego – Max 5 powtórzeń, ustawienie obowiązuje dla wszystkich serii.
- Zasadę użytkowania pozostałych ustawień zawiera punkt 15.8 *Dodatkowe parametry związane z ważeniem*.

24.2. Ważenie różnicowe – przyciski szybkiego dostępu

Każdy z modów ma zestaw domyślnych przycisków, które są pokazywane automatycznie po wybraniu modu. Zestaw ten można zmodyfikować poprzez przypisanie innych przycisków szybkiego dostępu do przycisków ekranowych. Taka operacja wymaga odpowiedniego poziomu uprawnień.

Poniżej zostało opisane znaczenie tylko tych przycisków /ikon, które nie występowały w modzie Ważenie.



Ważenie A

Rozpoczęcie naważania masy początkowej <A> dla próbki. Proces realizowany jako oddzielna czynność.



Ważenie (T+A)

Rozpoczęcie ważenia masy pojemnika na próbkę (tarowanie) z automatycznym, następującym natychmiast po tarowaniu, ważeniem próbki (czynności nierozdzielne). Po zainicjowaniu procesu program żąda wprowadzenia nazwy dla próbki.




Tara (T)

Rozpoczęcie ważenia pojemnika na próbkę, realizowane jako oddzielna czynność. Po zainicjowaniu procesu program żąda wprowadzenia nazwy dla próbki.




Ważenie B

Rozpoczęcie naważania masy końcowej dla próbki. Powoduje uruchomienie ważenia różnicowego.

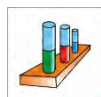


Seria

Przycisk umożliwiający wybór serii, dla której ma być realizowana procedura ważenia różnicowego.

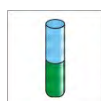

Próbka

Przycisk służący do wyboru próbki dla aktualnie realizowanego procesu w wybranej serii.

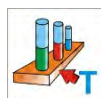

Kopiowanie tary

Przycisk umożliwiający procedurę kopiowania wartości tary określonej dla danej próbki, dla wszystkich próbek w aktualnej serii, dla których nie zapisano jeszcze wartości tary.



Usuwanie wartości

Naciśnięcie przycisku usuwa ostatnio zapisaną wartość masy (tara, ważenie A lub ważenie B).



Dodawanie próbki

Naciśnięcie przycisku powoduje wejście do okna z klawiaturą, w którym należy wpisać nazwę dodawanej próbki. Warunkiem koniecznym dodania próbki jest w pierwszej kolejności wybór serii, do której ma ona zostać dodana oraz nierozpoczęcie operacji ważeń.

24.3. Wprowadzanie serii do Bazy Serii

Baza serii składa się z serii oraz próbek, które wchodzi w jej skład. Podczas tworzenia serii należy w pierwszej kolejności podać jej nazwę, a następnie do niej dodawać próbki. Program działa intuicyjnie i prowadzi użytkownika poprzez wyświetlanie odpowiednich komunikatów. Należy podać nazwę każdej z próbek. Dodania serii do bazy można dokonać z poziomu menu ustawień dla modu ważenia różnicowego lub z poziomu Bazy Danych.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu  Bazy Danych>, nacisnąć pole <Serie>.
- Nacisnąć przycisk  Dodaj>, jeżeli ma być dodana seria.

Program automatycznie doda nową pozycję do bazy i przejdzie do jej edycji. Należy wprowadzić wszystkie dane dotyczące nowej serii.

Wykaz informacji definiowanych dla receptur:

- Nazwa: po kliknięciu w pole nazwy, zostanie otwarte nowe okno, w którym należy wprowadzić nazwę serii.
- Kod: możliwość wprowadzenia kodu serii.
- Klient: możliwość wybrania klienta, dla którego dokonywane będą pomiary w serii.
- Próbki: po kliknięciu w to pole zostanie otwarte okno z listą próbek (dla nowej serii lista jest pusta), należy dodać próbki:
 - należy nacisnąć przycisk  Dodaj>, program automatycznie doda nową pozycję do listy. Nazwa dodanej próbki będzie przypisana automatycznie (można ją zmienić).
- Liczba próbek: opcja nieedytowalna, jest aktualizowana na bieżąco przez program po dodaniu każdej kolejnej próbki.

Dla każdej z próbek na liście wyświetlany jest aktualny status w ważeniu różnicowym (etap ważenia próbki, jaki aktualnie jest wykonany).

Nowo dodane próbki nie mają przypisanego statusu – pole obok jest puste. Status aktualizowany jest na bieżąco, po każdym kolejnym etapie ważenia próbki.

24.4. Przykład realizacji procesu ważenia różnicowego

Po uruchomieniu funkcji WAŻENIE RÓŻNICOWE należy:


- wybrać informacje, jakie mają być wyświetlane na wyświetlaczu,
- wybrać odpowiednie przyciski szybkiego dostępu,
- dodać serię do pamięci wagi (nazwa identyfikuje serię),
- dodać próbki do serii (nazwa identyfikuje próbkę),
- po dodaniu próbek należy wrócić do okna głównego modu.

Wybór serii:

Nacisnąć przycisk <SERIE>. Zostanie wyświetlone okno z bazą serii.

Po wejściu do bazy serii należy nacisnąć pole z nazwą serii, seria zostanie wybrana do realizacji.

Jej nazwa pojawi się w polu informacji (tylko, gdy taka informacja była wybrana do wyświetlania).

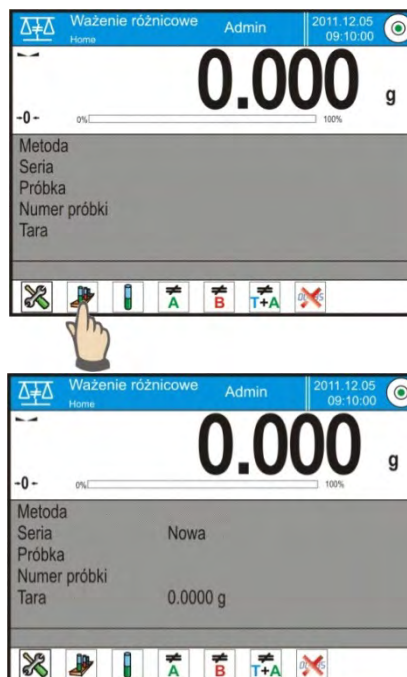

Po wybraniu serii należy, przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, wybrać sposób realizacji procesu:



Ważenie A

Ważenie masy początkowej dla próbki.



Tara (T)

Ważenie pojemnika na próbkę – tarowanie.



Ważenie (T+A)

Ważenie pojemnika na próbkę (tarowanie) i ważenie próbki (czynności następujące po sobie).



Ważenie B

Ważenie masy końcowej dla próbki. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy dana seria zawiera próbki z przeprowadzonymi ważeniami <A>. Jeśli nie ma takich próbek, opcja jest niemożliwa do wybrania.

Ważenie A

Po wybraniu opcji waga przechodzi do pierwszej próbki z listy, dla której nie wykonano jeszcze ważenia <A>. Jeśli takich próbek nie ma, to waga wyświetla komunikat, że operacja jest niemożliwa do wykonania.


Jeżeli jest możliwe wykonanie operacji, to w polu informacji pojawią się nowe dane dotyczące rozpoczętego procesu.

Podczas realizacji procesu w pasku i na ekranie będą się pojawiały odpowiednie komunikaty, informujące użytkownika o kolejnych krokach, jakie powinien wykonać.

Należy na szalce umieścić próbkę i nacisnąć

przycisk <✓>.

Po jej zatwierdzeniu przyciskiem pojawi się okno do wpisania wilgotności i temperatury

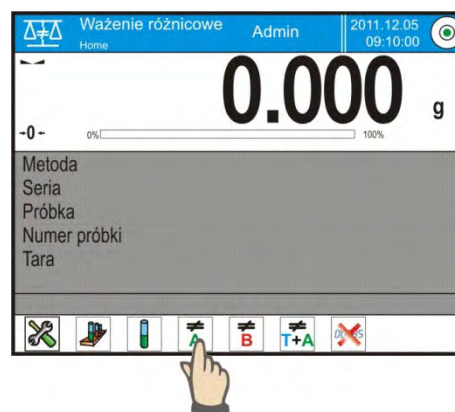


otoczenia – gdy opcja <Środowisko> ustawiona jest na <WARTOŚĆ>. Gdy opcja <Środowisko> ustawiona jest na <ONLINE> - informacje pobrane zostaną z modułu środowiskowego i pojawi się okno do ich potwierdzenia.

Uwaga:

Jeżeli w ustawieniach dla modu została wyłączona opcja <Środowisko> (wartość <Nie>), program pominie konieczność wprowadzenia tych wartości dla tego pomiaru.



Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem <  > program wróci do wyświetlania okna głównego modu i pojawi się komunikat o konieczności zdjęcia próbki z szalki (pasek komunikatów).

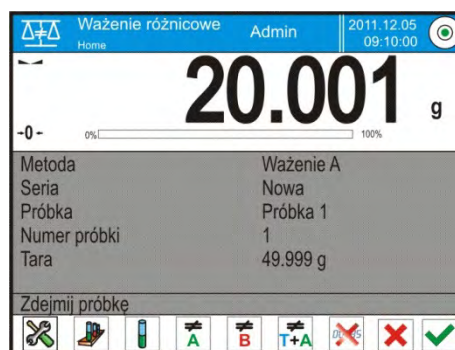

Użytkownik musi zdjąć zważoną próbkę i potwierdzić czynność przyciskiem <  >. Program automatycznie przejdzie do kolejnej próbki w serii. Postępując jak za pierwszym razem, należy dokonać ważenia kolejnej próbki.

Proces można przerwać, naciskając powtórnie przycisk <  >.

Ważenie T

Po wybraniu opcji waga przechodzi do pierwszej próbki z listy, dla której nie wykonano jeszcze ważenia <T>. Jeśli takich próbek nie ma, to waga wyświetla komunikat, że operacja jest niemożliwa do wykonania.

Jeżeli jest możliwe wykonanie operacji, to w polu informacji pojawiają się nowe dane, dotyczące rozpoczętego procesu.

Podczas realizacji procesu w pasku i na ekranie będą się pojawiały odpowiednie komunikaty, informujące użytkownika o kolejnych krokach, jakie powinien wykonać.

Należy na szalce umieścić opakowanie dla próbki i nacisnąć przycisk <  >.

Po zatwierdzeniu przyciskiem <  > pojawi się komunikat o konieczności zdjęcia opakowania z szalki (pasek komunikatów).

Użytkownik musi zdjąć zważone opakowanie i potwierdzić czynność przyciskiem

<  >. Program automatycznie przejdzie do kolejnej próbki w serii, dla której można wykonać ważenie <T>.

Postępując jak za pierwszym razem, należy dokonać ważenia kolejnych pojemników.

Proces można przerwać, naciskając powtórnie przycisk <  >.

Ważenie T+ A

Po wybraniu opcji waga przechodzi do pierwszej próbki z listy, dla której nie wykonano jeszcze ważenia <T>. Jeśli takich próbek nie ma, to waga wyświetla komunikat, że operacja jest niemożliwa do wykonania.

Jeżeli jest możliwe wykonanie operacji, to w polu informacji pojawiają się nowe dane, dotyczące rozpoczętego procesu.

Podczas realizacji procesu w pasku i na ekranie będą się pojawiały odpowiednie komunikaty, informujące użytkownika o kolejnych krokach, jakie powinien wykonać.

Należy na szalce umieścić opakowanie dla próbki i nacisnąć przycisk <  >.

Wartość masy opakowania zostanie przypisana do próbki jako wartość tary, wskazanie zostanie wyzerowane i pojawi się komunikat o konieczności umieszczenia próbki w pojemniku. Należy w zważonym pojemniku umieścić próbkę i nacisnąć

przycisk <  >.

Po zatwierdzeniu pomiaru przyciskiem <  > pojawi się okno do wpisania wilgotności i temperatury otoczenia – gdy opcja <Środowisko> ustawiona jest na <WARTOŚĆ>. Gdy opcja <Środowisko> ustawiona jest na <ONLINE> - informacje pobrane zostaną z modułu środowiskowego i pojawi się okno do ich potwierdzenia.

Uwaga:

Jeżeli w ustawieniach dla modu została wyłączona opcja <Środowisko> (wartość <Nie>), program pominie konieczność wprowadzenia tych wartości dla tego pomiaru.



Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem <  > program wróci do wyświetlania okna głównego modu i pojawi się komunikat o konieczności zdjęcia próbki z szalki (pasek komunikatów).

Użytkownik musi zdjąć zważony pojemnik z próbką i potwierdzić czynność

przyciskiem <  >. Program automatycznie przejdzie do kolejnej próbki w serii. Postępując jak za pierwszym razem, należy dokonać ważenia kolejnej próbki.

Proces można przerwać, naciskając powtórnie przycisk <  >.

W jednej serii, przy pomiarze kolejnych próbek można przeprowadzić pomiary według schematów: ważenie A, ważenie T lub ważenie T+A. Każda z próbek zapisanych w serii będzie posiadała opis; tzw. status, który informuje użytkownika o etapie, na jakim jest dana próbka. Po wejściu do bazy serii i wybraniu serii do podglądu program wyświetla okno, w którym są pokazane zapisane próbki w tej serii.

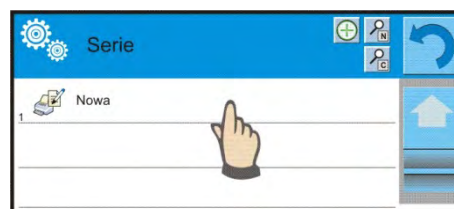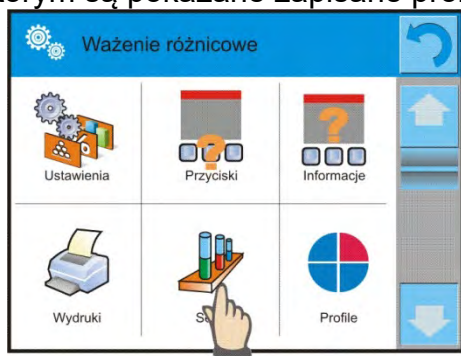

Znaczenie statusu:

- ważenie A – pomiary wykonane dla procedury <Ważenie A> lub <Ważenie T+A> ,
- ważenie T – pomiary wykonane dla procedury <Ważenie T>.

Aby wejść w szczegółowe informacje dotyczące próbki, należy nacisnąć pole z nazwą. W oknie zostaną wyświetlone informacje:

Gdy dla próbki wykonano procedurę:

- tylko ważenie A – wartość tary będzie <0> ,
- tylko ważenie T – wartość ważenia A będzie <0> ,
- ważenie T+A – dla tary i ważenia A będą przypisane wartości masy.

Dane dotyczące ważeń próbki można wydrukować na podłączonej drukarce, po kliknięciu w przycisk z drukarką w górnym pasku wyświetlacza. Aby sprawdzić dane dotyczące ważenia A, należy kliknąć w pole <Ważenie A>:

Jeżeli w danej serii są już próbki, dla których dokonano ważeń masy początkowej (ważenie A), to można dla tych próbek przeprowadzić ważenia masy końcowej (ważenie B).

Ważenie B

Wybrać opcję:



Po wybraniu opcji waga przechodzi do pierwszej próbki z listy, dla której nie wykonano jeszcze ważenia . Jeśli takich próbek nie ma, to waga wyświetla komunikat, że operacja jest niemożliwa do wykonania. Jeżeli jest możliwe wykonanie operacji, to w polu informacji pojawią się nowe dane, dotyczące rozpoczętego procesu.

Uwaga:

Przy opisie <Ważenie B> znajdują się cyfry 1/3: <1> oznacza, że jest to 1 cykl pomiarów typu B, natomiast <3> oznacza, że dla tego procesu wprowadzona jest, w ustawieniach jako <ILOŚĆ POWTÓRZEŃ>, wartość <3> (3 cykle).

Należy pamiętać, że program będzie proponował w pierwszej kolejności wykonanie <PIERWSZEGO> cyklu z <3> dla wszystkich próbek w serii, dla których jest możliwe wykonanie tego pomiaru (warunkiem jest wykonanie dla próbki ważenia A).

Podczas realizacji procesu w pasku i na ekranie będą się pojawiały odpowiednie komunikaty, informujące użytkownika o kolejnych krokach, jakie powinien wykonać.

Jeżeli do danej próbki jest przypisana tara, to wartość tary zostanie wyświetlona na ekranie masy ze znakiem minus. Należy na szalce umieścić próbkę (jeśli przypisana

jest tara, to próbkę należy umieścić w pojemniku) i nacisnąć przycisk .

Po zatwierdzeniu przyciskiem pojawi się okno do wpisania wilgotności

i temperatury otoczenia – gdy opcja <Środowisko> ustawiona jest na <WARTOŚĆ>.

Gdy opcja <Środowisko> ustawiona jest na <ONLINE> - informacje pobrane zostaną z modułu środowiskowego i pojawi się okno do ich potwierdzenia.

Uwaga:

Jeżeli w ustawieniach dla modu została wyłączona opcja <Środowisko> (wartość <Nie>), program pominie konieczność wprowadzenia tych wartości dla tego pomiaru.

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem  program wróci do wyświetlania okna głównego modu i pojawi się komunikat o konieczności zdjęcia próbki z szalki (pasek komunikatów).

Użytkownik musi zdjąć zważoną próbkę i potwierdzić czynność przyciskiem . Program automatycznie przejdzie do kolejnej próbki w serii. Postępując jak za pierwszym razem, dokonać ważenia kolejnej próbki.

Proces można przerwać, naciskając powtórnie przycisk .

Po wykonaniu pomiarów dla ważenia mas końcowych próbek w serii użytkownik może sprawdzić wyniki w bazie serii. W takim przypadku należy po wejściu do bazy serii wybrać serię, a następnie próbki i konkretną próbkę, dla której było wykonane <Ważenie B>.




Próbka 1	
1	Nazwa: Próbka 1
2	Status: Ważenie B
3	Tara: 49,999 g
4	Ważenie A: 20,001 g
4	Ważenie B: 20,001 g

Po wybraniu konkretnego ważenia do podglądu w oknie zostaną wyświetlone informacje z wartościami. Numery przy danych dotyczących ważenia oznaczają cykle pomiarów. Dane dotyczące wybranej serii można drukować lub eksportować do pliku.

24.5. Kopiowanie tary

Opcja pozwalająca skopiować jedną, wybraną wartość tary z próbki w danej serii do wszystkich próbek, dla których nie zostały przypisane tary i proces ważenia różnicowego nie został zakończony (status inny niż ważenie B).

Sposób realizacji:

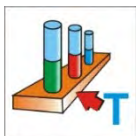


Nacisnąć przycisk:

Zostanie wyświetlona lista próbek, do których są przypisane tary.

Należy kliknąć w wartość tary, która ma być użyta dla pozostałych próbek w serii (nieposiadających tary).

Program automatycznie przypisze wybraną wartość do danych tych próbek.

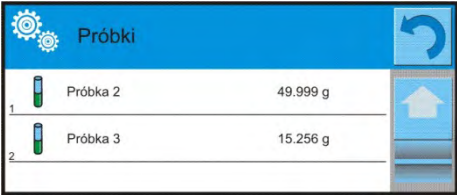

Próbki		
1	Próbka 2	49.999 g
2	Próbka 3	15.256 g


24.6. Użycie opcji WYBÓR PRÓBK

Opcja pozwalająca na wybór próbki przygotowanej do ważenia, bez konieczności ważenia próbek w kolejności proponowanej przez program. Opcja dostępna tylko po rozpoczęciu danego procesu.

Sposób realizacji:

Znajdując się w modzie ważenia różnicowego, po wybraniu serii, należy nacisnąć przycisk wyboru procedury np. <Ważenie A>.

Nacisnąć przycisk:

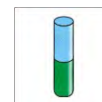

Zostanie wyświetlona lista próbek, dla których można wykonać wybraną procedurę.

Należy z listy wybrać próbkę do ważenia.

Opcja szczególnie przydatna, gdy w serii jest wiele próbek, a użytkownik ma zważyć próbkę, która znajduje się na końcu serii.



Próbki		
1	Próbka 1	Tara
2	Próbka 2	Tara
3	Próbka 3	
4	Próbka 4	

24.7. Usuwanie wartości

Opcja pozwalająca usunąć, w przypadku pomyłki, ostatnio dodane ważenie z bazy. Dotyczy to wszystkich procesów w modzie. Program pozwala na usunięcie tylko ostatniej operacji

pomiaru. Po zapisaniu ważenia (próbki lub tary), jeśli operacja została omyłkowo zatwierdzona (pomyłona próbka lub pojemnik), należy nacisnąć przycisk:

Ważenie zostanie automatycznie usunięte, a program wróci do poprzedniego kroku procedury. Operację można wykonać tylko jednokrotnie. Próba użycia opcji po raz drugi spowoduje wyświetlenie komunikatu o nieprawidłowej operacji i kasowanie nie zostanie wykonane.

24.8. Wydruki

Opcja Wydruki umożliwia ustawienie zawartości poszczególnych elementów wydruku standardowego, jak również wydruku niestandardowego.

Wydruk standardowy

Składa się z pięciu wewnętrznych bloków, które zawierają różne zmienne. Dla każdej zmiennej należy ustawić opcję TAK – jeżeli ma być drukowana lub NIE – jeżeli ma nie występować na wydruku.

Ustawienia dla wydruków nagłówka, ważenia i stopki podane są w pkt. 14.5, poniżej pokazano ustawienia dla danych, dotyczących serii i próbki w ważeniu różnicowym.

Użytkownik może zaprojektować zawartości wydruków.



Zawartość wydruków dla serii:	Zawartość wydruków dla próbek:
– Kreski – Klient – Próbki – Pusta linia – Kreski – Podpis – Wydruk niestandardowy	– Kreski – Próbką – Numer próbki – Status – Tara – Temperatura – Wilgotność – Ciśnienie – Wydruk niestandardowy – Ważenie A • Ważenie A • Data • Czas • Wypoziomowanie • Magazyn • Towar • Opakowanie • Zmienna uniwersalna 1...5 • Netto • Tara • Wydruk niestandardowy – Ważenie B • Ważenie B • Data • Czas • Wypoziomowanie • Magazyn • Towar • Opakowanie • Zmienna uniwersalna 1...5 • Netto • Tara • Interwał • Różnica • Różnica % • Reszta % • Wydruk niestandardowy

25. STATYSTYCZNA KONTROLA JAKOŚCI - SQC

Mod pracy  **Statystyczna Kontrola Jakości** jest przydatny podczas różnego rodzaju procesów pakowania produktów w celu monitorowania i/lub kontroli procesu pakowania. Umożliwia wykrywanie nadmiarowych i niedomiarowych ilości produktu w opakowaniach.

Jeśli próbki są ważone, a wyniki są przechowywane w bazie, program umożliwia analizę trendów, które mogą być wyświetlane w formie wykresów.

Program umożliwia przeprowadzenie kontroli serii składającej się maksymalnie z 1000 próbek.

Każda przeprowadzona kontrola jest zapisywana w bazie danych SQC i w każdej chwili można obejrzeć jej wyniki. Dla każdej serii są wyliczane i przechowywane w bazie następujące dane: maksimum, minimum, odchylenie standardowe, średnie wartości dla każdej partii itp.

Proces kontroli SQC można wykonać ręcznie (po naciśnięciu klawisza <PRINT> dla każdego pomiaru) lub automatycznie (pomiaru są automatycznie rejestrowane, po osiągnięciu stabilności wskazania dla każdej próbki).

W wagach został zaimplementowany moduł realizujący statystyczną kontrolę, którego podstawą jest baza danych, zawierająca wykaz towarów wraz z zadeklarowanymi dla każdego z nich błędami <T2->; <T1->; <T1+> i <T2+>.

Kontrola rozpoczęta z wagi zostaje automatycznie zakończona po skontrolowaniu odpowiedniej ilości próbek, która jest ustalana przez użytkownika w ustawieniach modu SQC.

Po zakończeniu kontroli generowany jest raport końcowy, zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące kontroli i możliwe jest wydrukowanie go na podłączonej drukarce. Dane z kontroli zapisywane są także automatycznie w Bazie Raportów SQC.

Cykl kontroli przebiega według następującego schematu:

- wybór użytkownika,
- wybór towaru,
- rozpoczęcie kontroli,
- pobieranie ważeń,
- automatyczne zakończenie kontroli po zważeniu określonej ilości próbek (partia),
- wydruk raportu z kontroli.

25.1. Procedura uruchomienia modu pracy

Aby rozpocząć kontrolę:

- Powinien być zalogowany operator o uprawnieniach do przeprowadzania kontroli.

Uwaga:

1. *Do rozpoczęcia kontroli musi być wybrany użytkownik o stopniu uprawnień co najmniej <Użytkownik>. Jeżeli zalogowany operator lub operator anonimowy posiada stopień uprawnień <Gość>, to podczas startu kontroli program wyświetli komunikat: <Brak uprawnień>.*
2. *Procedura logowania opisana jest w pkt. 8 instrukcji, natomiast procedura określania uprawnień dla użytkowników urządzenia opisana jest w pkt. 12 instrukcji.*

- Należy wprowadzić do pamięci wagi ogólne parametry modu pracy < **SQC**>, opis znajduje się w punkcie 26.2.
- Należy wybrać odpowiedni towar (odpowiedni przycisk w pasku przycisków < > lub na klawiaturze urządzenia z poprawnie wprowadzonymi danymi odnośnie kontroli):

Uwaga:

Dane dla towaru, niezbędne do uzupełnienia przed rozpoczęciem kontroli, znajdują się w tabeli poniżej:

	Masa	Masa nominalna towaru.
	Tara	Masa opakowania w jednostce kalibracyjnej.
	SQC	
	Tryb progów	Deklaracja czy wartości progów będą wpisywane w jednostkach masy [g], czy w procentach od wartości nominalnej towaru.
	Liczność partii	Deklaracja liczności kontrolowanej partii.
	Wartość błędu [T4-]	Wartość granicznego błędu T4 na minus od masy nominalnej.
	Wartość błędu [T3-]	Wartość granicznego błędu T3 na minus od masy nominalnej.
	Wartość błędu [T2-]	Wartość granicznego błędu T2 na minus od masy nominalnej.
	Wartość błędu [T1-]	Wartość granicznego błędu T1 na minus od masy nominalnej.
	Wartość błędu [T1+]	Wartość granicznego błędu T1 na plus od masy nominalnej.
	Wartość błędu [T2+]	Wartość granicznego błędu T2 na plus od masy nominalnej.
	Wartość błędu [T3+]	Wartość granicznego błędu T3 na plus od masy nominalnej.
	Wartość błędu [T4+]	Wartość granicznego błędu T4 na plus od masy nominalnej.
	Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn-T4]	Wartość ilości granicznej występowania błędów T4 na minus od masy nominalnej.
	Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn-T3]	Wartość ilości granicznej występowania błędów T3 na minus od masy nominalnej.
	Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn-T2]	Wartość ilości granicznej występowania błędów T2 na minus od masy nominalnej.
	Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn-T1]	Wartość ilości granicznej występowania błędów T1 na minus od masy nominalnej.
	Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn+T1]	Wartość ilości granicznej występowania błędów T1 na plus od masy nominalnej.
	Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn+T2]	Wartość ilości granicznej występowania błędów T2 na plus od masy nominalnej.
	Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn+T3]	Wartość ilości granicznej występowania błędów T3 na plus od masy nominalnej.

		Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn+T4]	Wartość ilości granicznej występowania błędów T4 na plus od masy nominalnej.
--	---	---	--

Uwaga:

Edycja towarów w bazie danych opisana jest w pkt. 30.2 instrukcji.

- Po powrocie do okna głównego modu < **SQC**> nacisnąć ekranowy przycisk funkcyjny  (start kontroli), znajdujący się w dolnej części wyświetlacza wagi.
- Automatycznie zostanie wyświetlone pole edycyjne <**Numer Partii**> z klawiaturą ekranową (tylko wtedy, gdy w ustawieniach dla modu zostanie wybrana wartość <TAK> dla opcji <Pytaj o numer partii>).
- Należy wpisać żądany numer partii kontrolowanego towaru i potwierdzić przyciskiem .

Uwaga:

Użytkownik ma możliwość przerywania kontroli w dowolnym momencie, naciskając

ekranowy przycisk funkcyjny  (stop kontroli), znajdujący się w dolnej części wyświetlacza wagi.

Podczas kontroli pozostałe przyciski ekranowe, przyciski funkcyjne, przycisk  oraz  są zablokowane.

25.2. Ustawienia dodatkowe związane z SQC

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań.

Z procesem SQC związane są takie ustawienia, jak:

– Pytaj o numer partii

Ustawienie wartości na <TAK> spowoduje żądanie przez program podania numeru partii produktów przed rozpoczęciem każdej procedury kontroli.

Procedura:

Należy wybrać parametr: <Pytaj o numer partii>, po czym zostanie wyświetlone okno z możliwymi nastawami: Nie – opcja wyłączona; Tak – opcja włączona.

Należy wybrać żadaną wartość, po jej wybraniu program wróci do wyświetlania poprzedniego okna.

– Numer partii

Parametr umożliwiający wprowadzenie numeru do identyfikacji partii kontrolowanych towarów.

Procedura:

Należy wybrać parametr: < Numer partii>, po czym zostanie wyświetlone pole edycyjne < Numer partii> z klawiaturą alfanumeryczną.

Należy wpisać żadaną wartość numeru partii i potwierdzić przyciskiem .

- Zasadę użytkowania zawiera punkt 15.8 *Dodatkowe parametry związane z ważeniem*.

25.3. Przeprowadzanie kontroli


Przed rozpoczęciem procesu należy wybrać towar do kontroli z bazy towarów, używając przycisku szybkiego dostępu < Towar>. Po wybraniu towaru można rozpocząć proces

kontroli. W tym celu należy nacisnąć przycisk  w dolnym pasku wyświetlacza. Program automatycznie wyświetli okno z klawiaturą do wprowadzenia numeru partii kontrolowanego towaru, jeżeli została włączona opcja. Po wpisaniu numeru partii i zatwierdzeniu go program przechodzi do kolejnych kroków procesu. W trakcie przeprowadzania kontroli program na bieżąco analizuje wyniki pomiarów i wyświetla je w odpowiednich polach wyświetlacza, informując użytkownika o wynikach kontroli.

Komunikaty wyświetlane podczas kontroli:

Liczność partii 1 / 10 - Polecenie dotyczące przebiegu procesu i ilość wszystkich pomiarów dla danej partii.

Towar - Nazwa kontrolowanego towaru.

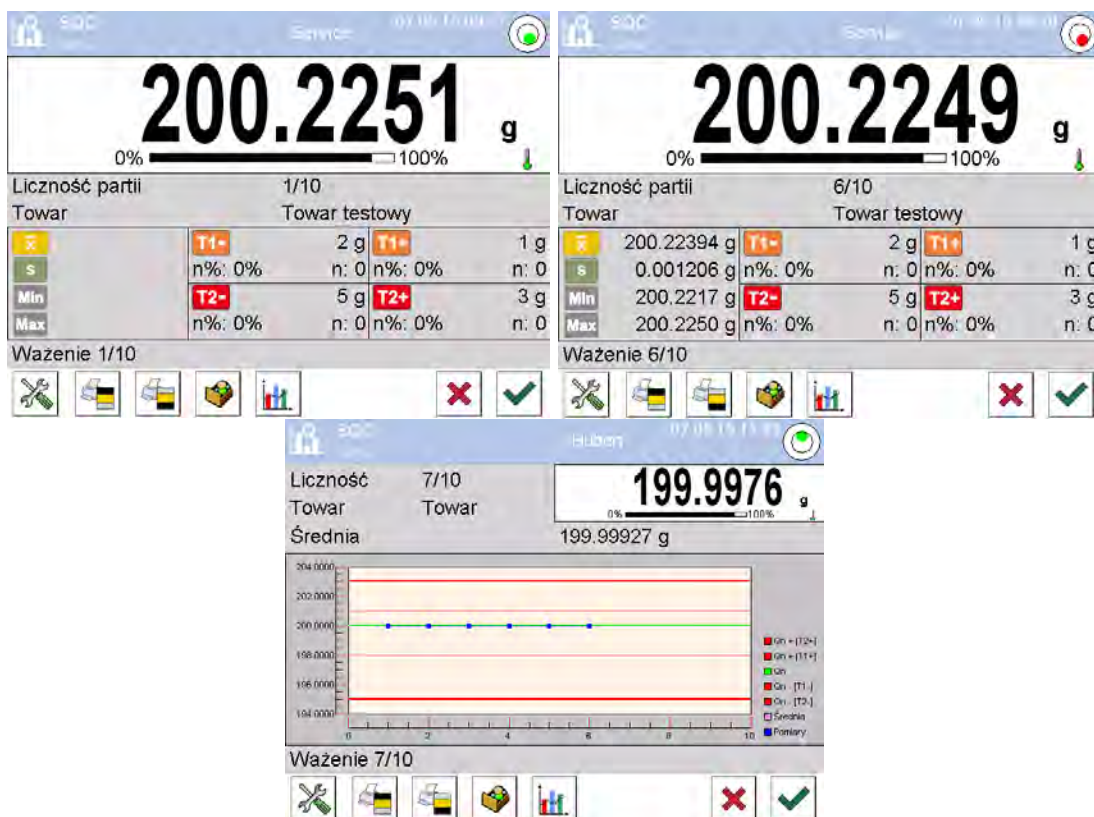

• Status kontroli

Status kontroli odpowiednią interpretacją graficzną (kolor tła) informuje użytkownika o przekroczeniu granicznych wartości ilości błędów. Wartości i ilości błędów są wprowadzane przez użytkownika dla badanego towaru.

T1-	-1 g
Max: 2	n: 1
T2-	-3 g
Max: 1	n: 1

- kolor żółty ostrzega, że wystąpienie kolejnego błędu **T1-** spowoduje, że wynik kontroli będzie negatywny,
- kolor czerwony ostrzega, że wystąpił błąd **T2-** który spowodował, że wynik kontroli jest negatywny.

Po zakończeniu kontroli zostaje wygenerowane podsumowanie (raport) procesu, a przeprowadzona kontrola zostanie automatycznie zapisana w bazie danych wagi.

Uwaga:

Wzór i przykład raportu z kontroli opisany jest w pkt. 26.4 instrukcji.

25.4. Raport z kontroli towaru

Przykładowy wygląd raportu z przeprowadzonej kontroli SQC.			
----- Nr raportu: W/16/07/15/07/45 ----- -----		Liczba błędów [T1+]	0
		Liczba błędów [T2+]	0
		Min	50.0525 g
		Max	50.3638 g
		Średnia	50.291163 g
		Suma	1508.7349 g
		Odchylenie standardowe	0.133916 g
		Metoda	SQC
Typ wagi	xx 4Y	Wynik	Pozytywny
Zakres	10 kg	Pomiary 1. 50.0525 g 2. 50.0525 g 3. 50.0525 g 4. 50.0525 g . ----- Podpis	
Działka wagi	0.01 g		
ID wagi	442566		
Data rozpoczęcia	16.07.15 07:41:55		
Data zakończenia	16.07.15 07:45:25		
Użytkownik	Kowalski		
Towar	TEST 01		
Numer partii			
Masa nominalna	50 g		
Tara	0 g		
Wartość błędu [T1-]	1 g		
Wartość błędu [T2-]	3 g		
Wartość błędu [T1+]	1.5 g		
Wartość błędu [T2+]	4 g		
Liczność partii	100		
Liczba pomiarów	30		
Liczba błędów [T1-]	0		
Liczba błędów [T2-]	0		

Wzór raportu:

Użytkownik wagi w podmenu < **Wydruki** /  **Projekt wydruku raportu SQC**> ma możliwość edycji wzoru raportu z kontroli towaru. Zmienne, dla których została ustawiona wartość <Tak>, będą drukowane.

26. ZATRZASK MAKSYMALNEGO WYNIKU

Jest to funkcja, która umożliwia zatrzaśnięcie maksymalnego nacisku dołożonego do szalki wagi podczas jednego procesu dociążania wagi.

Oprócz standardowych ustawień dla tego modu (opisane w modzie Ważenie), wprowadzono dodatkowe ustawienie wartości progu działania funkcji.

26.1. Ustawienia dodatkowe związane z modem Zatrzaśk Max

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie modu pracy do własnych wymagań. Dostęp do nich opisany jest poniżej:

Procedura:

1. Nacisnąć szare pole informacyjne.
 2. Wyświetlacz pokaże menu: Ustawienia, Przyciski, Informacje, Wydruki, serie, Profil.
 3. Nacisnąć menu <Ustawienia>.
 4. Wyświetlacz pokaże funkcje związane z ważeniem różnicowym.
- **PRÓG** – określa punkt rozpoczęcia kontroli maksymalnego nacisku na szalkę przez program wagi. Należy pamiętać, aby próg ten ustawić zgodnie z potrzebami przed rozpoczęciem procesu pomiarowego.

26.2. Sposób działania

- Należy wejść do modu <Zatrzaśk Max>.

Po wybraniu modu funkcja jest aktywna. W celu poprawnego działania należy ustawić próg w gramach, określający punkt, po przekroczeniu którego funkcja zacznie rejestrowanie nacisku Max.

- Od tego momentu waga rejestruje i zatrzymuje każde wskazanie, które jest powyżej progu oraz jest większe niż poprzednio zatrzaśnięty wynik. Jeżeli program wykryje masę powyżej progu, największe wskazanie z wykrytych zostanie zatrzaśnięte na głównym wyświetlaczu i pojawi się piktogram <Max> z lewej strony wyświetlacza.



Użytkownik może wydrukować wynik, naciskając przycisk .

Rozpoczęcie kolejnego procesu badania maksymalnego nacisku następuje po zdjęciu

obciążenia z szalki i naciśnięciu przycisku . Spowoduje to powrót do okna głównego modu <Zatrask Max> i automatyczne wykasowanie piktogramu <Max> z lewej strony wyświetlacza.

27. KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH

(funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym)

Mod pracy <eKTP> realizuje kontrolę towarów paczkowanych (jednostanowiskową lub sieciową), której podstawą jest baza danych, zawierająca wykaz towarów oraz operatorów. Kontrola rozpoczęta z wagi zostaje automatycznie zakończona po skontrolowaniu odpowiedniej ilości paczek (próbka).

Wagi mają możliwość połączenia z programem komputerowym **E2R SYSTEM**, tworząc system wielostanowiskowy (sieć). Każda waga jest niezależnym stanowiskiem wagowym, a informacje o przebiegu kontroli przesyłane są na bieżąco do programu komputerowego. Program komputerowy umożliwia zbieranie danych w czasie rzeczywistym z każdej podłączonej wagi. System umożliwia rozpoczęcie kontroli z poziomu wagi lub z poziomu programu komputerowego.

Na podstawie zebranych danych można dokonać oceny jakości produkowanych wyrobów paczkowanych:

- w kwestii zgodności z wymaganiami Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 kwietnia 1997r. w sprawie wymagań dotyczących kontroli ilościowej towarów paczkowanych – poprzez losowe wybranie wyników pomiarów i przesłanie ich do procedury **kontroli towarów paczkowanych** (DOTYCZY UNII EUROPEJSKIEJ),
- w kwestii zgodności z zakładowym systemem kontroli jakości (kontrola wewnętrzna).

Cykl kontroli przebiega według następującego schematu:

- wybór użytkownika,
- wybór towaru,
- rozpoczęcie kontroli,
- pobieranie ważeń,

- automatyczne zakończenie kontroli po zważeniu określonej ilości paczek,
- wydruk raportu z kontroli.

Uwaga:

Nawiązanie połączenia wagi z  **E2R System** jest opisane w punkcie instrukcji dotyczącym ustawień urządzeń – „KOMPUTER”.

27.1. Procedura uruchomienia modu pracy

Procedura:

Znajdując się w głównym oknie programu, należy nacisnąć ikonę , umieszczoną na górnej belce okna, po czym zostanie otwarte podmenu **<Mody pracy>**, zawierające listę modów pracy do wyboru. Należy wybrać mod **<e KTP>**, po czym zostanie wyświetlony ekran początkowy modu pracy:

- Jednocześnie w pasku komunikatów zostanie wyświetlony komunikat **<Rozpocznij kontrolę>** oraz zostanie wyświetlony przycisk w dolnym pasku okna:



Start kontroli




27.2. Okno ustawień kontroli

Uwaga:

Przed wejściem do okna ustawień kontroli należy dokonać procedury logowania, zgodnie z opisem w instrukcji („LOGOWANIE”).

Po naciśnięciu przycisku  w oknie początkowym modu pracy **<e KTP>** zostanie otwarte okno ustawień kontroli:

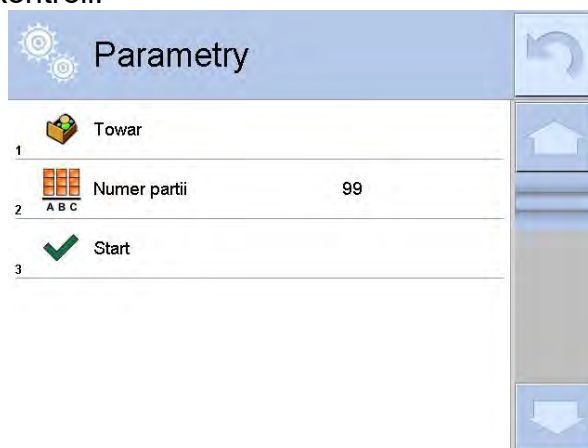

Przy czym:




Wybór towaru z bazy danych



Numer partii

27.3. Ustawienia lokalne modu pracy KTP

Ustawienia lokalne dla modu pracy <e KTP> są dostępne po kliknięciu w szare pole informacji, w oknie głównym modu kontroli towarów paczkowanych:

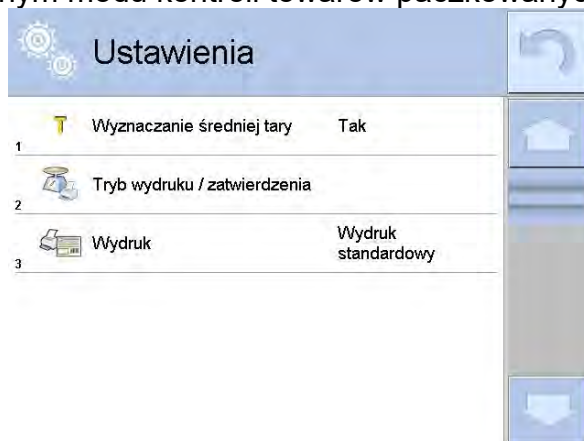

	Wyznaczanie średniej tary	Włączenie lub wyłączenie opcji wyznaczania wartości średniej tary przed rozpoczęciem kontroli.
	Tryb wydruku/zatwierdzenia	Opis szczegółowy w punkcie instrukcji: <DODATKOWE PARAMETRY ZWIĄZANE Z WAŻENIEM>.
	Wydruk	

27.4. Edycja towaru dla kontroli

Edycji towaru dokonuje się w podmenu < / Bazy Danych>.

Uwaga:

W przypadku współpracy z programem komputerowym < E2R System> edycja baz danych w wadze jest zablokowana. Edycja oraz eksport towarów do wag odbywa się za pomocą programu komputerowego.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu < / Bazy Danych>.
- Następnie wejść do bazy < Towary> i nacisnąć żadaną pozycję.

Wykaz danych definiowanych dla kontroli:

Ikona	Nazwa danych	Opis
	Nazwa	Nazwa towaru.
	Kod	Kod towaru.
	Kod EAN	Kod EAN towaru.
	Masa	Masa nominalna towaru.
	Tara	Wartość tary towaru (ustawiana automatycznie przy wyborze towaru z bazy).
	Tryb KTP	Rodzaj kontroli: Nieniszcząca Średnia Tara, Nieniszcząca Puste-Pelne, Niszcząca Pelne -Puste, Niszcząca Puste-Pelne.

	Szarża	Seria pomiarowa dla kontroli: Nieniszcząca Puste-Pelne, Niszcząca Pelne-Puste, Niszcząca Puste-Pelne.
	Jednostka	Jednostka miary towaru: [g] lub [ml].
	Liczność partii	Deklaracja liczności kontrolowanej partii.
	Interwał wyznaczania średniej tary	Przedział czasowy w [h] określający, jak często należy wyznaczać średnią tarę dla danego towaru..
	Ilość opakowań	Deklaracja ilości sztuk opakowań podlegających procesowi wyznaczania średniej tary (dla kontroli Nieniszcząca Średnia Tara).
	Kontrola wewnętrzna	Podmenu definiowania kryteriów wewnętrznych dla kontroli (patrz: poniższa tabela).
	Gęstość	Gęstość towaru (zakres wpisywanych wartości musi zawierać się od 0,1g/cm ³ do 5g/cm ³).

Poza wyżej wymienionymi są jeszcze dostępne inne opcje dla towaru, które mogą być wykorzystywane w innych modach pracy wagi (np. DOWAŻANIE – PROGI, itp.)

Wykaz danych dla kryteriów wewnętrznych:

Kontrola wewnętrzna	Włączenie <TAK>/wyłączenie <NIE> kryteriów kontroli wewnętrznej.
Liczność próbki	Wartość liczności próbki dla towaru.
Wartość błędu [- T]	Wartość błędu ujemnego granicznego -T, wpisana w jednostkach masy ustalonych dla towaru. Pomiary poniżej wartości Qn-T będą uznawane za wadliwe.
Wartość błędu [+ T]	Wartość błędu dodatniego granicznego +T, wpisywana w jednostkach masy ustalonych dla towaru. Pomiary powyżej wartości Qn+T będą uznawane za wadliwe.
Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn - 2T]	Ilość występowania błędów ujemnych -2T w badanej próbce, które dyskwalifikują kontrolę.
Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn + 2T]	Ilość występowania błędów dodatnich +2T w badanej próbce, które dyskwalifikują kontrolę.
Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn - T]	Ilość występowania błędów ujemnych -T w badanej próbce, które dyskwalifikują kontrolę.
Liczność próbek dyskwalifikujących [Qn + T]	Ilość występowania błędów dodatnich +T w badanej próbce, które dyskwalifikują kontrolę.
Granica średniej	Tryb wyliczania wartości granicy średniej (stała lub automatyczna).
Granica średniej [-]	Wartość granicy średniej (ujemnej) dla badanej próbki (dotyczy wartości granicy średniej jako „stała”).
Granica średniej [+]	Wartość granicy średniej (dodatniej) dla badanej próbki (dotyczy wartości granicy średniej jako „stała”).
Wartość współczynnika [-Wk]	Mnożnik odchylenia standardowego dla wartości granicy średniej (ujemnej), wyznaczanej w trybie automatycznym.

Wartość współczynnika [+Wk]

Mnożnik odchylenia standardowego dla wartości granicy średniej (dodatniej), wyznaczanej w trybie automatycznym.

27.5. Procedura rozpoczęcia kontroli

Aby rozpocząć kontrolę:

- Powinien być zalogowany operator o uprawnieniach do przeprowadzania kontroli.
Uwaga: Procedura logowania i określania uprawnień dla użytkowników urządzenia opisana jest w punkcie instrukcji dotyczącym logowania.
- Należy wybrać odpowiedni towar, z poprawnie wprowadzonymi danymi odnośnie kontroli:

- Wprowadzić do pamięci wagi ogólne parametry modu pracy:

Numer partii – do identyfikacji partii kontrolowanych towarów.

Liczność partii – według tej liczby program przyjmie odpowiednią wielkość próbki do kontroli.

Opcję wyznaczania średniej tary oraz ilości opakowań do jej wyznaczenia, nie mniejszej jednak niż 10.

- Usunąć obciążenie z szalki wagi.
- Nacisnąć pole START , znajdujące się w dolnej części okna ustawień. Program przejdzie do wyświetlania głównego okna kontroli towaru, w którym będą wprowadzone dane.

Uwaga: Jeżeli użytkownik przed rozpoczęciem kontroli:

- Nie usunął obciążenia z szalki wagi lub nie zostały spełnione pozostałe warunki zerowania (np. niestabilny wynik ważenia), waga wyświetli komunikat: **<-Err 2>**. W takim przypadku należy usunąć obciążenie z szalki i poczekać, aż zostaną spełnione warunki do wyzerowania wagi.
- Nie dokonał procedury logowania lub zalogowany operator nie ma uprawnień do przeprowadzenia kontroli, waga wyświetli komunikat: **<Brak uprawnień>**.
- Nie wybrał towaru z bazy danych, wtedy waga wyświetli komunikat: **<Nie wybrano towaru>**.

27.6. Procedura przerwania kontroli

Po rozpoczęciu kontroli użytkownik ma możliwość jej przerwania w dowolnym momencie, naciskając ekranowy przycisk funkcyjny  (stop kontroli), znajdujący się w dolnej części okna procesu.

Po naciśnięciu przycisku  (stop kontroli) zostanie wyświetlony komunikat:



Naciśnięcie przycisku  spowoduje powrót do trwającej kontroli. Naciśnięcie przycisku  spowoduje zakończenie kontroli i powrót do okna ustawień modu pracy **KTP**.

Jednocześnie w bazie danych <e Kontrole> zostanie zapisany raport z kontroli ze statusem <Przerwana>.

27.7. Procedura przywracania przerwanej kontroli w chwili zaniku zasilania wagi


Program na bieżąco zapisuje wyniki kontroli, co zabezpiecza użytkownika przed utratą danych (podczas trwania kontroli) w chwili zaniku zasilania wagi.

Jeżeli podczas trwania kontroli zostanie wyłączone zasilanie wagi, to program umożliwia dokończenie przerwanej kontroli po ponownym włączeniu zasilania wagi.

Uwaga:

Należy pamiętać, aby przed ponownym włączeniem wagi bezwzględnie zdjąć ładunek z szalki. Uruchomienie wagi powinno być zawsze dokonywane przy pustej szalce.

Podczas procedury uruchamiania wagi program sprawdza, czy nie ma w pamięci rozpoczętej kontroli. Jeżeli jest, na zakończenie procedury uruchomieniowej zostanie wyświetlone okno z pytaniem, czy program ma przejść do rozpoczętej kontroli.

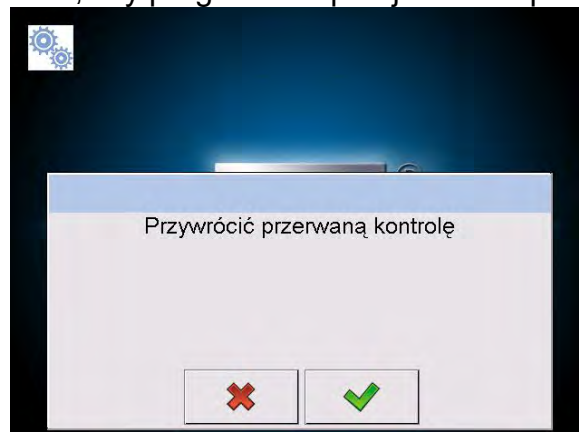

Naciśnięcie przycisku  spowoduje zakończenie kontroli, która została przerwana i wejście do ważenia. Naciśnięcie przycisku  spowoduje powrót do przerwanej kontroli, do miejsca, w którym została ona przerwana.

27.8. Przeprowadzanie kontroli Nieniszczącej w trybie ze średnią tarą

Przed rozpoczęciem kontroli użytkownik ma możliwość przeprowadzania procesu wyznaczania średniej tary poprzez ważenie opakowań. Taka możliwość istnieje po uaktywnieniu funkcji **<Wyznaczanie Średniej Tary>** w oknie ustawień modu pracy **KTP** (po naciśnięciu szarego pola wyświetlacza głównego w parametrach **<USTAWIENIA>**). Podczas kontrolowania tary jest wyświetlane następujące okno:

The screenshot shows the KTP control interface. At the top, it says 'KTP Admin' and '2013.05.28 10:28:08'. The main display shows '0.00 g'. Below the display is a progress bar from 0% to 100%. The interface is divided into sections: 'Towar' (Goods) with a value of '1', a table of parameters, and 'Postaw puste' (Empty container) with a value of '1 / 10'. The table has columns for 'T' (Tara), '2T' (Tara), 'Net' (Net weight), and 'Tara' (Tara). The values are: T Max: 3, 2T Max: 0, Net: 0.00 g, Tara: 0.00 g. At the bottom, there are icons for 'Tools', 'Box', 'Bar chart', 'Info', 'Cancel', and 'OK'.

Przy czym:

Towar

0,25T

$\bar{x}_{op}$

S

T_{Lo}

2T_{Lo}

Net

→T←

⊕

Postaw puste

1 / 10

Bar chart icon

Info icon


Cancel icon

- Nazwa towaru.
- Wartość warunku **0,25T** w [g].
- Średnia masa opakowania w [g].
- Odchylenie standardowe.
- Charakterystyka błędów ujemnych **T1** w próbce.
- Charakterystyka błędów ujemnych **2T1** w próbce.
- Masa netto kontrolowanego opakowania.
- Tara opakowania.
- Status kontroli opakowania.
- Polecenie dotyczące przebiegu procesu z ilością wszystkich opakowań do zważenia.
Zmiana obszaru roboczego na wykres.
- Wykres dotyczy tylko kontroli masy i podczas wyznaczania średniej wartości tary nie będzie podglądu rozkładu masy opakowania.
- Przycisk pozwalający wyświetlić informacje o kontroli.
- Przerwanie procesu.

Uwaga:

Aby towar mógł być kontrolowany w trybie kontroli **Nieniszcząca Średnia Tara**, zgodnie z Ustawą, odchylenie standardowe „S” masy opakowania, wyznaczone z co najmniej **10** pomiarów, nie może być większe niż **0.25** maksymalnego dopuszczalnego błędu ujemnego **T** dla nominalnej masy paczki.


Gdy użytkownik dokona ostatniego pomiaru masy opakowania, program wyświetli podsumowanie, a raport z przeprowadzonego procesu zostanie automatycznie zapisany w bazie danych wagi:

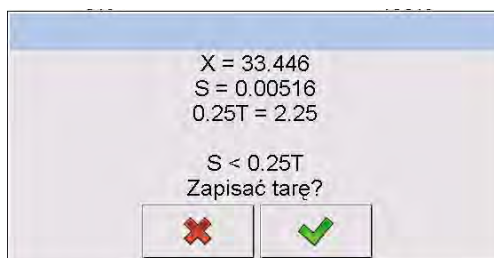

Naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście do kontroli bez zapisania nowo wyznaczonej średniej masy opakowania w danych towaru.

Naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście do kontroli i jednocześnie zapisanie nowo wyznaczonej średniej masy opakowania w danych towaru.



W trakcie przeprowadzania kontroli program na bieżąco analizuje wyniki pomiarów i wyświetla je w odpowiednich polach wyświetlacza, informując użytkownika o wynikach kontroli:

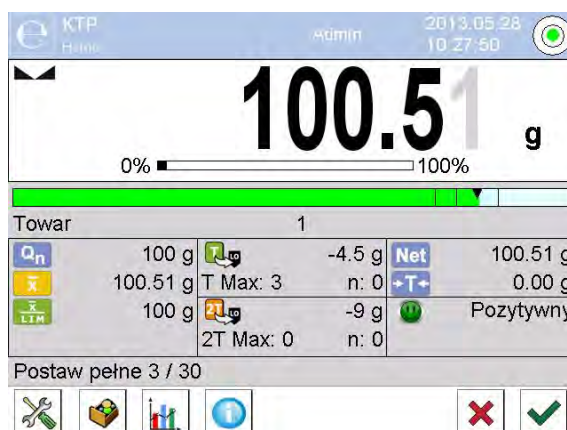

Przy czym:
Bargraf

- Informacja graficzna o masie netto produktu:
kolor zielony paska – masa zawarta w zakresie tolerancji: [-T] a [+T] masy netto,
kolor żółty paska – masa zawarta w zakresie tolerancji: [-T] a [-2T] masy netto,
kolor czerwony paska – masa poniżej masy [NETTO – 2T].
- Nazwa kontrolowanego towaru.
- Wartość nominalna kontrolowanego towaru.
- Średnia masa kontrolowanego towaru.
- Wartość średniej dyskwalifikującej.
- Charakterystyka błędów ujemnych T w próbce:
-9g - wartość błędu ujemnego T,
T Max - dopuszczalna liczba błędów ujemnych T,
n - rzeczywista liczba błędów ujemnych T.
- Charakterystyka błędów ujemnych 2T w próbce:
-18g - wartość błędu ujemnego 2T,
2T Max - dopuszczalna liczba błędów ujemnych 2T,
n - rzeczywista liczba błędów ujemnych 2T.
- Masa netto kontrolowanego towaru.
- Tara opakowania.
- Status kontroli: pozytywny, negatywny.
- Polecenie dotyczące przebiegu procesu z ilością wszystkich pomiarów dla danej partii.

Towar

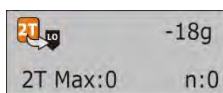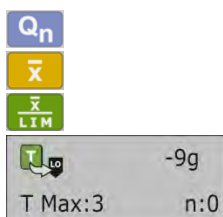

Postaw pełne



- Zmiana obszaru roboczego: dane liczbowe/wykres.
- Przycisk wyświetlania informacji o kontroli lub wyników pomiarów dla przeprowadzanej kontroli.
- Zakończenie kontroli.

• Status kontroli

Status kontroli ma odpowiednią interpretację graficzną:



- pozytywny,




- negatywny (dopuszcza się kontrolę próbki 2),




- negatywny.

W przypadku statusu  odpowiednie pole obszaru roboczego zmienia wypełnienie na kolor żółty:

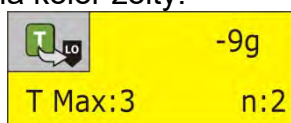

- Kolor żółty ostrzega, że wystąpienie kolejnego błędu T spowoduje, że wynik kontroli będzie negatywny.


W przypadku statusu  odpowiednie pole obszaru roboczego zmienia wypełnienie na kolor czerwony:

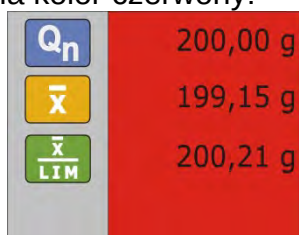

- Średnia masa kontrolowanego towaru poniżej wartości średniej dyskwalifikującej.

• Zmiana obszaru roboczego

Po naciśnięciu przycisku  zostanie wyświetlony obszar roboczy, w postaci wykresu z wynikami pomiarów:

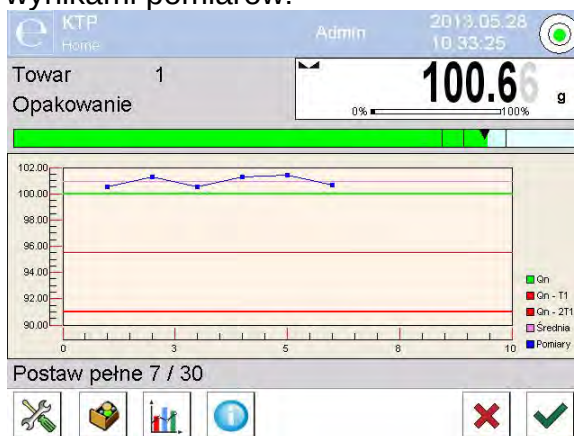

Aby wyłączyć wykres, ponownie nacisnąć przycisk .

• Informacje o kontroli

Po kliknięciu przycisku  zostanie wyświetlone okno z informacjami dotyczącymi ustawień kontroli:




Jeżeli kontrola trwa, to okno będzie miało następujący wygląd:



Po kliknięciu w przycisk  zostanie wyświetlone okno z pomiarami, jakie zostały dokonane dla tej kontroli:

Pomiary		
1	2013.05.28 10:15:13	100.51 g
2	2013.05.28 10:15:15	100.51 g
3	2013.05.28 10:15:15	100.51 g
4	2013.05.28 10:15:16	100.51 g
5	2013.05.28 10:15:17	100.52 g
6	2013.05.28 10:15:18	100.52 g

Po zakończeniu kontroli zostaje wygenerowane podsumowanie procesu, a przeprowadzona kontrola zostanie automatycznie zapisana w bazie danych wagi:

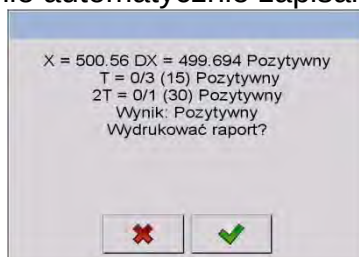


Naciśnięcie przycisku  spowoduje wydrukowanie raportu na podłączonej do wagi drukarce. Natomiast naciśnięcie przycisku  spowoduje powrót do okna ustawień modu pracy <eKTP> bez wydrukowania raportu.

Uwaga:

W przypadku współpracy z programem komputerowym <E2R System> komunikat podsumowania procesu nie będzie zawierał pytania o wydruk raportu. Wszystkie dane są

automatycznie przesyłane do programu komputerowego, z możliwością wydruku raportu z poziomu komputera.

Jeżeli w trakcie kontroli wystąpi taka ilość błędów ujemnych **T**, dla której zgodnie z Ustawą należy skontrolować drugą próbkę z partii, to po zakończeniu pomiaru próbki 1, program poda komunikat o konieczności pobrania drugiej próbki z partii i poddania jej kontroli:

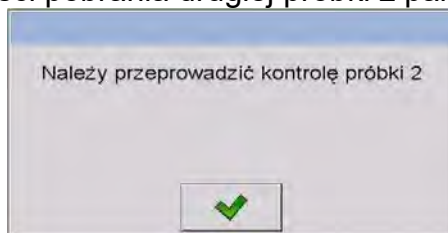

Należy zatwierdzić komunikat przyciskiem , po czym zmieniają się opisy w oknie kontroli oraz dopuszczalne ilości błędów. Po zakończeniu sprawdzania drugiej próbki program wygeneruje podsumowanie z kontroli i będzie można wydrukować raport na podłączonej do wagi drukarce.

Uwaga:

Wzór i przykład raportu z wyznaczania średniej tary oraz z kontroli towaru opisany jest w dalszej części instrukcji.

27.9. Przeprowadzanie kontroli Nieniszczącej w trybie puste-pełne

Dla trybu kontroli **Nieniszcząca Puste-Pełne** użytkownik w danych dla towaru ustawia **szarżę** pomiarową. Program zgodnie z ustawioną szarżą podaje komunikat, aby w pierwszej kolejności ważyć opakowania puste, następnie te same opakowania po ich napełnieniu, z zachowaniem kolejności ważenia:



Przy czym:

Towar
Kod







	-4,5g
T Max:2	n:0
	-9g
2T Max:0	n:0

- Nazwa kontrolowanego towaru.
- Kod kontrolowanego towaru.
- Wartość nominalna kontrolowanego towaru.
- Średnia masa kontrolowanego towaru.
- Wartość średniej dyskwalifikującej.
- Charakterystyka błędów ujemnych **T** w próbce.
- Charakterystyka błędów ujemnych **2T** w próbce.



Postaw puste 1/3



- Masa netto kontrolowanego towaru.
- Tara opakowania.
- Status kontroli.
- Polecenie dotyczące przebiegu procesu;
- Wartość szarży pomiarowej.
- Zmiana obszaru roboczego: dane liczbowe/wykres.
- Zakończenie kontroli.

Po zakończeniu kontroli zostaje wygenerowany raport, a przeprowadzona kontrola zostanie automatycznie zapisana w bazie danych wagi.

Uwaga: Wzór i przykład raportu z kontroli opisany jest w dalszej części instrukcji.

27.10.Przeprowadzanie kontroli Niszczącej w trybie puste-pełne, pełne-puste

Przy kontroli ustawowej **Niszczącej**, niezależnie od wielkości serii produktu, powyżej 100 szt. wielkość próbki przyjmowana przez program do kontroli wynosi 20 szt. Pozostałe warunki oceniające wyniki kontroli są przyjmowane zgodnie z Ustawą.

Po wybraniu z listy towaru z ustawionymi opcjami do kontroli niszczącej z określoną **szarżą** pomiarową i rozpoczęciu kontroli program będzie wyświetlał komunikaty, ułatwiające przeprowadzanie kontroli (analogicznie, jak w przypadku kontroli opisanych powyżej).

W zależności od ustawionego trybu, podawana jest kolejność ważenia produktów: **puste-pełne** lub **pełne-puste**.

Uwaga:

Należy pamiętać o zachowaniu kolejności ważenia dla towarów wraz z opakowaniami oraz pustych opakowań. Tylko wtedy program będzie poprawnie dokonywał obliczania masy towaru znajdującego w konkretnym opakowaniu.

Po zakończeniu kontroli zostaje wygenerowane podsumowanie procesu, a przeprowadzona kontrola zostanie automatycznie zapisana w bazie danych wagi.

Uwaga:


Wzór i przykład raportu z kontroli opisany jest w dalszej części instrukcji.

27.11.Przeprowadzanie kontroli według kryteriów wewnętrznych

Należy wybrać odpowiedni towar z poprawnie wprowadzonymi danymi odnośnie kontroli według kryteriów wewnętrznych (patrz: poprzednie punkty instrukcji).

Po wprowadzeniu do pamięci wagi ogólnych parametrów modu pracy (zgodnie z opisem w instrukcji), rozpocząć kontrolę przyciskiem  (start kontroli), znajdującym się w dolnej części okna ustawień.

W trakcie przeprowadzania kontroli program na bieżąco analizuje wyniki pomiarów i wyświetla je w odpowiednich polach wyświetlacza, informując użytkownika o wynikach kontroli:

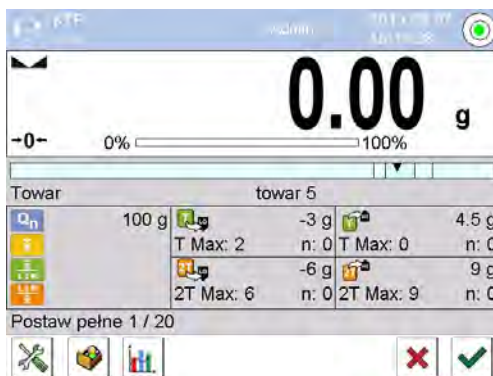

Przy czym:

Towar

Kod

Q_n

$\bar{x}$

$\bar{x}_{LIM}$

$\frac{LIM}{\bar{x}}$

T_{LO}	-3g
T Max:2	n:0
$2T_{LO}$	-6g
2T Max:6	n:0
T_{HI}	4,5g
T Max:0	n:0

$2T_{HI}$	9g
2T Max:9	n:0

Postaw pełne 1/30



- Nazwa kontrolowanego towaru.
- Kod kontrolowanego towaru.
- Wartość nominalna kontrolowanego towaru.
- Średnia masa kontrolowanego towaru.
- Wartość średniej dyskwalifikującej ujemnej.
- Wartość średniej dyskwalifikującej dodatniej.
- Charakterystyka błędów ujemnych **T** w próbce (zgodnie z pkt. 28.4 instrukcji).
- Charakterystyka błędów ujemnych **2T** w próbce (zgodnie z pkt. 28.4 instrukcji).
- Charakterystyka błędów dodatnich **T** w próbce:
4,5g - wartość błędu dodatniego **T**,
T Max - dopuszczalna liczba błędów dodatnich **T**,
n - rzeczywista liczba błędów dodatnich **T**.
- Charakterystyka błędów dodatnich **2T** w próbce:
9g - wartość błędu dodatniego **2T**,
2T Max - dopuszczalna liczba błędów dodatnich **2T**,
n - rzeczywista liczba błędów dodatnich **2T**.
- Polecenie dotyczące przebiegu procesu.
- Zmiana obszaru roboczego: dane liczbowe/wykres.
- Zakończenie kontroli.

Po zakończeniu kontroli zostaje wygenerowany raport, a przeprowadzona kontrola zostanie automatycznie zapisana w bazie danych wagi.

Uwaga: Wzór i przykład raportu z kontroli opisany jest poniżej.

27.12. Raporty

Przykład raportu z wyznaczania średniej tary	Przykład raportu z kontroli																																																																												
Raport średnia tara: U/07/05/13/13/37/T ----- <table> <tr><td>Typ wagi</td><td>xx 4Y</td></tr> <tr><td>Zakres</td><td>xx kg</td></tr> <tr><td>Działka wagi</td><td>x g</td></tr> <tr><td>ID wagi</td><td>303</td></tr> <tr><td>Data</td><td>2013.05.07 13:37:30</td></tr> <tr><td>Towar</td><td>towar 1</td></tr> <tr><td>Tara</td><td>33.447 g</td></tr> <tr><td>0.25 T1</td><td>2.25 g</td></tr> <tr><td>Liczba pomiarów</td><td>10</td></tr> <tr><td>Odchylenie standardowe</td><td>0.00483 g</td></tr> <tr><td>Metoda</td><td>Ustawowa</td></tr> </table> Wynik Pozytywny Pomiary 33.44 g 33.44 g 33.44 g 33.45 g 33.45 g 33.45 g 33.45 g 33.45 g 33.45 g 33.45 g ----- Podpis 	Typ wagi	xx 4Y	Zakres	xx kg	Działka wagi	x g	ID wagi	303	Data	2013.05.07 13:37:30	Towar	towar 1	Tara	33.447 g	0.25 T1	2.25 g	Liczba pomiarów	10	Odchylenie standardowe	0.00483 g	Metoda	Ustawowa	----- Raport KTP: U/06/05/13/14/17 ----- ----- <table> <tr><td>Typ wagi</td><td>xx 4Y</td></tr> <tr><td>Zakres</td><td>xx kg</td></tr> <tr><td>Działka wagi</td><td>x g</td></tr> <tr><td>ID wagi</td><td>303</td></tr> <tr><td>Data rozpoczęcia</td><td>2013.05.06 14:15:49</td></tr> <tr><td>Data zakończenia</td><td>2013.05.06 14:17:04</td></tr> <tr><td>Użytkownik</td><td></td></tr> <tr><td>Towar</td><td>towar 2</td></tr> <tr><td>Numer partii</td><td>99</td></tr> <tr><td>Masa nominalna</td><td>100 g</td></tr> <tr><td>Tara</td><td>0 g</td></tr> <tr><td>Wartość błędu T1</td><td>4.5 g</td></tr> <tr><td>Wartość błędu 2T1</td><td>9 g</td></tr> <tr><td>Wartość błędu +T1</td><td>g</td></tr> <tr><td>Wartość błędu +2T1</td><td>g</td></tr> <tr><td>Liczność partii</td><td>500</td></tr> <tr><td>Liczba pomiarów</td><td>30</td></tr> <tr><td>Liczba błędów T1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Liczba błędów 2T1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Min</td><td>98.579 g</td></tr> <tr><td>Max</td><td>100.02 g</td></tr> <tr><td>Średnia</td><td>99.72983 g</td></tr> <tr><td>Suma</td><td>2991.895 g</td></tr> <tr><td>Granica średniej</td><td>99.70685 g</td></tr> <tr><td>Granica średniej [+]</td><td>g</td></tr> <tr><td>Odchylenie standardowe</td><td>0.582804 g</td></tr> <tr><td>Tryb KTP</td><td>Nieniszcząca średnia tara</td></tr> </table> Wynik Pozytywny Pomiary 100.008 g 98.579 g 98.582 g 4 . . 28. 100.013 g 29. 100.012 g 30. 100.012 g ----- Podpis 	Typ wagi	xx 4Y	Zakres	xx kg	Działka wagi	x g	ID wagi	303	Data rozpoczęcia	2013.05.06 14:15:49	Data zakończenia	2013.05.06 14:17:04	Użytkownik		Towar	towar 2	Numer partii	99	Masa nominalna	100 g	Tara	0 g	Wartość błędu T1	4.5 g	Wartość błędu 2T1	9 g	Wartość błędu +T1	g	Wartość błędu +2T1	g	Liczność partii	500	Liczba pomiarów	30	Liczba błędów T1	0	Liczba błędów 2T1	0	Min	98.579 g	Max	100.02 g	Średnia	99.72983 g	Suma	2991.895 g	Granica średniej	99.70685 g	Granica średniej [+]	g	Odchylenie standardowe	0.582804 g	Tryb KTP	Nieniszcząca średnia tara
Typ wagi	xx 4Y																																																																												
Zakres	xx kg																																																																												
Działka wagi	x g																																																																												
ID wagi	303																																																																												
Data	2013.05.07 13:37:30																																																																												
Towar	towar 1																																																																												
Tara	33.447 g																																																																												
0.25 T1	2.25 g																																																																												
Liczba pomiarów	10																																																																												
Odchylenie standardowe	0.00483 g																																																																												
Metoda	Ustawowa																																																																												
Typ wagi	xx 4Y																																																																												
Zakres	xx kg																																																																												
Działka wagi	x g																																																																												
ID wagi	303																																																																												
Data rozpoczęcia	2013.05.06 14:15:49																																																																												
Data zakończenia	2013.05.06 14:17:04																																																																												
Użytkownik																																																																													
Towar	towar 2																																																																												
Numer partii	99																																																																												
Masa nominalna	100 g																																																																												
Tara	0 g																																																																												
Wartość błędu T1	4.5 g																																																																												
Wartość błędu 2T1	9 g																																																																												
Wartość błędu +T1	g																																																																												
Wartość błędu +2T1	g																																																																												
Liczność partii	500																																																																												
Liczba pomiarów	30																																																																												
Liczba błędów T1	0																																																																												
Liczba błędów 2T1	0																																																																												
Min	98.579 g																																																																												
Max	100.02 g																																																																												
Średnia	99.72983 g																																																																												
Suma	2991.895 g																																																																												
Granica średniej	99.70685 g																																																																												
Granica średniej [+]	g																																																																												
Odchylenie standardowe	0.582804 g																																																																												
Tryb KTP	Nieniszcząca średnia tara																																																																												
Wzór raportu: Użytkownik wagi w podmenu  Wydruki/  Projekt wydruku raportu średniej tary> ma możliwość edycji wzoru raportu z kontroli towaru. Zmienne, dla których została ustawiona wartość <Tak>, będą drukowane.	Wzór raportu: Użytkownik wagi w podmenu  Wydruki/  Projekt wydruku raportu KTP> ma możliwość edycji wzoru raportu z kontroli towaru. Zmienne, dla których została ustawiona wartość <Tak>, będą drukowane. Należy zwrócić uwagę, że w tym miejscu użytkownik deklaruje czy pomiary mają być drukowane, natomiast co ma zawierać każdy pomiar jest deklarowana w grupie  Wydruki/  <Projekt wydruku ważenia>.																																																																												

28. KONTROLA MASY

(funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym)

<  **Kontrola masy** > jest modem pracy pozwalającym na kontrolowanie masy towarów odmierzanych (dozowanych) automatycznie na szalkę wagi za pomocą podajnika automatycznego PA-02, podłączonego do wagi. Mod pozwala na automatyczne sprawdzenie całej partii towaru po zadeklarowaniu jej liczności.

28.1. Ustawienia globalne dla kontroli masy

<  **Kontrola masy** > jest modem pracy pozwalającym na kontrolowanie masy towarów odmierzanych (dozowanych) automatycznie na szalkę wagi za pomocą podajnika automatycznego PA-02, podłączonego do wagi. Mod pozwala na automatyczne sprawdzenie całej partii towaru po zadeklarowaniu jej liczności.

28.2. Ustawienia globalne dla kontroli masy

Wejście w ustawienia modu pracy odbywa się poprzez dotknięcie szarego obszaru na

wyświetlaczu wagi i wybranie grupy o nazwie **Ustawienia** <  >, gdzie są do dyspozycji następujące ustawienia:

00285

Pytaj o numer partii

Funkcja wymusza zapytanie o numer partii przed rozpoczęciem procesu kontroli masy.



Liczność Partii

Określa licznosc partii, czyli ile sztuk towaru podlega kontroli masy.



Drukuj raport

Parametr pozwalający na wyłączenie/włączenie automatycznego wydruku raportu po zakończeniu procesu.



Wydruk

Parametr umożliwiający wybranie, czy ma być po zakończeniu drukowany wydruk standardowy czy też niestandardowy.

28.3. Przebieg procesu kontroli masy

Przed rozpoczęciem procesu należy wykonać następujące kroki:

- Ustawić licznosc partii dla realizowanych kontroli masy – dotknąć szarego obszaru na wyświetlaczu wagi i wybrać grupę <  **Ustawienia** >, a następnie <  **Liczność Partii** >, gdzie wpisać ilość sztuk kontrolowanych w ramach realizowanego procesu kontroli automatycznej. Wpisaną wartość zatwierdzić, wciskając przycisk .
- Ustawić dla kontrolowanego towaru parametr <**Min**> poniżej wartości masy najmniejszego kontrolowanego detalu. Należy tak dobrać wartość progu, aby zabezpieczyć się przed błędnym zapisem masy w końcowym raporcie, np. gdy zostanie podany detal o masie mniejszej od masy najmniejszego detalu w badanej serii (połówka tabletki). Jeżeli nastąpi taka sytuacja, przy odpowiednim ustawieniu parametru <**Min**>, program wagi pomija dany pomiar i kontynuuje proces kontroli masy.
- Ustawić dla kontrolowanego towaru parametr <**Max**>. Należy tak dobrać wartość progu, aby zabezpieczyć się przed błędnym zapisem masy w końcowym raporcie, np. gdy zostaną podane dwa kontrolowane detale jednocześnie. Jeżeli nastąpi taka sytuacja, przy odpowiednim ustawieniu parametru <**Max**>, program wagi pomija dany pomiar i kontynuuje proces kontroli masy.

- Ustawić dla kontrolowanego towaru parametr  **Moc dozowania**, określany w procentach [%], w zakresie od 0% do 100% oraz masę nominalną (Masa), progi błędów: na minus - <T4->; <T3->; <T2->; <T1->; <T1+>; <T2+>; <T3+>; <T4+> oraz ilości graniczne występowania poszczególnych błędów. Błędy są podawane w procentach masy nominalnej (wartość bezwzględna) lub w jednostce masy (wartość względna). Moc dozowania, masy, progi Min i Max oraz błędy są parametrami określonymi **dla każdego towaru osobno**.

Aby je ustawić, należy:

Z poziomu okna głównego modu <**Kontrola masy**> wcisnąć przycisk **SETUP**, następnie wybrać opcję  **Bazy Danych**, kolejno kartotekę <  **Towary**>, a następnie wybrać towar, dla którego mają być ustawione wartości. Wartości błędów i ilości ich występowania należy wpisać w parametrze: Setup/Bazy danych/Towar/SQC. Po ich ustawieniu wrócić do menu głównego.

- Wybrać kontrolowany towar z bazy towarów <  >.
- Po dokonaniu wszystkich niezbędnych ustawień wybrać , aby rozpocząć proces automatycznej kontroli masy.
- Rozpocznie się proces automatycznej kontroli, waga jest tarowana, a podajnik automatyczny rozpoczyna podawanie pierwszego elementu na szalkę wagi.
- Po podaniu pierwszej sztuki na szalkę wagi podajnik zatrzymuje podawanie, następuje ważenie detalu przez wagę – pomiar pierwszy stabilny.
- Po zapisaniu ważenia wskazanie wagi jest zerowane i zostaje ponownie uruchomione podawanie elementów na szalkę wagi – podana zostaje kolejna sztuka i jest realizowany proces ważenia, identycznie jak w przypadku pierwszej sztuki.
- Cykl powtarzany jest do momentu sprawdzenia (wykonania ważeń) wszystkich zadeklarowanych sztuk w procesie <Liczność partii>.
- Podczas procesu kontroli na wyświetlaczu wyświetlane są na bieżąco standardowe informacje o procesie:
 - Liczność wzorca,
 - Towar,
 - Średnia,
 - Odchylenie standardowe,
 - Liczba błędów T1-,
 - Liczba błędów T1+.
- Po zakończeniu pomiarów dla danej partii automatycznie drukowany jest raport na podłączonej do wagi drukarce oraz jest on zapisywany w bazie danych wagi.

Uwaga: Każdy proces kontroli może zostać przerwany w dowolnym momencie przez użytkownika poprzez wciśnięcie przycisku . Proces zostanie zatrzymany, a kontrola anulowana (nie zostanie wygenerowany raport z takiej kontroli).

28.4. Wydruki

Opcja Wydruki umożliwia ustawienie zawartości poszczególnych elementów wydruku standardowego, jak również wydruku niestandardowego.


- **Wydruk standardowy**
Składa się z czterech wewnętrznych bloków, które zawierają różne zmienne. Dla każdej zmiennej należy ustawić opcje TAK – jeżeli ma być drukowana lub NIE – jeżeli ma nie występować na wydruku.

Ustawienia dla wydruków nagłówka, ważenia i stopki podane są w pkt. 14.5, poniżej pokazano ustawienia dla raportu kontroli masy. Użytkownik może zaprojektować zawartości raportu.

Uwaga: Zawartość danych dla każdego z pomiarów w raporcie należy ustawić w opcji <Projekt wydruku ważenia>. Za każdym razem podczas drukowania raportu, w miejscu, gdzie znajdują się pomiary, będą drukowane te dane, dla których wybrano opcję <TAK> w <Projekcie wydruku ważenia>.

Zawartość poszczególnych raportów:

- Mod pracy
- Data
- Czas
- Typ wagi
- ID wagi
- Nr raportu
- Użytkownik
- Imię i nazwisko
- Towar
- Data rozpoczęcia
- Data zakończenia
- Numer partii
- Liczność wzorca
- Masa nominalna
- Próg T4-
- Próg T3-
- Próg T2-
- Próg T1-
- Próg T1+
- Próg T2+
- Próg T3+
- Próg T4+
- Pomiary
- Liczba błędów T4-
- Liczba błędów T3-
- Liczba błędów T2-
- Liczba błędów T1-
- Liczba błędów T1+
- Liczba błędów T2+
- Liczba błędów T3+
- Liczba błędów T4+
- Średnia
- Średnia [%]
- Odchylenie standardowe
- Odchylenie standardowe [%]
- Min
- Max
- Pusta linia
- Kreski
- Podpis
- Wydruk niestandardowy

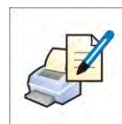


28.5. Raport ze zrealizowanych procesów kontroli

Po wykonaniu każdego procesu recepturowania generowany jest raport z procesu. Jest on zapisywany w bazie danych < **Kontrola masy**>. Nazwa pliku raportu ma postać daty i godziny wykonania procesu.

29. BAZY DANYCH

Oprogramowanie wagowe dysponuje następującymi bazami danych <  >:

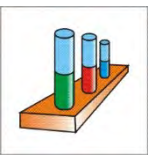
		
TOWARY	WAŻENIA	KLIENCI
		
RECEPTURY	RAPORTY RECEPTUR	RAPORTY GĘSTOŚCI
		
RAPORTY KONTROLI	ŚREDNIE TARY	STATYSTYKA SQC
		
SERIE	MINIMALNE NAWAŻKI	KONTROLE MASY
		
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	OPAKOWANIA	MAGAZYNY
		
WYDRUKI	ZMIENNE UNIWERSALNE	ZARZĄDZAJ BAZAMI DANYCH

29.1. Operacje możliwe do wykonania w bazach danych

Operacje na bazach danych są dostępne tylko dla uprawnionego użytkownika.


Aby edytować Bazy, należy:

- Nacisnąć i przytrzymać pole z ikoną danej bazy.
- Wyświetlacz pokaże menu związane z tym elementem.
- Wybrać jedną z dostępnych opcji (dostępne opcje są zależne od typu wybranej bazy).

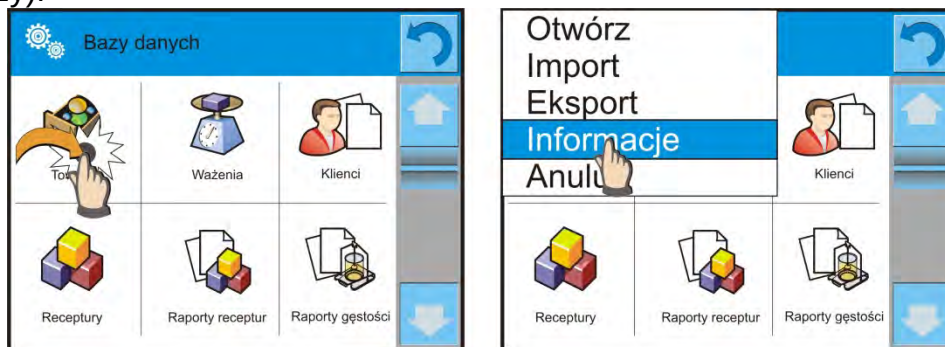

Znaczenie opcji:

- OTWÓRZ – opcja pozwalająca wejść do wybranej bazy danych (działa tak samo, jak pojedyncze kliknięcie w pole wybranej bazy).
- IMPORT – opcja pozwalająca na import danych z pamięci zewnętrznej typu pendrive. Przed wybraniem opcji należy podpiąć pamięć do dowolnego portu USB. Jeżeli program wykryje pamięć, zostanie otwarte okno z zapisanymi plikami. Należy wskazać plik z danymi do importu. Wybór pliku automatycznie rozpoczyna proces kopiowania. Po zakończeniu kopiowania zostanie otwarte okno z komunikatem <Zakończono>. Należy zatwierdzić proces.
- EKSPORT - opcja pozwalająca na eksport danych zapisanych w danej bazie do pamięci zewnętrznej typu pendrive. Przed wybraniem opcji należy podpiąć pamięć do dowolnego portu USB. Jeżeli program wykryje pamięć, program automatycznie rozpoczyna proces kopiowania. Po zakończeniu kopiowania zostanie otwarte okno z komunikatem <Zakończono> i nazwą pliku, w którym zostały zapisane dane z bazy. Należy zatwierdzić proces.
- INFORMACJE – opcja pozwalająca na wyświetlenie danych o zawartości bazy (patrz: obrazek poniżej).

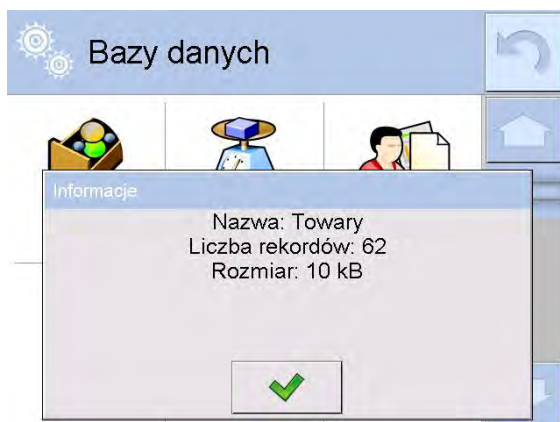

Kliknięcie w przycisk potwierdzenia powoduje powrót do poprzedniego okna

- ANULUJ – powoduje powrót do poprzedniego okna.

Po wejściu do wybranej bazy możliwe są do wykonania poniższe operacje (zależnie od typu bazy):

1. Dodawanie pozycji do bazy danych <  >.
2. Wyszukiwanie elementu w bazie według nazwy <  N >.
3. Wyszukiwanie elementu w bazie danych według kodu <  C >.
4. Wyszukiwanie elementu w bazie danych uwzględniając datę <  D >.
5. Eksport danych z bazy do pamięci masowej USB <  >.
6. Drukowanie informacji dotyczącej rekordu w bazie danych <  >.

Powyższe działania są inicjowane poprzez przyciski zlokalizowane w prawym, górnym rogu wyświetlacza. Należy postępować zgodnie z komunikatami, pokazywanymi na wyświetlaczu.

29.2. Towary

Baza towarów zawiera nazwy wszystkich elementów, które mogą być ważone, liczone, kontrolowane.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych >, nacisnąć pole <Towary>.
- Nacisnąć przycisk <  Dodaj >, jeżeli ma być dodany nowy towar.
- Jeżeli towar już istnieje, nacisnąć pole z nazwą towaru.

Wykaz informacji definiowanych dla towaru:

1. Nazwa	[nazwa towaru]
2. Opis	[opis towaru]
3. Kod	[kod towaru]
4. Kod EAN	[kod EAN towaru]
5. Masa	[masa nominalna/jednostkowa towaru]
6. Moc dozowania	[opcja tylko dla modu <Kontrola masy>, określa w procentach [%] w zakresie od 0% do 100%, moc pracy podajnika tabletek. Wartość należy dobrać doświadczalnie, zależności od wielkości,
7. Min	kształtu i masy dozowanego detalu] [minimalna masa podczas ważenia towaru w przedziałach kontrola wyniku – LO. Wartość błędu <T1-> dla modu<Kontrola masy> definiowana w procentach masy nominalnej]
8. Max	[maksymalna masa do ważenia towaru w przedziałach kontrola wyniku – HI. Wartość błędu <T1+> dla modu<Kontrola masy>, definiowana w procentach masy nominalnej]
9. Tolerancja	[wartość % liczona względem masy (5), pokazuje obszar, w którym pomiar jest uznawany za poprawny]
10. Tara	[wartość tary towaru, ustawiana automatycznie przy wyborze towaru z bazy]
11. Cena	[cena jednostkowa towaru]

12. Tryb KTP	[rodzaj kontroli (możliwość wyboru: Nieniszcz. Średnia Tara, Nieniszcz Puste-Pełne, Niszcz. Pełne-Puste, Niszcz. Puste-Pełne)]
13. Szarża Puste- Pełne]	[seria pomiarowa dla kontroli: Nieniszcz. Pełne,Niszcz. Pełne-Puste, Niszcz. Puste-
14. SQC: Jednostka	[jednostka miary towaru]
15. Liczność partii	[opcja tylko dla modu <KTP>, określa liczność partii kontrolowanego towaru]
16. Interwał wyznaczania średniej tary	[opcja tylko dla modu KTP. Określa minimalny przedział czasowy, jaki powinien być zachowany przy wyznaczaniu średniej tary opakowania. Jest podawany w [h]. Jeżeli podczas pracy program stwierdzi, że upłynął czas (ustawiony w tym parametrze) od ostatniego wyznaczania średniej tary, to po wybraniu tego towaru do kontroli zostanie wyświetlony komunikat < Należy wyznaczyć średnią tarę >. Jest to tylko informacja i użytkownik decyduje, czy proces ten zostanie przeprowadzony]
17. Ilość opakowań	[opcja tylko dla modu <KTP>, określa ilość opakowań przy wyznaczaniu średniej tary]
18. Kontrola wewnętrzna	[opcja tylko dla modu <KTP>, umożliwia definiowanie kryteriów kontroli według norm zakładowych dla danego towaru]
19. SQC	[opcja dla modu <SQC> i <Kontrola masy>, umożliwia definiowanie kryteriów kontroli według norm zakładowych dla danego towaru]
20. Gęstość [g/cm ³]	[gęstość towaru, używana przy kompensacji wporu powietrza jako gęstość próbki] -
21. Liczba dni ważności	[liczba dni ważności]
22. Data	[stała data towaru]
23. VAT	[podatek VAT związany z towarem]
24. Składniki	[pole edycyjne do wprowadzenia nazw składników, z których składa się towar, np. gdy jest mieszaniną lub dodatkowego opisu dotyczącego właściwości lub zastosowania]
25. Wydruk	[wzór wydruku przypisany do towaru]

Uwaga:

Należy pamiętać, aby towary były przypisane do odpowiednich funkcji. Jest to istotne, ponieważ niektóre dane mają wartości dostosowane do tych modów, np.: progi dla funkcji <Dowężanie> są ustawiane w [g], natomiast progi dla funkcji <Liczenie sztuk> są ustawiane w sztukach [pcs]. Wartości będą automatycznie dostosowywane do tego, z jakiej funkcji użytkownik wchodzi do bazy danych.

29.3. Ważenia

Każdy wynik ważenia wysłany z wagi do drukarki lub komputera jest zapisywany w bazie ważeń (patrz: wyjątek pkt. 16.1 *Kontrola wyniku*).

Użytkownik ma możliwość podglądu danych dla poszczególnych ważeń.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu < **Bazy Danych**>.
- Wejść do bazy < **Ważenia**> i nacisnąć na żadaną pozycję.

Wykaz informacji w bazie danych dla wykonanego ważenia:

1. Data ważenia.
2. Wynik ważenia.
3. Wartość tary.
4. Określenie, czy pomiar był stabilny.
5. Określenie, czy była włączona opcja kontroli wyporności powietrza
6. Nazwa towaru.
7. Użytkownik.
8. Klient, nazwa kontrahenta.
9. Nazwa modu pracy.
10. Magazyn, nazwa magazynu źródłowego.
11. Opakowanie, nazwa tary użyta podczas ważenia towaru.
12. Kontrola wyniku, informacja, w którym obszarze znajdował się wynik:
 - MIN – poniżej progu (możliwy tylko, gdy <Kontrola wyniku –NIE>),
 - OK – pomiędzy progami,
 - MAX – powyżej progu (możliwy tylko, gdy <Kontrola wyniku –NIE>).
13. Numer platformy, pole pokazuje numer platformy (wagi), na której zostało wykonane ważenie.
14. Wypoziomowanie, pokazuje, czy poziom wagi był zachowany podczas pomiaru.
15. Alerty warunków środowiskowych, pokazują, czy temperatura i wilgotność były stabilne w czasie pomiaru.

29.4. Klienci

Baza Danych Klientów zawiera nazwy Odbiorców, dla których wykonywane są ważenia.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu < **Bazy Danych**>, nacisnąć pole <Klienci>.
- Nacisnąć przycisk < **Dodaj**>.
- Jeżeli pole Klient już istnieje, nacisnąć pole z jego nazwą.

Wykaz informacji definiowanych dla klientów:

1. Nazwa klienta
2. Kod klienta [wewnętrzny kod identyfikujący klienta]
3. NIP
4. Adres
5. Kod pocztowy
6. Miejscowość
7. Rabat

8. Wydruk [rodzaj wydruku, etykiety związanej z klientem]

29.5. Receptury

Baza Receptury zawiera wykaz zaprojektowanych receptur, które można automatycznie zrealizować poprzez ważenie kolejnych składników.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu < Bazy Danych>, nacisnąć pole < Receptury>.
- Nacisnąć przycisk < Dodaj>, jeżeli ma zostać zaprojektowana nowa receptura.
- Jeżeli receptura już istnieje, nacisnąć pole z jej nazwą.

Wykaz informacji definiowanych dla receptur:

1. Nazwa
2. Kod
3. Składniki
4. Liczba składników
5. Suma

29.6. Raporty receptur

Zawierają informacje o wykonanych recepturach. Dla każdego raportu możliwe są operacje podglądu, szukania według nazwy, daty, kodu, eksportu oraz wydruku.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu < Bazy Danych>, nacisnąć pole < Raporty receptur>.
- Nacisnąć pole z wybranym raportem, jeżeli nie jest on widoczny, przewinąć wykaz raportów przyciskami nawigacyjnymi.
- Nazwa raportu składa się z daty oraz czasu wykonania; np. 2011.10.12 15:12:15.

Uwaga:

Można skorzystać z opcji <Szukaj raportu> dla receptury.

Wykaz informacji zawartych w raporcie z receptury:

1. Data rozpoczęcia
2. Data zakończenia
3. Receptura
4. Suma
5. Wartość docelowa
6. Użytkownik
7. Klient
8. Magazyn
9. Liczba Pomiarów
10. Status

29.7. Raporty gęstości

Zawierają informacje o wykonanych pomiarach gęstości ciał stałych, cieczy lub gęstości powietrza. Dla każdego raportu możliwe są operacje podglądu, szukania według nazwy, daty, kodu, eksportu oraz wydruku.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu < Bazy Danych>, nacisnąć pole < Raporty gęstości>.
- Nacisnąć pole z wybranym raportem, jeżeli nie jest on widoczny, przewinąć wykaz raportów przyciskami nawigacyjnymi.
- Nazwa raportu składa się z daty oraz czasu wykonania; np. 2011.12.12 11:12:15

Uwaga:

Można skorzystać z opcji <Szukaj raportu> z wykonanej procedury gęstości.

Wykaz informacji zawartych w raporcie z gęstości:

- | | |
|--|--|
| 1. Numer próbki [pole z wartością, jeżeli w ustawieniach funkcji Gęstości wybrano: Pytaj o numer próbki = TAK] | |
| 2. Data rozpoczęcia | |
| 3. Data zakończenia | |
| 4. Gęstość | [wyliczona gęstość próbki, cieczy, powietrza] |
| 5. Objętość | [wyliczona objętość badanej próbki, <i>miar gęstości ciała stałego</i>] |
| 6. Procedura | [w zależności od procedury, dane zawarte w raporcie zmieniają się] |
| 7. Użytkownik | [nazwa użytkownika wykonującego procedurę] |
| 8. Towar | [nazwa badanej próbki] |
| 9. Ciecz wzorcowa
<i>miar</i> | [nazwa cieczy, w której wykonano badanie
<i>miar gęstości ciała stałego</i>] |
| 10. Gęstość cieczy wzorcowej | [<i>miar gęstości ciała stałego</i>] |
| 11. Temperatura
badanie | [temperatura cieczy, w której wykonano
<i>miar gęstości ciała stałego</i>] |
| 12. Objętość nurnika | [<i>miar gęstości cieczy</i>] |
| 13. Masa wzorca stalowego | [<i>miar gęstości powietrza</i>] |
| 14. Masa wzorca aluminiowego | [<i>miar gęstości powietrza</i>] |
| 15. Gęstość wzorca stalowego | [<i>miar gęstości powietrza</i>] |
| 16. Gęstość wzorca aluminiowego | [<i>miar gęstości powietrza</i>] |
| 17. Ważenie 1 | [miar masy badanej próbki lub nurnika
w powietrzu lub masa zmierzona wzorca
stalowego] |
| 18. Ważenie 2 | [miar masy badanej próbki lub nurnika
w cieczy lub masa zmierzona wzorca
aluminiowego] |

29.8. Raporty kontroli

Każda kontrola towaru przeprowadzona w modzie SQC lub KTP jest wysyłana do drukarki oraz zapisywana w bazie <**Raporty z kontroli**>. Każda zapisana kontrola w bazie danych opatrzona jest indywidualnym numerem, nadawanym w chwili jej zakończenia.

Format numeru kontroli:

X / y y / M M / d d / H H / m m, gdzie:

X – typ kontroli, który przyjmuje wartości:

U – kontrola ustawowa,
 Z – kontrola zakończona przez użytkownika,
 W – kontrola wg wewnętrznych kryteriów dla modu KTP lub kontrola dla modu SQC
 yy - rok zakończenia kontroli,
 MM - miesiąc zakończenia kontroli,
 dd - dzień zakończenia kontroli,
 HH - godzina zakończenia kontroli,
 mm - minuta zakończenia kontroli,
 Użytkownik ma możliwość podglądu danych z poszczególnych kontroli.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu < **Bazy Danych**>, zgodnie z pkt. 30 instrukcji.
- Następnie wejść do bazy <**Raporty z kontroli**> i nacisnąć na żadaną pozycję.

Wykaz danych definiowanych dla kontroli:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Numer partii | [numer partii kontrolowanego towaru] |
| 2. Wynik | [status (wynik) kontroli] |
| 3. Data rozpoczęcia | [data rozpoczęcia kontroli] |
| 4. Data zakończenia | [data zakończenia kontroli] |
| 5. Towar | [nazwa kontrolowanego towaru] |
| 6. Użytkownik | [nazwa operatora przeprowadzającego kontrolę] |
| 7. Średnia | [wartość średnia dokonanych pomiarów] |
| 8. Granica średniej | [wartość średniej dyskwalifikującej] |
| 9. Odchylenie standardowe | [średnie odchylenie standardowe] |
| 10. Liczność Partii | [liczność (wielkość) partii; wartość, dla której program przyjmie zgodnie z Ustawą wielkość badanej próbki] |
| 11. Liczba pomiarów | [liczba przeprowadzonych pomiarów] |
| 12. Metoda | [metoda, według której była wykonywana kontrola (Ustawowa, Wewnętrzna)] |

Dla zapisanych kontroli z modu SQC dane zawierają poniższe wartości.
 Każda przeprowadzona kontrola towaru jest wysyłana do drukarki oraz zapisywana w bazie <**Raporty kontroli**>. Każda zapisana kontrola w bazie danych opatrzona jest indywidualnym numerem, nadawanym w chwili jej zakończenia.

Format numeru kontroli:

yy / MM / dd / HH / mm / ss, gdzie:

yy - rok zakończenia kontroli,
 MM - miesiąc zakończenia kontroli,
 dd - dzień zakończenia kontroli,
 HH - godzina zakończenia kontroli,
 mm - minuta zakończenia kontroli,
 ss - sekunda zakończenia kontroli.


Użytkownik ma możliwość podglądu danych z poszczególnych kontroli.

Procedura:


- Należy wejść do podmenu < **Bazy Danych**>, zgodnie z pkt. 30 instrukcji.
- Następnie wejść do bazy <**Raporty z kontroli**> i nacisnąć na żadaną pozycję.

Wykaz danych definiowanych dla kontroli:


- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Numer partii | [numer partii kontrolowanego towaru] |
| 2. Wynik | [status (wynik) kontroli] |
| 3. Data rozpoczęcia | [data rozpoczęcia kontroli] |
| 4. Data zakończenia | [data zakończenia kontroli] |
| 5. Towar | [nazwa kontrolowanego towaru] |
| 6. Użytkownik | [nazwa operatora przeprowadzającego kontrolę] |
| 7. Średnia | [wartość średnia dokonanych pomiarów] |
| 8. Granica średniej | [wartość średniej dyskwalifikującej] |
| 9. Odchylenie standardowe | [średnie odchylenie standardowe] |
| 10. Liczność Partii program | [liczność (wielkość) partii; wartość, dla której przyjmie zgodnie z Ustawą wielkość badanej próbki] |
| 11. Liczba pomiarów | [liczba przeprowadzonych pomiarów] |
| 12. Metoda | [metoda według której była wykonywana kontrola (Ustawowa, Wewnętrzna, SQC)] |
| 13. Wykres pomiarów | |

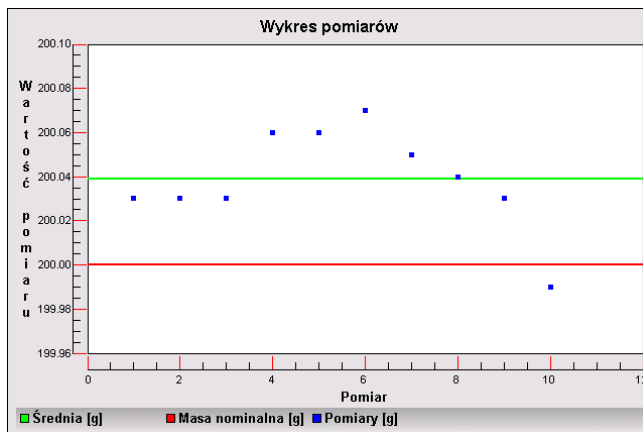

14. Wykres pomiarów z progami

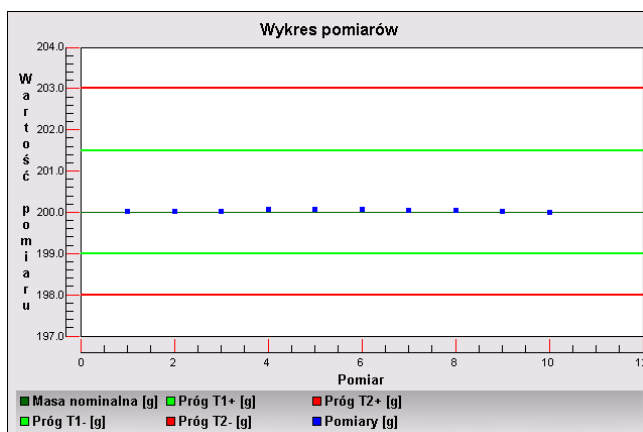

15. Wykres rozkładu prawdopodobieństwa

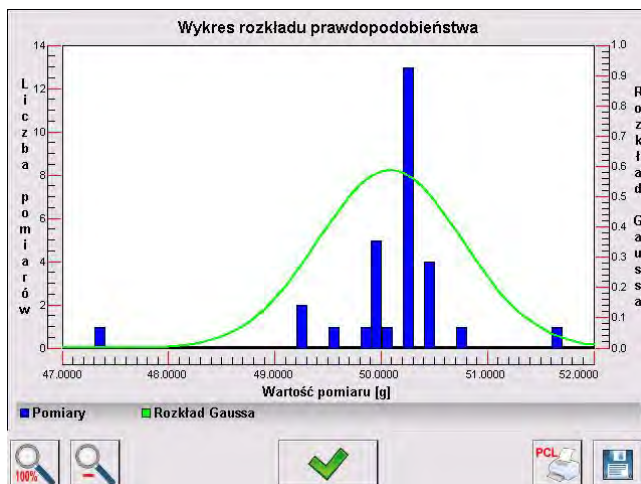

29.9. Statystyka SQC

Umożliwia obserwację zestawienia wszystkich dokonanych pomiarów dla konkretnego towaru. Dla każdego towaru możliwe są operacje podglądu raportów z poszczególnych kontroli, wygenerowania wykresu obrazującego przebieg uzyskanych pomiarów dla wszystkich wykonanych badań tego towaru, wydruku oraz eksportu danych.

Procedura:


- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych>, nacisnąć pole <  Statystyka SQC>.
- Wybrać towar, dla którego ma zostać wygenerowana historia badań.
- Określić zakres danych, które mają być wyszukane (numer serii, data początkowa i data końcowa).
- Wyświetlić listę z raportami z kontroli, spełniającymi założone kryteria (towar, data wykonania): <Raporty z kontroli>.
- Wygenerować wykres przebiegu wyników <Wykresy pomiarów>.

Aby wygenerować wykres pomiarów:

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych>.
- Następnie nacisnąć pole <  Statystyka SQC>.
- Wybrać towar, dla którego ma zostać wygenerowana historia badań.
- Określić zakres danych, które mają być wyszukane (numer serii, data początkowa i data końcowa).
- Kliknąć w opcję ,Raport zbiorczy>
- Kliknąć w opcję <  Wykres pomiarów>.

Program wygeneruje i wyświetli wykres wyników suszeń towaru w układzie współrzędnych: Wynik/Numer pomiaru.

Przykładowy wygląd wykresu znajduje się poniżej:

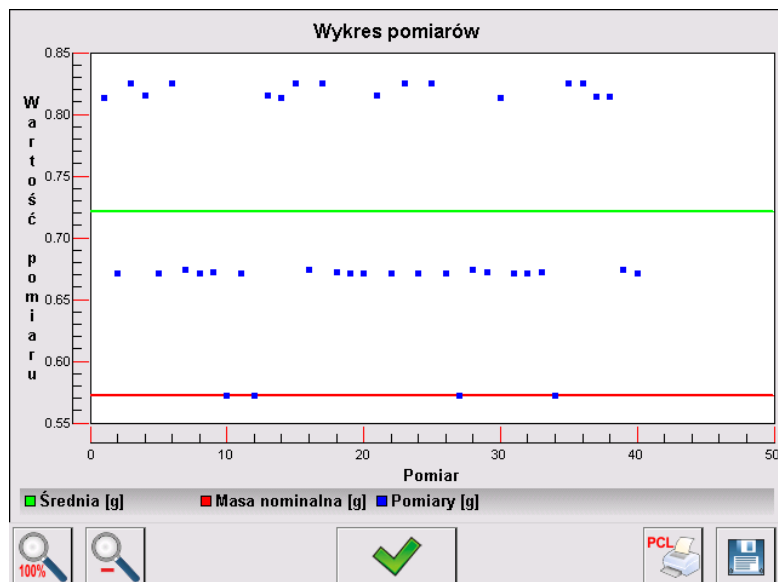

W dolnym pasku poniżej wykresu są dostępne opcje:

	Powrót do wyświetlania widoku całego wykresu.
	Zmniejszenie ekranu do poprzedniego widoku.
	Powrót do wyświetlania poprzedniego okna.
	Wydruk wykresu na podłączonej drukarce typu PCL.
	Zapis wykresu jako plik *.bmp na zewnętrznym nośniku danych, podpiętym do portu USB.

29.10. Średnie tary

(funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym)

Przed rozpoczęciem kontroli **<Nieniszcz. Średnia Tara>** istnieje możliwość przeprowadzenia procesu wyznaczania średniej tary poprzez ważenie opakowań. Każdy w/w proces jest automatycznie zapisywany w bazie  **Średnie Tary**. Każda zapisana w bazie danych kontrola z wyznaczania wartości średniej tary opatrzona jest indywidualnym numerem, nadawanym w chwili jej zakończenia.

Format numeru kontroli:

X / y y / M M / d d / H H / m m / T, gdzie:

X – typ kontroli, który przyjmuje wartości:

U – kontrola ustawowa,

Z – kontrola zakończona przez użytkownika,

W – kontrola wg wewnętrznych kryteriów.

yy - rok zakończenia kontroli,

MM - miesiąc zakończenia kontroli,

dd - dzień zakończenia kontroli,

HH - godzina zakończenia kontroli,

mm - minuta zakończenia kontroli,

T - kontrola z wyznaczania wartości średniej tary.

Użytkownik ma możliwość podglądu danych z poszczególnych procesów wyznaczania średniej tary.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu <  **Bazy Danych**>, zgodnie z pkt. 30 instrukcji.
- Następnie wejść do bazy <  **Średnie Tary**> i nacisnąć na żądaną pozycję.

Wykaz danych definiowanych dla średniej tary:

1. Towar	[nazwa towaru, którego opakowanie podlega procesowi wyznaczania średniej tary]
2. Status	[status (wynik) procesu]
3. Data	[data przeprowadzenia procesu]
4. Tara	[wyznaczona wartość tary opakowania]
5. S	[średnie odchylenie standardowe]
6. 0.25 T1	[wartość warunku wyniku procesu]
7. Liczba pomiarów	[liczba przeprowadzonych pomiarów wartości tary]
8. Użytkownik	[nazwa operatora przeprowadzającego proces]
9. Metoda	[metoda, według której była wykonywana kontrola (Ustawowa, Wewnętrzna)]

29.11. Serie

Baza serii zawiera zapisane dane serii wraz z pomiarami próbek.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych>, nacisnąć pole <  Serie>.
- Nacisnąć przycisk <  Dodaj>, jeżeli ma zostać dodana nowa seria.
- Jeżeli seria już jest w bazie, nacisnąć pole z jej nazwą, aby wejść w dane, które można dowolnie edytować.
-

Wykaz informacji definiowanych dla serii:

1. Nazwa
2. Kod
3. Klient
4. Próbki
5. Liczba próbek

29.12. Minimalne naważki

Baza Minimalne naważki zawiera zapisane dane dotyczące zadeklarowanych metod i minimalnych naważek dla danej wagi.

Uwaga:

Uprawnienia do wprowadzania nowych wartości minimalnych naważek oraz zmian w już istniejących mają tylko uprawnieni pracownicy firmy RADWAG.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych>, nacisnąć pole <  Minimalne naważki>.

- Nacisnąć przycisk  Dodaj>, jeżeli ma zostać dodana nowa minimalna naważka.
- Jeżeli minimalna naważka już jest w bazie, nacisnąć pole z jej nazwą, aby wejść w dane, które można dowolnie edytować

Wykaz informacji definiowanych dla minimalnych naważek:

1. Nazwa – nazwa metody, według której były wyznaczane minimalne naważki dla tej wagi.
2. Kod – kod metody.
3. Opis – opis metody.
4. Następna kontrola – pole daty ważności wprowadzonej minimalnej naważki. 2 tygodnie przed wprowadzoną datą obok ikony obrazującej status pojawi się piktogram zegarka. Jest to informacja o upływającym terminie ważności. Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy RADWAG, aby dokonać koniecznych zmian nastaw.
5. Progi – opcja, która pozwala na wprowadzenie danych dotyczących mas minimalnej naważki oraz zakresów mas opakowań (tary), dla których dana wartość obowiązuje:
Tara – maksymalna wartość tary, dla której obowiązuje minimalna naważka.
 Można wprowadzić 3 charakterystyczne wielkości: 0.000g, dowolną masę z zakresu wagi i maksymalny zakres wagi (patrz: opis w przykładach poniżej).
Masa minimalna – wartość minimalnej masy, która została wyznaczona dla danej wagi w miejscu jej użytkowania według odpowiednich metod.

Przykład nr 1 dla wagi XA 220.4Y z d=0.0001 g.

Dla tej wagi wyznaczono następujące wartości minimalnej naważki dla następujących wartości mas opakowań:

Lp.	Wartość tary	Minimalna naważka	Opis działania
1	0.0000 g	0.1000 g	Minimalna naważka dotyczy wszystkich mas netto, które są ważone bez opakowania (nie jest użyty przycisk <TARA>).
2	10.0000 g	1.0000 g	Minimalna naważka dotyczy wszystkich mas netto, które są ważone w opakowaniu o masie od 0.0001 g do 10.0000 g włącznie (użyty przycisk <TARA>).
3	50.0000 g	2.5000 g	Minimalna naważka dotyczy wszystkich mas netto, które są ważone w opakowaniu o masie od 10.0001 g do 50.0000 g włącznie (użyty przycisk <TARA>).
4	200.0000 g	4.0000 g	Minimalna naważka dotyczy wszystkich mas netto, które są ważone w opakowaniu o masie od 50.0001 g do 200.0000 g włącznie (użyty przycisk <TARA>).

Przykład nr 2 dla wagi XA 220.4Y:

Lp.	Wartość tary	Minimalna naważka	Opis działania
1	220.0000 g	0.5000 g	Minimalna naważka dotyczy wszystkich mas netto, które są ważone w opakowaniach o masie dowolnej z pełnego zakresu wagi (użyty przycisk <TARA>), jak również przy ważeniu próbek bez opakowania (nie jest użyty przycisk <TARA>).

Przykład nr. 3 dla wagi XA 220.4Y:

Lp.	Wartość tary	Minimalna naważka	Opis działania
1	0.0000 g	0.2500 g	Minimalna naważka dotyczy wszystkich mas netto, które są ważone bez opakowania (nie jest użyty przycisk <TARA>). Program identyfikuje takie ustawienie w sposób, że minimalna naważka obowiązuje tylko dla ważenia próbek bez opakowań. Jeżeli zostanie użyta opcja tarowania, wtedy program wygasi ikonę informującą o użyciu funkcji minimalnej naważki, interpretując zapis jako ważenie z tarą (nie ma zdefiniowanej minimalnej naważki).

Użytkownik ma możliwość podglądu wprowadzonych danych, ale nie ma możliwości ich edytowania.

29.13. Kontrole masy

(funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym)

Każda kontrola towaru przeprowadzona na wadze jest wysyłana do drukarki oraz zapisywana w bazie **<Kontrole masy>**. Każda zapisana kontrola w bazie danych opatrzona jest indywidualnym numerem, nadawanym w chwili jej zakończenia.

Format numeru kontroli masy:

y y / M M / d d / H H / m m, gdzie:

- yy - rok zakończenia kontroli,
- MM - miesiąc zakończenia kontroli,
- dd - dzień zakończenia kontroli,
- HH - godzina zakończenia kontroli,
- mm - minuta zakończenia kontroli.

Użytkownik ma możliwość podglądu danych z poszczególnych kontroli.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu  **Bazy Danych**, zgodnie z pkt. 30 instrukcji.
- Następnie wejść do bazy **<Kontrole masy>** i nacisnąć na żądaną pozycję.

Wykaz danych definiowanych dla kontroli

Raporty zawierają następujące informacje:

	Numer partii	Numer partii podlegającej kontroli
	Data rozpoczęcia	Data rozpoczęcia procesu kontroli
	Data zakończenia	Data zakończenia procesu kontroli
	Użytkownik	Użytkownik wykonujący kontrolę
	Towar	Towar podlegający kontroli
	Średnia	Średnia masa wyznaczona ze zrealizowanej kontroli
	Średnia [%]	Średnia masa wyznaczona ze zrealizowanej kontroli wyrażona w procentach
	Odchylenie standardowe	Odchylenie standardowe ze zrealizowanej kontroli

	Odchylenie standardowe [%]	Odchylenie standardowe ze zrealizowanej kontroli wyrażona w procentach
	Min	Próg Min, zmierzona masa poniżej tego progu nie jest zaliczana do kontroli.
	Max	Próg Max, zmierzona masa powyżej tego progu nie jest zaliczana do kontroli.
00285	Liczba błędów T4-	
00285	Liczba błędów T3-	
00285	Liczba błędów T2-	
00285	Liczba błędów T1-	Liczba wystąpienia poszczególnych błędów podczas kontroli
00285	Liczba błędów T1+	
00285	Liczba błędów T2+	
00285	Liczba błędów T3+	
00285	Liczba błędów T4+	
	Liczność partii	Określona w raporcie licznosc kontrolowanej partii
	Wykres pomiarów	Wykres poszczególnych pomiarów w układzie współrzędnych.
	Wykres rozkładu prawdopodobieństwa	

Każdy raport można wydrukować po jego wybraniu i wyświetleniu jego szczegółów. W górnym pasku pojawia się ikona <🖨️ Drukuj>, po jej wciśnięciu następuje wydruk na drukarce podłączonej do terminala. Dodatkowo całą kartotekę można wyeksportować do pliku zewnętrznego, wciskając w górnym pasku przycisk <📁 Eksport do pliku>.

29.14. Warunki środowiskowe

Zawierają informacje związane z parametrami środowiska. Zależnie od konfiguracji wagi, zestawienie takie może zawierać temperaturę, wilgotność, wartość ciśnienia atmosferycznego. W przypadku, gdy do wagi podłączony jest moduł środowiskowy THB, to informacje o jego wskazaniach będą również rejestrowane.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu <📁 Bazy Danych>, nacisnąć pole <🌡️ Warunki środowiskowe >.
- Nacisnąć pole z wybranym raportem, jeżeli nie jest on widoczny, przewinąć wykaz raportów przyciskami nawigacyjnymi.
- Nazwa raportu składa się z daty oraz czasu.

Uwaga: Można skorzystać z opcji wyszukiwania raportu.

29.15. Opakowania

To wykaz stosowanych opakowań, dla których należy podać nazwę, kod oraz wartość masy. W trakcie ważenia, po wybraniu nazwy automatycznie zostanie przywołana wartość tary. Wyświetlacz pokaże ją ze znakiem minus.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu < Bazy Danych>, nacisnąć pole < Opakowania>.
- Nacisnąć przycisk < Dodaj>, jeżeli ma zostać dodane nowe opakowanie .
- Jeżeli opakowanie już istnieje, nacisnąć pole z jego nazwą, wprowadzić informacje związane z opakowaniem.

Uwaga: Można skorzystać z opcji wyszukiwania według nazwy lub kodu.

29.16. Magazyny

Zależnie od organizacji pracy, Magazyny zawierają wykaz miejsc, z których pobrano próbkę do ważenia lub miejsc, do których próbkę dostarczono. Dla każdego magazynu należy podać nazwę, kod oraz opis. W trakcie ważenia, po wybraniu nazwy magazynu zostanie ona automatycznie przypisana do wyniku.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu < Bazy Danych>, nacisnąć pole < Magazyny>.
- Nacisnąć przycisk < Dodaj>, jeżeli ma zostać dodany nowy magazyn.
- Jeżeli magazyn już istnieje, nacisnąć pole z jego nazwą, wprowadzić informacje identyfikujące.

Uwaga: Można skorzystać z opcji wyszukiwania według nazwy lub kodu.

29.17. Wydruki

Baza Wydruków zawiera wszystkie wydruki NIESTANDARDOWE. Każdy z nich posiada nazwę, kod oraz tzw. projekt.

Procedura:


- Należy wejść do podmenu < Bazy Danych>, nacisnąć pole < Wydruki>.
- Nacisnąć przycisk < Dodaj>, jeżeli ma być dodany nowy wydruk.
- Jeżeli wydruk niestandardowy już istnieje, nacisnąć pole z jego nazwą, wprowadzić informacje identyfikujące.

Uwaga: Można skorzystać z opcji wyszukiwania według nazwy lub kodu.


Projektowanie nowego wydruku.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu <Bazy Danych>, nacisnąć pole <Wydruki>.
- Nacisnąć przycisk <+> Dodaj> i utworzyć nowy wydruk lub edytować już istniejący.

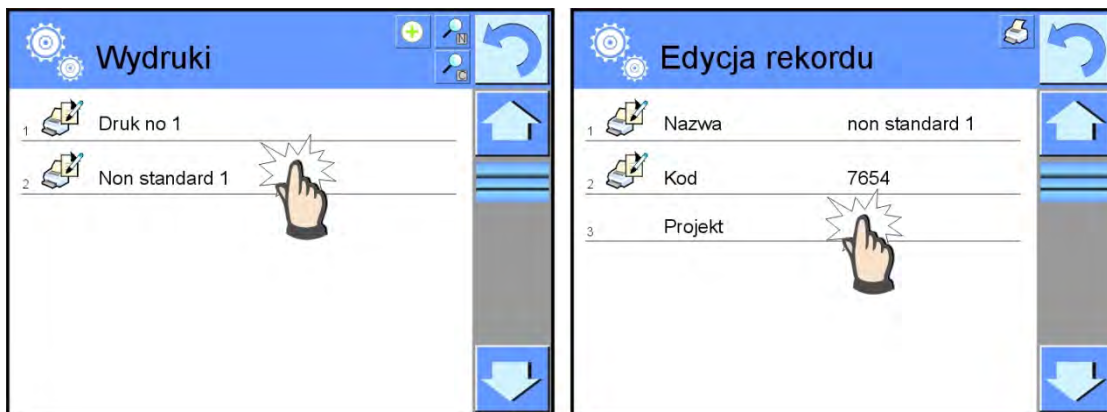

- W polu <Edycja rekordu> nacisnąć przycisk <Projekt>.
- Wyświetlacz pokaże okno umożliwiające stworzenie dowolnego wydruku.
- Podczas tworzenia wydruku należy korzystać z klawiatury dotykowej, posiada ona takie same możliwości jak typowa klawiatura komputerowa.

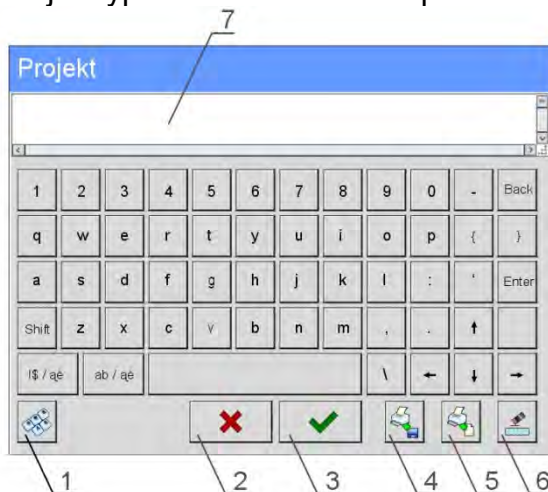

- 1 – powiększenie pola edycyjnego (7) zalecane podczas korzystania z klawiatury zewnętrznej podłączonej do portu USB wagi
 - 2 – przycisk rezygnacji
 - 3 – przycisk akceptacji
 - 4 – pobierz wydruk z pliku
 - 5 – wykaz zmiennych, które można wykorzystać przy tworzeniu wydruku
 - 6 – kasuj zawartość całego wydruku
 - 7 – pole edycji wydruku
- Zapisać utworzony wydruk.

Uwaga:

Kolejne znaki można kasować przyciskiem Back. Cursor można przesuwąć za pomocą strzałek kierunkowych.

Przykład wydruku 1 – wykorzystanie dużego pola edycyjnego

Projekt

Waga nr. 400015
Parametry wagi:
Max = 220 g
d= 0.001 g

Nazwa towaru:
Data: 2011.10.24
Czas: 11:48:06

Tryb pracy wagi: Ważenie

Masa netto: 94.147

Pomiar wykonał: Admin

Wydruk projektu

Przykład wydruk 2 – wydruk z pliku

Wszystkie projekty wydruków można wykonać jako pliki zewnętrzne, które można importować do wagi. Taki plik powinien mieć rozszerzenie *.txt lub *.lb i zawierać wszystkie informacje stałe i zmienne. Zawartość takiego pliku po zaimportowaniu można modyfikować.

Procedura:

- utworzyć plik *.txt lub *.lb w dowolnym edytorze,
- skopiować ten plik do pamięci zewnętrznej USB,
- włożyć pamięć USB do gniazda wagi,
- nacisnąć przycisk [4] <  pobierz wydruk z pliku> ,
- wyświetlacz wagi pokaże zawartość pamięci USB,
- wyszukać plik z wydrukiem i nacisnąć jego nazwę,
- wydruk zostanie automatycznie skopiowany do pola edycyjnego.

29.18. Zmienne uniwersalne

Zmienne uniwersalne są to informacje alfanumeryczne, które mogą być powiązane z wydrukami, towarem lub inną informacją dotyczącą ważenia. Dla każdej zmiennej należy podać nazwę, kod oraz wartość.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu <  Bazy Danych> , nacisnąć pole <  Zmienne uniwersalne> .
- Nacisnąć przycisk <  Dodaj> , jeżeli ma być dodana nowa zmienna.
- Jeżeli zmienna już istnieje, nacisnąć pole z jej nazwą i wprowadzić odpowiednie modyfikacje do pól: kod, nazwa, wartość.

Uwaga:

Można skorzystać z opcji wyszukiwania według nazwy lub kodu.

29.19. Zarządzanie bazami danych

Funkcja pozwalająca na zarządzanie danymi zawartymi w bazach. Dostępne są trzy opcje: Eksportuj bazę ważeń do pliku, Usuń bazy danych i Usuń ważenia i raporty.




29.19.1. Eksportuj bazę ważeń do pliku

Wszystkie wykonane ważenia są zapisywane w bazie danych Ważenia. Te informacje mogą być eksportowane do pliku przy wykorzystaniu urządzenia pamięci masowej pendrive.

Procedura:

- Podłączyć do gniazda USB wagi urządzenie pamięci masowej pendrive.
- Nacisnąć pole <  Eksportuj bazę ważeń do pliku >, program przejdzie do kolejnego okna, w którym należy ustawić opcje eksportu.

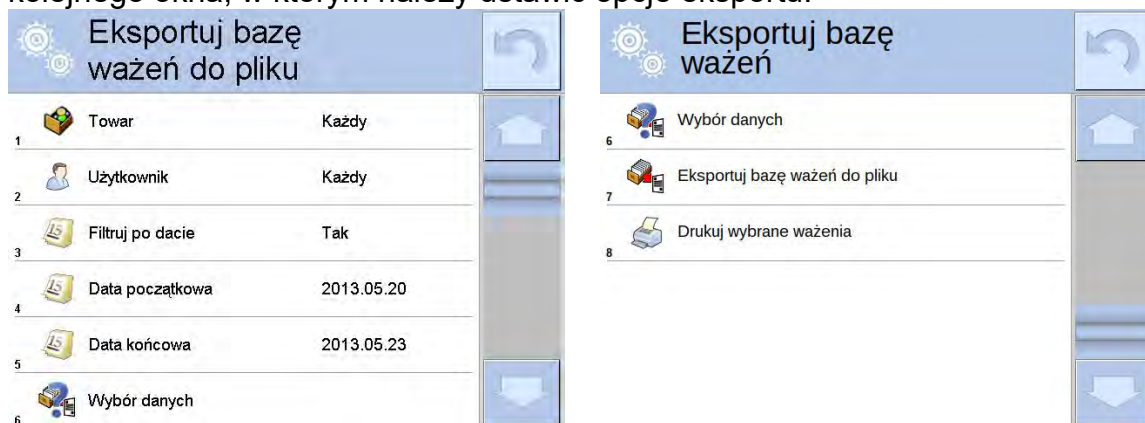

W opcji <Wybór danych> użytkownik może zdefiniować, jakie dane związane z pomiarami mają być eksportowane.

Wybór danych		
2	Masa	Tak
3	Tara	Tak
4	Użytkownik	Tak
5	Towar	Tak
6	Klient	Nie
7	Opakowanie	Nie

- Po ustawieniu opcji należy kliknąć pole <Eksportuj bazę Ważeń do pliku>, program automatycznie rozpocznie eksport bazy ważeń.
- Po zakończeniu eksportu wyświetli się komunikat <Zakończono> wraz z informacją o ilości danych wyeksportowanych oraz nazwie pliku (z rozszerzeniem *.txt), a następnie waga wróci do wyświetlania poprzedniego okna.

Eksportuj bazę ważeń do pliku	
4	Data początkowa 2013.05.20

Zakończono
Liczba rekordów:34
Ważenia_364080.txt

✓

Eksportuj bazę ważeń do pliku	
1	Towar Każdy
2	Użytkownik Każdy
3	Filtruj po dacie Tak
4	Data początkowa 2013.05.20
5	Data końcowa 2013.05.23
6	Wybór danych

- Można wrócić do ważenia lub przejść do kolejnych ustawień menu.

Uwaga:

W przypadku nierozpoznania przez wagę urządzenia pamięci masowej pendrive, po wejściu w opcję <Eksportuj bazę ważeń do pliku> zostanie wyświetlony komunikat: <Błąd operacji>.


- Nazwa utworzonego pliku składa się z nazwy bazy danych oraz numeru fabrycznego wagi, np. <Ważenia_364080.txt>.
- Odłączyć urządzenie pamięci masowej pendrive od gniazda USB wagi.

Wzór utworzonego pliku:

Wzór utworzonego pliku ma postać tabeli, której kolumny są odseparowane znakiem <Tab> w celu ewentualnego bezpośredniego eksportu pliku do arkusza kalkulacyjnego <Excel>. Tabela zawiera wszystkie informacje o wykonanym ważeniu, takie jak: data i czas, masa oraz jednostka masy, tara oraz jednostka tary, numer serii, nazwa operatora, nazwa kontrahenta, nazwa opakowania, nazwa magazynu źródłowego, nazwa magazynu docelowego, nazwa kontroli wyniku.

29.19.2. Usuń bazy danych

Funkcja pozwalająca na usunięcie danych z wybranych baz danych. Po uruchomieniu funkcji zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać bazę, z której należy usunąć dane.

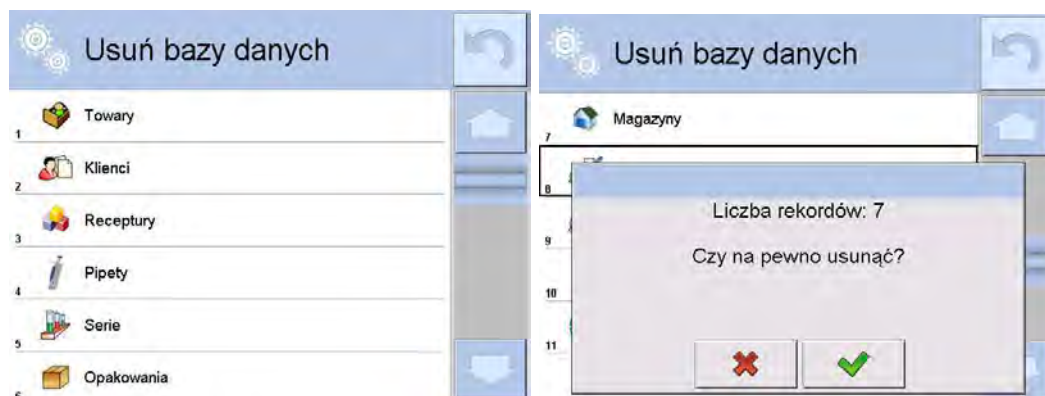


Po potwierdzeniu operacji program usuwa dane i wyświetla okno z podsumowaniem:




Po potwierdzeniu informacji program wróci do poprzedniego okna. Użytkownik może dokonać kolejnych operacji lub wrócić do ważenia.

29.19.3. Usuń ważenia i raporty

To pole służy do czyszczenia zawartości bazy danych z ważeń oraz raportów. Po uruchomieniu funkcji program wyświetli okno z klawiaturą numeryczną, w którym należy wpisać graniczną datę. Data określa granicę usunięcia danych – starszych niż data wprowadzona. Należy podać rok, miesiąc, dzień.

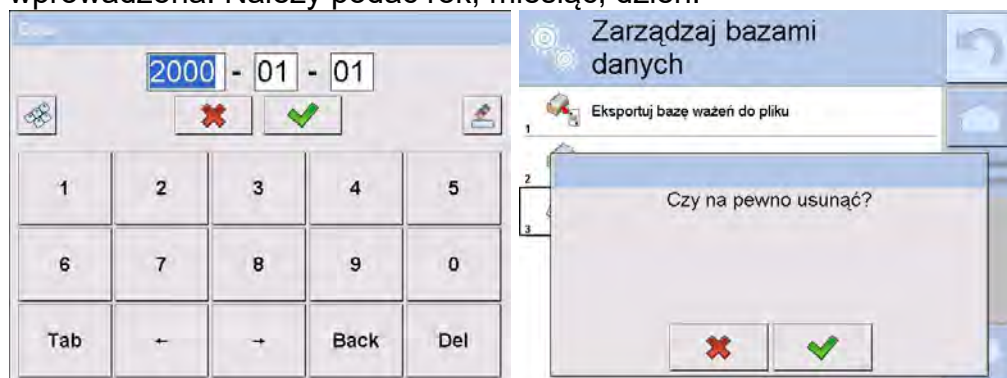

Po potwierdzeniu wprowadzonej daty wszystkie ważenia i raporty, które były zgromadzone we wskazanym czasie zostaną usunięte. Ilość danych usuniętych zostanie pokazana.

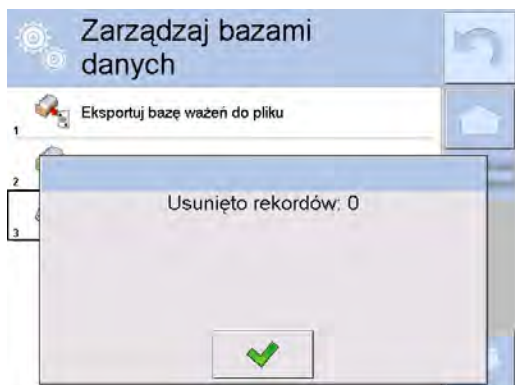

30. KOMUNIKACJA

Menu Komunikacja znajduje się w menu Parametry. Dostęp uzyskuje się po naciśnięciu przycisku Setup lub ikony <Setup 

-  COM 1 (RS232),
-  COM 2 (RS232),
-  Ethernet,
-  Wi-Fi,
-  TCP.

Konfiguracja portów jest możliwa w grupie parametrów < Komunikacja>.

Aby wejść do podmenu < Komunikacja>, należy wcisnąć przycisk , a następnie: < Komunikacja>.

30.1. Ustawienia portów RS 232

Procedura:

- Należy wybrać port komunikacyjny < COM1> lub < COM2>.
- Następnie ustawić odpowiednie wartości.

Dla ustawień portów RS 232 program wagowy dysponuje następującymi parametrami transmisji:

- Prędkość transmisji - 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s
- Bity Danych - 5, 6, 7, 8
- Bity Stopu - Brak, 1, 1.5, 2
- Parzystość - Brak, Nieparzysty, Parzysty, Znacznik, Odstęp

30.2. Ustawienia portu ETHERNET

Procedura:

- Należy wybrać port komunikacyjny < Ethernet>, a następnie ustawić odpowiednie wartości:
- DHCP - Tak – Nie
- Adres IP - 192.168.0.2
- Maskę podsieci - 255.255.255.0
- Bramę domyślną - 192.168.0.1


Uwaga:

Powyższe ustawienia mają wyłącznie charakter informacyjny. Parametry transmisji należy dobrać zgodnie z ustawieniami lokalnej sieci klienta.

Po dokonaniu zmian nacisnąć przycisk , zostanie wyświetlony komunikat:
<Aby zmiany weszły w życie należy zrestartować wagę>.
Należy wrócić do ważenia i zrestartować urządzenie.

30.3. Ustawienia portu Wi-Fi

Jeżeli waga jest wyposażona w moduł Wi-Fi, na wyświetlaczu głównym w górnym pasku będzie widoczna specjalna ikona:

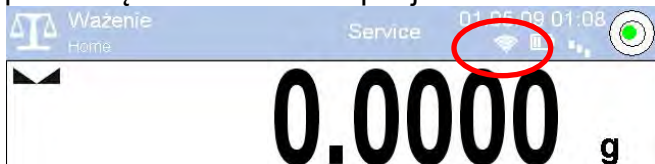

Procedura:

- Należy wybrać port komunikacyjny < Wifi>, a następnie ustawić odpowiednie wartości:
 - DHCP – Tak – Nie,
 - Adres IP – 10.10.9.155,
 - Maska podsieci – 255.255.255.0,
 - Brama domyślna – 10.10.8.244.

Uwaga:

Powyższe ustawienia mają wyłącznie charakter informacyjny. Parametry transmisji należy dobrać zgodnie z ustawieniami lokalnej sieci klienta.

Po dokonaniu zmian nacisnąć przycisk , zostanie wyświetlony komunikat:
<Aby zmiany weszły w życie należy zrestartować wagę>.

Należy wrócić do ważenia i zrestartować urządzenie.

Dodatkowo użytkownik może sprawdzić <Dostępne sieci>, które zostały wykryte przez wagę:



Ikona obok nazwy sieci pokazuje, czy sieć wymaga podania hasła (ikonka z kłódką). Aby znaleźć dostępne sieci, należy wybrać opcję <Odśwież>.

Aby sprawdzić parametry wybranej sieci, należy kliknąć w pole <Status sieci>, w wyświetlonym oknie zostaną podane parametry sieci:



Wybrana sieć i ustawione parametry połączenia są zapamiętywane przez program wagi i za każdym razem, przy włączeniu wagi, program łączy się z siecią zgodnie z ustawionymi parametrami. Aby wyłączyć tę właściwość, należy wybrać opcję <Zapomnij sieć>. Powoduje ona zerwanie połączenia z wybraną siecią.

30.4. Ustawienia protokołu TCP

TCP (ang. *Transmission Control Protocol* – protokół kontroli transmisji) jest strumieniowym protokołem komunikacji między dwoma komputerami. TCP jest protokołem działającym w trybie klient – serwer. Serwer oczekuje na nawiązanie połączenia na określonym porcie, natomiast klient inicjuje połączenie do serwera.

Procedura ustawienia numeru portu dla protokołu TCP :

- Należy wejść do grupę parametrów <  Komunikacja >.
- Wybrać: <  Tcp /  Port >, po czym zostanie otwarte okno <Port> z klawiaturą ekranową.
- Wpisać żądany numer portu i potwierdzić przyciskiem .

31. URZĄDZENIA

Menu URZĄDZENIA znajduje się w menu Parametry. Dostęp uzyskuje się po naciśnięciu przycisku Setup lub ikony <Setup  >. W menu znajduje się wykaz urządzeń, które mogą współpracować z wagą.

31.1. Komputer

Aktywne połączenie waga – komputer jest sygnalizowane ikoną  w górnym pasku okna głównego. W podmenu <  Komputer > należy dokonać konfiguracji ustawień.

Procedura:

- Nacisnąć przycisk , a następnie <  Urządzenia /  Komputer >.
- Ustawić parametry wagi związane ze współpracą z komputerem:
 - port komputera:
dostępne opcje: brak, COM 1, COM 2, TCP,
 - adres:
należy podać adres wagi, z którą połączony jest komputer,
 - transmisja ciągła:
dostępne opcje: NIE, TAK (*format wydruku jest zależny od ustawionego projektu wydruku dla tego urządzenia – parametr <Projekt wydruku ważenia>*),
 - Interwał:
Parametr umożliwia ustawienie częstotliwości wydruków dla transmisji ciągłej. Częstotliwość wydruków ustawia się w sekundach, z dokładnością 0.1s.

Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej wartości czasu w zakresie od 0.1 do 1000 sekund. Ustawienie obowiązuje dla transmisji ciągłej uruchamianej z wagi jak również dla uruchamianej komendą z komputera.

- projekt wydruku ważenia:
można zaprojektować indywidualny wydruk do komputera, wykorzystując okno z projektem wydruku (*zasady tworzenia wydruków opisuje pkt. 30.19*),
- E2R System:
E2R jest to system nadzoru i kontroli wszystkich procesów ważenia, jakie są realizowane na wadze. Po włączeniu opcji operacje na niektórych Bazach Danych są dostępne tylko z poziomu komputera (opcje są niedostępne z poziomu programu wagi).

Uwaga:

Uaktywnienia parametru  **E2R System** może dokonać wyłącznie producent urządzenia lub osoby do tego upoważnione. W celu zapewnienia prawidłowej współpracy z systemem E2R należy pamiętać, aby transmisja ciągła była wyłączona.

31.2. Drukarka

Użytkownik wagi w podmenu < Drukarka> ma możliwość:

- ustawienia portu komunikacji z drukarką,
- zdefiniowania strony kodowej wydruku, (domyślnie 1250),
- zdefiniowanie kodów sterujących dla drukarki PCL lub drukarki paragonowej EPSON,

Uwaga: KODY NALEŻY WPISYWAĆ W POSTACI HEKSADECYMALNEJ!

- zdefiniowania wzorców wydruków.

Aby zapewnić prawidłową współpracę wagi z drukarką (prawidłowy wydruk liter ze znakami diakrytycznymi dla danego języka interfejsu wagi), należy wybrać odpowiednią prędkość transmisji w wadze; taką, jaka obowiązuje dla drukarki (patrz: Ustawienia drukarki) oraz zapewnić zgodność strony kodowej wysyłanego wydruku ze stroną kodową drukarki.

Zgodność strony kodowej można uzyskać na dwa sposoby:

- ustawiając odpowiednią stronę kodową w ustawieniach drukarki (patrz: Instrukcja drukarki) – taką samą, jak strona kodowa wydruku ustawiona w wadze,
- wysyłając kod sterujący z wagi, który automatycznie przed wydrukiem ustawia odpowiednią stronę kodową drukarki (taką samą, jak strona kodowa wydruku ustawiona w wadze) przed wydrukowaniem danych z wagi (tylko wtedy, gdy taką możliwość ma drukarka).

Przykładowe ustawienia wagi dla poprawnej współpracy (wydruk polskich znaków) z drukarką EPSON, podłączoną do portu RS232:

1. Z drukarką igłową EPSON TM-U220x.

Parametry komunikacji portu, do którego jest podłączona drukarka:

- *prędkość transmisji* – o 9600 bit/s
- *bity danych* – 8
- *bity stopu* – 1
- *parzystość* – brak

Parametry drukarki w grupie URZĄDZENIA:

- *port* – COM 1 lub COM 2 (ten, do którego jest podłączona drukarka)
- *strona kodowa* – **852**

- kody sterujące – **1B7412**

2. Z drukarką termiczną EPSON TM-T20.

Parametry komunikacji portu, do którego jest podłączona drukarka:

- prędkość transmisji – o 38400 bit/s
- bity danych – 8
- bity stopu – 1
- parzystość – brak

Parametry drukarki w grupie URZĄDZENIA:

- port – COM 1 lub COM 2 (ten, do którego jest podłączona drukarka)
- strona kodowa – **1250**
- kody sterujące – **1B742D**

lub parametry drukarki w grupie URZĄDZENIA:

- port – COM 1 lub COM 2 (ten, do którego jest podłączona drukarka)
- strona kodowa – **852**
- kody sterujące – **1B7412**

Jeżeli na wydruku w miejscu znaczników ostatniej cyfry są inne znaki (dla wag legalizowanych), należy w parametrze <KODY STERUJĄCE> dodatkowo, oprócz kodu strony kodowej, wprowadzić także kod tablicy znaków UK: **1B5203**. W takim przypadku ustawienie parametru <KODY STERUJĄCE> będzie miało postać: kody sterujące – **1B74121B5203**

Wzorzec wydruku jest opisem, w jaki sposób ma być drukowana informacja z bazy danych.

Jeżeli jest on niewystarczający, to należy go zmodyfikować. Poprawność zaprojektowanego wzorca można sprawdzić, drukując np. parametry związane z towarem. Czynność jest możliwa do wykonania po przejściu do bazy danych <Towary/edycja towaru> – należy nacisnąć ikonę drukarki.

Domyślne wartości dla poszczególnych wzorców:

Projekt Wydruku Towaru	{50}
	{51}
Projekt Wydruku Użytkownika	{75}
	{76}
Projekt Wydruku Klienta	{85}
	{86}
Projekt Wydruku Magazynu	{130}
	{131}
Projekt Wydruku Opakowania	{80}
	{81}
	{82}

Projekt wydruku warunków środowiskowych

----- WARUNKI ŚRODOWISKOWE-----

Data i czas	{275}
Temperatura czujnika 1:	{wartość} °C
Temperatura czujnika 1:	{wartość} °C
Temperatura THBS:	{wartość} °C
Wilgotność THBS:	{wartość} %

Projekt wydruku receptury

----- Dane receptury -----

Nazwa receptury: {165}

Liczba składników: {167}

Masa docelowa receptury: {168} g

Składniki receptury:

{169}

31.3. Czytnik kodów kreskowych

Waga umożliwia współpracę z czytnikiem kodów kreskowych. Czytnik może być wykorzystywany do szybkiego wyszukiwania:

- Towarów,
- Użytkowników,
- Klientów
- Opakowań,
- Magazynów,
- Receptur,
- Pipet
- Serii w ważeniu różnicowym
- Zmiennych uniwersalnych,

Konfiguracji czytnika kodów kreskowych dokonujemy w podmenu:

„ /  **Urządzenia** /  **Czytnik Kodów Kreskowych**”.

Uwaga:

W podmenu < **Komunikacja**> należy ustawić prędkość transmisji na zgodną ze skanerem kodów kreskowych (domyślnie 9600b/s). Szczegółowy opis komunikacji wagi z czytnikami kodów kreskowych znajduje się w **DODATKU E** instrukcji.

31.3.1. Port czytnika kodów kreskowych

Procedura:

- Wejść w grupę parametrów < **Urządzenia**> i wybierz „ **Czytnik Kodów Kreskowych** /  **Port**”, a następnie ustaw odpowiednią opcję.

Waga posiada możliwość komunikacji z czytnikiem poprzez porty:

- RS 232 (COM1),
- RS 232 (COM2),
- USB

31.3.2. Prefiks / Sufiks

Użytkownik ma możliwość edycji wartości przedrostka <  **Prefiks**> oraz przyrostka <  **Sufiks**> w celu synchronizacji programu wagowego z obsługiwany czytnikiem kodów kreskowych.

Uwaga:

W standardzie przyjętym przez RADWAG przedrostkiem jest znak (bajt) 01 heksadecymalnie a przyrostkiem jest znak (bajt) 0D heksadecymalnie. Szczegółowy opis komunikacji wagi z czytnikami kodów kreskowych znajduje się w **DODATKU E** instrukcji.

Procedura:


- Wejdź w podmenu <  **Czytnik Kodów Kreskowych**>,
- Przejdź do parametru <  **Prefiks**> i za pomocą klawiatury ekranowej wpisz żądaną wartość (heksadecymalnie) a następnie potwierdź zmiany przyciskiem .
- Przejdź do parametru <  **Sufiks**> i za pomocą klawiatury ekranowej wpisz żądaną wartość (heksadecymalnie) a następnie potwierdź zmiany przyciskiem .

31.3.3. Wybór pola

Użytkownik ma możliwość konfiguracji wyboru pola w poszczególnych bazach danych, po którym ma być realizowane wyszukiwanie.

Procedura:

- Wejdź w grupę parametrów <  **Urządzenia**>,
- Po wyborze „  **Czytnik Kodów Kreskowych** /  **Wybór pola**” zostanie wyświetlona następująca lista:

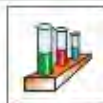	Towar		Seria
	Użytkownik		Zmienna uniwersalna 1
	Klient		Zmienna uniwersalna 2
	Opakowanie		Zmienna uniwersalna 3
	Magazyn		Zmienna uniwersalna 4
	Receptura		Zmienna uniwersalna 5
	Pipeta		

- Po wejściu w żądaną pozycję użytkownik ma możliwość edycji następujących parametrów:

	Filtrowanie	Deklaracja pozycji, po której ma być realizowane wyszukiwanie (patrz poniższa tabela)
---	--------------------	---

	Offset	Ustawienie pierwszego znaczącego znaku kodu, od którego będzie rozpoczynane wyszukiwanie. Wszystkie znaki poprzedzające są pomijane
	Długość Kodu	Ustawienie ilości znaków kodu branych pod uwagę przy wyszukiwaniu
	Znacznik Początku	Deklaracja początku czytywanego kodu, który będzie brany pod uwagę przy wyszukiwaniu
	Znacznik Końca	Deklaracja końca czytywanego kodu, który będzie brany pod uwagę przy wyszukiwaniu
	Pomiń znacznik	Deklaracja czy przy porównywaniu czytanego kodu, z kodem znajdującym się w wadze mają być uwzględniane znaczniki początku i końca kodu czy pomijane.

Wykaz pozycji filtrowania w zależności od wyboru pola:

Wybór pola	Filtrowanie
Towar	Brak, Nazwa, Kod, Kod EAN,
Użytkownik	Brak, Nazwa, Kod
Klient	Brak, Nazwa, Kod
Opakowanie	Brak, Nazwa, Kod
Magazyn	Brak, Nazwa, Kod
Receptura	Brak, Nazwa, Kod
Pipeta	Brak, Nazwa, Kod
Seria	Brak, Nazwa, Kod
Zmienne uniwersalne	Brak, Aktywny

31.3.4.Test

Użytkownik za pomocą funkcji  **Test** ma możliwość weryfikacji poprawnego działania czytnika kodów kreskowych podłączonego do wagi.

Procedura:

- Wejść w podmenu  **Czytnik Kodów Kreskowych**,
- Po wejściu w parametr  **Test** zostanie otworzone okno **Test** zawierające pole ASCII oraz pole HEX,
- Po zeskanowaniu kodu zostanie on wczytany w pole ASCII oraz pole HEX a w dolnej części okna zostanie wyświetlony wynik testu.

W przypadku, gdy:

- **<Prefiks>** i **<Sufiks>** zadeklarowane w ustawieniach wagi są zgodne z **<Prefiks>** i **<Sufiks>** w czytanym kodzie, wynik testu będzie posiadał wynik **<Pozytywny>**,
- **<Prefiks>** i **<Sufiks>** zadeklarowane w ustawieniach wagi nie są zgodne z **<Prefiks>** i **<Sufiks>** w czytanym kodzie, wynik testu będzie posiadał wynik **<Negatywny>**.

31.4. Czytnik kart transponderowych

Wybór (logowanie) operatora po każdorazowym włączeniu urządzenia może odbywać się poprzez:

- a) podanie hasła przy wykorzystaniu klawiatury wagi,

b) wykorzystanie czytnika kart zbliżeniowych (zbliżając zarejestrowaną uprzednio kartę do czytnika).

Uwaga:

W celu poprawnej współpracy wagi z czytnikiem kart zbliżeniowych należy w podmenu < **Komunikacja**> ustawić odpowiednią prędkość transmisji (domyślnie: 9600b/s).

Port czytnika kart transponderowych.

Waga ma możliwość komunikacji z urządzeniem poprzez porty:

- RS 232 (COM1),
- RS 232 (COM2).

W celu dokonania logowania za pomocą czytnika kart zbliżeniowych, należy w pierwszej kolejności dokonać procedury przypisania numeru uprzednio zarejestrowanej karty do wybranego operatora w bazie operatorów.

Procedura przypisania numeru karty do operatora:

- Podłączyć czytnik kart zbliżeniowych dożądanego portu (RS 232 COM1 lub RS 232 COM2), dokonać wyboru portu komunikacji wagi z czytnikiem kart zbliżeniowych.
- W podmenu < **Komunikacja**> ustawić prędkość transmisji na zgodną z czytnikiem kart zbliżeniowych (domyślnie 9600b/s).
- Wejść do bazy operatorów, a następnie dokonać edycji żądanego operatora, przechodząc do pozycji < **RFID** Numer karty>.
- Po wejściu do edycji pozycji < **RFID** Numer karty> zostanie wyświetlone pole edycyjne <Numer karty> z klawiaturą ekranową.
- Po zbliżeniu karty do czytnika kart zbliżeniowych program wagowy automatycznie wyświetli w polu edycyjnym <Numer karty> numer zarejestrowanej karty.
- Wczytany numer należy potwierdzić przyciskiem  i wrócić do ważenia.

31.5. Wyświetlacz dodatkowy

Waga ma możliwość komunikacji z wyświetlaczem dodatkowym poprzez porty:

- RS 232 (COM1),
- RS 232 (COM2),
- TCP.

Rodzaj pokazywanej przez wyświetlacz dodatkowy informacji jest deklarowany w zmiennej <Projekt>.

Procedura – projektowanie zmiennej

- Wejść do grupy parametrów < **Urządzenia**>.
- Wybrać < **Wyświetlacz dodatkowy** /  **Projekt**>, po czym zostanie otwarte okno edycyjne <Projekt> z klawiaturą ekranową.
- Wpisać żądaną wartość wzorca za pomocą klawiatury ekranowej lub
- Wybrać żądaną wartość wzorca z listy po naciśnięciu przycisku < >.
- Zatwierdzić zmiany przyciskiem .

Uwaga:

Waga współpracuje z wyświetlaczem WD5/3Y firmy RADWAG. W celu zapewnienia poprawnej współpracy z dodatkowym wyświetlaczem parametr < **Wzorzec**> powinien mieć wpisaną wartość zmiennej **{140}**, a prędkość komunikacji powinna być ustawiona na wartość 38400 bit/s dla portu, do którego jest podłączony dodatkowy wyświetlacz.

31.6. Moduł środowiskowy

Istnieje możliwość podłączenia do wagi modułu środowiskowego THB poprzez porty COM 1 lub COM 2. W celu zapewnienia prawidłowej współpracy należy wprowadzić adres podłączenia modułu oraz prędkość transmisji dla portu, do którego jest podłączony moduł środowiskowy (adres i prędkość znajduje się na tabliczce modułu środowiskowego).

31.7. Dozownik tabletek

(funkcja niedostępna w wykonaniu standardowym)

Waga ma możliwość komunikacji z dozownikiem tabletek poprzez porty:

- RS 232 (COM1),
- RS 232 (COM2),
- Com internal.

Dla zapewnienia poprawnej współpracy z dozownikiem (podajnikiem) należy ustawić odpowiedni adres urządzenia (adres znajduje się na tabliczce znamionowej podajnika wraz z prędkością transmisji).

32. WEJŚCIA/WYJŚCIA

Zastosowanie układów wejścia:

Za pomocą tych układów można sterować pracą wagi. Do każdego z 4 układów wejścia można podłączyć poniższe funkcje lub przyciski:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| o Progi doważania | o Drzwiczki prawe |
| o Wartość docelowa | o Parametry |
| o Profil | o Statystyka |
| o Kalibracja | o Dodaj do statystyki |
| o Zeruj | o Towar |
| o Taruj | o Magazyn |
| o Ustaw tarę | o Klient |
| o Wyłącz tarę | o Liczenie sztuk: podaj masę sztuki |
| o Przywróć tarę | o Liczenie sztuk: wyznacz masę sztuki |
| o Opakowanie | o Odchyłki: podaj masę odniesienia |
| o Drukuj | o Odchyłki: ustaw 100% |
| o Wydruk nagłówka | o Gęstość ciała stałego |
| o Wydruk stopki | o Gęstość cieczy |
| o Zmienna uniwersalna $1 \div 5$ | o Gęstość powietrza |
| o Zatwierdź | o Sterowanie automatem komparatora |
| o Przerwij | o Zadanie |
| o Użytkownik | o Wzorzec odniesienia |
| o Drzwiczki lewe | |

Po wystąpieniu zmiany stanu logicznego układu wejścia np. z [0] na [1] zostanie wykonana funkcja, jaka jest przypisana do tego układu. Może to być:

- o np. kalibracja automatyczna wagi celem ustalenia dokładności,
- o wyświetlenie wartości progów doważania,

- o przywołanie wartości tary do ważenia masy netto.

Procedura:

- Nacisnąć przycisk , a następnie: <  Wejścia/Wyjścia>.
- Wejść do podmenu <  Wejścia/Wyjścia>, wybrać opcję <  Wejścia>.
- Wejść do edycji żadanego wejścia, zostanie wyświetlona lista funkcji.
- Wybrać z listy żadaną funkcję i wrócić do ważenia.

Zastosowanie układów wyjścia:

Za pomocą tych układów można SYGNALIZOWAĆ stan wyniku ważenia. Zmiana stanu logicznego układu wyjścia, np. z [0] na [1] nastąpi wówczas, gdy spełniony będzie warunek, jaki został przypisany do układu wyjścia.

Do każdego z 4 układów wejścia można podłączyć poniższe informacje:

Dostępna opcja	Stan wagi, który przełącza układ logiczny wyjścia.
Brak	-----
Stabilny	Każdy pomiar stabilny przełącza stan logiczny układu.
MIN stabilny	Stabilny pomiar poniżej progu [MIN] przełącza stan logiczny układu.
MIN niestabilny	Niestabilny pomiar poniżej progu [MIN] przełącza stan logiczny układu.
OK stabilny	Stabilny pomiar zawarty pomiędzy progami [MIN] [MAX] przełącza stan logiczny układu.
OK niestabilny	Niestabilny pomiar zawarty pomiędzy progami [MIN] [MAX] przełącza stan logiczny układu.
MAX stabilny	Stabilny pomiar poniżej progu [MAX] przełącza stan logiczny układu.
MAX niestabilny	Niestabilny pomiar poniżej progu [MAX] przełącza stan logiczny układu.
Potwierdzenie zakończenia cyklu	Koniec procedury.

Procedura:

- Nacisnąć przycisk , a następnie: <  Wejścia/Wyjścia>.
- Wejść do podmenu <  Wejścia/Wyjścia>, wybrać opcję <  Wyjścia>.
- Wejść do edycji żadanego wyjścia, zostanie wyświetlona lista funkcji.
- Wybrać z listy żadaną funkcję i wrócić do ważenia z procedurą zapisu zmian.

33. INNE PARAMETRY

To menu zawiera globalne informacje dotyczące działania wagi, takie jak: język, data-czas, sygnał dźwiękowy, kalibracja ekranu, kontrola poziomu. Aby wejść do podmenu <Inne>, należy wcisnąć przycisk , a następnie przycisk <  Inne>.

33.1. Wybór języka interfejsu

Procedura:

Wejść w podmenu <  Inne>, wybrać opcję <  Język> i dokonać wyboru języka interfejsu komunikacyjnego wagi.

Dostępne wersje językowe: Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Koreański, Turecki, Chiński, Włoski, Czeski, Rumuński, Węgierski, Rosyjski.

33.2. Ustawienie daty i czasu

Użytkownik ma możliwość ustawienia daty i czasu oraz wyboru formatu wyświetlania i wydruku tych danych.

Wejście w edycję ustawienia daty i czasu może odbywać się na dwa sposoby, poprzez:

- bezpośrednie naciśnięcie na pole **<data i czas>**, umieszczone na górnej belce ekranu głównego wagi,
- wejście do podmenu:  /  **Inne/**  **Data i Czas>**.

Po wejściu do edycji ustawień daty i czasu wyświetli się klawiatura ekranowa. Należy kolejno ustawić odpowiednie wartości, tj. rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta i zatwierdzić zmiany przyciskiem .

Podmenu:  /  **Inne/**  **Data i Czas>** zawiera dodatkowe funkcje, służące do definiowania formatu daty i czasu:

<i>Ikona</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wartość</i>	<i>Opis</i>
	Strefa czasowa	Europe, Warsaw	Parametr przyjmuje wartość: nazwa strefy/kraj. Z konkretną nazwą strefy/kraju związana jest informacja czy ulega zmianie czas z zimowego na letni (i odwrotnie), oraz konkretny dzień roku, w który dochodzi do zmiany.
	Data i czas	2016.04.04 08:00:00	Ustawienie daty i czasu zegara wewnętrznego w wadze
	Format daty	yyyy.MM.dd *	Wybór formatu daty. Dostępne wartości: d.M.yy, d/M/yy, d.M.yyyy, dd.MM.yy, dd/MM/yy, dd-MM-yy, dd.MM.yyyy, dd/MM/yyyy, dd-MMM-yy, dd.MMM.yyyy, M/d/yy, M/d/yyyy, MM/dd/yy, MM/dd/yyyy, yy-M-dd, yy/MM/dd, yy-MM-dd, yyyy-M-dd, yyyy.MM.dd, yyyy-MM-dd.
	Format czasu	HH:mm:ss **	Wybór formatu czasu. Dostępne wartości: H.mm.ss, H:mm:ss, H-mm-ss, HH.mm.ss, HH:mm:ss, HH-mm-ss, H.mm.ss tt, H:mm:ss tt, H-mm-ss tt, HH.mm.ss tt, HH:mm:ss tt, HH-mm-ss tt, h.mm.ss tt, h:mm:ss tt, h-mm-ss tt, hh.mm.ss tt, hh:mm:ss tt, hh-mm-ss tt
	Czas z internetu	Tak	Jeżeli waga jest podłączona do sieci internetowej to opcja umożliwia aktualizację czasu i daty z sieci.

	Zsynchronizowano i internetem	Tak	Parametr informujący użytkownika czy czas i data w wadze zostały zsynchronizowane z danymi w sieci internetowej.
---	-------------------------------	-----	--

*) - Dla formatu daty: y – Rok, M – miesiąc, d – dzień

**) - Dla formatu czasu: H – godzina, m – minuta, s – sekunda

Podgląd daty i czasu z uwzględnieniem zadeklarowanych formatów jest widoczny w polu

< Data i Czas>.



Uwaga:

Dostęp do ustawień parametru < Data i Czas> jest możliwy tylko dla użytkownika o odpowiednim poziomie uprawnień. Poziom uprawnień może być zmieniony przez administratora w menu <Uprawnienia>.

33.3. Moduł rozszerzeń

Opcja pozwalająca na uruchomienie zgodności urządzenia dla procedur FDA 21 CFR, rozszerzenia protokołu komunikacyjnego w wadze i wyłączenie standardowej licencji wagi (tzw. Waga demo).

Aby włączyć działanie należy znać numer licencji dla poszczególnych opcji. Aby uzyskać ten numer należy skontaktować się z producentem urządzenia.

Procedura:

Wejść w podmenu < Inne>, wybrać parametr <Moduł rozszerzeń> i postępować według wyświetlanych komunikatów.

33.4. Dźwięk

Procedura:

Wejść w podmenu < Inne>, wybrać parametr < Dźwięk> i ustawić odpowiednią opcję:

Dźwięk zatwierdzenia wyniku	– Tak/Nie
Dźwięk Ekranu dotykowego	– Tak/Nie
Czujniki	– Tak/Nie
Przycisk	– Tak/Nie
Głośność	– zakres regulacji do 100%

33.5. Usypianie wyświetlacza

Użytkownik ma możliwość włączenia procedury wygaszenia wyświetlacza. W tym celu należy:

Nacisnąć przycisk , a następnie: < Inne/Usypianie wyświetlacza>. Po wejściu do edycji należy wybrać jedną z wartości: [Brak; 1; 2; 3; 5; 10; 15]. Wartości cyfrowe są ustawiane w minutach. Wybór jednej z wartości powoduje automatyczne jej wybranie i powrót do poprzedniego menu.

Uwaga:

Wygaszenie wyświetlacza następuje tylko wtedy, gdy waga jest nieużywana (brak zmian masy na wyświetlaczu). Powrót do ważenia po wygaszeniu wyświetlacza następuje automatycznie, gdy program wykryje jakąkolwiek zmianę masy lub poprzez naciśnięcie wyświetlacza lub przycisku na elewacji.

33.6. Jasność wyświetlacza

Jasność wyświetlacza ma wpływ na długość działania wagi przy zasilaniu akumulatorowym. Jeżeli użytkownikowi zależy na jak najdłuższym cyklu pomiędzy kolejnymi ładowaniami akumulatora, należy zmniejszyć jasność wyświetlacza. W tym celu należy:

Nacisnąć przycisk , a następnie: < Inne/Jasność wyświetlacza>.

Po wejściu do edycji należy wpisać wartość w zakresie: [0% - 100%]. Wpisanie odpowiedniej wartości powoduje automatyczną zmianę jasności wyświetlacza i powrót do poprzedniego menu.

33.7. Kalibracja ekranu dotykowego

Kalibracja ekranu jest wymagana wtedy, gdy podczas pracy zostanie stwierdzone niepoprawne działanie panelu dotykowego.

Procedura:


- Należy wejść do podmenu < Inne>.
- Wybrać parametr < Kalibracja ekranu dotykowego>, po czym zostanie otwarte okno edycyjne.
- Palcem lub przy pomocy cienkiego, miękkiego wskaźnika wciskać (dłuższe przytrzymanie, aż znacznik przesunie się w kolejne miejsce) ekran w miejscu, w którym znajduje się krzyżyk, po wskazaniu 5 miejsca należy zatwierdzić zmiany przyciskiem .

Uwaga:

Proces można przerwać, naciskając przycisk Esc na klawiaturze PC, podłączonej do głowicy.

33.8. Detekcja drgań

Program wagi umożliwia wykrywanie nieprawidłowego umieszczania próbki na szalce wagi, które może powodować zwiększone błędy wskazań. Włączenie funkcji jest sygnalizowane pojawieniem się odpowiedniej ikony na wyświetlaczu masy.

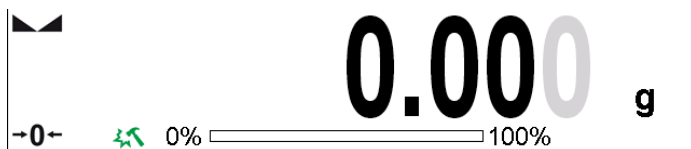

Jeżeli program wagi wykryje nieprawidłowe umieszczenie próbki na szalce, wtedy ikona

zostanie zmieniona na czerwoną . Oznacza to, że wynik może być obarczony większym błędem.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu  Inne>.
- Wybrać parametr <  Detekcja drgań>,
- Wybrać jedną z opcji:
 - Tak – funkcja aktywna
 - Nie – funkcja nieaktywna

33.9. Kontrola poziomu

Waga jest wyposażona w mechanizm Automatycznej Kontroli Poziomu. W wagach nielegalizowanych można zdefiniować sposób jego działania.

W wagach legalizowanych ustawienia są niewidoczne i działają zgodnie z nastawami fabrycznymi, czyli: <Aktywny z blokadą>; ważenie możliwe jest tylko wtedy, gdy waga jest wypoziomowana.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu  Inne>.
- Wybrać parametr <  Kontrola poziomu>, po czym zostanie otwarte okno edycyjne.
- Wybrać jedną z opcji:
 - Brak – wskaźnik poziomu nie jest wyświetlany, waga nie kontroluje poziomu,
 - Aktywny – wskaźnik poziomu jest wyświetlany, waga pokazuje zmianę poziomu poprzez zmianę kolorystyki (zielony → poziom OK, czerwony → utrata poziomu),
 - Aktywny z blokadą – wskaźnik poziomu jest wyświetlany, waga pokazuje zmianę poziomu poprzez zmianę kolorystyki (zielony → poziom OK, czerwony → utrata poziomu). Gdy wskaźnik jest czerwony, wyświetlacz pokazuje komunikat – no Level – , ważenie nie jest możliwe.

Uwaga:

Sposób poziomowania opisany jest w pkt. 15.3 instrukcji.

33.10. Separator dziesiętny

Jest parametrem umożliwiającym wybór separatora dziesiętnego na wydruku masy.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu  Inne>.

- Wybrać parametr <Separator dziesiętny>, po czym zostanie otwarte okno edycyjne.
- Wybrać jedną z opcji:
 - o Kropka
 - o Przecinek

Wybór wartości spowoduje powrót do okna podmenu.

33.11.Czułość czujników

Jest parametrem o skali 0 – 9, który decyduje o tym, z jakiej odległości czujniki będą reagować.

Standardowo wartość ta zawiera się w zakresie 5–7.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu < Inne>.
- Wybrać parametr <Czułość czujników>, po czym zostanie otwarte okno edycyjne.
- Wybrać jedną z wartości. Wybór wartości spowoduje powrót do okna menu.

33.12.Opóźnienie czujników zbliżeniowych

Jest parametrem, w którym ustawia się opóźnienie działania czujników zbliżeniowych w [ms].

Standardowo wartość ta jest ustawiana na <0>.

Jeżeli użytkownik będzie korzystał z opcji rozpoznawania gestów wykonywanych nad czujnikami, niezbędne jest ustawienie wartości tego parametru na wartość <500ms>.

Procedura:

- Należy wejść do podmenu < Inne>.
- Wybrać parametr <Opóźnienie czujników zbliżeniowych>, po czym zostanie otwarte okno edycyjne z klawiaturą numeryczną.
- Należy wprowadzić wartość <500>.
- Następnie zatwierdzić ustawienie, co spowoduje powrót do okna menu.

33.13.Autotest



Funkcja <AUTOTEST> powstała, aby wspomóc użytkownika zarówno w ocenie pracy, jak i w diagnozowaniu przyczyn powstawania błędów ważenia, przekraczających dopuszczalne wartości dla danego typu wagi.

AUTOTEST w prosty sposób umożliwia dokonywanie regularnej optymalizacji ustawień wagi przez użytkownika w celu uzyskania najlepszych parametrów powtarzalności i czasu ważenia w danym środowisku pracy. Funkcja daje również możliwość sprawdzenia w/w parametrów w dowolnej chwili, a także możliwość archiwizacji przeprowadzonych testów.

Funkcja podzielona jest na dwa moduły:

AUTOTEST FILTR; AUTOTEST GLP.

Przed każdym z testów waga sprawdza stan wypoziomowania, temperaturę i wilgotność.



AUTOTEST FILTR

Jest to procedura 10-krotnego nakładania i zdejmowania odważnika wewnętrznego dla wszystkich możliwych nastaw filtra i zatwierdzenia wyniku, kiedy sprawdzane są 2 parametry: Powtarzalność i Czas stabilizacji wyniku ważenia.

Cały test trwa około 1 godzinę. Po przeprowadzonym teście dla wszystkich możliwości nastaw na wyświetlaczu pojawia się informacja z otrzymanymi wynikami. Użytkownik otrzymuje informację, dla jakich ustawień w danym środowisku parametry wagi są optymalne.

Jest to bardzo przydatna funkcja, pozwalająca uzyskać najwyższą możliwą dokładność ważenia lub najkrótszy czas ważenia przy akceptowalnej przez klienta wartości powtarzalności.

Wyniki są zapamiętywane przez wagę do chwili jej wyłączenia.

Funkcja umożliwia wydruk na dostępnych w systemie drukarkach oraz szybki wybór najbardziej optymalnych ustawień bezpośrednio z poziomu opcji.

Po zakończeniu autotestu wyświetlane jest podsumowanie wraz z wynikami.

Program automatycznie zaznacza ustawienia filtrów poprzez wyświetlenie odpowiedniej ikony przy wynikach:



- ustawienia, dla których uzyskano najszybszy pomiar (najkrótszy czas pomiaru).



- ustawienia, dla których uzyskano najdokładniejszy pomiar (najmniejsze odchylenie dla 10 pomiarów).



- ustawienia, dla których uzyskano optymalny pomiar (najmniejszy iloczyn czasu i odchylenia).



- aktualne ustawienia filtrów.

Wyniki pomiarów:

*Typ filtra.

*Wartość parametru <Zatwierdzenie wyniku>.

*Wartość powtarzalności wskazań wyrażona jako odchylenie standardowe.

*Średni czas stabilizacji wyniku.

Przykładowy wygląd okna z wynikami umieszczono poniżej:

Autotest Filtr		
1	Bardzo szybki Szybko	0.00046 g 0.932 s
2	Bardzo szybki Szybko i dokładnie	0.00023 g 3.231 s
3	Bardzo szybki Dokładnie	0.00039 g 6.303 s
4	Szybki Szybko	0.00019 g 0.806 s
5	Szybki Szybko i dokładnie	0.00028 g 2.149 s
6	Szybki Dokładnie	0.00018 g 6.573 s

Autotest Filtr		
8	Średni Szybko i dokładnie	0.00013 g 2.347 s
9	Średni Dokładnie	0.00023 g 6.042 s
10	Wolny Szybko	0.00012 g 2.088 s
11	Wolny Szybko i dokładnie	0.00024 g 3.687 s
12	Wolny Dokładnie	0.00006 g 4.450 s
13	Bardzo wolny Szybko	0.00014 g 3.099 s

Użytkownik może szybko zmienić ustawienia filtrów i zatwierdzenia wyniku, wskazując grupę wyników dla wybranych ustawień, które mają być zapisane i wybierając opcje <Aktywuj> w wyświetlonym oknie.

Autotest Filtr		
1	Bardzo szybki Szybko	0.00046 g 0.932 s
2	Bardzo szybki Szybko i dokładnie	0.00023 g 3.231 s
3	Bardzo szybki Dokładnie	0.00039 g 6.303 s
4	Szybki Szybko	0.00019 g 0.806 s
5	Szybki Szybko i dokładnie	0.00028 g 2.149 s
6	Szybki Dokładnie	0.00018 g 6.573 s

Autotest Filtr		
1	Filtr	Szybki
2	Zatwierdzenie wyniku	Szybko
3	Powtarzalność	0.00019 g
4	Czas stabilizacji	0.806 s
5	Aktywuj	

Przykład raportu:

----- Autotest Filtr: Raport -----

Typ wagi xx 4Y
 ID wagi 442566
 Użytkownik Hubert
 Wersja aplikacji NL1.6.5 S
 Data 2015.05.07
 Czas 09:34:48

Działka wagi 0.0001/0.0001 g
 Masa odważnika wewnętrznego 148.9390 g
 Temperatura: Start 25.26 °C
 Temperatura: Stop 25.66 °C


Filtr Bardzo szybki
 Zatwierdzenie wyniku Szybko
 Powtarzalność 0.0042 g
 Czas stabilizacji 4.505 s

Filtr Bardzo wolny
 Zatwierdzenie wyniku Dokładnie
 Powtarzalność 0.0207 g
 Czas stabilizacji 5.015 s

Podpis

Procedura:

Po uruchomieniu funkcji program automatycznie rozpoczyna procedurę, a na ekranie pojawia się okno, które informuje użytkownika o postępie procesu. Po zakończeniu autotestu program wyświetli podsumowanie, z zaznaczeniem aktualnych ustawień filtrów. Użytkownik ma możliwość wydrukowania go.

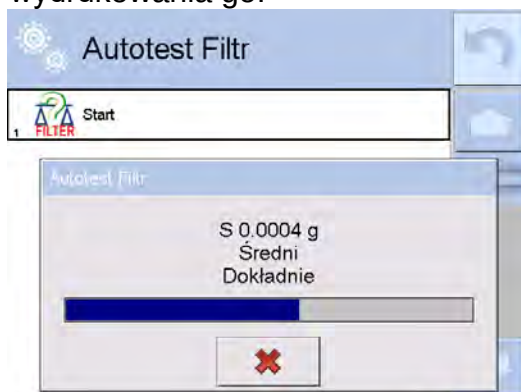

Użytkownik w każdym momencie może przerwać wykonywanie procesu przez naciśnięcie przycisku <X> w oknie procesu.



AUTOTEST GLP

Jest to test powtarzalności nakładania odważnika wewnętrznego i wyznaczenia błędu wskazania wagi odniesionego do jej maksymalnego obciążenia.

Procedura polega na:

- 2-krotnym postawieniu odważnika wewnętrznego, a następnie 10-krotnym postawieniu tego odważnika,
- wykalibrowaniu wagi,
- obliczeniu i zapamiętaniu odchylenia standardowego,
- w wagach z automatycznie otwieranymi drzwiczkami przeprowadzony zostanie również test drzwiczek.

Funkcja umożliwia również wyświetlenie i wydrukowanie raportu na dostępnych w systemie drukarkach oraz archiwizację raportu, który zawiera podstawowe dane wagi, informacje o warunkach środowiskowych i wyniki testu.

Wyniki testu:

- *Odchyłka dla maksymalnego obciążenia.
- *Wartość powtarzalności wskazań wyrażona jako odchylenie standardowe.
- *Ocena działania drzwiczek (pozytywna/negatywna) – jeśli waga jest wyposażona w mechanizm otwierania drzwiczek.

Przykład raportu:

```
----- Autotest GLP: Raport -----
Typ wagi          xx 4Y
ID wagi           400010
Użytkownik        Admin
Wersja aplikacji  L0.0.21 S
Data              2012.01.16
Czas              09:17:16
-----
Liczba pomiarów   10
Działka wagi      0.001/0.01 g
Masa odważnika wewnętrznego 1402.094 g
Filtr             Średni
Zatwierdzenie wyniku Szybko i dokładnie
-----
Odchyłka dla Max. -0.118 g
```

Procedura:

Po naciśnięciu pola z nazwą program wyświetla okno dialogowe.

Z tego poziomu użytkownik ma następujące możliwości:

- Start kolejnego AUTOTESTU GLP.
- Podgląd wyników wykonanych autotestów, z możliwością eksportu wszystkich zapisanych wyników jako pliku *.csv.
- Wykasowanie wszystkich zapisanych wyników.

Użytkownik w każdym momencie może przerwać wykonywanie procedury przez naciśnięcie przycisku <X> w oknie procesu.

Wyniki wykonanych autotestów są wyświetlane w formie tabeli (w każdym wierszu znajduje się data i czas wykonania autotestu oraz wyniki).

Aby wyświetlić dane autotestu, należy nacisnąć konkretny wiersz tabeli z wynikami.

Aby wydrukować wyniki pojedynczego autotestu, należy wejść w wyniki, gdzie podane są wszystkie dane dotyczące autotestu i wygenerować wydruk zawartości przez naciśnięcie przycisku <Wydruk> w górnym pasku wyświetlacza.

Wyniki można eksportować przez naciśnięcie pola eksport, z poziomu okna ze wszystkimi zapisanymi autotestami. Dane zostaną wysłane do pamięci zewnętrznej (pendrive) jako plik *.csv.

33.14. Logo startowe

(Opcja dostępna tylko dla uprawnionego operatora)

Parametr pozwalający na zmianę obrazu, który pojawia się w oknie wyświetlacza podczas uruchamiania systemu urządzenia.

33.15. Eksport zdarzeń systemu

(Opcja dostępna tylko dla uprawnionego operatora)

Opcja pozwalająca na wygenerowanie specjalnego pliku, który jest zapisywany automatycznie po uruchomieniu opcji do zewnętrznej pamięci pendrive, umieszczonej w porcie USB. Plik ten służy do zdiagnozowania ewentualnych problemów w pracy urządzenia przez serwis firmy RADWAG.

Procedura:

- Należy umieścić pamięć typu pendrive w porcie USB.
- Następnie wejść do podmenu < Inne>.
- Wybrać parametr <Eksport zdarzeń systemu>.
- Program wygeneruje specjalny plik i zapisze go automatycznie na pendrive.
- Tak wygenerowany plik należy przesłać do firmy RADWAG.

34. ZAPLANOWANE ZADANIA

To menu zawiera ustawienia umożliwiające zaplanowanie cyklicznie powtarzających się zadań takich jak kalibracja wagi lub wyświetlający się specjalny komunikat.

34.1. Kalibracja wagi

Edycja rekordu	
1	Nazwa
2	Kod
3	Zaplanowane zadanie Kalibracja automatyczna
4	Aktywne Tak
5	Pierwsze wystąpienie 2020.12.16 08:06:55
6	Interwał 24 h

<🕒 Zaplanowane kalibracje> jest to parametr umożliwiający użytkownikowi zadeklarowanie dokładnego czasu i interwału wywoływania kalibracji wagi. Opcja jest niezależna od kalibracji automatycznej i kryteriów (czas, temperatura) jej wywoływania. Użytkownik może zaplanować kalibrację wewnętrzną, jak również zewnętrzną. Aby mogły być zaplanowane kalibracje zewnętrzne, należy także wprowadzić do pamięci wagi wzorce, przy użyciu których mają być wykonywane te kalibracje.

Ustawienie:

Przed ustawieniem planu kalibracji należy wprowadzić dla kalibracji zewnętrznych wzorce wraz z ich danymi.

W tym celu należy wejść w menu użytkownika, w grupę parametrów <Kalibracja> i

znaleźć parametr <🏗️ Wzorce kalibracyjne> oraz wprowadzić wzorzec, wpisując jego dane:

Edycja rekordu	
1	Nazwa
2	Kod
3	Klasa Brak
4	Numer fabryczny
5	Masa 0 g
6	Numer kompletu

Wzorce kalibracyjne	
1	WZORZEC 01

Edycja rekordu	
1	Nazwa WZORZEC 01
2	Kod
3	Klasa E2
4	Numer fabryczny 123/RADWAG-2015
5	Masa 100 g
6	Numer kompletu 123456

	Należy wejść do menu użytkownika, do grupy parametrów <Kalibracja> i znaleźć parametr <Zaplanowane kalibracje>.
	Wejść w parametr <Zaplanowane kalibracje>, zostanie otwarte okno, w którym uprawniony użytkownik (Administrator) może dodać pozycje z zaplanowanymi kalibracjami.
	Aby tego dokonać, należy kliknąć w przycisk , zostanie otwarte okno z danymi dotyczącymi planowanej kalibracji wagi.
	Wybrać zaplanowane zadanie: kalibracja automatyczna (wewnętrzna) czy kalibracja zewnętrzna.
	Jeżeli została wybrana kalibracja automatyczna, należy wprowadzić dane dotyczące kalibracji i harmonogramu jej działania.

	Jeżeli została wybrana kalibracja zewnętrzna, należy wprowadzić dane dotyczące kalibracji, wzorca, przy użyciu którego ma być wykonywana i harmonogramu jej działania.
	Po wprowadzeniu danych należy wrócić do poprzedniego okna. Zostanie dodana pozycja z zaplanowaną kalibracją wagi.





Po wprowadzeniu wszystkich danych należy wyjść z menu.



Od tej chwili kalibracje będą wykonywane automatycznie: w zaplanowanym czasie i z interwałami, jakie zostały wprowadzone.

34.1. Komunikat

Jest to parametr umożliwiający użytkownikowi zadeklarowanie dokładnego czasu i interwału wyświetlania specjalnego komunikatu informującego użytkownika o konieczności podjęcia w danym momencie jakiegoś działania.

	Należy wejść do menu użytkownika i wejść w pomenu <Zaplanowane zadania>. Aby dodać zadanie należy kliknąć w przycisk <> w górnym pasku informacyjnym.
	Zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać pole <Zaplanowane zadania>. Zostanie wyświetlone okno wyboru opcji.

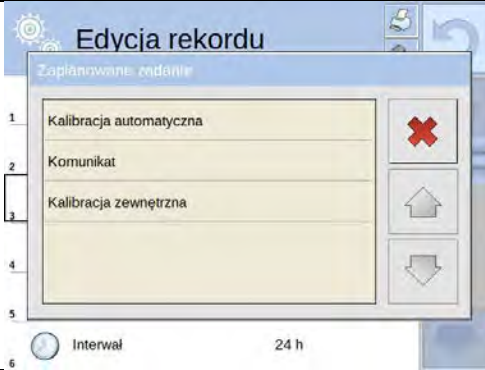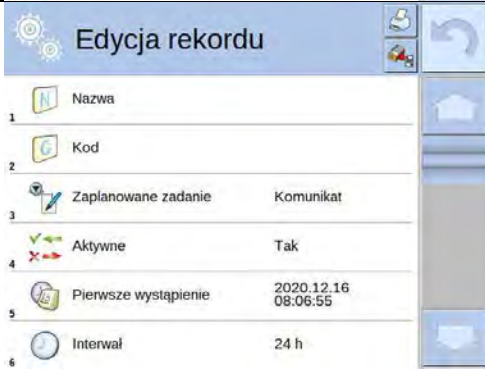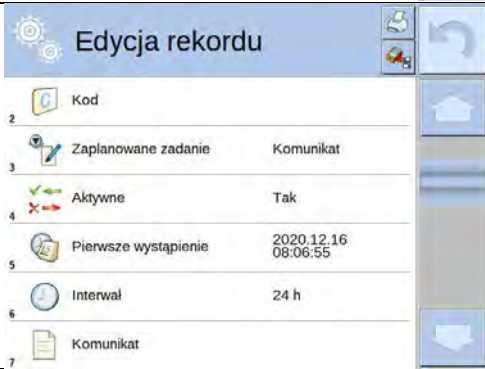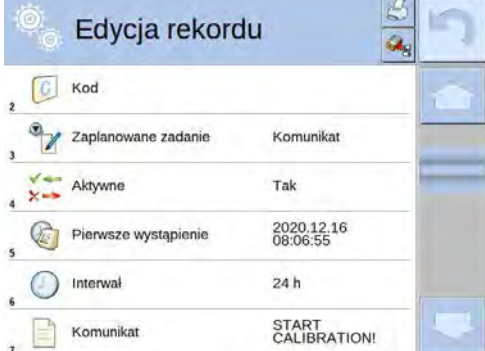	Należy wybrać opcje <Komunikat>.
	Program wróci do wyświetlania okna ustawień dla komunikatu.
	Po ustawieniu opcji częstotliwości wyświetlania komunikatu (pierwsze wystąpienie, interwał), należy wpisać treść wyświetlanego komunikatu po wybraniu parametru <Komunikat>.
	Po wpisaniu treści, należy zatwierdzić wpis klikając przycisk <✓>.
	Po zatwierdzeniu program wróci do wyświetlania poprzedniego okna.

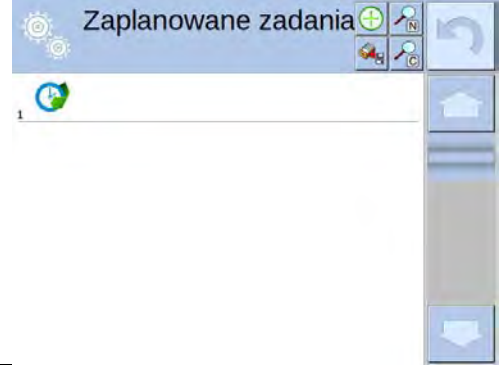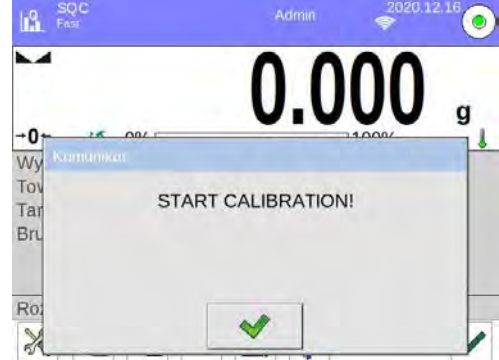	W oknie pomenu pojawi się pole z zaplanowanym zadaniem. Należy wyjść z menu do okna głównego programu.
	Po spełnieniu kryteriów wyświetlenia komunikatu (czas), automatycznie pojawi się okno z komunikatem. Należy nacisnąć przycisk , co spowoduje wygaszenie okna i wykonać zadanie jakie było zaplanowane.

35. AKTUALIZACJA

Zawiera następujące moduły, za pomocą których można aktualizować:

- o Pomoc - pliki pomocy dostępne z poziomu użytkownika.
- o Płyta główna – program pomocniczy(tylko administrator).

Aktualizacja odbywa się automatycznie, poprzez pobranie informacji z zewnętrznej pamięci USB.

Procedura:

- Przygotować pamięć zewnętrzną z plikiem aktualizacyjnym, plik powinien mieć rozszerzenie (pomoc - *.hlp, płyta główna - *.lmbu).
- Włożyć pamięć USB do gniazda USB.
- Wybrać z menu pozycję, którą chcemy wgrać.
- Wyświetlacz pokaże zawartość pamięci USB w postaci plików z rozszerzeniem odpowiadającym wgrywanej pozycji
- Wybrać plik aktualizacyjny i nacisnąć go.
- Jeżeli dana aktualizacja wagi jest dozwolona w danej konfiguracji terminala, proces aktualizacji przebiega automatycznie.

Oprogramowanie istotne metrologicznie może być zmienione jedynie po odblokowaniu parametrów fabrycznych, co w wagach legalizacyjnych wymaga usunięcia cechy zabezpieczającej i w konsekwencji powtórnej legalizacji wagi

36. INFORMACJE O SYSTEMIE

To menu zawiera informacje dotyczące wagi oraz zainstalowanych programów. Większość parametrów ma charakter informacyjny.

Informacje o systemie			
1	ID wagi	123456	
2	Typ wagi	AS/2Y	
3	Wersja aplikacji	L0.0.21 S	
4	Wersja programu wagowego	1.8.7	
5	Wersja programu MB	2.5P	
6	Zajętość pamięci	FLASH: 0% RAM: 58%	
7	Środowisko		
8	Ostatnia kalibracja	20012.02.15 12:25:50	
9	Drukowanie ustawień		

W parametrze <Środowisko> można sprawdzić, jakie są parametry środowiskowe: temperatura, wilgotność, ciśnienie (gdy waga wyposażona jest w odpowiednie czujniki). Po wybraniu parametru <Drukowanie ustawień> nastąpi wysłanie do drukarki ustawień wagi (wszystkie parametry).

37. FILMY

Opcja umożliwiająca wyświetlenie filmu instruktażowego, dotyczącego np. działania funkcji wagi. Program wagi odtwarza filmy z rozszerzeniem *.wmv. Z poziomu menu <Filmy> użytkownik o uprawnieniach <Administrator> może dodać/usunąć filmy z pamięci wagi. Pozostali użytkownicy mają możliwość tylko odtworzenia zapisanych filmów. Aby dodać film, należy:

	1. Zapisać film na nośniku danych typu pendrive. 2. Nośnik włożyć do jednego z gniazd USB w głowicy wagi. 3. Wejść do grupy parametrów <Film>. 4. Nacisnąć ikonę <+> w górnym pasku. 5. Wskazać plik z filmem na nośniku. 6. Film zostanie zapisany w pamięci wagi.
---	--


Aby uruchomić odtwarzanie filmu, należy:

1. Zapisać film w pamięci wagi (opis powyżej).
2. Wejść do grupy parametrów <Film>.
3. Kliknąć w pasek z nazwą filmu, który ma być odtworzony.



Zostanie automatycznie uruchomione odtwarzanie filmu.

Użytkownik ma do dyspozycji funkcje dostępne podczas odtwarzania:

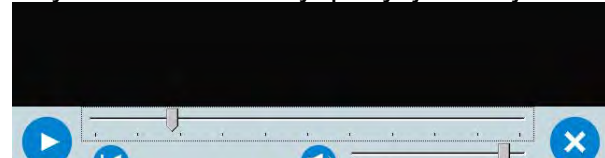	
	Uruchom odtwarzanie/włącz pauzę.
	Zamknij film.
	Siła głosu (regulowana w zakresie ustawionej głośności w grupie parametrów INNE).
	Włączenie/wyłączenie głosu.
	Powrót do początku filmu.

38. PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY

Informacje podstawowe

- A. Znakowy protokół komunikacyjny waga – terminal przeznaczony jest do komunikacji między wagą RADWAG a urządzeniem zewnętrznym przy pomocy łącza szeregowego RS-232C.
- B. Protokół składa się z komend przesyłanych z urządzenia zewnętrznego do wagi i odpowiedzi z wagi do urządzenia.
- C. Odpowiedzi są wysyłane z wagi każdorazowo po odebraniu komendy, jako reakcja na daną komendę.
- D. Przy pomocy komend składających się na protokół komunikacyjny można uzyskiwać informacje o stanie wagi, jak i wpływać na jej działanie, możliwe jest np.: otrzymywanie z wagi wyników ważenia, zerowanie itp.

38.1. Zestaw rozkazów

Rozkaz	Opis komendy
Z	Zeruj wagę
T	Taruj wagę
OT	Podaj wartość tary
UT	Ustaw tarę
S	Podaj wynik stabilny w jednostce podstawowej
SI	Podaj wynik natychmiast w jednostce podstawowej
SIA	Podaj wyniki ze wszystkich platform natychmiast w jednostkach podstawowych
SU	Podaj wynik stabilny w jednostce aktualnej
SUI	Podaj wynik natychmiast w jednostce aktualnej
C1	Włącz transmisję ciągłą w jednostce podstawowej
C0	Wyłącz transmisję ciągłą w jednostce podstawowej
CU1	Włącz transmisję ciągłą w jednostce aktualnej
CU0	Wyłącz transmisję ciągłą w jednostce aktualnej
DH	Ustaw dolny próg dowożenia
UH	Ustaw górny próg dowożenia
ODH	Podaj wartość dolnego progu dowożenia
OUH	Podaj wartość górnego progu dowożenia
SM	Ustaw wartość masy pojedynczej sztuki
TV	Ustaw wartość masy docelowej
RM	Ustaw wartość masy odniesienia
NB	Podaj numer fabryczny wagi
PROFILE	Wybór profilu w wadze
PRG	Podaj wybrany profil
LOGIN	Logowanie użytkownika
LOGOUT	Wylogowanie użytkownika

SS	Zatwierdzenie wyniku
IC	Wykonanie kalibracji wewnętrznej
IC1	Zablokuj automatyczną kalibrację wewnętrzną wagi
IC0	Odblokuj automatyczną kalibrację wewnętrzną wagi
K1	Zablokuj klawiaturę wagi
K0	Odblokuj klawiaturę wagi
BP	Uruchom sygnał dźwiękowy
OMI	Podaj dostępne mody pracy
OMS	Ustaw mod pracy
OMG	Podaj aktualny mod pracy
PC	Wyślij wszystkie zaimplementowane komendy
BN	Podaj typ wagi
FS	Podaj max udźwig
RV	Podaj wersję programu
A	Ustaw autozero
EV	Ustaw środowisko
EVG	Podaj ustawione środowisko
FIS	Ustaw filtr
FIG	Podaj ustawiony filtr
ARS	Ustaw zatwierdzenie wyniku
ARG	Podaj ustawione zatwierdzenie wyniku
LDS	Ustaw ostatnią cyfrę
UI	Podaj dostępne jednostki masy
US	Ustaw jednostkę masy
UG	Podaj aktualny jednostkę masy
OC	Otwórz pokrywę automatycznej komory do kalibracji pipet
CC	Zamknij pokrywę automatycznej komory do kalibracji pipet
OD	Otwórz drzwiczki komory ważenia
CD	Zamknij drzwiczki komory ważenia
LS	Podaj status wypoziomowania wagi
NT	Współpraca z głowicami PUE 7.1, PUE 10

Uwaga: Każdy rozkaz musi zostać zakończony znakami CR LF.

38.1. Format odpowiedzi na pytanie z komputera

Indykator po przyjęciu rozkazu odpowiada:

XX_A CR LF	komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
XX_D CR LF	zakończono komendę (występuje tylko po XX_A)
XX_I CR LF	komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
XX_ ^ CR LF	komenda zrozumiana, ale wystąpiło przekroczenie zakresu max
XX_ v CR LF	komenda zrozumiana, ale wystąpiło przekroczenie zakresu min
XX_ OK CR LF	komendę wykonano
ES_ CR LF	komenda niezrozumiana
XX_ E CR LF	przekroczony limit czasu przy oczekiwaniu na wynik stabilny (limit czasowy jest parametrem charakterystycznym wagi)

XX - w każdym przypadku jest nazwą wysłanego rozkazu
_ - reprezentuje znak odstępu (spacji)

OPIS KOMEND

Zerowanie wagi

Składnia: **Z CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

Z_A CR LF	- komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
Z_D CR LF	- zakończono komendę
Z_A CR LF	- komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
Z_ ^ CR LF	- komenda zrozumiana, ale wystąpiło przekroczenie zakresu zerowania
Z_A CR LF	- komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
Z_E CR LF	- przekroczony limit czasu przy oczekiwaniu na wynik stabilny
Z_I CR LF	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

Tarowanie wagi

Składnia: **T CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

T_A CR LF	- komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
T_D CR LF	- zakończono komendę
T_A CR LF	- komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
T_v CR LF	- komenda zrozumiana, ale wystąpiło przekroczenie zakresu tarowania
T_A CR LF	- komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
T_E CR LF	- przekroczony limit czasu przy oczekiwaniu na wynik stabilny

T_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

Podaj wartość tary

Składnia: OT CR LF

Odpowiedź: OT_TARA CR LF - komenda wykonana

Format odpowiedzi:

1	2	3	4-12	13	14	15	16	17	18	19
O	T	spacja	tara	spacja	jednostka			spacja	CR	LF

Tara - 9 znaków z wyrównaniem do prawej

Jednostka - 3 znaki z wyrównaniem do lewej

Uwaga:

Wartość tary jest podawana zawsze w jednostce kalibracyjnej.

Ustaw tarę

Składnia: UT_TARA CR LF, gdzie TARA - wartość tary

Możliwe odpowiedzi:

UT_OK CR LF - komenda wykonana

UT_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

ES CR LF - komenda niezrozumiana (nieprawidłowy format tary)

Uwaga:

W formacie tary należy używać kropki jako znacznika miejsc po przecinku.

Podaj wynik stabilny w jednostce podstawowej

Składnia: S CR LF

Możliwe odpowiedzi:

S_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie

S_E CR LF - przekroczony limit czasu przy oczekiwaniu na wynik stabilny

S_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

RAMKA MASY - zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej

Format ramki masy, jaką odpowiada waga:

1	2-3	4	5	6	7-15	16	17	18	19	20	21
S	spacja	znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka			CR	LF

Przykład:

S CR LF - rozkaz z komputera

S_A CR LF - komenda zrozumiana i rozpoczęto jej wykonywanie

S _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 8 . 5 _ g _ _ CR LF - komenda wykonana, zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej

gdzie: _ - spacja

Podaj wynik natychmiast w jednostce podstawowej

Składnia: SI CR LF

Możliwe odpowiedzi:

SI_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

RAMKA MASY - zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej natychmiast

Format ramki masy, jaką odpowiada waga:

1	2	3	4	5	6	7-15	16	17	18	19	20	21
S	I	spacja	znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka			CR	LF

Przykład:

S I CR LF - rozkaz z komputera

S I _ ? _ _ _ _ _ 1 8 . 5 _ k g _ CR LF - komenda wykonana, zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej natychmiast

gdzie: _ - spacja

Podaj wynik stabilny w jednostce aktualnej

Składnia: **SU CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

SU_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie

SU_E CR LF - przekroczony limit czasu przy oczekiwaniu na wynik stabilny

SU_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

RAMKA MASY - zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej

Format ramki masy, jaką odpowiada waga:

1	2	3	4	5	6	7-15	16	17	18	19	20	21
S	U	spacja	znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka			CR	LF

Przykład:

S U CR LF - rozkaz z komputera

S U _ A CR LF - komenda zrozumiana i rozpoczęto jej wykonywanie

S U _ _ _ - _ _ 1 7 2 . 1 3 5 _ N _ _ CR LF - komenda wykonana, zwracana jest wartość masy w jednostce aktualnie używanej.

gdzie: _ - spacja

Podaj wynik natychmiast w jednostce aktualnej

Składnia: **SUI CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

SUI_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

RAMKA MASY - zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej natychmiast

Format ramki masy, jaką odpowiada waga:

1	2	3	4	5	6	7-15	16	17	18	19	20	21
S	U	I	znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka			CR	LF

Przykład:

S U I CR LF - rozkaz z komputera

S U I ? _ - _ _ _ 5 8 . 2 3 7 _ k g _ CR LF - komenda wykonana, zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej

gdzie: _ - spacja

Włącz transmisję ciągłą w jednostce podstawowej

Składnia: **C1 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

C1_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

C1_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie

RAMKA MASY - zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej

Format ramki masy, jaką odpowiada waga:

1	2	3	4	5	6	7-15	16	17	18	19	20	21
S	I	spacja	znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka		CR	LF	

Wyłącz transmisję ciągłą w jednostce podstawowej

Składnia: **C0 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

C0_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

C0_A CR LF - komenda zrozumiana i wykonana

Włącz transmisję ciągłą w jednostce aktualnej

Składnia: **CU1 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

CU1_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

CU1_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie

RAMKA MASY - zwracana jest wartość masy w jednostce aktualnej

Format ramki masy, jaką odpowiada waga:

1	2	3	4	5	6	7-15	16	17	18	19	20	21
S	U	I	znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka		CR	LF	

Wyłącz transmisję ciągłą w jednostce aktualnej

Składnia: **CU0 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

CU0_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

CU0_A CR LF - komenda zrozumiana i wykonana

Ustaw dolny próg dowożenia

Składnia: **DH_XXXXX CR LF**, gdzie: _ - spacja, XXXXX - format masy

Możliwe odpowiedzi:

DH_OK CR LF - komenda wykonana

ES CR LF - komenda niezrozumiana (nieprawidłowy format masy)

Ustaw górny próg dowożenia

Składnia: **UH_XXXXX CR LF**, gdzie: _ - spacja, XXXXX - format masy

Możliwe odpowiedzi:

UH_OK CR LF - komenda wykonana

ES CR LF - komenda niezrozumiana (nieprawidłowy format masy)

Podaj wartość dolnego progu dowożenia

Składnia: **ODH CR LF**

Odpowiedź: **DH_MASA CR LF** - komenda wykonana

Format odpowiedzi:

1	2	3	4-12	13	14	15	16	17	18	19
D	H	spacja	masa	spacja	jednostka			spacja	CR	LF

Masa - 9 znaków z wyrównaniem do prawej

Jednostka - 3 znaki z wyrównaniem do lewej

Podaj wartość górnego progu dowożenia

Składnia: **OUH CR LF**

Odpowiedź: **UH_MASA CR LF** - komenda wykonana

Format ramki masy, jaką odpowiada waga:

1	2	3	4-12	13	14	15	16	17	18	19
U	H	spacja	masa	spacja	jednostka			spacja	CR	LF

Masa - 9 znaków z wyrównaniem do prawej

Jednostka - 3 znaki z wyrównaniem do lewej

Ustaw masę pojedynczej sztuki (tylko w LICZENIU SZTUK)

Składnia: **SM_XXXXX CR LF**, gdzie: _ - spacja, **XXXXX** - format masy

Możliwe odpowiedzi:

SM_OK CR LF - komenda wykonana

SM_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna (np. inny mod pracy niż LICZENIE SZTUK)

ES CR LF - komenda niezrozumiana (nieprawidłowy format masy)

Ustaw masę docelową (np. w DOZOWANIU)

Składnia: **TV_XXXXX CR LF**, gdzie: _ - spacja, **XXXXX** - format masy

Możliwe odpowiedzi:

TV_OK CR LF - komenda wykonana

TV_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna (np. mod pracy WAŻENIE)

ES CR LF - komenda niezrozumiana (nieprawidłowy format masy)

Ustaw masę odniesienia (np. w ODCHYŁKACH)

Składnia: **RM_XXXXX CR LF**, gdzie: _ - spacja, **XXXXX** - format masy

Możliwe odpowiedzi:

RM_OK CR LF - komenda wykonana

RM_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna (np. inny mod pracy niż ODCHYŁKI)

ES CR LF - komenda niezrozumiana (nieprawidłowy format masy)

Zatwierdzenie wyniku

Składnia: **SS CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

SS_OK CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie

Komenda imituje naciśnięcie przycisku PRINT na elewacji wagi, według ustawień w wadze, które są wybrane dla zatwierdzenia wyniku.

Kalibracja wewnętrzna

Składnia: **IC CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

IC_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
IC_D CR LF - zakończono kalibrację
IC_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
IC_E CR LF - przekroczony zakres, limit czasu przy oczekiwaniu na wynik stabilny
IC_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

Zablokuj automatyczną kalibrację wewnętrzną wagi

Składnia: **IC1 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

IC1_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
IC1_E CR LF - operacja nie jest możliwa, np. w przypadku wagi legalizowanej
IC1_OK CR LF - komenda wykonana

Dla wag legalizowanych operacja nie jest możliwa.

Dla wag nielegalizowanych komenda blokuje kalibrację wewnętrzną, do momentu jej odblokowania rozkazem IC0 lub wyłączenia wagi. Komenda nie zmienia ustawień wagi, dotyczących czynników decydujących o rozpoczęciu procesu kalibracji.

Odblokuj automatyczną kalibrację wewnętrzną wagi

Składnia: **IC0 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

IC0_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
IC0_OK CR LF - komenda wykonana

Dla wag legalizowanych operacja nie jest możliwa.

Podaj nr fabryczny wagi

Składnia: **NB CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

NB_A_ "x" CR LF - komenda zrozumiana, zwraca numer fabryczny
NB_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
x - numer fabryczny urządzenia (między znakami cudzysłowu)

Przykład:

polecenie: NB CR LF - podaj numer fabryczny

odpowiedź: NB_A_ "1234567" - numer fabryczny urządzenia - "1234567"

Zablokuj klawiaturę wagi

Składnia: **K1 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

K1_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
K1_OK CR LF - komenda wykonana

Komenda blokuje klawiaturę wagi (czujniki ruchu, touch panel) do momentu jej odblokowania rozkazem K0 lub wyłączenia wagi.

Odblokuj klawiaturę wagi

Składnia: **K0 CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

K0_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
K0_OK CR LF - komenda wykonana

OMI – podaj dostępne mody pracy

Opis komendy:

Komenda zwraca dostępne mody pracy dla danego urządzenia.

Składnia: **OMI** <CR><LF>

Możliwe odpowiedzi:

OMI <CR><LF>

n_ "Nazwa modu" <CR><LF>

:

- komenda wykonana, zwraca dostępne mody pracy

n_ "Nazwa modu" <CR><LF>

OK <CR><LF>

OMI_I <CR><LF>

- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

Nazwa modu – parametr, nazwa modu pracy, zwracana pomiędzy znakami cudzysłowu.

Nazwa przedstawiona tak, jak na wyświetlaczu danego typu wagi, w wybranym aktualnie na wadze języku pracy.

n - parametr, wartość dziesiętna określająca numer modu pracy.

n →

- 1 – Ważenie
- 2 – Liczenie sztuk
- 3 – Odchyłki
- 4 – Dozowanie
- 5 – Receptury
- 6 – Ważenie zwierząt
- 8 – Gęstość ciał stałych
- 9 – Gęstość cieczy
- 10 – Zatrząsk MAX
- 12 – Doważanie
- 13 – Statystyka

Uwaga:

Numeracja modów pracy jest ściśle przypisana do ich nazwy i stała we wszystkich rodzajach wag.

Niektóre rodzaje wag w odpowiedzi na **OMI** mogą zwracać samą numerację, bez nazwy

Przykład 1:

polecenie:	OMI <CR><LF>	- podaj dostępne mody pracy
odpowiedź:	OMI <CR><LF>	
	2_ " Liczenie sztuk" <CR><LF>	- zwracane są dostępne mody pracy
	4_ " Dozowanie" <CR><LF>	numer modu + nazwa
	12_ " Doważanie" <CR><LF>	
	OK <CR><LF>	- koniec wykonywania komendy

Przykład 2:

polecenie:	OMI <CR><LF>	- podaj dostępne mody pracy
odpowiedź:	OMI <CR><LF>	
	2 <CR><LF>	- zwracane są dostępne mody pracy numer modu
	4 <CR><LF>	
	12 <CR><LF>	
	OK <CR><LF>	- koniec wykonywania komendy

OMS – ustaw mod pracy

Opis komendy:

Komenda ustawia aktywny mod pracy dla danego urządzenia.

Składnia: **OMS_n** <CR><LF>

Możliwe odpowiedzi:

OMS_OK <CR><LF>

- komenda wykonana

OMS_E <CR><LF>

- wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak

parametru lub nieprawidłowy format
OMS_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n - parametr, wartość dziesiętna określająca mod pracy. Dokładny opis przy komendzie OMI.

Przykład:

polecenie: OMS_13<CR><LF> - ustaw mod statystyka
odpowiedź: OMS_OK<CR><LF> - wybrano mod statystyka

OMG – podaj aktualny mod pracy

Opis komendy:

Komenda zwraca wybrany mody pracy dla danego urządzenia.

Składnia: **OMG <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

OMG_n_OK <CR><LF> - komenda wykonana, zwraca numer aktualnego modu pracy

OMS_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n - parametr, wartość dziesiętna określająca mod pracy. Dokładny opis przy komendzie OMI.

Przykład:

polecenie: OMG<CR><LF> - odczytaj aktualny mod pracy
odpowiedź: OMG_13_OK<CR><LF> - urządzenie w modzie Statystyka

UI – podaj dostępne jednostki

Opis komendy:

Komenda zwraca dostępne jednostki dla danego urządzenia, w aktualnym modzie pracy.

Składnia: **UI <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

UI_"x₁,x₂, ... x_n"_OK<CR><LF> - komenda wykonana, zwraca dostępne jednostki

UI_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x - oznaczenie jednostek, oddzielone przecinkami.

x → g, mg, ct, lb, oz, ozt, dwt, tlh, tls, tlt, tlc, mom, gr, ti, N, baht, tola, u1, u2

Przykład:

polecenie: UI <CR><LF> - podaj dostępne jednostki
odpowiedź: UI_"g, mg, ct"_OK<CR><LF> - zwracane są dostępne jednostki

US – ustaw aktualną jednostkę

Opis komendy:

Komenda ustawia aktualną jednostkę dla danego urządzenia.

Składnia: **US_x <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

US_x_OK <CR><LF> - komenda wykonana, zwraca ustawioną jednostkę

US_E <CR><LF> - wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak parametru lub nieprawidłowy format

US_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x - parametr, oznaczenie jednostek: g, mg, ct, lb, oz, ozt, dwt, tlh, tls, tlt, tlc, mom, gr, ti, N, baht, tola, msg, u1, u2, next.

Uwaga:

W przypadku, gdy x=next komenda powoduje zmianę jednostki na następną z dostępnej listy (symulacja wciśnięcia przycisku „unit”  lub naciśnięcie pola jednostki w oknie kontrolki masy).

Przykład:

polecenie:	US_mg<CR><LF>	- ustaw jednostkę „mg”
odpowiedź:	US_mg_OK<CR><LF>	- ustawiono aktualną jednostkę „mg”

UG – podaj aktualną jednostkę

Opis komendy:

Komenda zwraca aktualną jednostkę.

Składnia: **UG <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

UG_x_OK<CR><LF> - komenda wykonana, zwraca ustawioną jednostkę

UG_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x - parametr, oznaczenie jednostki

Przykład:

polecenie:	UG<CR><LF>	- podaj aktualną jednostkę
odpowiedź:	UG_ct_OK<CR><LF>	- aktualnie wybrana jednostka „ct”

BP – uruchom sygnał dźwiękowy

Opis komendy:

Komenda uruchamia sygnał dźwiękowy BEEP na określony czas.

Składnia: **BP_CZAS <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

BP_OK <CR><LF> - komenda wykonana, uruchamia sygnał BEEP

BP_E” <CR><LF> - brak parametru lub nieprawidłowy format

BP_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

CZAS - parametr, wartość dziesiętna, określa czas w [ms] trwania sygnału dźwiękowego.

Zalecany przedział <50 ÷ 5000>.

W przypadku podania wartości większej od dopuszczalnej dla danego urządzenia, BEEP zostanie uaktywniony na maksymalny czas obsługiwany przez urządzenie.

Przykład:

polecenie:	BP_350<CR><LF>	- włącz BEEP na 350 ms
odpowiedź:	BP_OK<CR><LF>	- BEEP załączony

Uwaga:

BEEP wywołany komendą BP zostanie przerwany, jeżeli w czasie jego trwania nastąpi uaktywnienie sygnału z innego źródła: klawiatura, touch panel, czujniki ruchu.

PC - wyślij wszystkie zaimplementowane komendy

Składnia: **PC CR LF**

Polecenie:	PC CR LF	- wyślij wszystkie zaimplementowane komendy
Odpowiedź:	PC_A_”Z,T,S,SI...”	- komenda wykonana, indykator wysłał wszystkie zaimplementowane komendy.

BP - podaj typ wagi

Składnia: **BN <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

BN_A_ "x" <CR><LF> - komenda zrozumiana, zwraca typ wagi

BN_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x - Typoszereg wagi (między znakami cudzysłowu), poprzedzony ogólnym typem wagi.

Przykład:

polecenie: BN <CR><LF> - podaj typ wagi

odpowiedź: BN_A_ "AS" - typ wagi - "XA 4Y"

FS - podaj maksymalny udźwig

Składnia: **FS <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

FS_A_ "x" <CR><LF> - komenda zrozumiana, zwraca Max wagi

FS_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x - Maksymalny udźwig wagi bez działek wybiegu (między znakami cudzysłowu)

Przykład:

polecenie: FS <CR><LF> - podaj Max wagi

- maksymalny udźwig wagi - "220 g"

odpowiedź: FS_A_ "220.0000"

RV - podaj wersję programu

Składnia: **RV <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

RV_A_ "x" <CR><LF> - komenda zrozumiana, zwraca wersję programu

RV_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x - wersja programu (między znakami cudzysłowu)

Przykład:

polecenie: RV <CR><LF> - podaj numer programu

odpowiedź: RV_A_ "1.1.1" - wersja programu - "1.1.1"

A - ustaw AUTOZERO

Składnia: **A_n <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

A_OK <CR><LF> - komenda wykonana

A_E <CR><LF> - wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak parametru lub nieprawidłowy format

A_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n - parametr, wartość dziesiętna określająca ustawienie autozera.

n → 0 – autozero wyłączone

1 – autozero włączone

Uwaga:

Komenda zmienia ustawienia dla aktywnego modu pracy.

Przykład:

polecenie: A_1<CR><LF> - włącz działanie autozera

odpowiedź: A_OK<CR><LF> - autozero włączone

Komenda włącza działanie AUTOZERA do momentu wyłączenia rozkazem A 0.

EV - ustaw środowisko

Składnia: **EV_n <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

EV_OK <CR><LF> - komenda wykonana

EV_E <CR><LF> - wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak parametru lub nieprawidłowy format

EV_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n - parametr, wartość dziesiętna określająca ustawienie środowiska.

n → 0 – środowisko niestabilne

1 – środowisko stabilne

Uwaga:

Komenda zmienia ustawienia dla aktywnego modu pracy.

Przykład:

polecenie: EV_1<CR><LF> - ustaw środowisko na stabilne

odpowiedź: EV_OK<CR><LF> - ustawiono środowisko na stabilne

Komenda ustawia parametr <ŚRODOWISKO> na wartość <STABILNE> do momentu zmiany na wartość <NIESTABILNE> komendą EV 0.

EVG – podaj aktualnie ustawione środowisko

Opis komendy:

Komenda zwraca informację o aktualnie ustawionym środowisku.

Składnia: **EVG <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

EVG_x_OK<CR><LF> - komenda wykonana, zwraca ustawione środowisko

EVG_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x - parametr, oznaczenie aktualnie ustawionego środowiska

Przykład:

polecenie: EVG<CR><LF> - podaj aktualne środowisko

odpowiedź: EVG_0_OK<CR><LF> - aktualnie ustawione środowisko niestabilne

FIS – ustaw filtr

Składnia: **FIS_n <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

FIS_OK <CR><LF> - komenda wykonana

FIS_E <CR><LF> - wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak parametru lub nieprawidłowy format

FIS_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n - parametr, wartość dziesiętna określająca numer filtra.

n → 1 – bardzo szybki

2 – szybki

3 – średni

4 – wolny

5 – bardzo wolny

Uwaga:

Numeracja jest ściśle przypisana do nazwy filtra i stała we wszystkich rodzajach wag.

Jeżeli w danym typie wagi ustawienia filtra przypisane są do modu pracy, komenda zmienia ustawienia dla aktywnego modu pracy.

Przykład:

polecenie: FIS_3<CR><LF> - ustaw filtr średni
odpowiedź: FIS_OK<CR><LF> - ustawiono filtr średni

FIG – podaj aktualny filtr

Opis komendy:

Komenda zwraca informację o aktualnie ustawionym filtrze.

Składnia: **FIG <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

FIG_x_OK<CR><LF> - komenda wykonana, zwraca ustawiony filtr

FIG_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x - parametr, oznaczenie aktualnie wybranego filtra

Przykład:

polecenie: FIG<CR><LF> - podaj aktualny filtr

odpowiedź: FIG_2_OK<CR><LF> - aktualnie ustawiony filtr średni

ARS – ustaw zatwierdzenie wyniku

Składnia: **ARS_n <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

ARS_OK <CR><LF> - komenda wykonana

ARS_E <CR><LF> - wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak parametru lub nieprawidłowy format

ARS_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n - parametr, wartość dziesiętna określająca zatwierdzenie wyniku.

n → 1 – szybko

2 – szybko+dokładnie

3 – dokładnie

Uwaga:

Numeracja jest ściśle przypisana do nazwy zatwierdzenia wyniku i stała we wszystkich rodzajach wag.

Jeżeli w danym typie wagi ustawienia przypisane są do modu pracy, komenda zmienia ustawienia dla aktywnego modu pracy.

Przykład:

polecenie: ARS_2<CR><LF> - ustaw zatwierdzenie wyniku na szybko+dokładnie

odpowiedź: ARS_OK<CR><LF> - ustawiono szybko+dokładnie

ARG – podaj aktualne zatwierdzenie wyniku

Opis komendy:

Komenda zwraca informację o aktualnie ustawionym zatwierdzeniu wyniku.

Składnia: **ARG <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

ARG_x_OK<CR><LF> - komenda wykonana, zwraca ustawione zatwierdzenie wyniku

ARG_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x - parametr, oznaczenie aktualnie wybranego zatwierdzenia wyniku

Przykład:

polecenie:	ARG<CR><LF>	- podaj aktualne zatwierdzenie wyniku
odpowiedź:	ARG_2_OK<CR><LF>	- aktualnie ustawione zatwierdzenie wyniku szybko+dokładnie

LDS – ustaw ostatnią cyfrę

Składnia: **LDS_n <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

LDS_OK <CR><LF>	- komenda wykonana
LDS_E <CR><LF>	- wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak parametru lub nieprawidłowy format
LDS_I <CR><LF>	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n - parametr, wartość dziesiętna określająca ustawienie dla ostatniej cyfry.

n → 1 – zawsze
2 – nigdy
3 – gdy stabilny

Uwaga:

Numeracja jest ściśle przypisana do nazwy ustawienia ostatniej cyfry i stała we wszystkich rodzajach wag.

Jeżeli w danym typie wagi ustawienia przypisane są do modu pracy, komenda zmienia ustawienia dla aktywnego modu pracy.

Przykład:

polecenie:	LDS_1<CR><LF>	- ustaw ostatnią cyfrę na wartość zawsze
odpowiedź:	LDS_OK<CR><LF>	- ustawiono zawsze

LOGIN – Logowanie użytkownika

Składnia: **LOGIN_Nazwa,Hasło CR LF**

gdzie: _ - spacja (nazwa i hasło muszą być wpisane zgodnie z formatem, jak w wadze – *małe i wielkie litery*).

Możliwe odpowiedzi:

LOGIN OK CR LF	- komenda zrozumiana, nowy użytkownik zalogowany
LOGIN ERROR CR LF	- komenda zrozumiana, lecz błąd w nazwie lub hasle użytkownika, niemożliwe zalogowanie
ES CR LF	- komenda niezrozumiana (błąd w formacie)

LOGOUT – Wylogowanie użytkownika

Składnia: **LOGOUT CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

LOGOUT OK CR LF	- komenda zrozumiana, użytkownik wylogowany
ES CR LF	- komenda niezrozumiana (błąd w formacie)

Podaj nazwę profilu

Składnia: **PRG CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

PRG_A "x" CR LF	- komenda zrozumiana, zwraca nazwę profilu
PRG_I CR LF	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x – nazwa profilu (między znakami cudzysłowu)

Przykład:

polecenie:	PRG CR LF	- podaj nazwę profilu
odpowiedź:	PRG_A "Fast"	- nazwa profilu – "Fast"

PROFILE – wybór profilu

Składnia: **PROFILE_Nazwa CR LF**

gdzie: _ - spacja (nazwa musi być wpisana zgodnie z formatem, jak w wadze – *małe, wielkie litery, spacje np. Fast; Fast dosing, User, Precision*).

Możliwe odpowiedzi:

PROFILE OK CR LF	- komenda zrozumiana, nowy profil ustawiony
LOGIN ERROR CR LF	- komenda zrozumiana, lecz błąd w nazwie, niemożliwe ustawienie profilu
ES CR LF	- komenda niezrozumiana (błąd w formacie)

UI – podaj dostępne jednostki

Opis komendy:

Komenda zwraca dostępne jednostki dla danego urządzenia, w aktualnym modzie pracy.

Składnia: **UI <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

UI_ "x₁,x₂, ... x_n"_OK<CR><LF>	- komenda wykonana, zwraca dostępne jednostki
UI_I <CR><LF>	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x - oznaczenie jednostek, oddzielone przecinkami

x → g, mg, ct, lb, oz, ozt, dwt, tlh, tls, tlt, tlc, mom, gr, ti, N, baht, tola, u1, u2

Przykład:

polecenie:	UI <CR><LF>	- podaj dostępne jednostki
odpowiedź:	UI_ "g, mg, ct"_OK<CR><LF>	- zwracane są dostępne jednostki

US – ustaw aktualną jednostkę

Opis komendy:

Komenda ustawia aktualną jednostkę dla danego urządzenia.

Składnia: **US_x <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

US_x_OK <CR><LF>	- komenda wykonana, zwraca ustawioną jednostkę
US_E <CR><LF>	- wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak parametru lub nieprawidłowy format
US_I <CR><LF>	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x - parametr, oznaczenie jednostek: g, mg, ct, lb, oz, ozt, dwt, tlh, tls, tlt, tlc, mom, gr, ti, N, baht, tola, msg, u1, u2, next

Uwaga:

W przypadku, gdy x=next komenda powoduje zmianę jednostki na następną z dostępnej listy (symulacja wciśnięcia przycisku lub naciśnięcie pola jednostki w oknie kontrolki masy).

Przykład:

polecenie:	US_mg<CR><LF>	- ustaw jednostkę „mg”
odpowiedź:	US_mg_OK<CR><LF>	- ustawiono aktualną jednostkę „mg”

UG – podaj aktualną jednostkę

Opis komendy:

Komenda zwraca aktualną jednostkę.

Składnia: **UG <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

UG_x_OK<CR><LF>	- komenda wykonana, zwraca ustawioną jednostkę
UG_I <CR><LF>	- komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

x - parametr, oznaczenie jednostki

Przykład:

połączenie: UG<CR><LF> - podaj aktualną jednostkę
odpowiedź: UG_ct_OK<CR><LF> - aktualnie wybrana jednostka „ct”

OC – otwórz pokrywę automatycznej komory kalibracji pipet

Składnia: **OC <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

OC_OK <CR><LF> - komenda wykonana
OC_E <CR><LF> - wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak parametru lub nieprawidłowy format
OC_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

CC – zamknij pokrywę automatycznej komory kalibracji pipet

Składnia: **CC <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

CC_OK <CR><LF> - komenda wykonana
CC_E <CR><LF> - wystąpił błąd podczas wykonywania komendy, brak parametru lub nieprawidłowy format
CC_I <CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

OD – otwórz drzwiczki komory ważenia

Składnia: **OD_n <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

OD_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
OD_D CR LF - zakończono otwieranie drzwiczek
OD_E CR LF - przekroczony limit czasu podczas wykonywania komendy
OD_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna
n - parametr, wartość określająca które drzwiczki mają być otwarte – ważne dla mikrowag z drzwiczkami obrotowymi, dla wag serii XA wartość parametru nie ma znaczenia.
n → 1 – drzwiczki prawe
2 – drzwiczki lewe

Uwaga:

Jeżeli nie zostanie podana wartość parametru 1 lub 2, to w mikrowagach zostaną otwarte prawe drzwiczki.

Przykład:

OD_2<CR><LF> - otwórz drzwiczki lewe
odpowiedź: OD_A<CR><LF> - komenda zrozumiana, rozpoczęte otwieranie drzwiczek
OD_D<CR><LF> - drzwiczki zostały otwarte

CD – zamknij drzwiczki komory ważenia

Składnia: **CD <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

CD_A CR LF - komenda zrozumiana, rozpoczęto wykonywanie
CD_D CR LF - zakończono zamykanie drzwiczek
CD_E CR LF - przekroczony limit czasu podczas wykonywania komendy
CD_I CR LF - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

Przykład:

CD<CR><LF> - zamknij drzwiczki

odpowiedź: CD_A<CR><LF> - komenda zrozumiana, rozpoczęte zamykanie drzwiczek
 CD_D<CR><LF> - drzwiczki zostały zamknięte

LS – podaj status wypoziomowania wagi

Opis komendy:

Komenda zwraca informację o aktualnym statusie wypoziomowania wagi.

Składnia: **LS <CR><LF>**

Możliwe odpowiedzi:

LS_n<CR><LF> - komenda wykonana, zwraca status wypoziomowania

LS_I<CR><LF> - komenda zrozumiana, ale w danym momencie niedostępna

n - parametr, wartość dziesiętna określająca status wypoziomowania.

n → 0 – waga niewypoziomowana

1 – waga wypoziomowana

polecenie: **LS<CR><LF>** - podaj aktualne status wypoziomowania

odpowiedź: **LS_1_OK<CR><LF>** - waga jest wypoziomowana

Współpraca z głowicami PUE 7.1, PUE 10

Składnia: **NT CR LF**

Możliwe odpowiedzi:

ES CR LF - komenda niezrozumiana (nieprawidłowy format masy)

RAMKA MASY - zwracana jest wartość masy w jednostce podstawowej

Format ramki masy, jaką odpowiada waga:

1	2	3	4	5	6	7	8	9-18	19	20-22	23	24-32	33	34-36	37	38	39	40
N	T	spacja	Znak stabilności	Znak zera	Znacznik zakresu	Znacznik cyfry	spacja	masa	spacja	Jednostka masy	spacja	tara	spacja	Jednostka tary	spacja	Liczba cyfr ukrytych	CR	LF

NT - rozkaz

Znak - [spacja] gdy stabilny, [?] gdy niestabilny

stabilności

Znak zera - [spacja] gdy poza zerem, [Z] gdy w zerze

Znacznik zakresu - W którym aktualnie zakresie znajduje się masa: [spacja] gdy jednozakresowa, [2] gdy dwuzakresowa, [3] gdy trzyzakresowa

Znacznik cyfry - [zero] gdy bez znacznika, [1] znacznik jednej cyfry, [2] znacznik dwóch cyfr, [3] znacznik trzech cyfr, [4] znacznik czterech cyfr, [5] znacznik pięciu cyfr

Masa - 10 znaków masy netto w jednostce kalibracyjnej (z kropką i pływającym znakiem „-”, bez znaczników cyfry) z wyrównaniem do prawej

Jednostka masy - 3 znaki z wyrównaniem do lewej

Tara - 9 znaków wartości tary z kropką z wyrównaniem do prawej (jeżeli „pływająca” tara zostaje automatycznie wyłączona wtedy wysyłana jest wartość zerowa)

Jednostka tary - 3 znaki z wyrównaniem do lewej
Liczba cyfr ukrytych - Liczba określająca ilość cyfr ukrytych: [spacja] gdy nie ma cyfr ukrytych, [1] gdy jest jedna cyfra ukryta

Przykład:

NT CR LF - rozkaz z komputera

N T _ ? _ _ 0 _ _ _ _ - 5 . 1 1 3 _ g _ _ _ _ _ 0 . 0 0 0 _ g _ _ _ 0 CR LF

- komenda wykonana, zwracana jest wartość masy z pozostałymi danymi

gdzie: _ - spacja

38.2. Wydruk ręczny/wydruk automatyczny

Użytkownik może generować z wagi wydruki ręcznie lub automatyczne:

- Wydruk ręczny: nacisnąć przycisk  po ustabilizowaniu się wskazania.
- Wydruk automatyczny generowany jest automatycznie, zgodnie z ustawieniami jak dla wydruku automatycznego (*patrz: pkt. 15.8*).

Zawartość wydruku zależna jest od ustawień dla <Wydruk standardowy> - <Projekt wydruku ważenia> (*patrz: pkt. 14.5*).

Format wydruku masy:

1	2	3	4 -12	13	14	15	16	17	18
znak stabilności	spacja	znak	masa	spacja	jednostka			CR	LF

Znak stabilności [spacja] jeżeli stabilny
 [?] jeżeli niestabilny
 [!] jeżeli jest włączona funkcja kompensacji wporu powietrza
 [^] jeżeli wystąpi błąd przekroczenia zakresu na +
 [v] jeżeli wystąpi błąd przekroczenia zakresu na -
 Znak [spacja] dla wartości dodatnich lub [-] dla wartości ujemnych
 Masa 9 znaków z kropką z wyrównaniem do prawej
 Jednostka 3 znaki wyrównanie do lewej

Przykład:

_ _ _ _ _ **1 8 3 2 . 0 _ g _ _ CR LF** - wydruk wygenerowany z wagi

po naciśnięciu przycisku  przy ustawieniach dla <Projekt wydruku ważenia>:

N (ilość pomiarów)	NIE	Zmienna uniwersalna 1 ... 5	NIE
Data	NIE	Netto	NIE
Czas	NIE	Tara	NIE
Wypoziomowanie	NIE	Brutto	NIE

Klient	NIE	Aktualny wynik	NIE
Magazyn	NIE	Jednostka dodatkowa	NIE
Towar	NIE	Masa	TAK
Opakowanie	NIE	Wydruk niestandardowy	NIE

39. PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

Waga serii Y może współpracować z następującymi urządzeniami:

- komputerem,
- drukarką paragonową KAFKA, EPSON,
- drukarką PCL,
- dodatkowym wyświetlaczem,
- skanerem kodów kreskowych,
- dowolnym urządzeniem peryferyjnym obsługującym protokół ASCII.

40. KOMUNIKATY O BŁĘDACH



Przekroczony zakres masy startowej.
Zdejmij obciążenie z szalki



Przekroczony górny zakres ważenia
Zdejmij obciążenie z szalki



Wynik poniżej dolnego zakresu ważenia
Zamontuj szalkę



Przekroczony zakres zerowania
Użyj przycisku tarowania lub zrestartuj
wagę



Przekroczony zakres tarowania
Użyj przycisku zerowania lub zrestartuj
wagę



Przekroczony czas operacji
zerowania/tarowania
Brak stabilizacji wyniku ważenia

-no level- Waga niewypoziomowana

-Err 100- Restart modułu wagowego

In process Trwa proces podczas, którego wskazanie może być niestabilne
(tabletkarka – proces podawania tabletki lub komparator – proces zmiany obciążenia)

41. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Typ	Nazwa
P0136	Przewód RS232 do drukarki KAFKA
P0151	Przewód RS232 do drukarki EPSON
KAFKA	Drukarka termiczna
EPSON	Drukarka igłowa
	Drukarka PCL
WD- xx	Wyświetlacz dodatkowy w obudowie plastikowej
CK-01	Czytnik kart transponderowych
LS2208	Skaner kodów kreskowych
AP2-1	Wyjście pętli prądowej
SAL	Stół antywibracyjny
	Klawiatura PC.

Programy komputerowe:

- Program komputerowy **EDYTOR ETYKIET**,
- Program komputerowy **PW-WIN**,
- Program komputerowy **RAD-KEY**.

42. DODATEK A - Zmienne dla wydruków

42.1. Wykaz zmiennych

Uwaga:

Każda definiowana zmienna musi zawierać się w nawiasach klamerkowych: {x}, gdzie x – numer zmiennej.

Lista zmiennych dostępna w systemie do definiowania wyglądu wzorców wydruku oraz danych wyświetlanych w obszarze roboczym okna wagowego:

Symbol	Opis zmiennej
{0}	Wydruk standardowy w jednostce kalibracyjnej
{1}	Wydruk standardowy w jednostce aktualnej
{2}	Data
{3}	Czas
{4}	Data i czas
{5}	Mod pracy
{6}	Masa netto w jednostce aktualnej
{7}	Masa netto w jednostce kalibracyjnej
{8}	Masa brutto
{9}	Tara
{10}	Jednostka aktualna
{11}	Jednostka kalibracyjna
{12}	Próg dolny
{13}	Próg górny
{15}	Statystyki: Liczba
{16}	Statystyki: Suma
{17}	Statystyki: Średnia
{18}	Statystyki: Minimum
{19}	Statystyki: Maksimum
{20}	Statystyki: SDV
{21}	Statystyki: D
{22}	Statystyki: RDV
{26}	Kontrola wyniku
{27}	Wartość
{28}	Wypoziomowanie
{30}	Wartość brutto

{31}	Numer platformy
{32}	Numer fabryczny
{33}	Działka wagi
{34}	Zakres
{35}	Liczenie sztuk: Masa wzorca
{36}	Odchyłki: Masa odniesienia
{38}	Zmienna uniwersalna: Nazwa
{39}	Zmienna uniwersalna: Wartość
{43}	Masa netto w jednostce dodatkowej
{44}	Jednostka dodatkowa
{45}	Wartość docelowa
{46}	Tolerancja
{47}	Różnica
{48}	Typ wagi
{50}	Towar: Nazwa
{51}	Towar: Kod
{52}	Towar: Kod EAN
{53}	Towar: Masa
{54}	Towar: Tara
{55}	Towar: Cena
{56}	Towar: Minimum
{57}	Towar: Maximum
{58} ²⁾	Towar: Tryb KTP
{59}	Towar: Liczba dni ważności
{60}	Towar: VAT
{61}	Towar: Data
{62}	Towar: Data ważności
{63}	Towar: Gęstość
{64}	Towar: Składniki
{65}	Towar: Opis
{66}	Towar: Tolerancja
{75}	Użytkownik: Nazwa
{76}	Użytkownik: Kod

{77}	Użytkownik: Uprawnienia
{80}	Opakowanie: Nazwa
{81}	Opakowanie: Kod
{82}	Opakowanie: Masa
{85}	Klient: Nazwa
{86}	Klient: Kod
{87}	Klient: NIP
{88}	Klient: Adres
{89}	Klient: Kod pocztowy
{90}	Klient: Miejscowość
{91}	Klient: Rabat
{100} ²⁾	Raport KTP: Numer Partii
{101} ²⁾	Raport KTP: Data rozpoczęcia
{102} ²⁾	Raport KTP: Data zakończenia
{103} ²⁾	Raport KTP: Wynik
{104} ²⁾	Raport KTP: Liczność partii
{105} ²⁾	Raport KTP: Liczba pomiarów
{106} ²⁾	Raport KTP: Wartość błędu T1
{107} ²⁾	Raport KTP: Wartość błędu 2T1
{108} ²⁾	Raport KTP: Liczba błędów T1
{109} ²⁾	Raport KTP: Dopuszczalna liczba błędów T1
{110} ²⁾	Raport KTP: Liczba błędów 2T1
{111} ²⁾	Raport KTP: Suma
{112} ²⁾	Raport KTP: Min
{113} ²⁾	Raport KTP: Max
{114} ²⁾	Raport KTP: Średnia
{115} ²⁾	Raport KTP: Granica średniej
{116} ²⁾	Raport KTP: Odchylenie standardowe
{117} ²⁾	Raport KTP: Pomiary
{118} ²⁾	Raport KTP: Jednostka
{119} ²⁾	Raport KTP: Nr raportu
{120} ²⁾	Raport Średnia Tara: Data
{121} ²⁾	Raport Średnia Tara: Wynik
{122} ²⁾	Raport Średnia Tara: Odchylenie standardowe

{123} ²⁾	Raport Średnia Tara: 0,25T1
{124} ²⁾	Raport Średnia Tara: Liczba pomiarów
{125} ²⁾	Raport Średnia Tara: Pomiary
{126} ²⁾	Raport Średnia Tara: Nr raportu
{130}	Magazyn: Nazwa
{131}	Magazyn: Kod
{132}	Magazyn: Opis
{140}	Wyświetlacz dodatkowy: WD
{142}	Wyświetlacz dodatkowy: WWG
{143}	Hex
{144}	Hex UTF-8
{146}	Masa brutto w jednostce aktualnej
{147}	Tara w jednostce aktualnej
{150}	Drukarka Epson: Obcięcie papieru
{151}	Drukarka PCL: Wysłanie strony
{165}	Receptura: Nazwa
{166}	Receptura: Kod
{167}	Receptura: Liczba składników
{168}	Receptura: Suma
{169}	Receptura: Składnik
{170}	Receptura: Numer składnika
{175}	Raport receptury: Data rozpoczęcia
{176}	Raport receptury: Data zakończenia
{177}	Raport receptury: Suma
{178}	Raport receptury: Wartość docelowa
{179}	Raport receptury: Różnica
{180}	Raport receptury: Liczba pomiarów
{181}	Raport receptury: Status
{182}	Raport receptury: Pomiary
{188}	Składnik: Masa docelowa
{189}	Składnik: Różnica

{190} ²⁾	Komparator: Nr raportu
{191} ²⁾	Komparator: Data rozpoczęcia
{192} ²⁾	Komparator: Data zakończenia
{193} ²⁾	Komparator: Numer zlecenia
{194} ²⁾	Komparator: Numer wzorca badanego
{195} ²⁾	Komparator: Różnica
{196} ²⁾	Komparator: Zestawienia pomiarów
{197} ²⁾	Komparator: Średnia różnica
{198} ²⁾	Komparator: Odchylenie standardowe
{199} ²⁾	Komparator: Liczba cykli
{200} ²⁾	Komparator: Metoda
{201} ²⁾	Komparator: Temperatura Min
{202} ²⁾	Komparator: Temperatura Max
{203} ²⁾	Komparator: Wilgotność Min
{204} ²⁾	Komparator: Wilgotność Max
{205} ²⁾	Komparator: Ciśnienie Min
{206} ²⁾	Komparator: Ciśnienie Max
{207} ²⁾	Komparator: Zadanie
{208} ²⁾	Komparator: Wybrane zadanie
{209} ²⁾	Komparator: Pomiary
{210}	Historia kalibracji: Rodzaj kalibracji
{211}	Historia kalibracji: Masa nominalna
{212}	Historia kalibracji: Masa aktualna
{213}	Historia kalibracji: Różnica
{214}	Historia kalibracji: Temperatura
{215}	Historia kalibracji: Wypoziomowanie
{216}	Historia kalibracji: Numer platformy
{219}	Historia kalibracji: Data i czas ostatniej kalibracji
{220} ²⁾	Kontrola Masy: Data rozpoczęcia
{221} ²⁾	Kontrola Masy: Data zakończenia
{222} ²⁾	Kontrola Masy: Nr partii
{223} ²⁾	Kontrola Masy: Średnia
{224} ²⁾	Kontrola Masy: Odchylenie standardowe
{225} ²⁾	Kontrola Masy: Liczność wzorca
{226} ²⁾	Kontrola Masy: Pomiary

{227} ²⁾	Kontrola Masy: Nr raportu
{228} ²⁾	Kontrola Masy: Liczba błędu T2M
{229} ²⁾	Kontrola Masy: Liczba błędu T1M
{230} ²⁾	Kontrola Masy: Liczba błędu T1P
{231} ²⁾	Kontrola Masy: Liczba błędu T2P
{232} ²⁾	Kontrola Masy: Próg T2-
{233} ²⁾	Kontrola Masy: Próg T1-
{234} ²⁾	Kontrola Masy: Próg T1+
{235} ²⁾	Kontrola Masy: Próg T2+
{236} ²⁾	Kontrola Masy: Wartość progu T2-
{237} ²⁾	Kontrola Masy: Wartość progu T1-
{238} ²⁾	Kontrola Masy: Wartość progu T1+
{239} ²⁾	Kontrola Masy: Wartość progu T2+
{240} ²⁾	Kontrola Masy: Średnia w procentach (DX)
{241} ²⁾	Kontrola Masy: Odchylenie standardowe w procentach
{250}	Gęstość: Data rozpoczęcia
{251}	Gęstość: Data zakończenia
{252}	Gęstość: Procedura
{253}	Gęstość: Ciecz wzorcowa
{254}	Gęstość cieczy wzorcowej
{255}	Gęstość: Temperatura cieczy wzorcowej
{256}	Gęstość: Objętość nurnika
{257}	Gęstość: Gęstość wyznaczona
{258}	Gęstość: Jednostka
{259}	Gęstość: Nr próbki
{260}	Gęstość: Ważenie 1
{261}	Gęstość: Ważenie 2
{263}	Gęstość: Objętość
{266}	Gęstość: Masa wzorca stalowego
{267}	Gęstość: Masa wzorca aluminiowego
{268}	Gęstość: Gęstość wzorca stalowego
{269}	Gęstość: Gęstość wzorca aluminiowego
{275}	Raport warunków środowiskowych: Data i czas
{276}	Raport warunków środowiskowych: Temperatura THB
{277}	Raport warunków środowiskowych: Wilgotność THB
{278}	Raport warunków środowiskowych: Temperatura 1

{279}	Raport warunków środowiskowych: Temperatura 2
{280}	Raport warunków środowiskowych: Ciśnienie THB
{281}	Raport warunków środowiskowych: Gęstość powietrza
{282}	Raport warunków środowiskowych: Wilgotność
{283}	Raport warunków środowiskowych: Ciśnienie
{285} ²⁾	Komparacja: wzorce odniesienia: Nazwa
{286} ²⁾	Komparacja: wzorce odniesienia: Kod
{287} ²⁾	Komparacja: wzorce odniesienia: Klasa
{288} ²⁾	Komparacja: wzorce odniesienia: Numer fabryczny
{289} ²⁾	Komparacja: wzorce odniesienia: Masa
{290} ²⁾	Komparacja: wzorce odniesienia: Numer kompletu
{295}	Ważenie zwierząt: Próg
{296}	Ważenie zwierząt: Czas uśredniania
{300} ²⁾	Zadania: Nazwa
{301} ²⁾	Zadania: Kod
{302} ²⁾	Zadania: Klasa
{303} ²⁾	Zadania: Masa
{304} ²⁾	Zadania: Numer zlecenia
{305} ²⁾	Zadania: Numer wzorca badanego
{310}	Pipety: Nazwa
{311}	Pipety: Kod
{312}	Pipety: Model
{313}	Pipety Końcówki
{314}	Pipety: Objętość nominalna
{315}	Pipety: Objętość minimalna
{316}	Pipety: Liczba kanałów
{317}	Pipety: Typ
{318}	Pipety: Rodzaj objętości
{319}	Pipety: Badane objętości
{350}	Seria: Nazwa
{351}	Seria: Kod
{352}	Seria: Próbkki

{353}	Seria: Liczba próbek
{355}	Próbka: Nazwa
{356}	Próbka: Status
{357}	Próbka: Tara
{358}	Próbka: Temperatura
{359}	Próbka: Wilgotność
{360}	Próbka: Ciśnienie
{361}	Numer próbki
{365}	Ważenie B: Interwał
{366}	Ważenie B: Różnica
{367}	Ważenie B: Różnica %
{368}	Ważenie B: Reszta %
{369}	Ważenie B: Numer
{375}	Ważenie różnicowe: Metoda
{380} ²⁾	Program suszenia: Nazwa
{381} ²⁾	Program suszenia: Kod
{385} ²⁾	Profil suszenia
{386} ²⁾	Parametry profilu suszenia
{387} ²⁾	Sposób zakończenia
{388} ²⁾	Parametry sposoby zakończenia
{389} ²⁾	Raport suszenia: Jednostka
{390} ²⁾	Raport suszenia: Czas wydruku
{395} ²⁾	Wagosuszarka: Temperatura zadana
{396} ²⁾	Wagosuszarka: Temperatura aktualna
{397} ²⁾	Wagosuszarka: Czas suszenia
{398} ²⁾	Wagosuszarka: Status
{399} ²⁾	Wagosuszarka: czas suszenia i wynik
{400} ²⁾	Wagosuszarka: Zawartość wilgoci
{401} ²⁾	Wagosuszarka: Zawartość suchego
{402} ²⁾	Wagosuszarka: Wilgoć/Suche

{403} ²⁾	Wagosuszarka: Test grzałki – Moc [%]
{405}	SQC: Numer partii
{406}	SQC: Data rozpoczęcia
{407}	SQC: Data zakończenia
{408}	SQC: Liczność partii
{410}	SQC : Średnia
{411}	SQC : Odchylenie standardowe
{412}	SQC : MIN
{413}	SQC : MAX
{414}	SQC : Różnica
{415}	SQC : Pomiar
{416}	SQC : Średnia [%]
{417}	SQC : Odchylenie standardowe [%]
{418}	SQC : Liczba błędów T2-
{419}	SQC : Liczba błędów T1-
{420}	SQC : Liczba błędów T1+
{421}	SQC : Liczba błędów T2+
{422}	SQC : Próg T2-
{423}	SQC : Próg T1-
{424}	SQC : Próg T1+
{425}	SQC : Próg T2+
{426}	SQC : Wartość progu T2-
{427}	SQC : Wartość progu T1-
{428}	SQC : Wartość progu T1+
{429}	SQC : Wartość progu T2+
{440}	Minimalna naważka : Nazwa
{441}	Minimalna naważka : Tara referencyjna
{442}	Minimalna naważka
{443}	Minimalna naważka : Status

Uwaga:

2) Zmienne nieobsługiwane w wersji oprogramowania „**Standard**”.

42.2. Formatowanie zmiennych

Użytkownik ma możliwość dowolnego formatowania zmiennych liczbowych, tekstowych oraz daty, przeznaczonych do wydruku bądź jako informacje do zawarcia w obszarze roboczym wyświetlacza wagi.

Rodzaje formatowania:

- wyrównanie zmiennej do lewej,
- wyrównanie zmiennej do prawej,
- określenie ilości znaków do wydruku/wyświetlenia,
- deklaracja ilości miejsc po przecinku dla zmiennych liczbowych,
- konwersja formatu daty i godziny,
- konwersja zmiennych liczbowych na postać kodu EAN13,
- konwersja zmiennych liczbowych oraz daty na postać kodu EAN128.

Znaki specjalne formatowania:


Znak	Opis	Przykład
,	Znak separujący zmienne od formatowania.	{7,10} - Masa netto w jednostce kalibracyjnej o stałej długości 10 znaków, wyrównana do prawej.
-	Znak minus lub justowanie do lewej.	{7,-10} - Masa netto w jednostce kalibracyjnej o stałej długości 10 znaków, wyrównana do lewej.
:	Znak poprzedzający formatowanie lub separator czasu (tj. godzin, minut i sekund).	{7:0.000} - Masa netto w jednostce kalibracyjnej, zawsze z trzema miejscami po przecinku; {3:hh:mm:ss} – Aktualny czas w formacie: godzina : minuta : sekunda.
.	Pierwsza napotkana kropka w liczbie jest traktowana jako separator części całkowitej od części dziesiętnej. Każda następna jest ignorowana.	{55:0.00} - Cena jednostkowa towaru zawsze z dwoma miejscami po przecinku. {17:0.0000} – Średnia z pomiarów zawsze z czterema miejscami po przecinku.
F	Znak formatujący liczby do łańcucha znaków w formacie „-ddd.ddd...” (gdzie: d stanowią pojedyncze cyfry, znak minus występuje tylko dla liczb ujemnych) lub określenie liczby miejsc po przecinku.	{7:F2} - Masa netto w jednostce kalibracyjnej, zawsze z dwoma miejscami po przecinku. {7,9:F2} - Masa netto w jednostce kalibracyjnej, zawsze z dwoma miejscami po przecinku, o stałej długości 9 znaków, z wyrównaniem do prawej.
V	Formatowanie masy i wielkości pochodnych do masy w kodzie EAN13.	{7:V6.3} - Masa netto w postaci EAN13 (Kod 6 znakowy) z trzema miejscami po przecinku,
Znak	Opis	Przykład
T	Formatowanie masy i wielkości pochodnych do masy w kodzie EAN128.	{7:T6.3} - Masa netto w postaci EAN128 z trzema miejscami po przecinku
/	Separator daty między dniami, miesiącami i latami.	{2:yy/MM/dd} - Aktualna data w formacie: rok - miesiąc - dzień, gdzie yy to reprezentacja dwóch mniej znaczących cyfr roku.
\	Znak „Escape” usuwający funkcję formatującą z następnego znaku tak, aby mógł być traktowany jako tekst.	{2:yy\MM\dd} – Aktualna data w formacie: rok / miesiąc / dzień. {2:yy\MM\dd} - Aktualna data w formacie: rok : miesiąc : dzień. W przypadku konieczności użycia ukośnika „\” jako literału należy napisać \\.


Lista zastosowań zmiennych formatowanych:

KOD	OPIS
{7:V6.3}	Masa netto w postaci EAN 13 (kod 6-znakowy)
{7:V7.3}	Masa netto w postaci EAN 13 (kod 7-znakowy)
{27:V6.3}	Wartość netto w postaci EAN 13 (kod 6-znakowy)
{27:V7.3}	Wartość netto w postaci EAN 13 (kod 7-znakowy)
{7:T6.3}	Masa netto w kodzie EAN 128
{8:T6.3}	Masa brutto w kodzie EAN 128
{55:T6.2}	Cena asortymentu w kodzie EAN 128
{2:yyMMdd}	Data w kodzie EAN 128
{61:yyMMdd}	Data asortymentu w kodzie EAN 128
{62:yyMMdd}	Data ważności asortymentu w kodzie EAN 128

43. DODATEK B – Lista przycisków programowalnych

Ikona	Nazwa funkcji	Ikona	Nazwa funkcji
	Wybór profilu		Otwarcie/zamknięcie prawych drzwiczek
	Kalibracja/adjustacja wagi		Otwarcie/zamknięcie drzwiczek
	Zerowanie		Parametry
	Tarowanie		Wybór towaru
	Ustawienie tary		Wybór magazynu
	Wyłączenie tary		Wybór klienta
	Przywrócenie tary		Pomoc
	Wybór opakowania		Liczenie sztuk: Podaj masę sztuki
	Drukowanie		Liczenie sztuk: Wyznacz masę sztuki
	Drukowanie nagłówka		Liczenie sztuk: Liczność wzorca - 5 sztuk

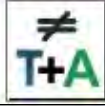	Drukowanie stopki		Liczenie sztuk: Liczność wzorca - 10 sztuk
	Wybór jednostki		Liczenie sztuk: Liczność wzorca - 20 sztuk
	Edytuj zmienną uniwersalną 1		Liczenie sztuk: Liczność wzorca - 50 sztuk
	Edytuj zmienną uniwersalną 2		Liczenie sztuk: Liczność wzorca - 100 sztuk
	Edytuj zmienną uniwersalną 3		Liczenie sztuk: Przypisz wzorzec do towaru
	Edytuj zmienną uniwersalną 4		Wybór pipety
	Edytuj zmienną uniwersalną 5		Ważenie różnicowe: Wybór serii
	Ustawienie progów doważania		Ważenie różnicowe: wybór próbki
	Statystyka		Ważenie różnicowe: ważenie tary
	Dodanie pomiaru do statystyki		Ważenie różnicowe: ważenie A
	Ustawienie masy docelowej		Ważenie różnicowe: ważenie B
	Odchyłki: Podaj masę wzorca		Ważenie różnicowe: ważenie tary i ważenie A
	Odchyłki: ustawienie 100% masy, która jest na szalce		Ważenie różnicowe: usuwanie wartości
	Gęstość: gęstość ciał stałych		Ważenie różnicowe: kopiowanie tary do wielu próbek
	Gęstość: gęstość cieczy		Ważenie różnicowe: dodanie próbki do serii
	Gęstość: powietrza		Wagosuszarka: wybór programu suszenia
	Ważenie zwierząt		Wagosuszarka: wyświetlenie wykresu suszenia

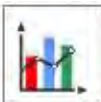	Wybór receptury z bazy		Wagosuszarka: wyświetlenie opisu przygotowania próbki
	Wybór receptury z mnożnikiem		KTP: Informacje o trwającej kontroli
	Wybór receptury z masą docelową		KTP: wyświetlenie wykresu kontroli
	Receptura niewystępująca w bazie		Wybór modu pracy
	Receptura: pominięcie składnika		Wybór użytkownika
	Zatwierdzenie		Otwarcie/zamknięcie lewych drzwiczek
	Przerwanie		

44. DODATEK D - Ustawienie drukarki ZEBRA

Prędkość transmisji – 9600b/sec

Kontrola parzystości – brak

Ilość bitów – 8bit

Bit stopu – 1 bit

Informacje na wydruku z drukarki odnośnie RS 232: Serial port : **96, N, 8, 1.**

Sposób wykonywania wydruku informacyjnego oraz dokonywania zmian w ustawieniach drukarki opisany jest w instrukcji obsługi drukarek ZEBRA.

45. DODATEK E - Ustawienie czytnika kodów kreskowych

1. Wagi firmy RADWAG używają interfejsu RS232 z transmisją simpleks (w jednym kierunku) bez potwierdzenia do komunikacji z czytnikami kodów kreskowych. Do tego celu wystarczy użycie dwóch linii kabla. Z tego powodu czytniki powinny być wyposażone w taki interfejs i mieć wyłączoną tak programową, jak i sprzętową kontrolę przepływu.
2. Zarówno wagi, jak i czytniki mają możliwość ustawiania parametrów transmisji. Oba urządzenia powinny zgadzać się w kwestii: prędkości transmisji, ilości bitów danych, kontroli parzystości, ilości bitów stopu. Np. 9600,8,N,1 – prędkość 9600 bit/s , 8-bitów danych, brak kontroli parzystości, 1 bit stopu.
3. Czytniki kodów kreskowych mogą wysyłać dodatkowe informacje, oprócz oczekiwanego kodu kreskowego, np. symbol oznaczający rodzaj kodu kreskowego. Ponieważ urządzenia firmy RADWAG nie używają tej informacji, zaleca się jej programowe wyłączenie.

4. Niektóre systemy firmy RADWAG mają możliwość pomijania nieistotnych informacji w kodzie poprzez parametry wyznaczające początek i długość kodu podlegającego analizie.
5. Aby kod kreskowy mógł być odczytany przez wagę, musi posiadać szczególne cechy. Jest wymagane nadanie (zaprogramowanie) odpowiedniego przedrostka (*ang. prefix*) i przyrostka (*ang. suffix*). W standardzie przyjętym przez RADWAG przedrostkiem jest znak (bajt) 01 heksadecymalnie, a przyrostkiem jest znak (bajt) 0D heksadecymalnie.
6. Czytniki przeważnie mają możliwość włączania i wyłączania możliwości odczytywania różnych kodów.
7. Programowanie czytników kodów kreskowych odbywa się poprzez skanowanie odpowiednich kodów programujących.

Kod kreskowy w postaci heksadecymalnej z przedrostkiem i przyrostkiem	Kod kreskowy w kodzie ASCII z pominięciem znaków sterujących	Typ kodu
01 30 30 32 31 30 31 32 36 0D	00210126	EAN-8
01 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0D	0123456789	KOD 2 Z 5
01 43 4F 44 45 20 33 39 20 54 45 53 54 0D	CODE 39 TEST	CODE 39
01 31 31 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 31 0D	1101234567891	EAN-13
01 43 6F 64 65 20 31 32 38 20 54 65 73 74 0D	CODE 128 Test	CODE 128

46. DODATEK F – Struktura menu

Kalibracja użytkownika

Opis	Wartość
Kalibracja wewnętrzna	Funkcja
Kalibracja zewnętrzna	Funkcja
Kalibracja użytkownika	Funkcja
Test kalibracji	Funkcja
Czas kalibracji automatycznej	1 - 12
Wydruk raportu	Nie / Tak
Projekt GLP . . →→	

	Nazwa	Wybór
	» Kalibracja	Nie / Tak
	» Mod pracy	Nie / Tak
	» Data	Nie / Tak
	» Czas	Nie / Tak
	» Użytkownik	Nie / Tak
	» Typ wagi	Nie / Tak
	» ID wagi	Nie / Tak
	» Wypoziomowanie	Nie / Tak
	» Masa nominalna	Nie / Tak
	» Różnica	Nie / Tak
	» Temperatura	Nie / Tak
	» Masa aktualna	Nie / Tak
	» Pusta linia	Nie / Tak
	» Kreski	Nie / Tak
	» Podpis	Nie / Tak
	» Wydruk niestandardowy	Nie / Tak
Historia kalibracji	Wyświetla raporty z przeprowadzonych kalibracji zewnętrznych	

Bazy danych

- Towary
- Ważenia
- Klienci
- Receptury
- Raporty receptur
- Raporty Gęstości
- Kontrole

- Średnie tary
- Pipety
- Raporty kalibracji pipet
- Serie
- Warunki środowiskowe
- Opakowania
- Magazyny
- Wydruki
- Zmienne uniwersalne
- Usuń starsze dane
- Eksportuj bazę ważeń do pliku

Komunikacja

Opis	Wartość
COM 1	-
» Prędkość	9600
» Bity Danych	8
» Bity Stopu	1
» Parzystość	Brak
COM 2	-
» Prędkość	9600
» Bity Danych	8
» Bity Stopu	1
» Parzystość	Brak
Ethernet	-
» DHCP	Nie
» Adres IP	192.168.0.2
» Maskę podsieci	255.255.255.0
» Bramę domyślną	192.168.0.1
Tcp	-
Port	4001

Urządzenia

Opis	Wartość
Komputer	-
» Port	COM 1
» Adres	1
» Transmisja ciągła	Nie / Tak
» Projekt wydruku	Ustawienie
» E2R System	Ustawienie

Drukarka		
	» Port	COM 2
	» Strona kodowa	1250
	» Wydruki	Ustawienie
Czytnik kodów kreskowych		
	» Port	Brak / COM 1/ COM 2
	» Offset	0
	» Długość kodu	0
Czytnik kart transpond.		
	Port	Brak / COM 1/ COM 2
Wyświetlacz dodatkowy		
	Port	Brak / COM 1-2 / Tcp
	Projekt	Ustawienie
Moduł środowiskowy		
	Port	Brak / COM 1-2 / Com internal
	Adres	3

Wejścia / Wyjścia

Opis	Wartość	
Wejścia		
	» Wejście 1	Wybór
	» Wejście 2	Wybór
	» Wejście 3	Wybór
	» Wejście 4	Wybór
Wyjścia		
	» Wyjście 1	Wybór
	» Wyjście 2	Wybór
	» Wyjście 3	Wybór
	» Wyjście 4	Wybór

Uprawnienia

Opis	Wartość
Użytkownik anonimowy	
» Gość	Wybór
» Użytkownik	Wybór
» Użytk. zaawansowany	Wybór
» Administrator	Wybór

Data i czas		
	» Gość	Wybór
	» Użytkownik	Wybór
	» Użytk. zaawansowany	Wybór
	» Administrator	Wybór
Wydruki		
	» Gość	Wybór
	» Użytkownik	Wybór
	» Użytk. zaawansowany	Wybór
	» Administrator	Wybór
Bazy danych		
	Towary	Wybór: - Gość - użytkownik - Użytk. zaawansowany - Administrator
	Klienci	
	Receptury	
	Opakowania	
	Magazyny	
	Wydruki	
	Usuń starsze dane	

Inne

Opis	Wartość
Język	Wybór
Data i czas	Ustawienie
Beep	Wybór
Kalibracja ekranu dotykowego	Funkcja
Kontrola poziomu	Wybór
Autotest	Wybór



RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE
ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE WAGOWE

