

Szafki i osłony przeciwpodmuchowe

Zabezpieczenie przed wpływem warunków zewnętrznych na proces ważenia



Szafka przeciwpodmuchowa do komparatorów



Szafka przeciwpodmuchowa do wag z szalką 128x128 mm



Oslona przeciwpodmuchowa do wag precyzyjnych



Szafka przeciwpodmuchowa do mikrowag



Szafka przeciwpodmuchowa do wag precyzyjnych X2 i R2

Charakterystyka

Szafka przeciwpodmuchowa do komparatorów

Jest standardowym wyposażeniem komparatorów, pracujących w niekorzystnych warunkach (przeciągi, podmuchy). Szafka ma odsuwane szyby boczne oraz szybę górną zapewniając swobodny dostęp do komory ważenia komparatora. Wszystkie elementy szafki wykonane są z metalu oraz szkła z powłoką przewodzącą, co eliminuje wpływ pola elektrostatycznego na wynik ważenia.

Szafka przeciwpodmuchowa do wag z szalką 128x128 mm

W miejscu występowania niekorzystnych warunków zewnętrznych zaleca się zastąpienie tradycyjnej osłony szalki specjalną szafką przeciwpodmuchową. Akcesorium posiada odsuwane szyby boczne oraz szybę górną, co pozwala na swobodny dostęp do szalki wagi. Wersja 153 jest dedykowana do wag serii PS R, PS X2 oraz PS 3Y.

Szafka przeciwpodmuchowa do mikrowag

Specjalna szafka poprawia wydajność pracy z mikrowagą przy niekorzystnych warunkach środowiskowych jak podmuchy czy przeciągi. Instalowana jest na stole, mikrowagę umieszcza się wewnątrz szafki. Dzięki odsuwanym szybom bocznym zapewniony jest swobodny dostęp do komory ważenia mikrowagi. Szafkę można zastosować tylko w zestawie z granitowym stołem antywibracyjnym.

Oslona przeciwpodmuchowa do wag precyzyjnych

Oslona do wag precyzyjnych wykonana ze szkła jest przeznaczona do zabezpieczenia wagi przed wpływem niekorzystnych warunków (podmuchy) w miejscu jej eksploatacji. Oslona jest instalowana zamiast plastikowej ramki okalającej szalkę poprzez osadzenie jej na bolcach pozycjonujących. Niewielkie wymiary osłony umożliwiają swobodny dostęp do szalki wagi.

Pasuje do

Szafka do komparatorów:

- Manualnych komparatorów masy WAY.4Y.KO, APP.4Y.KO

Szafka przeciwpodmuchowa do mikrowag

- Mikrowag MYA 4Y
- Modułów wagowych MUYA
- Manualnych komparatorów masy UYA 4Y.KO

Szafka 153 przeciwpodmuchowa

- Wag precyzyjnych PS 3Y, X2, R2, R1; WLC X2


Szafka przeciwpodmuchowa do wag z szalką 128x128 mm

- Wag precyzyjnych PS 3Y, X2, R2, R1; WLC X2


Oslona przeciwpodmuchowa

- Wag precyzyjnych X2, R2, R1; WLC X2; WLC C/2


Wymiary

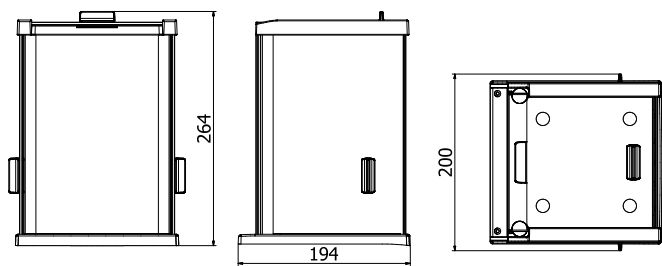


Szafka przeciwpodmuchowa do wag z szalką 128×128 mm

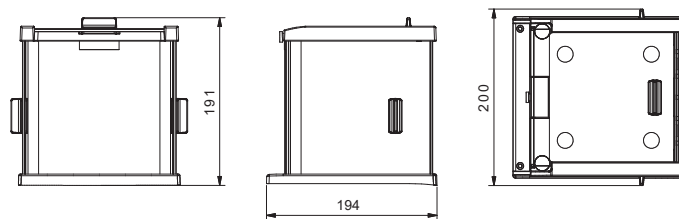


Szafka 153 przeciwpodmuchowa

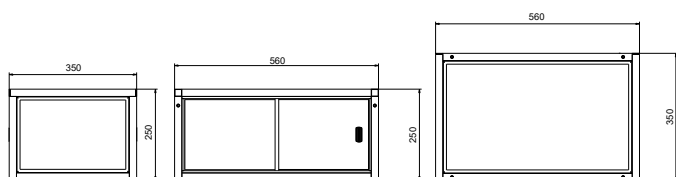


Szafka przeciwpodmuchowa do mikrowag

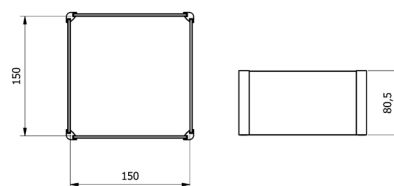


Szafka 153 przeciwpodmuchowa

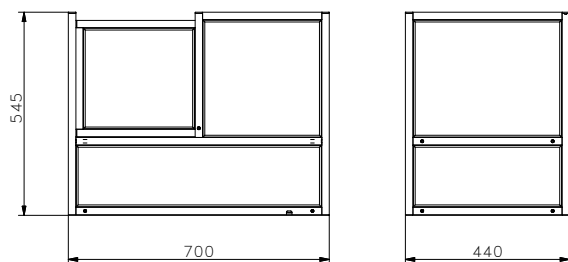

Szafka przeciwpodmuchowa do komparatorów APP-00-SK

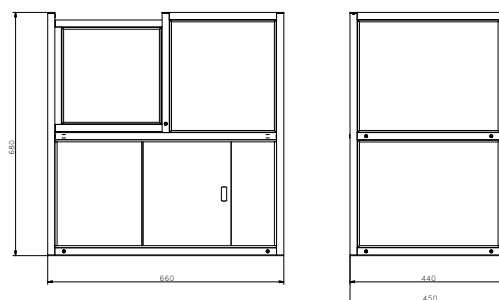

Szafka przeciwpodmuchowa do komparatorów APP-KO-SK

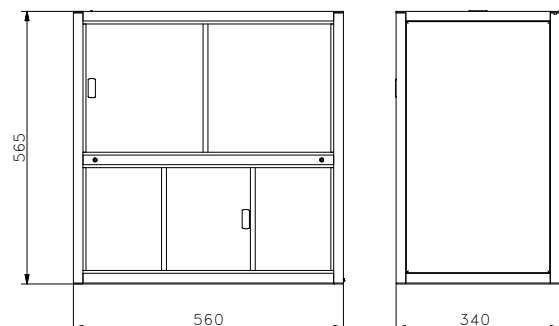

Szafka przeciwpodmuchowa do komparatorów WAY-KO-SK